

Puritan Bennett™

980-serien-respirator

Håndtering, oppbevaring og utskiftning av litiumionbatteripakke



Patenter i USA: www.covidien.com/patents.

© 2019 Covidien. Med enerett.

COVIDIEN, COVIDIEN med logo og Covidien-logoen og Positive Results for Life er registrerte varemerker tilhørende Covidien AG i USA og internasjonalt. TM-merkevarer er varemerker som tilhører sine respektive eiere. Andre merkevarer er varemerker som tilhører et Covidien-selskap.

Informasjonen i dette tillegget tilhører kun Covidien og kan ikke kopieres uten tillatelse. Dette tillegget kan når som helst og uten forvarsel revideres eller erstattes av Covidien. Sørg for at dette tillegget er den nyeste og gjeldende versjonen. Kontakt teknisk støtte hos Covidien hvis du er i tvil.

Informasjonen i dette dokumentet antas å være nøyaktig, men den er ikke en erstatning for utøvelse av faglig skjønn.

Respiratoren skal kun brukes og vedlikeholdes av opplærte fagfolk. Covidiens eneste ansvar med hensyn til respiratoren og programvaren, og bruken av den, står oppført i den begrensede garantien som medfølger.

Inginging i dette dokumentet skal, uten forvarsel, begrense Covidiens rett til å revidere eller på andre måter endre eller modifisere utstyret (inkludert programvaren) beskrevet i dette dokumentet. Ved mangel på en uttrykt, skriftlig avtale om det motsatte, er Covidien ikke forpliktet til å levere slike revisjoner, endringer eller modifikasjoner til eieren eller brukeren av utstyret (inkludert programvaren) som beskrevet i dette dokumentet.

Covidien er et Medtronic-selskap.

Symboler



Denne anordningen kan selges av eller på rekvisisjon fra lege



CE-merke – Indikerer samsvar med direktiv 93/42/EØF for medisinske anordninger



Autorisert representant for Det europeiske fellesskap (EF)



Produsent – Respiratorprodusent

1. Håndtering, oppbevaring og utskiftning av litiumionbatteripakke

1.1. Håndtering, oppbevaring og vedlikehold

Anbefalt håndtering, oppbevaring og vedlikehold av litiumionbatteripakker (P/N 10086042):

- Batteripakker skal være installert i respiratoren eller kompressoren (hvis dette er installert) mens systemet er koblet til vekselstrøm for å opprettholde batterinivået, enten respiratoren er i drift, i standby eller avslått.
- Batteripakker som ikke er installert i en respirator, skal kontrolleres med henblikk på batterinivå før bruk. Dette kan gjøres ved å trykke på batterinivåknappen. Se avsnitt 3.6 i PB980-brukerhåndboken og [Figur 1](#). Batteripakker som viser et batterinivå tilsvarende én LED-lampe eller færre, bør lades helt opp før pasientbruk.
- Batteripakkens levetid blir redusert hvis batteripakken gjentatte ganger går helt tom for strøm.
- Batteripakker som viser en rød LED-feillampe (beskrevet i avsnitt 3.6 i PB980-brukerhåndboken), skal ikke brukes.
- Batteripakker som ikke er installert i en respirator skal oppbevares i retningen som illustrert i [Figur 1](#) og i avsnitt 3.6 i PB980-brukerhåndboken.


1.2. Utskiftning og avhending

Utskiftning og avhending av litiumionbatteripakker (P/N 10086042):

I avsnitt 3.6 i PB980-brukerhåndboken påminnes brukere om å skifte ut batteripakken hvert tredje år fra produksjonsdato og kaste batteripakkene i henhold til lokale forskrifter. Produksjonsdato står oppført i serienummeret på batteripakken. Se [Figur 2](#) for veiledning om hvordan du finner denne datoen, eller følg utløpsdato angitt på batteripakkens merking.

Hvis batteripakken er innenfor batterilevetiden på 3 år fra produksjonsdato og det oppstår en feil, indikeres denne feilen av en rød LED-lampe eller på respiratorens statusskjerm. I så fall skal vår servicegruppe kontaktes (rs.serviceexperience@medtronic.com), slik at retur og utskiftning av batteripakken kan avtales.

Figur 1. Batterinivå

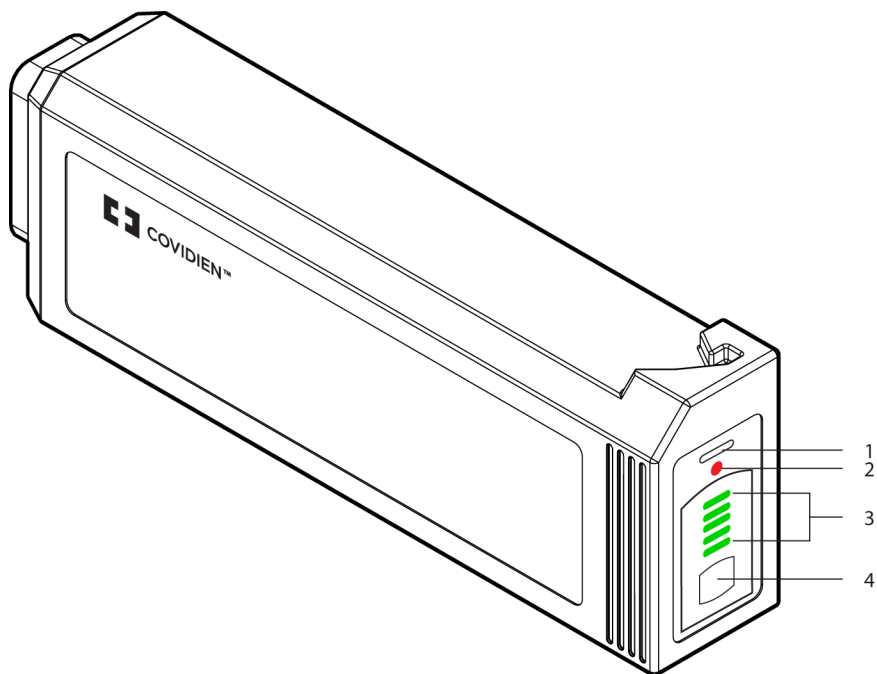

VEN_10327_B

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hvit LED-lampe for batteri i bruk | 3. Grønne LED-lamper for batterinivå |
| 2. Rød indikator for batterifeil | 4. Batterinivåknapp |

Figur 2. Batteriets produksjonsdato



VEN_12723_A

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. År | 3. Tekst |
| 2. Ukenummer (XX av 52) | 4. Versjonssekvensnummer |

Batteriets produksjonsdato står oppført i serienummeret. Serienummeret er oppført på siden av batteriet nær tilkoblingspunktet. Serienummeret består av 10 alfanumeriske tegn og gir følgende informasjon: 2 tegn for år, 2 tegn for uke.



Covidien Ilc,
15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA
www.covidien.com
+1 800 255 8522 [T]

EC REP Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology Park, Tullamore, Irland.



PT00114103

© 2019 Covidien. Med enerett.
PT00114103 Rev. A
2020-04-28