

Puritan Bennett™

Ventilator serije 980

Uporaba, shranjevanje in zamenjava litij-ionskega baterijskega paketa



Patenti v ZDA: www.covidien.com/patents

© 2019 Covidien. Vse pravice pridržane.

COVIDIEN, COVIDIEN z logotipom in logotip Covidien ter Positive Results for Life so mednarodno in v ZDA registrirane blagovne znamke družbe Covidien AG. Znamke, označene z znakom »™«TM, so blagovne znamke njihovih lastnikov. Druge znamke so blagovne znamke družbe Covidien.

Informacije v tem dodatku so v izključni lasti družbe Covidien in jih ni dovoljeno podvajati brez dovoljenja. Družba Covidien lahko ta dodatek kadar koli spremeni ali nadomesti brez predhodnega obvestila. Poskrbite, da boste vedno imeli najnovejšo veljavno različico dodatka. V dvomih se obrnite na tehnično službo družbe Covidien.

Informacije v tem dokumentu so po našem najboljšem prepričanju pravilne, vendar ne predstavljajo nadomestila za uporabo strokovne presoje.

Ventilator lahko upravljajo in servisirajo samo usposobljeni strokovnjaki. Izključna odgovornost družbe Covidien v zvezi z ventilatorjem in programsko opremo ter njuno uporabo je takšna, kot je navedena v priloženi omejeni garanciji.

Nič v tem dokumentu nikakor ne omejuje ali prepoveduje pravice družbe Covidien do popravka ali kakšnega drugega spreminjanja ali prilagajanja opreme (vključno s programsko opremo), opisane v tem dokumentu, brez predhodnega obvestila. Če ne obstaja izrecni, pisni sporazum o nasprotnem, družba Covidien nima nobene obveznosti posredovati takšnih popravkov, sprememb ali prilagoditev lastniku ali uporabniku opreme (vključno s programsko opremo), opisane v tem dokumentu.

Covidien je podjetje v lasti družbe Medtronic.

Simboli



Prodaja te naprave je omejena na prodajo s strani zdravnika oz. po naročilu zdravnika



Oznaka CE – označuje skladnost z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS



Pooblaščen predstavniki za Evropsko skupnost (ES)



Proizvajalec – proizvajalec ventilatorja

1. Uporaba, shranjevanje in zamenjava litij-ionskega baterijskega paketa

1.1. Uporaba, shranjevanje in vzdrževanje

Za litij-ionske (Li-ion) baterijske pakete (P/N 10086042) se priporoča naslednja uporaba, shranjevanje in vzdrževanje:

- Baterijski paketi morajo biti nameščeni v ventilator ali kompresor (če je ta možnost nameščena), ko je ta priključen na električno napajanje, da se vzdržuje napolnjenost, ne glede na to, ali ventilator deluje, je v stanju pripravljenosti ali izklopljen.
- Pri baterijskih paketih, ki niso nameščeni v ventilator, je treba pred uporabo preveriti njihovo raven napolnjenosti. To lahko storite s pritiskom gumba za raven napolnjenosti. Glejte razdelek 3.6 priročnika za upravljalce PB980 in [Slika 1](#). Priporočljivo je, da pred uporabo izdelka pri pacientu baterijske pakete, pri katerih je prikazana raven napolnjenosti označena z največ eno LED-lučko, povsem napolnite.
- Če večkrat pustite, da se baterijski paket do konca izprazni, se njegova življenjska doba skrajša.
- Baterijskih paketov, pri katerih je prikazana rdeča LED-lučka za napako (kot je navedeno v razdelku 3.6 priročnika za upravljalce PB980), ne uporabljajte.
- Baterijski paketi, ki niso nameščeni v ventilator, morajo biti med shranjevanjem obrnjeni tako, kot prikazuje [Slika 1](#) in je opisano v razdelku 3.6 priročnika za upravljalce PB980.


1.2. Zamenjava in odlaganje

Zamenjava in odlaganje litij-ionskega baterijskega paketa (P/N 10086042):

Razdelek 3.6 priročnika za upravljalce PB980 navaja, da morajo uporabniki baterijski paket zamenjati vsaka 3 leta od datuma proizvodnje in ga zavreči v skladu z lokalnimi predpisi. Datum proizvodnje je označen v zaporedju serijske številke, ki ga najdete na baterijskem paketu. [Slika 2](#) prikazuje navodila, kako določite ta datum, ali pa upoštevajte rok uporabnosti, ki je naveden na oznaki baterijskega paketa.

Če 3-letna življenjska doba baterijskega paketa od datuma proizvodnje še ni potekla in se pojavi napaka baterije, je to prikazano z osvetljeno rdečo LED-lučko za napako ali na zaslonu stanja ventilatorja. V tem primeru se obrnite na našo izkušeno servisno ekipo (rs.serviceexperience@medtronic.com) za ureditev vračila in zamenjave baterijskega paketa.

Slika 1. Raven napolnjenosti baterije

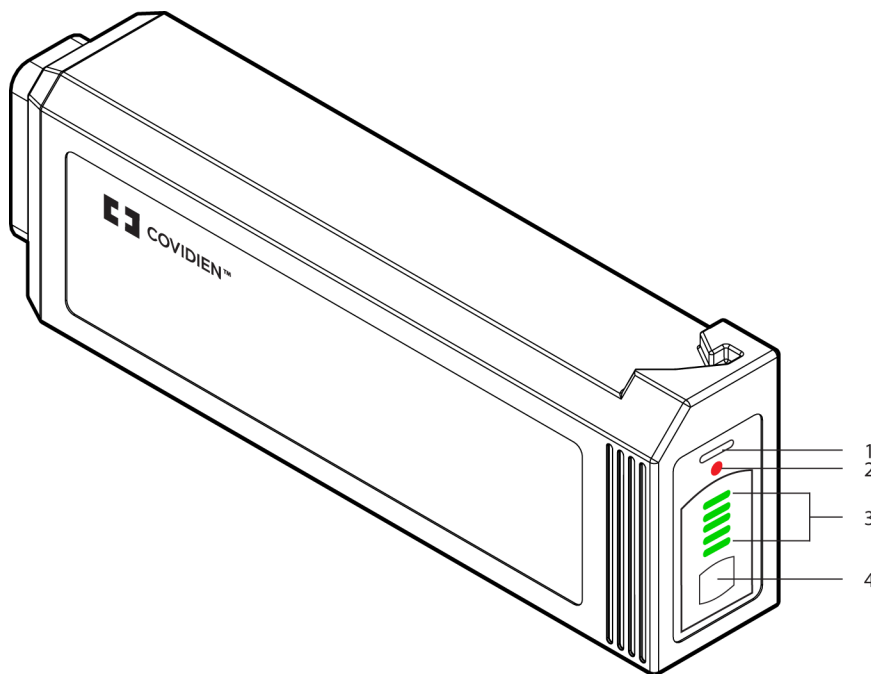

VEN_10327_B

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Bela LED-lučka za uporabo baterije | 3. Zelene LED-lučke za stanje napolnjenosti |
| 2. Rdeč indikator za napako baterije | 4. Gumb za raven napolnjenosti |

Slika 2. Datum proizvodnje baterije



VEN_12723_A

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Leto | 3. Besedilo |
| 2. Številka tedna (XX od 52) | 4. Zaporedna številka izdelave |

Datum proizvodnje baterije je vključen v serijsko številko. Serijska številka je prikazana na strani baterije blizu točke za priključitev. Serijska številka je sestavljena iz 10 alfanumeričnih znakov in zagotavlja naslednje informacije: 2 znaka za leto, 2 znaka za teden.



Covidien llc,
15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 ZDA
www.covidien.com
+1 800 255 8522 [T]

EC REP Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology Park, Tullamore, Irska.



PT00114110

© 2019 Covidien. Vse pravice pridržane.
PT00114110 Rev. A
2020-04-28