

Puritan Bennett™

Ventilator serije 980

Korišćenje, čuvanje i zamena litijum-jonskog baterijskog kompleta



Dodatak priručniku za operatera

SAD patenti: www.covidien.com/patents.

© 2019 Covidien. Sva prava zadržana.

COVIDIEN, COVIDIEN sa logotipom i Covidien logotip i Positive Results for Life predstavljaju zaštitne znakove kompanije Covidien AG registrovane u SAD i međunarodno. ^{™*} robne marke su zaštitni znakovi svojih odgovarajućih vlasnika. Ostale robne marke su zaštitni znakovi kompanije Covidien.

Informacije koje su sadržane u ovom dodatku su u isključivom vlasništvu kompanije Covidien i ne smeju se umnožavati bez dozvole. Kompanija Covidien može u svakom trenutku da izmeni ili zameni ovaj dodatak bez prethodnog obaveštenja. Proverite da li je ovo najnovija verzija dodatka. Ako niste sigurni, obratite se odeljenju tehničke podrške kompanije Covidien.

Verujemo da su ovde iznesene informacije tačne, ali one nisu zamena za stručnu procenu.

Ventilatorom treba da rukuju i da ga servisiraju samo obučeni stručnjaci. Jedina odgovornost kompanije Covidien u pogledu ventilatora i softvera i njihove upotrebe jeste ona koja je navedena u priloženoj ograničenoj garanciji.

Ništa u ovom dokumentu ne može na bilo koji način da ograniči pravo kompanije Covidien da revidira ili na drugi način izmeni ili modifikuje ovde opisanu opremu (uključujući i softver), bez prethodnog obaveštenja. U odsustvu izričitog, pisanog ugovora u kom stoji drugačije navedeno, kompanija Covidien nema obavezu da takve revizije, izmene ili modifikacije dostavi vlasniku ili korisniku ovde opisane opreme (uključujući i softver).

Kompanija Covidien je deo grupe Medtronic.

Simboli



Ovaj uređaj se prodaje od strane ili po nalogu lekara



CE oznaka – označava saobraznost sa Direktivom o medicinskim sredstvima 93/42/EEC



Ovlašćeni predstavnik Evropske zajednice (EC)



Proizvođač – proizvođač ventilatora

1. Korišćenje, čuvanje i zamena litijum-jonskog baterijskog kompleta

1.1. Korišćenje, čuvanje i zamena

Preporučuje se korišćenje, čuvanje i zamena litijum-jonskih baterijskih kompleta (P/N 10086042) na sledeći način:

- Baterijske komplete treba postaviti u ventilator ili kompresor (ukoliko postoji opcija kompresora) dok su ovi povezani na izvor naizmenične struje kako bi se održalo napajanje, bilo da je ventilator u funkciji, u pripravnosti ili isključen.
- Kod baterijskih paketa koji nisu postavljeni u ventilator treba proveriti nivo napunjenosti pre upotrebe. To se može uraditi pritiskom na dugme za nivo napunjenosti. Pogledajte Odeljak 3.6 Priručnika za operatera za uređaj PB980 i [Slika 1](#). Preporučuje se da baterijski kompleti koji prikazuju nivo napunjenosti jednak jednom LED svetlu ili manje budu do kraja napunjeni pre upotrebe na pacijentu.
- Životni vek baterijskog kompleta će biti smanjen ako se iznova dopušta da se baterijski komplet skroz isprazni.
- Baterijske komplete koji prikazuju crveno LED svetlo koje ukazuje na neki problem (naznačeno u Odeljku 3.6 Priručnika za operatera za uređaj PB980) ne treba koristiti.
- Baterijske komplete koji nisu postavljeni u ventilator treba skladištiti u položaju prikazanom na [Slika 1](#) i u Odeljku 3.6 Priručnika za operatera za uređaj PB980.


1.2. Zamena i odlaganje u otpad

Zamena i odlaganje u otpad litijum-jonskog baterijskog kompleta (P/N 10086042):

U Odeljku 3.6 Priručnika za operatera za uređaj PB980 korisnicima je dat savet da zamene baterijski komplet svake 3 godine od datuma proizvodnje i da odlože baterijske komplete u skladu sa lokalnim propisima. Datum proizvodnje se vidi unutar serijskog broja na baterijskom kompletu. Pogledajte [Slika 2](#) za uputstvo kako se ovaj datum određuje ili pratite datum isteka roka uređaja naveden na nalepnici na baterijskom kompletu.

Ukoliko je datum isteka roka upotrebe baterijskog kompleta manji od 3 godine od datuma proizvodnje i dođe do kvara baterije, to će biti označeno upaljenim crvenim LED svetlom koje označava da postoji problem ili na displeju statusa ventilatora. U tom slučaju obratite se našem timu za praćenje zadovoljstva uslugama (rs.serviceexperience@medtronic.com) kako biste se dogovorili u vezi sa povraćajem i zamenom baterijskog kompleta.

Slika 1. Nivo napunjenosti baterije

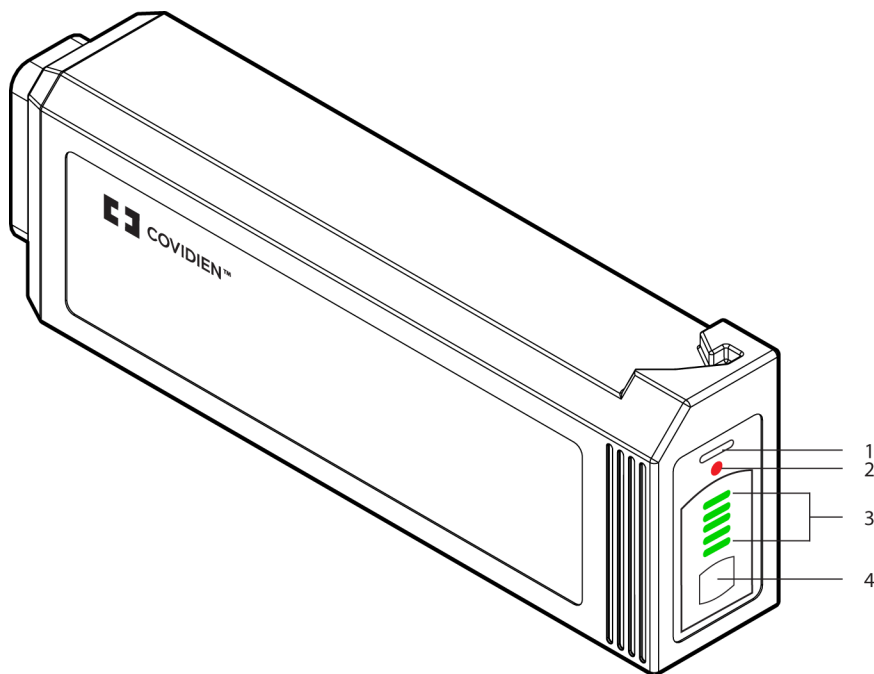

VEN_10327_B

- | | |
|--|--|
| 1. Belo LED svetlo koje pokazuje da je baterija u upotrebi | 3. Zelena LED svetla koja pokazuju stepen napunjenosti |
| 2. Crveni indikator koji pokazuje da postoji problem | 4. Dugme za nivo napunjenosti |

Slika 2. Datum proizvodnje baterije



VEN_12723_A

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Godina | 3. Tekst |
| 2. Broj nedelje (XX od 52) | 4. Broj proizvodne sekvence |

Datum proizvodnje baterije je sadržan unutar serijskog broja. Serijski broj je naveden na bočnoj strani baterije, blizu tačke priključka. Serijski broj se sastoji od 10 alfanumeričkih znakova i pruža sledeće informacije: 2 znaka za godinu, 2 znaka za nedelju.



Covidien Ilc,
15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 SAD
www.covidien.com
+1 800 255 8522 [T]

EC REP Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology Park, Tullamore, Irska.



PT00114108

© 2019 Covidien. Sva prava zadržana.
PT00114108 Rev. A
2020-04-28