

Puritan Bennett™

Ventilator i 980-serien

Hantering, förvaring och byte av litiumjonbatteripack



Tillägg till bruksanvisningen

U.S. Patents: www.covidien.com/patents.

© 2019 Covidien. Med ensamrätt.

COVIDIEN, COVIDIEN med logotyp, Covidiens logotyp och Positive Results for Life är registrerade varumärken i USA och internationellt som tillhör Covidien AG. TM*-märken är varumärken som tillhör sina respektive ägare. Andra märken är varumärken som tillhör ett Covidien-företag.

Den information som finns i detta tillägg tillhör endast Covidien och får inte kopieras utan tillstånd. Detta tillägg kan när som helst komma att revideras eller ersättas av Covidien utan föregående meddelande. Kontrollera att detta tillägg är den senaste giltiga versionen. Vid tveksamheter ska du kontakta Covidiens tekniska supportavdelning.

Även om informationen häri anses vara exakt, är den inte en ersättning för professionell bedömning.

Ventilatorn ska endast användas och underhållas av utbildad sjukvårdspersonal. Covidien enda ansvar med hänsyn till ventilatorn och programvaran och dess användning, är det som anges i den tillhandahållna begränsade garantin.

Ingenting i detta dokument ska begränsa eller inskränka på något sätt Covidiens rätt att revidera eller på annat sätt ändra eller modifiera utrustningen (inklusive dess programvara) som beskrivs häri, utan föregående meddelande. I avsaknad av ett uttryckligt, skriftligt avtal om motsatsen, har Covidien ingen skyldighet att tillhandahålla sådana revisioner, ändringar eller modifieringar till ägaren eller användaren av utrustningen (inklusive dess programvara) som beskrivs häri.

Covidien är ett Medtronic-företag.

Symboler



Denna enhet får endast säljas av läkare eller enligt läkares ordination



CE-märkning – Anger överensstämmelse med direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter



Auktoriserad representant för Europeiska gemenskapen (EG)



Tillverkare – Ventilator tillverkare

1. Hantering, förvaring och byte av litiumjonbatteripack

1.1. Hantering, förvaring och underhåll

Litiumjon (Li-jon)- batteripack (P/N 10086042): Hantering, förvaring och underhåll rekommenderas enligt följande:

- Batteripacken bör installeras i ventilatorn eller kompressorn (om tillvalet är installerat) medan den är ansluten till växelström för att upprätthålla laddning, vare sig ventilatorn är igång, i standby eller avstängd.
- Före användning bör laddningsnivån kontrolleras hos batteripack som inte är installerade i en ventilator. Detta kan göras genom att trycka på laddningsnivåknappen. Se avsnitt 3.6 i PB980-bruksanvisningen och [Figur 1](#). Det rekommenderas att batteripack som visar en laddningsnivå som motsvarar en lysdiod eller färre är fulladdade innan användning på en patient.
- Batteripackets livslängd kommer att förkortas om batteripackets laddning upprepade gånger får tömmas helt.
- Batteripack som visar en röd lysdiod för fel (nämnt i avsnitt 3.6 i PB980-bruksanvisningen) bör inte användas.
- Batteripack som inte är installerade i en ventilator bör förvaras i den riktning som illustreras i [Figur 1](#) och i avsnitt 3.6 i PB980-bruksanvisningen.

1.2. Byte och kassering

Litiumjonbatteripack (P/N 10086042) – byte och kassering:

I avsnitt 3.6 i PB980-bruksanvisningen, påminns användare att byta batteripacket vart 3 år från tillverkningsdatumet och kassera batteripacken enligt lokala förordningar.


Tillverkningsdatum återspeglas i serienummersekvensen som finns på batteripacket.

Se [Figur 2](#) för vägledning om hur du fastställer detta datum eller följ använd före-datumet som anges på batteripackets etikett.

Om batteripacket är inom batteriets livslängd på 3 år från tillverkningsdatumet och ett batterifel inträffar, kommer detta att anges av en tänd, röd lysdiod för fel eller på ventilatorstatusskärmen. Kontakta i detta fall vår servicegrupp

(rs.serviceexperience@medtronic.com) för att ordna med retur och utbyte av batteripacket.

Figur 1. Batteriladdningsnivå

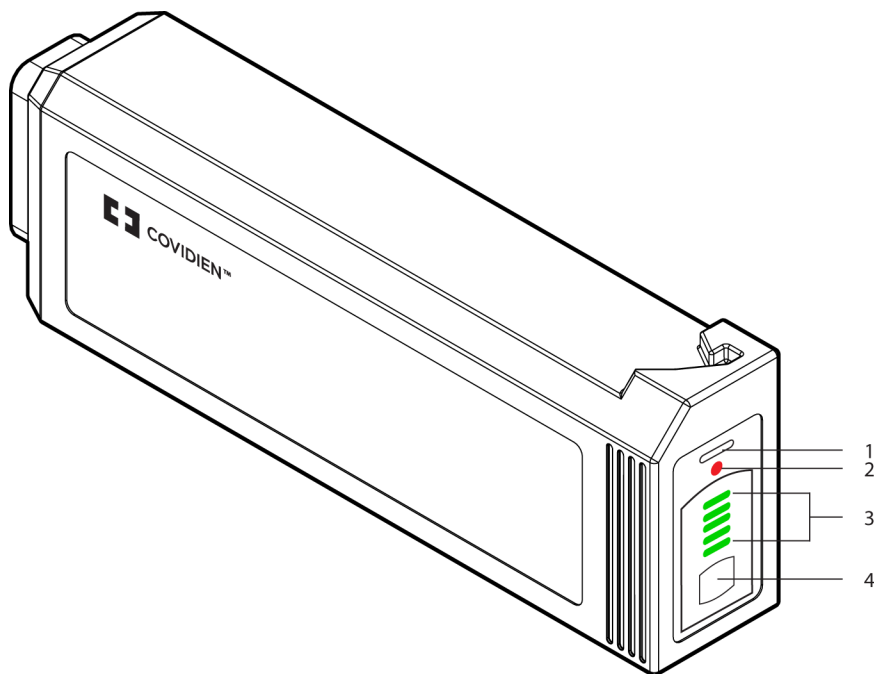

VEN_10327_B

1. Vit lysdiod som anger att batteriet används
2. Röd batterifelindikator
3. Gröna lysdioder för laddningsstatus
4. Laddningsnivåknapp

Figur 2. Batteriets tillverkningsdatum



VEN_12723_A

1. År
2. Veckonummer (XX av 52)
3. Text
4. Versionssekvensnummer

Batteriets tillverkningsdatum finns i serienumret. Serienumret anges på sidan av batteriet, nära anslutningspunkten. Serienumret består av 10 alfanumeriska tecken och innehåller följande information: År med 2 tecken, vecka med 2 tecken.



Covidien llc,
15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA
www.covidien.com
+1 800 255 8522 [T]

EC REP Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology Park, Tullamore, Irland.



PT00114112

© 2019 Covidien. Med ensamrätt.
PT00114112 Rev. A
2020-04-28