

Puritan Bennett™

980 Serisi Ventilatör

Lityum-iyon Batarya Takımının Kullanımı, Saklanması ve Değişimi



ABD Patentleri: www.covidien.com/patents.

© 2019 Covidien. Tüm hakları saklıdır.

COVIDIEN, logolu COVIDIEN, Covidien logosu ve Positive Results for Life, Covidien AG'nin ABD'de ve uluslararası tescilli ticari markalarıdır. ^{TM*} markaları, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Diğer markalar, bir Covidien şirketinin ticari markalarıdır.

Bu ekteki bilgiler Covidien'in münhasır malıdır ve izinsiz çoğaltılamaz. Bu ek, herhangi bir zamanda ve önceden bildirilmeksizin Covidien tarafından revize edilebilir veya değiştirilebilir. Bu ekin en güncel geçerli sürüm olduğundan emin olun. Şüphe durumunda Covidien teknik destek departmanına başvurun.

Burada belirtilen bilgilerin doğru olduğu düşünölmekle birlikte bunlar, profesyonel kanı uygulamasının yerine geçmez.

Ventilatör, yalnızca eğitimli profesyoneller tarafından kullanılmalı ve servise tabi tutulmalıdır. Covidien'in ventilatör, yazılım ve kullanımına ilişkin münhasır sorumluluğu, sağlanan sınırlı garantide belirtilmiştir.

Bu belgedeki hiçbir şey, Covidien'in burada belirtilen ekipmanı (yazılımı dâhil) bildirimde bulunmadan revize etme veya başka şekilde değiştirme hakkını sınırlamaz veya kısıtlamaz. Aksi doğrultuda sarıh, yazılı bir sözleşme bulunmadığı takdirde Covidien'in bu tür revizyon, değişiklik veya tadilatı burada belirtilen ekipmanın (yazılımı dâhil) sahibine veya kullanıcıasına sağlama yükümlölüğü yoktur.

Covidien, bir Medtronic şirkettir.

Semboller



Bu cihaz, bir hekim tarafından veya talimatıyla satılabilir



CE İşareti - Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC uyumluluğunu belirtir



Yetkili Avrupa Topluluğu (AT) temsilcisi



Üretici - Ventilator üreticisi

1. Lityum-iyon Batarya Takımının Kullanımı, Saklanması ve Değişimi

1.1. Kullanım, Saklama ve Bakım

Lityum iyon (Li-ion) batarya takımları (P/N 10086042) aşağıda önerilen şekilde kullanılır, saklanır ve bakıma tabi tutulur:

- Batarya takımları, ventilatörün çalışmasından, bekleme durumundan veya kapalı olmasından bağımsız olarak şarjı idame ettirmek için AC güce bağlıken ventilatöre veya kompresöre (seçenek kuruluysa) takılmalıdır.
- Ventilatöre takılı olmayan batarya takımları kullanılmadan önce şarj düzeyi kontrol edilmelidir. Bunun için şarj düzeyi düğmesine basılabilir. Bkz. PB980 Kullanıcı Kılavuzu, Bölüm 3.6 ve [Şekil 1](#). Tek bir LED'e eş değer veya daha düşük şarj düzeyi gösteren batarya takımlarının, hasta kullanımından önce tam olarak şarj edilmesi önerilir.
- Batarya takımının tekrar tekrar tamamen tükenmesi durumunda batarya takımı ömrü azalır.
- Kırmızı arıza LED'i gösteren batarya takımları (PB980 Kullanıcı Kılavuzu, Bölüm 3.6'da belirtilmiştir) kullanılmamalıdır.
- Ventilatöre takılı olmayan batarya takımları, [Şekil 1](#) ve PB980 Kullanıcı Kılavuzu, Bölüm 3.6'da gösterilen yönde saklanmalıdır.


1.2. Değişim ve Bertaraf

Lityum-iyon batarya takımının (P/N 10086042) değişim ve bertarafı:

PB980 Kullanıcı Kılavuzu, Bölüm 3.6'da kullanıcılara batarya takımını üretim tarihinden itibaren 3 yılda bir değiştirmeleri ve batarya takımlarını yerel düzenlemeler uyarınca bertaraf etmeleri hatırlatılmaktadır. Üretim tarihi, batarya takımındaki seri numarası sekansında yansıtılmaktadır. Bu tarihin nasıl belirleneceğine ilişkin kılavuz için [Şekil 2](#) öğesine bakın veya batarya takımı etiketinde belirtilen son kullanma tarihine uyun.

Batarya takımının üretim tarihinden itibaren 3 yıllık batarya ömrü dâhilinde batarya arızası gerçekleşirse, bu durum yanan kırmızı arıza LED'iyle veya ventilatör durumu ekranında belirtilir. Bu durumda batarya takımının iade ve değişimini düzenlemek için servis deneyimi grubumuzla (rs.serviceexperience@medtronic.com) iletişime geçin.

Şekil 1. Batarya şarj düzeyi

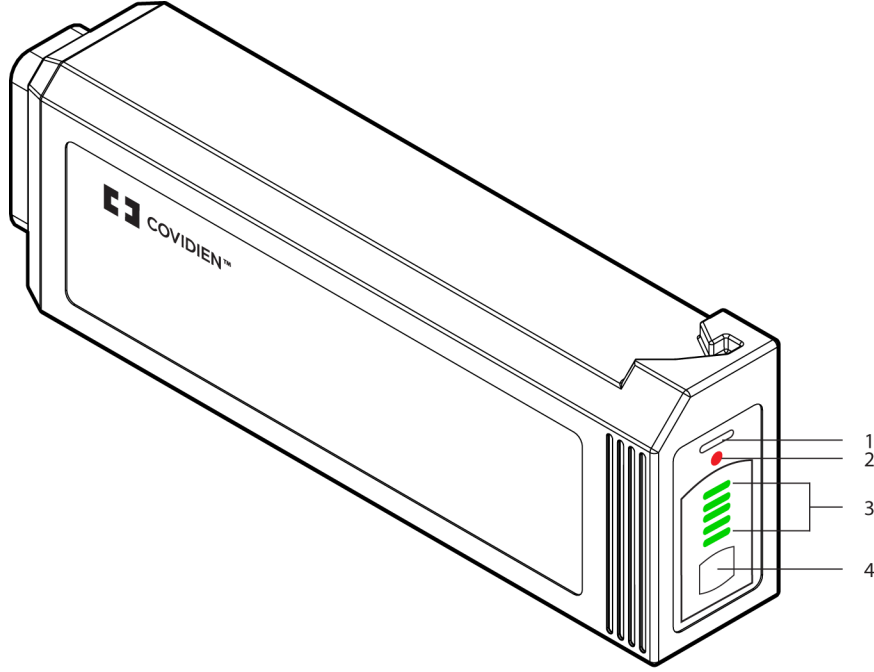

VEN_10327_B

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Beyaz 'batarya kullanımda' LED'i | 3. Yeşil şarj durumu LED'leri |
| 2. Kırmızı 'batarya arızası' göstergesi | 4. Şarj düzeyi düğmesi |

Şekil 2. Batarya üretim tarihi



VEN_12723_A

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Yıl | 3. Metin |
| 2. Hafta numarası (XX/52) | 4. Yapı sekans numarası |

Bataryanın üretim tarihi, seri numarasında bulunmaktadır. Seri numarası, bataryanın yan tarafında, bağlantı noktasının yanında belirtilmektedir. Seri numarası 10 alfanümerik karakterden oluşmaktadır ve şu bilgileri sağlamaktadır: 2 karakter yıl, 2 karakter hafta.



Covidien Ilc,
15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 ABD
www.covidien.com
+1 800 255 8522 [T]

EC REP Covidien Ireland Limited,
IDA Business & Technology Park, Tullamore, İrlanda.



PT00114113

© 2019 Covidien. Tüm Hakları Saklıdır.
PT00114113 Rev. A
2020-04-28