

ストレスフリーな ESSを次のスタンダードへ

—詰まりを軽減し、意図しない切除を防ぐ—

ApexCut™ ブレード




革新的な デザイン改良

ApexCut™ ブレードは、詰まりを軽減し、切除効率の向上と組織への配慮を両立する4つの独自開口部設計を開発致しました。

Protected-tip design


先端開口部に刃先が無い安全設計
意図しない組織の巻き込み切除を
防ぎます。

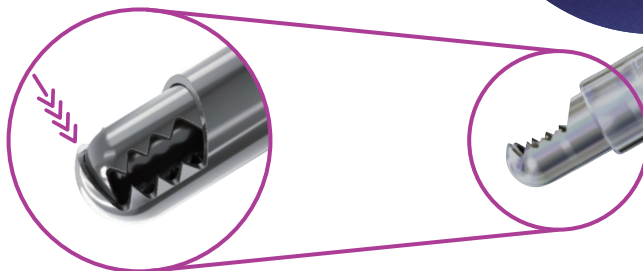

87.1%

吸引経路の
断面積が拡大

vs 3.5mm/40°ブレード

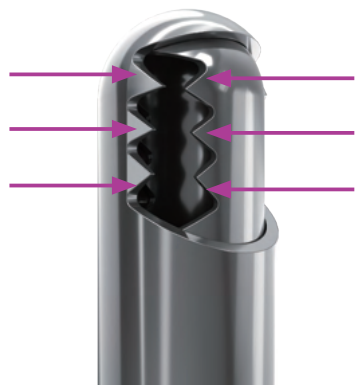

Tooth-to-tooth alignment

ブレード刃先の頂点同士が直接噛み合う
ことで、接触時に最大圧力を瞬時に生み
出して組織を切断し、組織の変形を抑えます。
先生の意図した切除を叶えます。



Distal-to-proximal cutting

遠位端でまず組織を捉え、近位方向へ
切削・吸引します。切削と吸引の方向が
揃うことで、目詰まりの発生を抑えます。



FlexMetric™テクノロジー

従来のトライカットカーブブレードでは内腔
の狭窄部位があることが技術的な課題で
した。今回採用したFlexMetric™テクノロ
ジーは内腔を一定に保つことができどんな
角度にも追従できる技術になります。吸引
経路を最大化し、詰まりの発生を抑えます。

- ・ 開口部で高い吸引力を実現
- ・ ブレード角度に合わせて内腔径を最適化

中断を減らし、 手技に集中

詰まりの軽減は、円滑に手術を進行でき、手術時間の短縮に貢献
できる可能性があります。効率的な組織除去、吸引経路の拡大は
術者の操作性と手術ワークフローを支援し大切な患者さんの治
療に、より集中できます。

4倍以上
詰まりを
低減

開口部再設計とFlexMetric™
テクノロジーにより、
切除効率の向上を示唆

あらゆる術式に、 いつでも対応

ApexCut™ ブレードは、豊富なRotatableストレート／
カーブブレードのラインアップで、先生の思い通りの
処置を支えます。

モデル番号

ApexCut™ ブレード

径 (4.0mm) 角度 (40°)


187BL4040L

BL = ブレード

長さ
L = Long (13 cm)
L記載無 = Regular (11 cm)

360° Rotatableブレード (最大7,500rpmまで設定可能)

187BL2900	ApexCut™ ブレード 2.9 mm / 0°
187BL3500	ApexCut™ ブレード 3.5 mm / 0°
187BL4000	ApexCut™ ブレード 4.0 mm / 0°
187BL4000L	ApexCut™ ブレード 4.0 mm / 0° Long
187BL3512	ApexCut™ ブレード 3.5 mm / 12°
187BL4012	ApexCut™ ブレード 4.0 mm / 12°
187BL3540	ApexCut™ ブレード 3.5 mm / 40°
187BL4040	ApexCut™ ブレード 4.0 mm / 40°
187BL2960	ApexCut™ ブレード 2.9 mm / 60°
187BL3560	ApexCut™ ブレード 3.5 mm / 60°
187BL4060	ApexCut™ ブレード 4.0 mm / 60°
187BL2975	ApexCut™ ブレード 2.9 mm / 75°
187BL3590	ApexCut™ ブレード 3.5 mm / 90°
187BL35120	ApexCut™ ブレード 3.5 mm / 120°

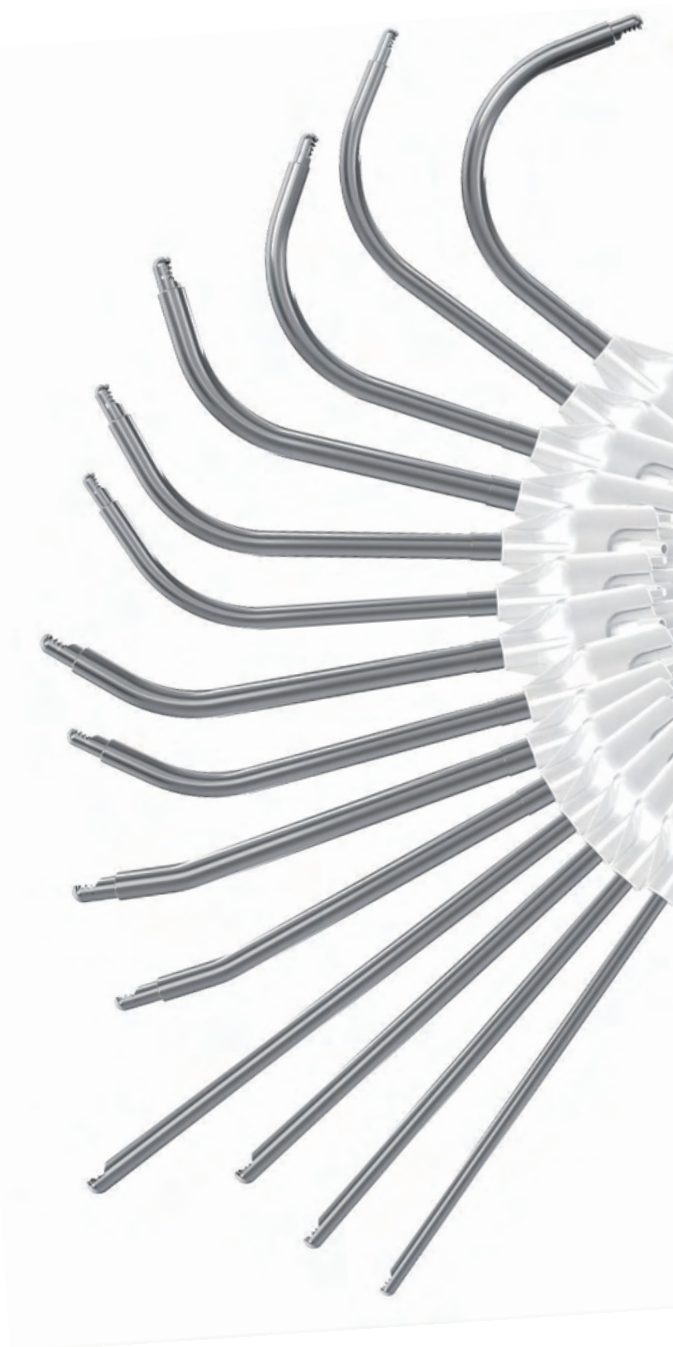

信頼と実績のあるメドトロニック製品と シームレスに連携

ストレートショットM5ハンドピース

人体工学に基づき設計されました。

コンパクトに改良されたストレートショットM5ハンドピースは操作性に優れており、より良い手術パフォーマンスを実現します。



- ストレートショットM5ハンドピース (モデル番号1899200)
- M5用 滅菌トレー (モデル番号1899076)

IPC™ Integrated Power Console

IPCコンソールは耳鼻咽喉科領域の手術でお使いいただける、マルチパワープラットフォームです。

- IPCコンソールENT (モデル番号1898001)
- IPCフットスイッチENT (モデル番号1898430)
- エンドスクラブ2フットスイッチ (モデル番号1852000)



Medtronic

製造販売業者
日本メドトロニック株式会社

ENT
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

販売名:インテグレイテッドパワーコンソール
販売名:M5ハンドピース
販売名:ApexCutブレード
販売名:エンドスクラブ2

医療機器認証番号:222ACBZX00018000
医療機器届出番号:13B1X00261X00043
医療機器届出番号:13B1X00261X00044
医療機器届出番号:13B1X00261X00013

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2026 Medtronic. Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。
AP01_ENT09092026A_fk