

Medtronic

Mobiililaitteen ohjelmiston päivittäminen Wi-Fi-yhteyden avulla



Valmistelu

Virta: varmista ennen päivitysten asentamista, että mobiililaitte on kytketty verkkovirtaan tai että siinä on akkuvirtaa yli 35 prosenttia ja että yhteyslaite on käytettävissä ja ladattu.

Wi-Fi: Varmista, että käytät luotettavaa Wi-Fi-verkkoa, kuten kotiyhteyttäsi. Ota Wi-Fi-verkon nimi ja salasana esille ennen aloittamista.

Aika: tämä prosessi voi kestää jopa 30 minuuttia verkon vahvuudesta riippuen.

Mobiililaitteen malli: Määritä käytössäsi oleva mobiililaitemalli alla olevien kuvien avulla. Samsung J3 -mobiililaitteen alaosassa on keskellä fyysinen aloituspainike.



Samsung A10e

Jos sinulla on Samsung A10e -mobiililaitte, katso ohjeet sivulta 3.

Napsauta tästä Samsung A10e -ohjeisiin



Fyysinen aloituspainike

Samsung J3

Jos sinulla on Samsung J3 -mobiililaitte, katso ohjeet sivulta 10.

Napsauta tästä Samsung J3 -ohjeisiin

Sisällys



Valmistelu	1
Ohjeet Samsung A10e -mobiililaitteelle	3
Osa 1: Muodosta Wi-Fi-yhteys	3
Osa 2: Päivitä sovellukset.....	4
Osa 3: Varmista, että sovellukset on päivitetty	8
Ohjeet Samsung J3 -mobiililaitteelle	10
Osa 1: Muodosta Wi-Fi-yhteys	10
Osa 2: Päivitä sovellukset.....	11
Osa 3: Varmista, että sovellukset on päivitetty	16
Lyhyt lausunto.....	18

Ohjeet Samsung A10e -mobiililaitteelle



Osa 1: Muodosta Wi-Fi-yhteys

- 1 Napauta mobiililaitteen aloitusnäytön **Settings** (Asetukset) -kuvaketta.
- 2 Valitse **Connections** (Yhteydet).

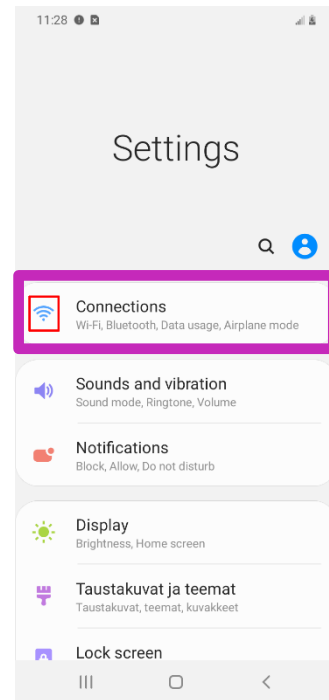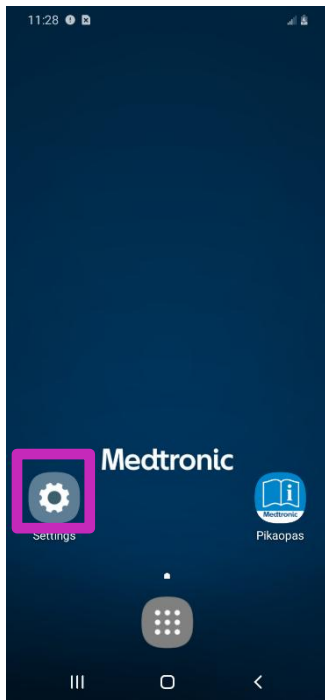


- 3 Etsi kohta **Wi-Fi** ja napauta valitsin päälle, jolloin se muuttuu siniseksi.

Wi-Fi
Connect to Wi-Fi networks.



- 4 Valitse langaton verkko, jota haluat käyttää.

- 5 Valitse **Connect** (Yhdistä).

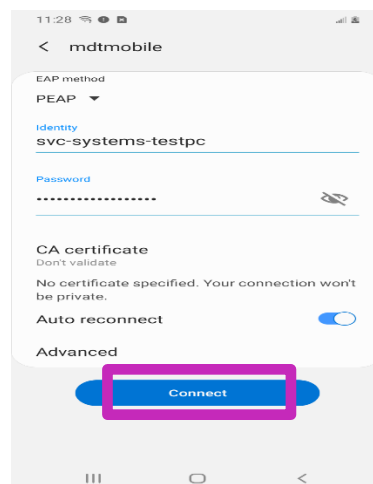


Ohjeet Samsung A10e -mobiililaitteelle



** Ohjeita **TÄYTYY** noudattaa tässä järjestyksessä **

Osa 2: Päivitä sovellukset


1 Palaa aloitusnäyttöön.

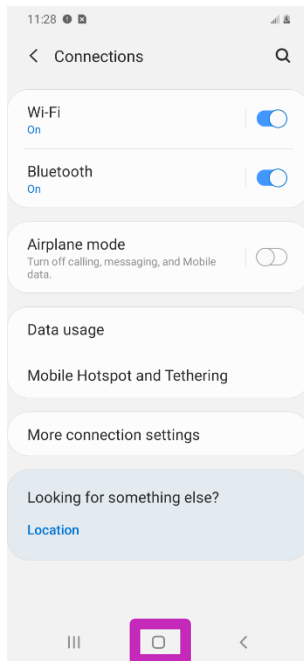

2 Siirry aloitusnäytöltä sovellusvalikkoon.



3 Valitse **Hub**-sovellus.
(Hub-sovelluksen kuvake voi olla erilainen mobiililaitteen iästä riippuen.)

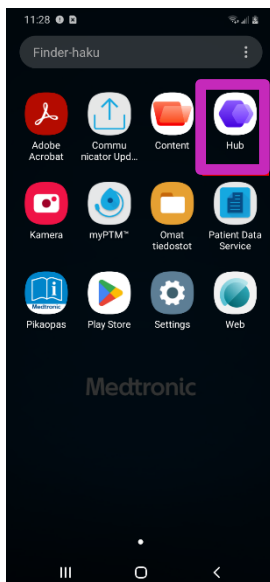


TAI




Ohjeet Samsung A10e -mobiililaitteelle





- 4 Päivitä Hubissa luetellut sovellukset pyyhkäisemällä alas Apps (Sovellukset) -näytössä.

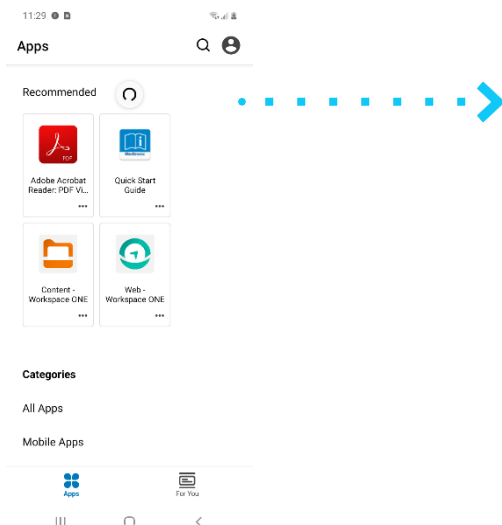



- 5 Valitse Categories (Luokat) -kohdasta **All Apps** (Kaikki sovellukset). Sinun on ehkä selattava näytön alaosaan.

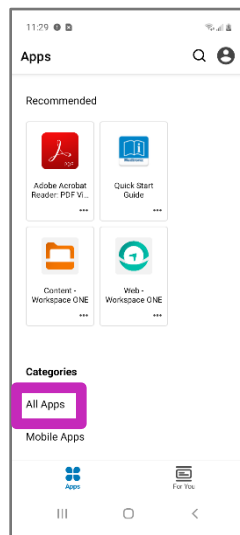

- 6 Etsi **Patient Data Service** -sovellus ja valitse **UPDATE** (PÄIVITÄ).
(Älä valitse **OPEN** [AVAA] jälkeinpäin, sillä se avaa sovelluksen edellisen version.)

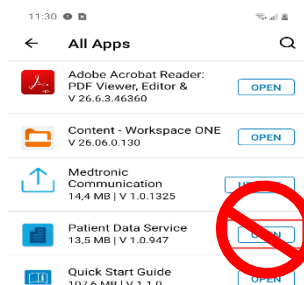
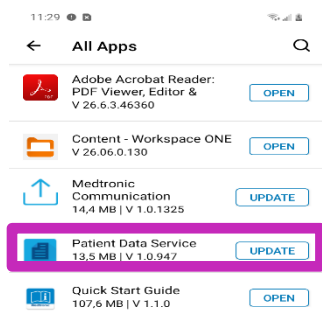


- 7 Etsi **Medtronic Communication Manager** -sovellus ja valitse **UPDATE** (PÄIVITÄ).
(Älä valitse **OPEN** [AVAA] jälkeinpäin, sillä se avaa sovelluksen edellisen version.)

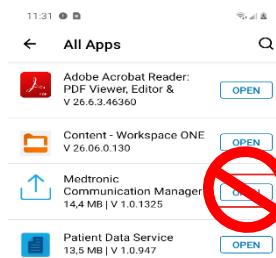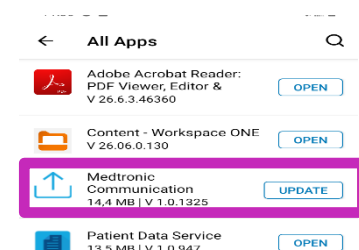

- 8 Etsi **myPTM**-sovellus ja valitse **UPDATE** (PÄIVITÄ).

(Älä valitse OPEN [AVAA] jälkeenpäin, sillä se avaa sovelluksen edellisen version.)

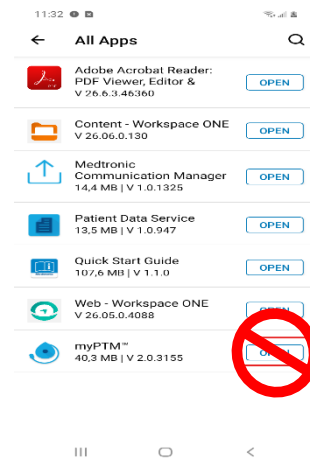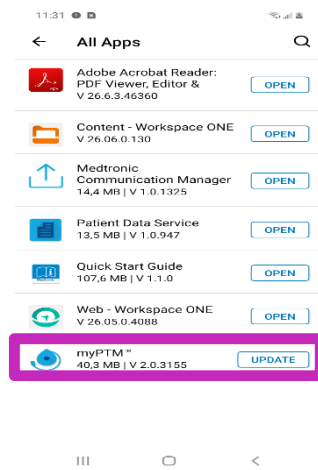


9 Odota kaksi minuuttia, jotta päivitykset valmistuvat.


Ohjeet Samsung A10e -mobiililaitteelle




- 10 Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa takaisin-nuolta.

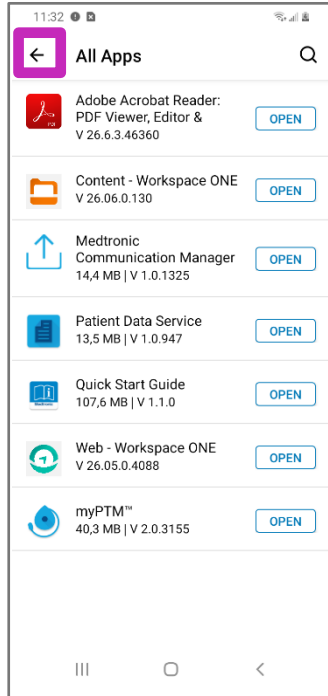



- 11 Napauta oikean yläkulman tilikuvaketta. Tilikuvakkeen kirjaimet saattavat poiketa mobiililaitteesta-si.

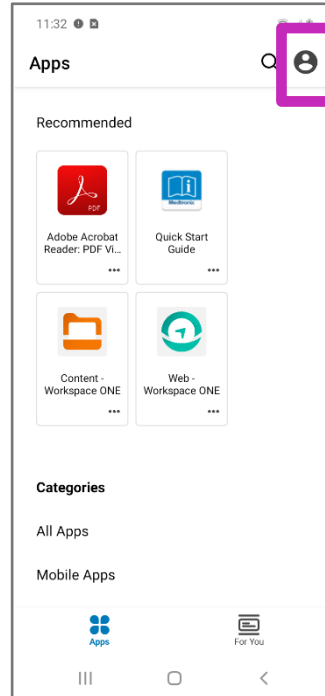

- 12 Valitse **This Device** (Tämä laite).

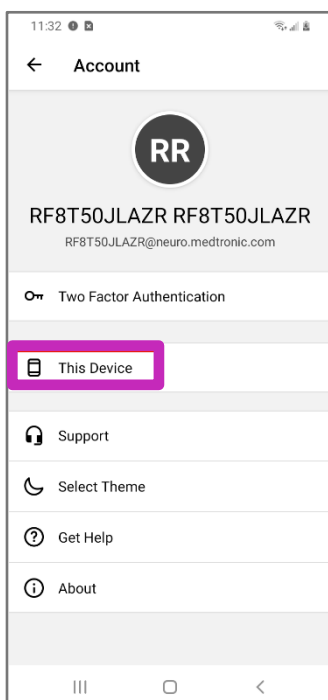


- 13 Vieritä näytön alaosaan ja valitse **Sync device** (Synkronoi laite). "**Checking for updates**" (Tarkistetaan päivitysten saatavuutta) tulee näkyviin näytön alaosaan.

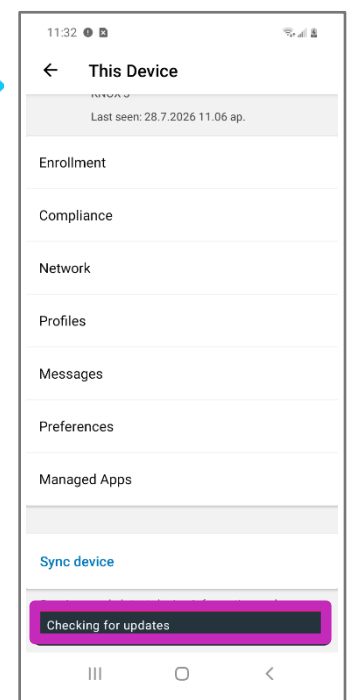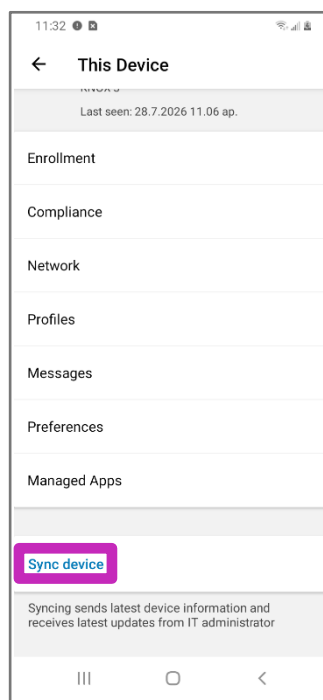

Ohjeet Samsung A10e -mobiililaitteelle



- 14 Selaa takaisin näytön yläreunaan ja varmista, että **Last seen** (Viimeksi nähty) -päivämäärä ja -aika ovat päivittyneet nykyiseen päivämäärään ja aikaan. Jos ne eivät ole päivittyneet, toista vaihe 13.

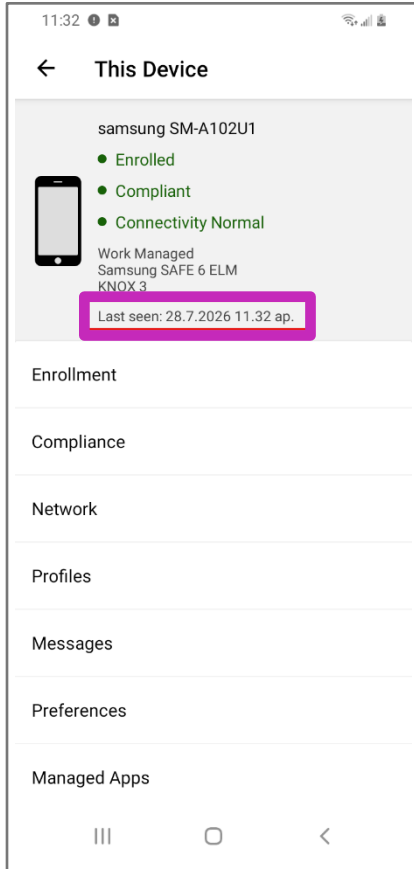


Ohjeet Samsung A10e -mobiililaitteelle




Osa 3: Varmista, että sovellukset on päivitetty

1 Palaa aloitusnäyttöön

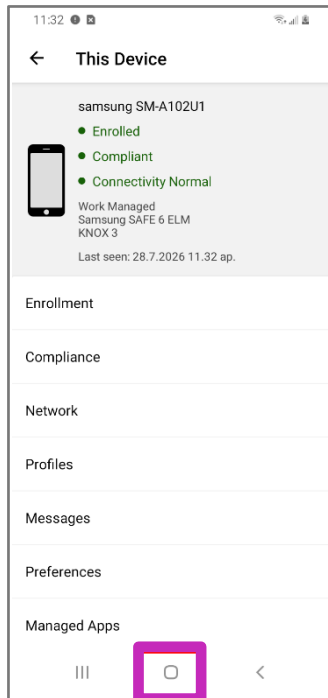

2 Valitse **myPTM**-sovellus.

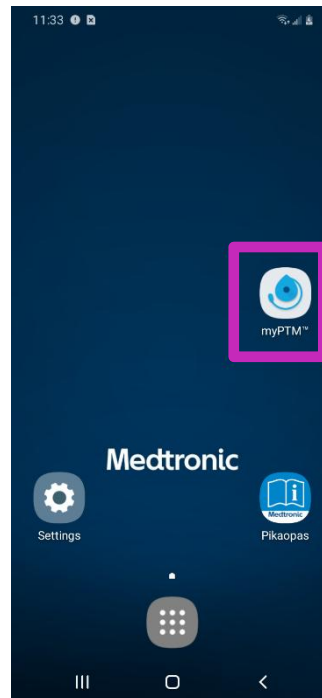


3 Muodosta yhteys pumppuun noudattamalla näytön ohjeita, kunnes näet aloitusnäytön.

Varmista, että yhteyslaitteeseen on kytketty virta ja että se on asetettu suoraan pumpun päälle.

4 Valitse näytön vasemmassa yläkulmassa oleva valikkokuvake.




5 Valitse **About** (Tiedot).

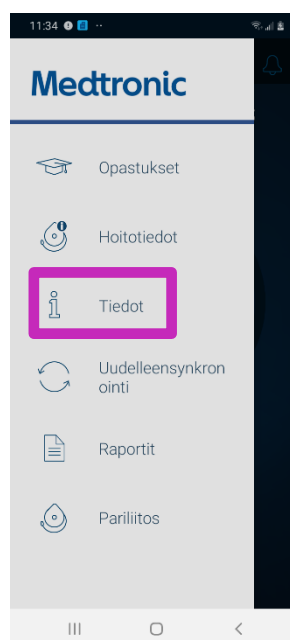

Ohjeet Samsung A10e -mobiililaitteelle



- 6 Varmista, että seuraavat tiedot näkyvät:
- Versio:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

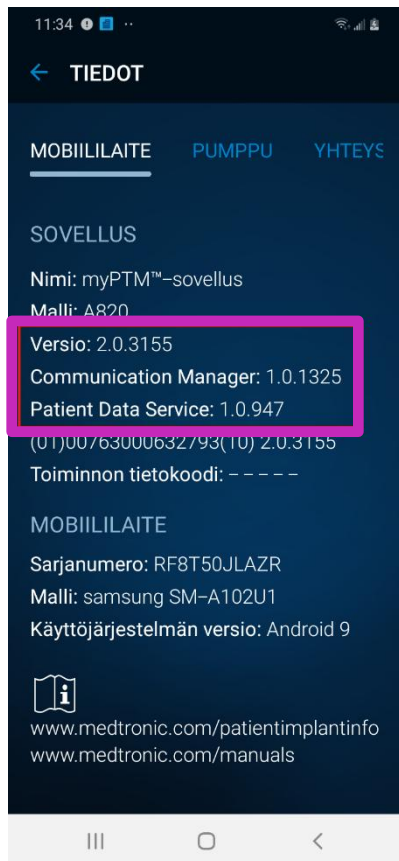

Jos versionumerot vastaavat toisiaan, päivitys onnistui ja voit käyttää mobiililaitetta normaalisti.

Jos jotkin versionumerot eivät täsmää, palaa kohtaan **Osa 2: Päivitä sovellukset** ja päivitä sovellusversiot tarvittaessa uudelleen.


Päivitys on valmis

Ohjeet Samsung J3 -mobiililaitteelle




Osa 1: Muodosta Wi-Fi-yhteys


- 1 Napauta mobiililaitteen aloitusnäytön **Settings** (Asetukset) -kuvaketta.

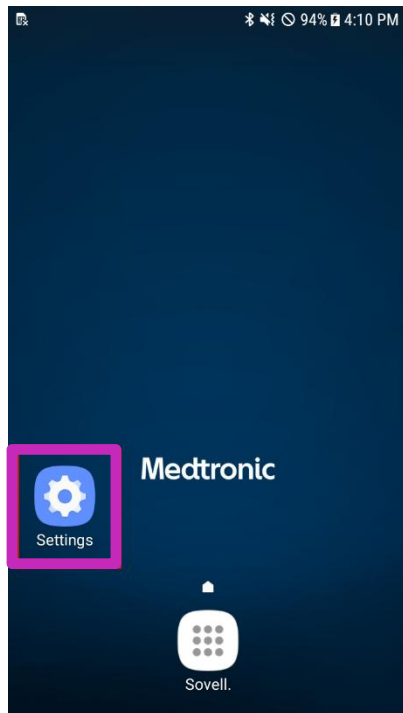


- 2 Valitse **Connections** (Yhteydet).

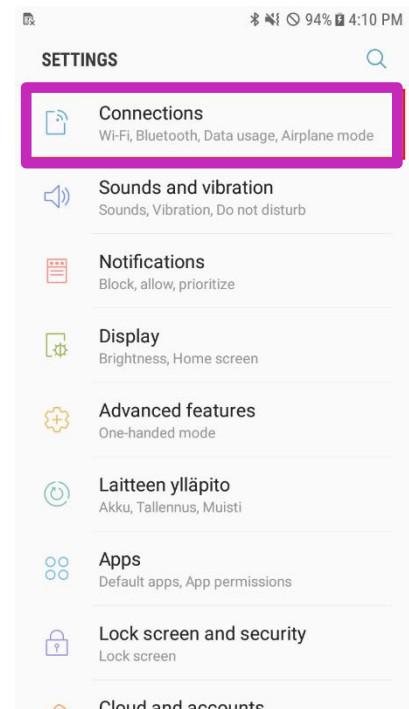


- 3 Etsi kohta **Wi-Fi** ja napauta valitsin päälle, jolloin se muuttuu siniseksi.

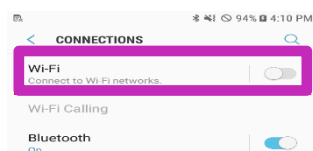

- 4 Valitse langaton verkko, jota haluat käyttää.

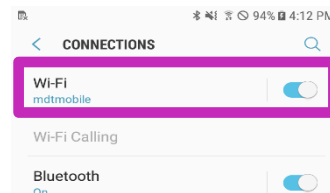

- 5 Valitse **Connect** (Yhdistä).

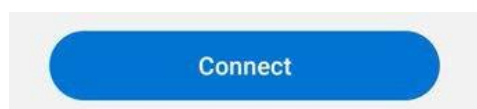

Ohjeet Samsung J3 -mobiililaitteelle




** Ohjeita **TÄYTYY** noudattaa tässä järjestyksessä **

Osa 2: Päivitä sovellukset


1 Palaa aloitusnäyttöön painamalla aloituspainiketta.



2 Siirry aloitusnäytöltä sovellusvalikkoon.

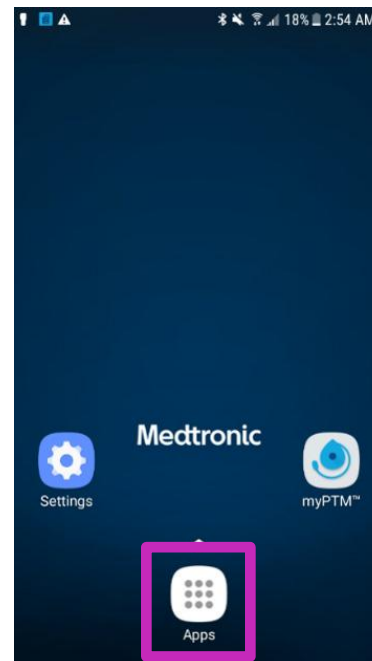


3 Valitse **Hub**-sovellus.

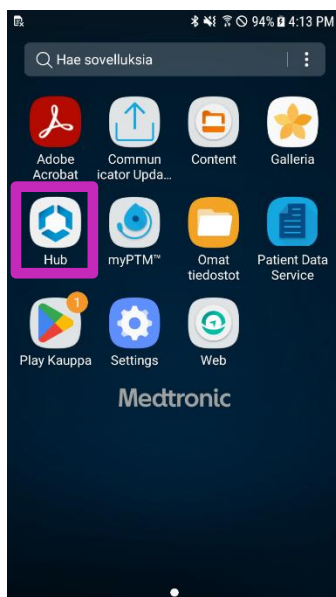


Ohjeet Samsung J3 -mobiililaitteelle



- 4 Päivitä Hubissa luetellut sovellukset pyyhkäisemällä alas Apps (Sovellukset) -näytössä.

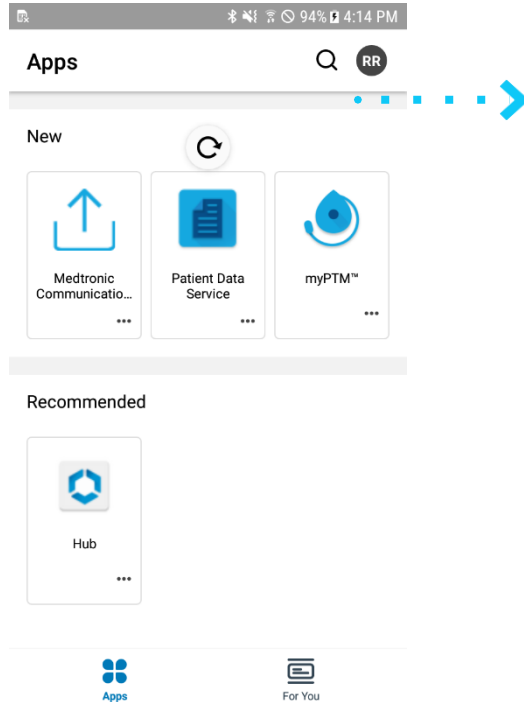

- 5 Valitse Categories (Luokat) -kohdasta **All Apps** (Kaikki sovellukset). Sinun on ehkä selattava näytön alaosaan.

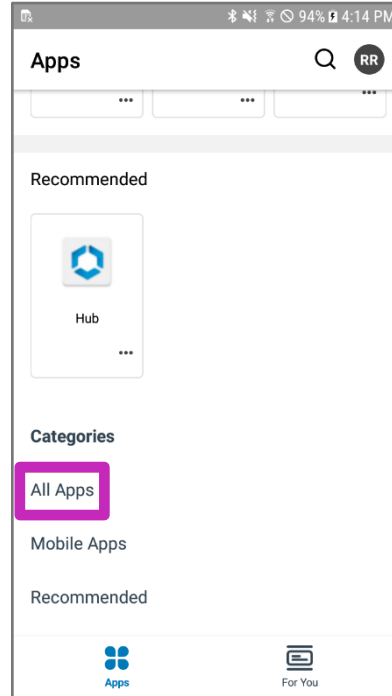


Ohjeet Samsung J3 -mobiililaitteelle



- 6 Etsi **Intelligent Hub** -sovellus ja valitse **UPDATE** (PÄIVITÄ).
Jos et näe tätä sovellusta luettelossa, päivitystä ei tarvita. Siirry vaiheeseen 7.
(Älä valitse **OPEN** [AVAA] jälkeenpäin, sillä se avaa sovelluksen edellisen version.)




- 7 Etsi **Patient Data Service** -sovellus ja valitse **UPDATE** (PÄIVITÄ).
(Älä valitse **OPEN** [AVAA] jälkeenpäin, sillä se avaa sovelluksen edellisen version.)

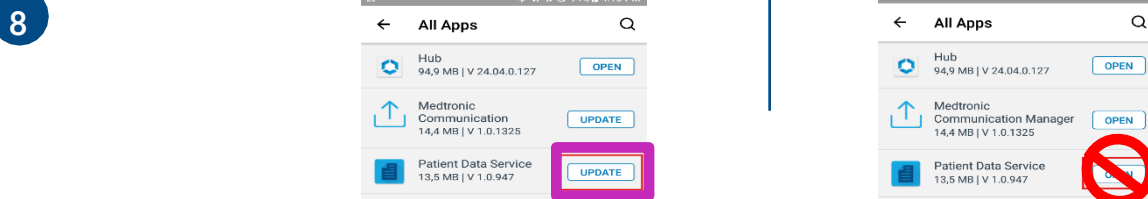

- Etsi **Medtronic Communication Manager** -sovellus ja valitse **UPDATE** (PÄIVITÄ).
(Älä valitse **OPEN** [AVAA] jälkeenpäin, sillä se avaa sovelluksen edellisen version.)



- 9 Etsi **myPTM**-sovellus ja valitse **UPDATE** (PÄIVITÄ).
(Älä valitse **OPEN** [AVAA] jälkeenpäin, sillä se avaa sovelluksen edellisen version.)

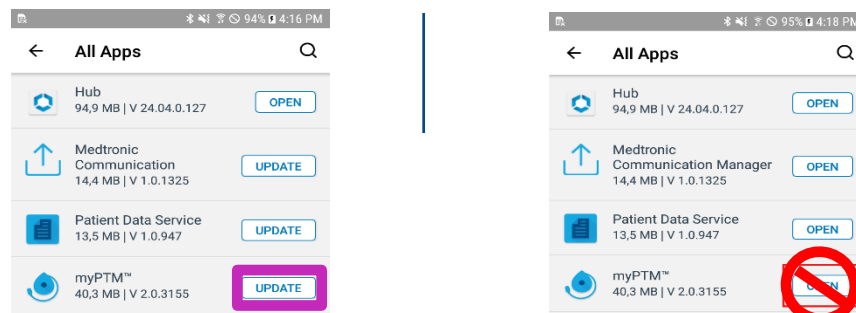


- 10 **Odota** kaksi minuuttia, jotta päivitykset valmistuvat.


Ohjeet Samsung J3 -mobiililaitteelle




- 11 Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa takaisin-nuolta.

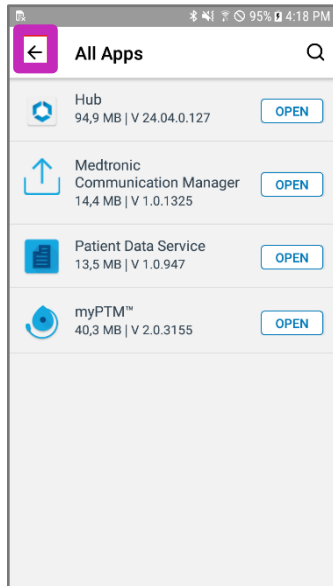



- 12 Napauta oikean yläkulman tilikuvaketta. Tilikuvakkeen kirjaimet saattavat poiketa mobiililaitteesta-si.

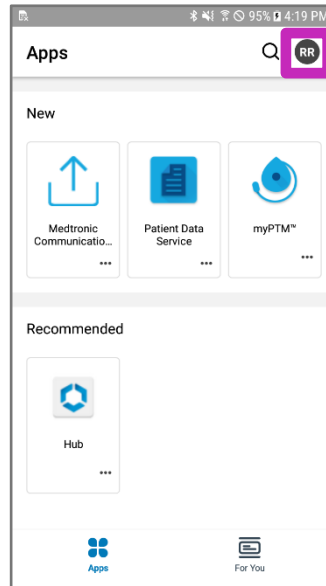

- 13 Valitse **This Device** (Tämä laite).

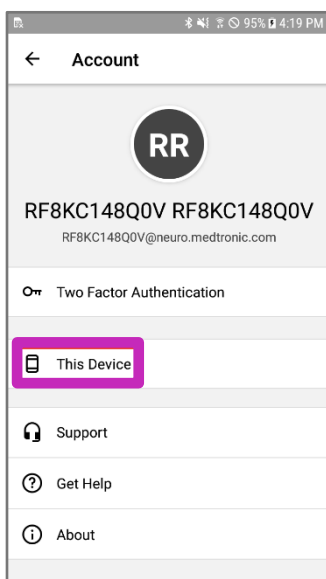


- 14 Vieritä näytön alaosaan ja valitse **Sync device** (Synkronoi laite). "**Checking for updates**" (Tarkistetaan päivitysten saatavuutta) tulee näkyviin näytön alaosaan.

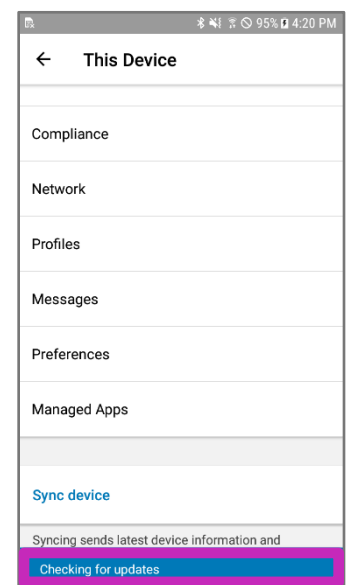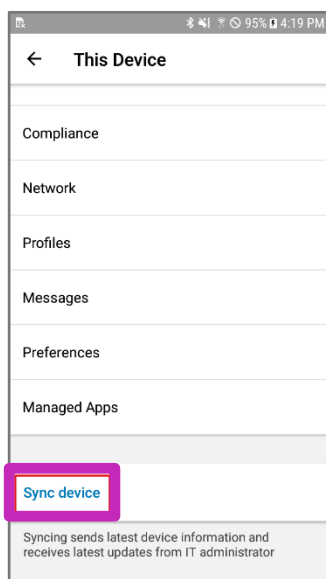

Ohjeet Samsung J3 -mobiililaitteelle



- 15 Selaa takaisin näytön yläreunaan ja varmista, että **Last seen** (Viimeksi nähty) -päivämäärä ja -aika ovat päivittyneet nykyiseen päivämäärään ja aikaan. Jos ne eivät ole päivittyneet, toista vaihe 14.

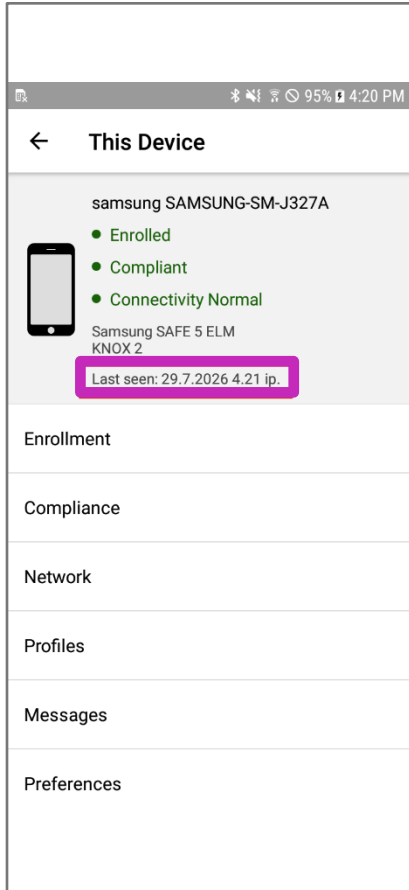

Ohjeet Samsung J3 -mobiililaitteelle




Osa 3: Varmista, että sovellukset on päivitetty

- 1 Palaa aloitusnäyttöön painamalla aloituspainiketta.



- 2 Valitse **myPTM**-sovellus.

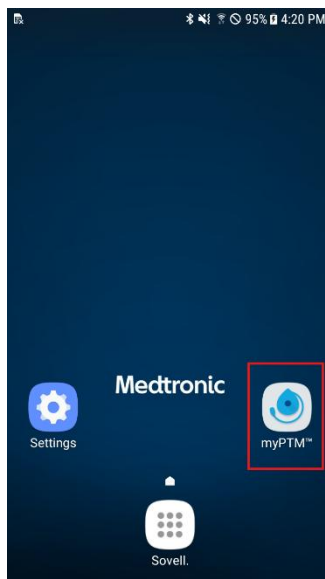


- 3 Muodosta yhteys pumppuun noudattamalla näytön ohjeita, kunnes näet aloitusnäytön.


Varmista, että yhteyslaitteeseen on kytketty virta ja että se on asetettu suoraan pumpun päälle.

Yhteyslaite saattaa tarvita päivityksen sen iästä riippuen.

- 4 Valitse näytön vasemmassa yläkulmassa oleva valikkokuvake.

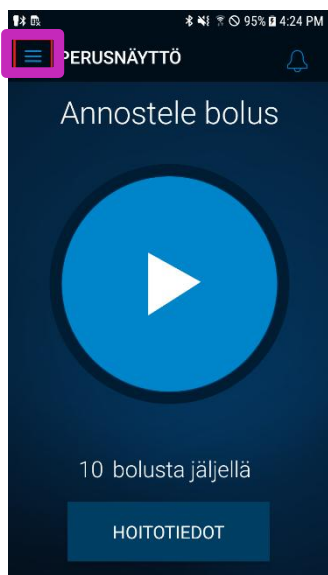


- 5 Valitse **About** (Tiedot).

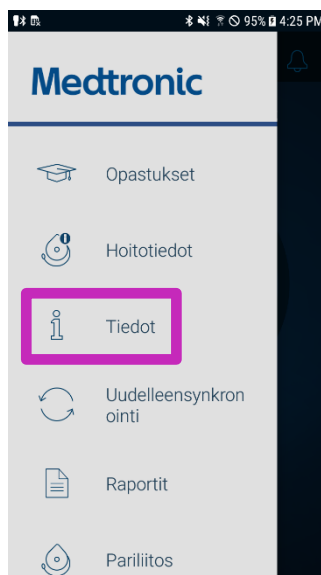

Ohjeet Samsung J3 -mobiililaitteelle



- 6 Varmista, että seuraavat tiedot näkyvät:
- Versio:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

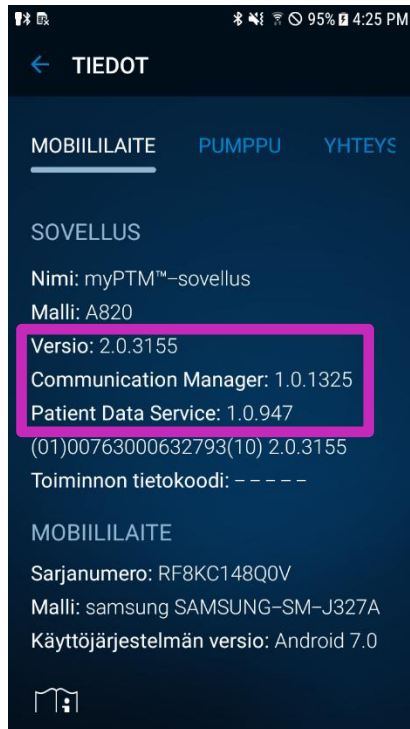

Jos versionumerot vastaavat toisiaan, päivitys onnistui ja voit käyttää mobiililaitetta normaalisti.

Jos jotkin versionumerot eivät täsmää, palaa kohtaan **Osa 2: Päivitä sovellukset** ja päivitä sovellusversiot tarvittaessa uudelleen.

Päivitys on valmis

Lyhyt lausunto

Lyhyt lausunto:

Tätä materiaalia ei tule pitää yksinomaisena tietolähteenä, eikä se korvaa tai ohita laiteoppaiden sisältämiä tietoja.

Huomaa, että tuotteen käyttötarkoitus voi vaihdella maantieteellisten hyväksyntöjen mukaan.

Yksityiskohtaiset tiedot käyttötarkoituksesta, (implantointi)toimenpiteestä, käyttöaiheista, vasta-aiheista, varoituksista, varotoimista ja mahdollisista haittavaikutuksista ovat laitteen käyttöohjeessa.

Jos kyseessä on magneettikuvaukseen soveltuva laite, katso magneettikuvaustiedot laiteoppaista ennen magneettikuvauksen suorittamista.

Jos laitteelle on hyväksyttävää toimittaa käyttöohje sähköisessä muodossa, käyttöohjeet löytyvät Medtronicin verkkosivustolta manuals.medtronic.com.

Oppaita voidaan tarkastella yleisten Internet-selaimien ajantasaisilla versioilla. Paras tapa on käyttää Adobe Acrobat® Reader -ohjelmaa selaimella.

Markkinoille saatetut Medtronic-tuotteet ovat lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön mukaisia (mikäli sovellettavissa). Lisätietoja saat paikalliselta Medtronic-yhtiön edustajalta ja/tai vierailemalla Medtronic-yhtiön verkkosivustoilla.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004