

تحديث برنامج الهاتف المحمول باستخدام شبكة Wi-Fi

التجهيز

الطاقة: تأكد من توصيل الهاتف المحمول بمصدر الطاقة أو أن مستوى شحن بطاريته أكثر 35%، ومن أن جهاز الاتصال متاح ومشحون قبل تثبيت أي تحديثات.

شبكة Wi-Fi: تأكد من استخدام شبكة Wi-Fi موثوقة مثل مزود الخدمة المنزلية. تأكد من توفر اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور قبل البدء.

الوقت: بناء على قوة شبكتك ، قد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى 30 دقيقة.

طراز الهاتف المحمول: حدد طراز هاتفك المحمول باستخدام الصور أدناه. يحتوي هاتف Samsung J3 على زر الشاشة الرئيسية الفعلي في منتصف الجزء السفلي من الهاتف.



زر Home
(الشاشة الرئيسية)
الفعلي

Samsung J3

إذا كان لديك هاتف Samsung J3، فراجع التعليمات الموجودة في الصفحة 10.

انقر هنا لهاتف Samsung J3



Samsung A10e

إذا كان لديك هاتف Samsung A10e، فراجع التعليمات الموجودة في الصفحة 3.

انقر هنا لهاتف Samsung A10e



جدول المحتويات

1.....	التجهيز
3.....	التعليمات الخاصة بهاتف Samsung A10e
3.....	الجزء 1: الاتصال بشبكة Wi-Fi
4.....	الجزء 2: تحديث التطبيقات
8.....	الجزء 3: تأكيد تحديث التطبيقات
10.....	التعليمات الخاصة بهاتف Samsung J3
10.....	الجزء 1: الاتصال بشبكة Wi-Fi
11.....	الجزء 2: تحديث التطبيقات
16.....	الجزء 3: تأكيد تحديث التطبيقات
18.....	بيان مختصر

التعليمات الخاصة بهاتف Samsung A10e

الجزء 1: الاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 انقر فوق أيقونة **Settings** (الإعدادات) على الشاشة الرئيسية
- 2 انقر فوق **Connections** (الاتصالات) الخاصة بالهاتف المحمول.

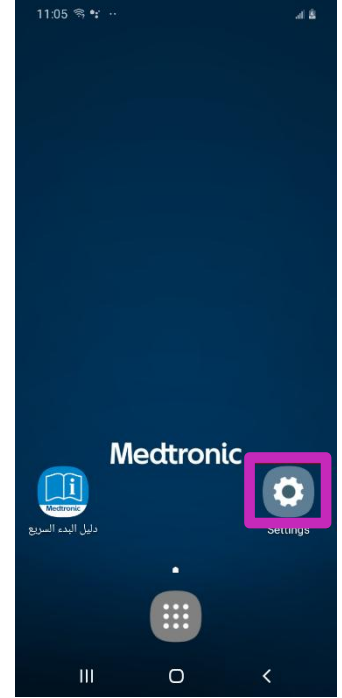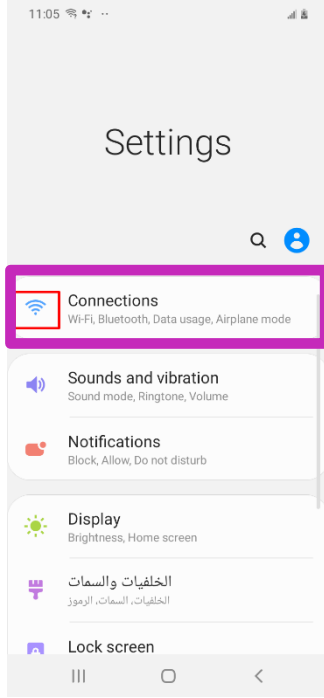


- 3 ابحث عن **شبكة Wi-Fi** وانقر فوق مفتاح التبديل لتشغيله، بحيث يتحول إلى اللون الأزرق.



- 4 انقر فوق الشبكة اللاسلكية التي ترغب في استخدامها. انقر فوق **Connect**

- 5 (توصيل).

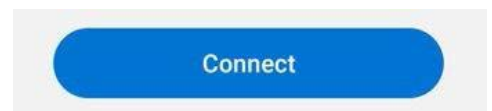

التعليمات الخاصة بهاتف Samsung A10e



**** يجب اتباع التعليمات بهذا الترتيب ****



الجزء 2: تحديث التطبيقات


1 قم بالعودة إلى الشاشة الرئيسية

انتقل إلى قائمة التطبيقات من الشاشة الرئيسية.

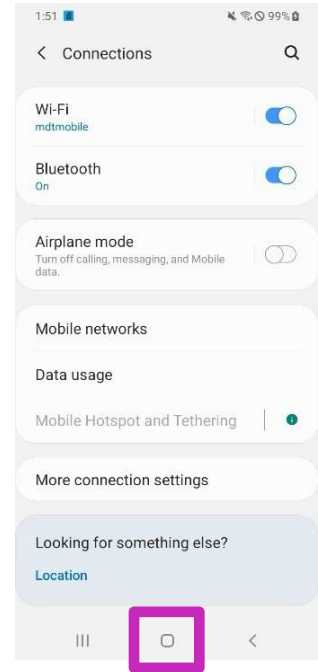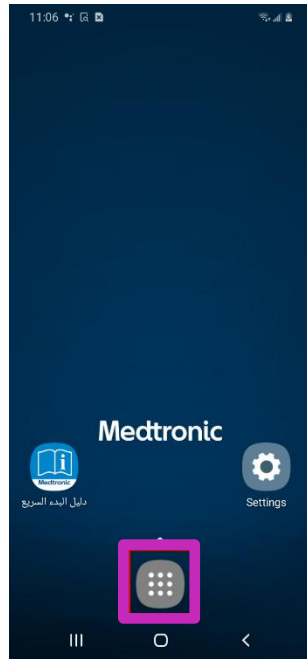


3 انقر فوق تطبيق Hub.

(قد تختلف أيقونة تطبيق Hub حسب عمر الهاتف المحمول).

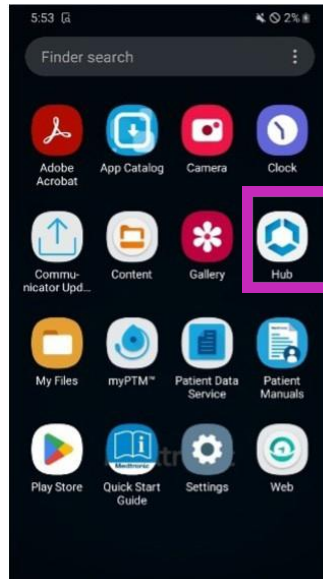


أو

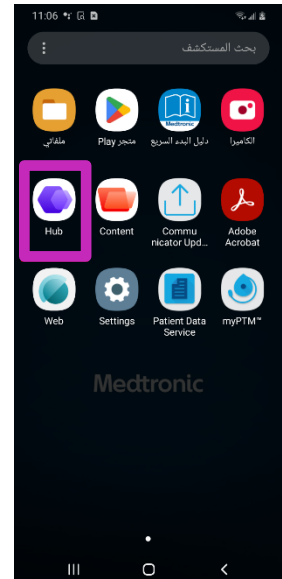


التعليمات الخاصة بهاتف Samsung A10e



حدد (All Apps) كل التطبيقات (ضمن Categories الفئات). قد تحتاج إلى التمرير إلى أسفل الشاشة.

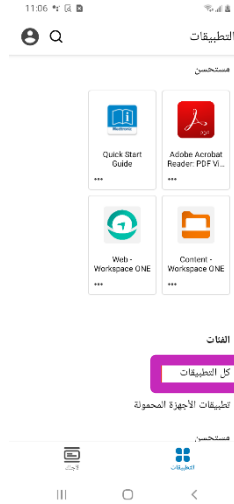

قم بتحديث التطبيقات المدرجة في Hub عن طريق التمرير لأسفل على شاشة Apps (التطبيقات).

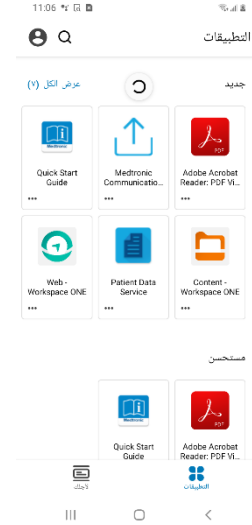

ابحث عن تطبيق **Patient Data Service** وانقر فوق **UPDATE** (تحديث).
(لا تنقر فوق زر **OPEN**) (فتح) بعد ذلك، وإلا فسيتم فتح الإصدار السابق من التطبيق.)



Patient Data Service
1.0.947 | الإصدار 13,5 ميغابايت



ابحث عن تطبيق **Medtronic Communication Manager** وانقر فوق **UPDATE** (تحديث).
(لا تنقر فوق زر **OPEN**) (فتح) بعد ذلك، وإلا فسيتم فتح الإصدار السابق من التطبيق.)



Medtronic Communication Manager
1.0.1325 | الإصدار 14,4 ميغابايت



ابحث عن تطبيق **myPTM** وانقر فوق **UPDATE** (تحديث).
(لا تنقر فوق زر **OPEN**) (فتح) بعد ذلك، وإلا فسيتم فتح الإصدار السابق من التطبيق.)




myPTM
2.0.3155 | الإصدار 40,3 ميغابايت




انتظر لمدة دقيقتين حتى تكتمل التحديثات.

التعليمات الخاصة بهاتف Samsung A10e

10 انقر فوق السهم الخلفي في الزاوية العلوية اليسرى.

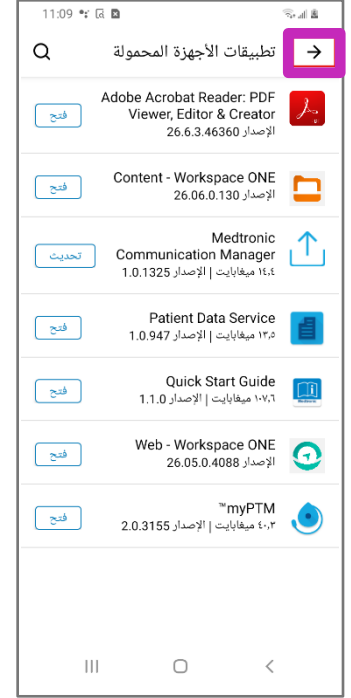


11 انقر فوق أيقونة الحساب في الزاوية العلوية اليمنى. قد تختلف الأدرف الموجودة في أيقونة الحساب باختلاف هاتفك المحمول.

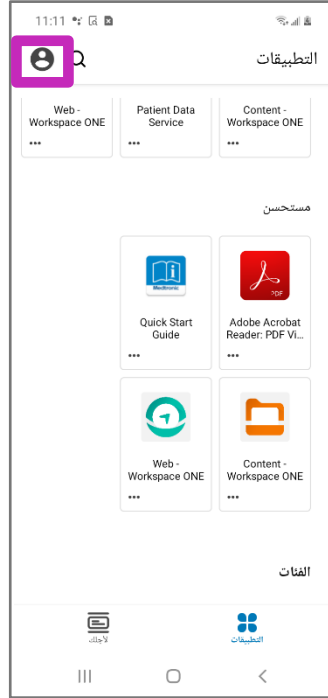

12 انقر فوق This Device (هذا الجهاز).




13 مرّر لأسفل الشاشة، وانقر فوق Sync device (مزامنة الجهاز). ستظهر عبارة "Checking for updates" (جاري البحث عن تحديثات) في أسفل الشاشة.

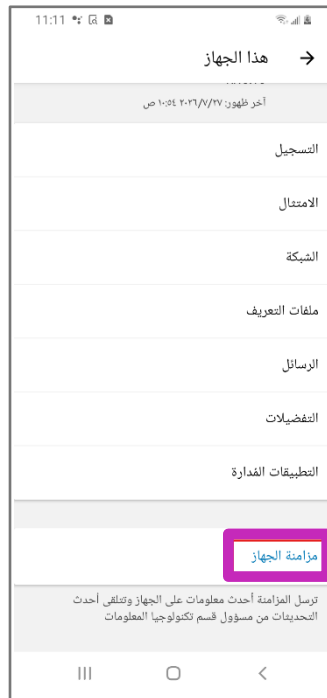

التعليمات الخاصة بهاتف Samsung A10e



14 مرّر للوصول إلى أعلى الشاشة، وتأكد من أن تاريخ ووقت **Last seen** (آخر ظهور) قد تم تحديثهما إلى التاريخ والوقت الحاليين. إذا لم يتم تحديثها، فكرر الخطوة رقم 13.

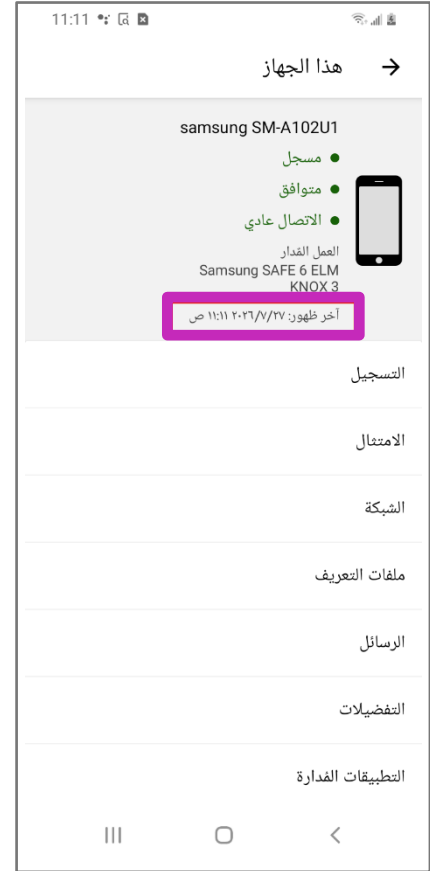


التعليمات الخاصة بهاتف Samsung A10e

الجزء 3: تأكيد تحديث التطبيقات


1

قم بالعودة إلى الشاشة الرئيسية

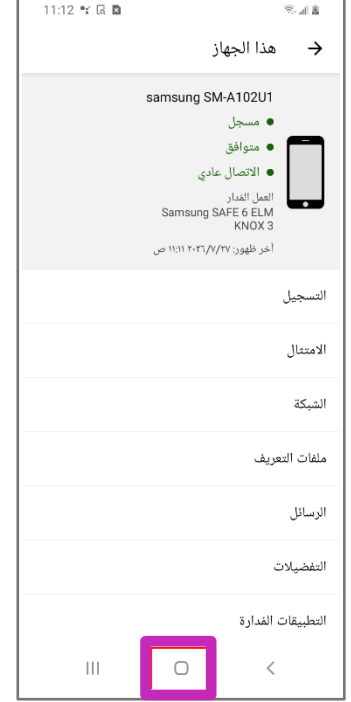

2

انقر فوق تطبيق myPTM.

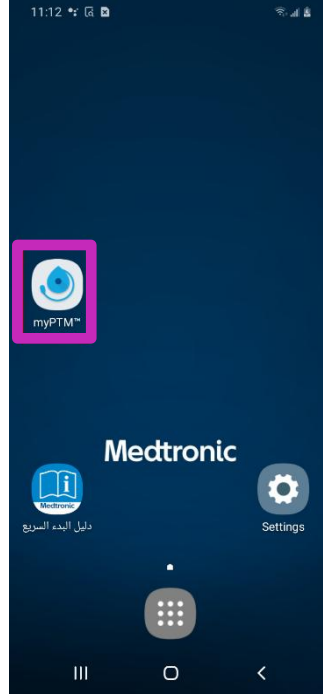


3

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للاتصال بالمضخة حتى تصل إلى الشاشة الرئيسية.


تأكد من تشغيل جهاز الاتصال ووضعه مباشرةً فوق المضخة.

4

انقر فوق الأيقونة الموجودة في من الشاشة.

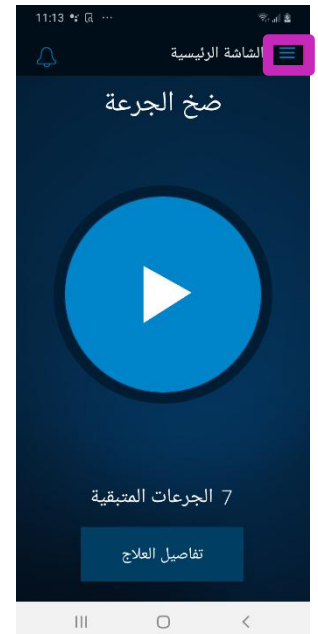

...

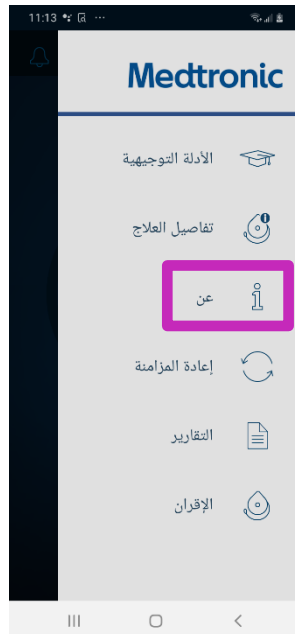

التعليمات الخاصة بهاتف Samsung A10e



إذا تطابقت أرقام الإصدارات، فهذا يعني أن التحديث قد اكتمل بنجاح، ويمكنك استخدام الهاتف المحمول كما تفعل عادةً.

إذا لم يتطابق أي من أرقام الإصدارات، فارجع إلى الجزء 2: تحديث التطبيقات وقم بتحديث إصدارات التطبيق مرة أخرى حسب الحاجة.

اكتمل التحديث

6

تأكد من أنه يظهر:

a. الإصدار: 2.0.3155

b. Communication Manager: 1.0.1325

c. Patient Data Service: 1.0.947





التعليمات الخاصة بهاتف Samsung J3

الجزء 1: الاتصال بشبكة Wi-Fi

انقر فوق **Connections** (الاتصالات) الرئيسية الخاصة

1 انقر فوق أيقونة **Settings** (الإعدادات) على الشاشة بالهاتف المحمول.

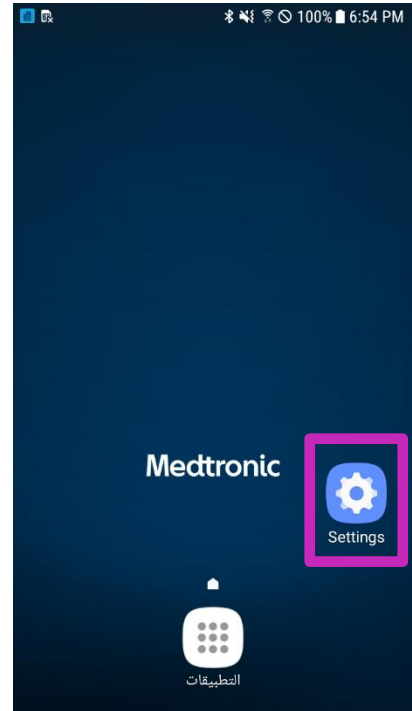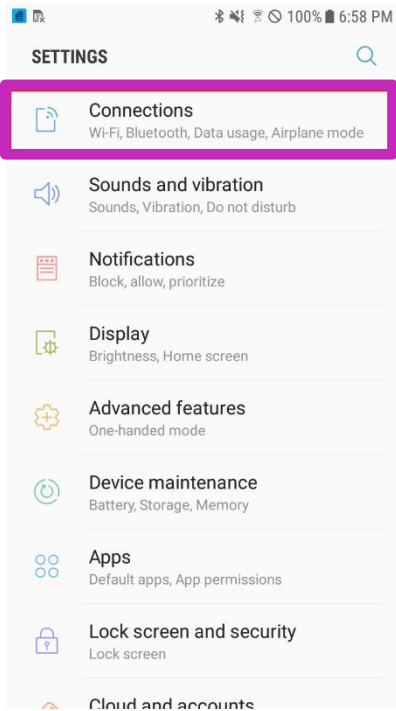


3 ابحث عن **شبكة Wi-Fi** وانقر فوق مفتاح التبديل لتشغيله، بحيث يتحول إلى اللون الأزرق.



4 انقر فوق الشبكة اللاسلكية التي ترغب في استخدامها. انقر فوق **Connect**

5 (توصيل).

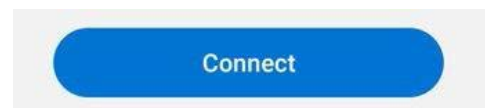

التعليمات الخاصة بهاتف Samsung J3




**** يجب اتباع التعليمات بهذا الترتيب ****



الجزء 2: تحديث التطبيقات


2 انتقل إلى قائمة التطبيقات من الشاشة الرئيسية.

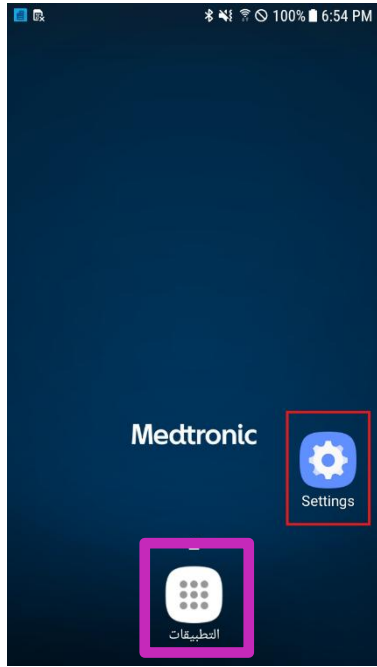

1 عد إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على زر (Home) الشاشة الرئيسية).



3 انقر فوق تطبيق Hub.

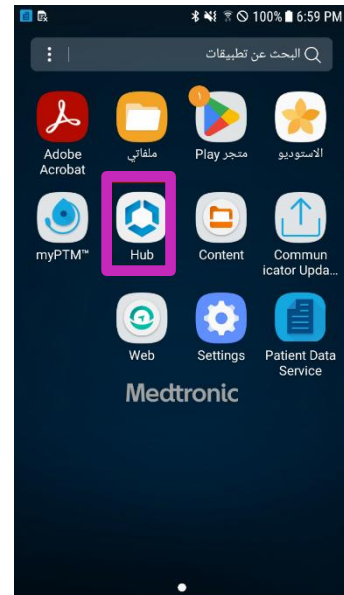


التعليمات الخاصة بهاتف Samsung J3



حدد (All Apps) كل التطبيقات (ضمن Categories


الفئات). قد تحتاج إلى التمرير إلى أسفل الشاشة.

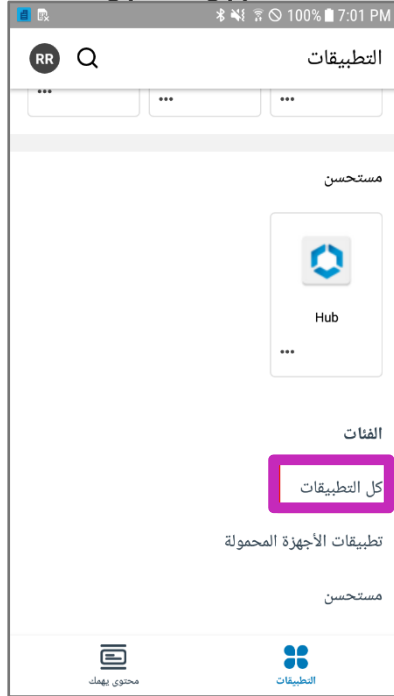

عن طريق

قم بتحديث التطبيقات المدرجة في Hub
التمرير لأسفل على شاشة (Apps) التطبيقات.

4

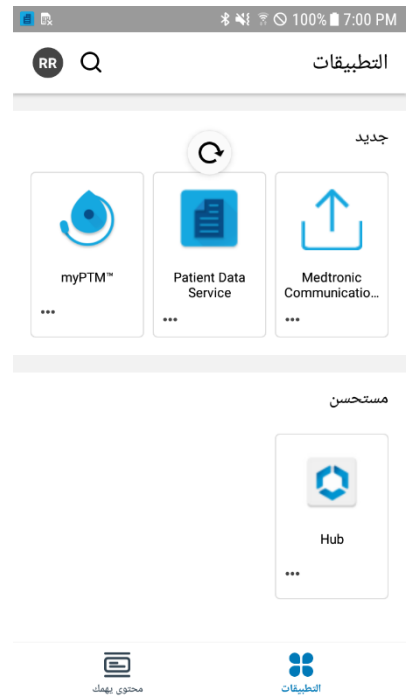


التعليمات الخاصة بهاتف Samsung J3



6

ابحث عن تطبيق **Intelligent Hub** وانقر فوق **UPDATE** (تحديث).
إذا لم يظهر هذا التطبيق ضمن قائمتك، فلا داعي للتحديث. انتقل إلى الخطوة 7.
(لا تنقر فوق زر **OPEN**) (فتح) بعد ذلك، وإلا فسيتم فتح الإصدار السابق من التطبيق.

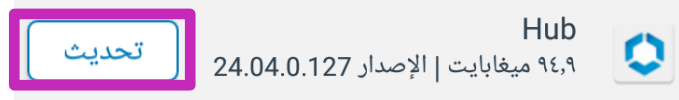


7

ابحث عن تطبيق **Patient Data Service** وانقر فوق **UPDATE** (تحديث).
(لا تنقر فوق زر **OPEN**) (فتح) بعد ذلك، وإلا فسيتم فتح الإصدار السابق من التطبيق.




8

ابحث عن تطبيق **Medtronic Communication Manager** وانقر فوق **UPDATE** (تحديث).
(لا تنقر فوق زر **OPEN**) (فتح) بعد ذلك، وإلا فسيتم فتح الإصدار السابق من التطبيق.

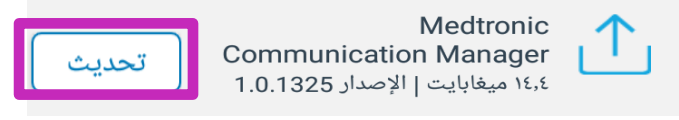

9

ابحث عن تطبيق **myPTM** وانقر فوق **UPDATE** (تحديث).
(لا تنقر فوق زر **OPEN**) (فتح) بعد ذلك، وإلا فسيتم فتح الإصدار السابق من التطبيق.

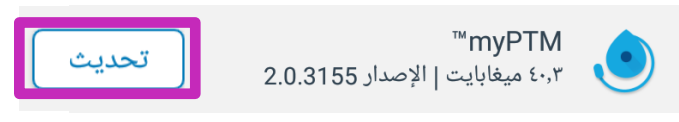



10

انتظر لمدة دقيقتين حتى تكتمل التحديثات.

التعليمات الخاصة بهاتف Samsung J3



12 انقر فوق أيقونة الحساب في الزاوية العلوية اليمنى. قد تختلف الأحرف الموجودة في أيقونة الحساب باختلاف هاتفك المحمول.

11 انقر فوق السهم الخلفي في الزاوية العلوية اليسرى.

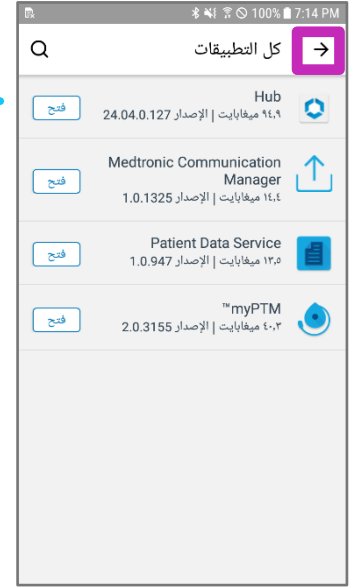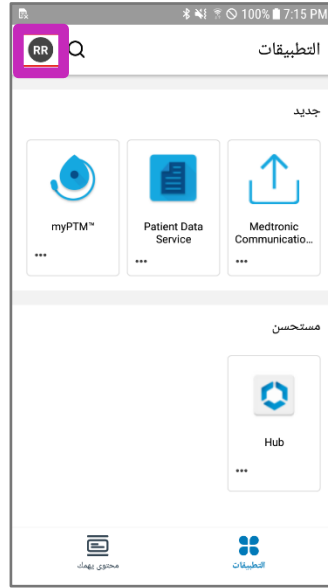

14 مرّر لأسفل الشاشة، وانقر فوق Sync device (مزامنة الجهاز). ستظهر عبارة "Checking for updates" (جاري البحث عن تحديثات) في أسفل الشاشة.

13 انقر فوق This Device (هذا الجهاز).

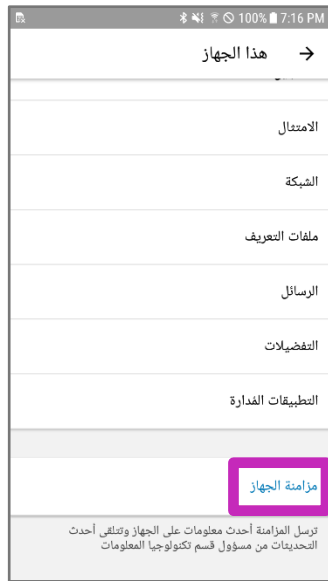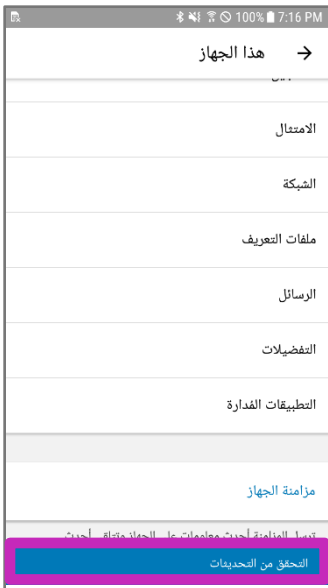


التعليمات الخاصة بهاتف Samsung J3



15

مرّر للوصول إلى أعلى الشاشة، وتأكد من أن تاريخ ووقت **Last seen** (آخر ظهور) قد تم تحديثهما إلى التاريخ والوقت الحاليين. إذا لم يتم تحديثهما، فكرر الخطوة رقم 14.

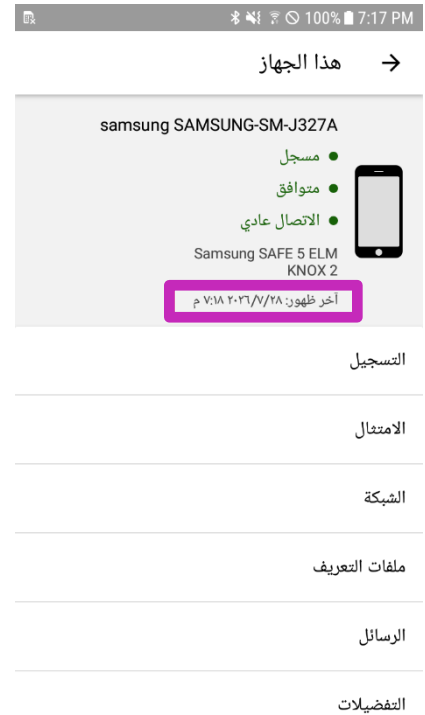


التعليمات الخاصة بهاتف Samsung J3

الجزء 3: تأكيد تحديث التطبيقات

1 عد إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على زر Home (الشاشة الرئيسية).



2 انقر فوق تطبيق myPTM.

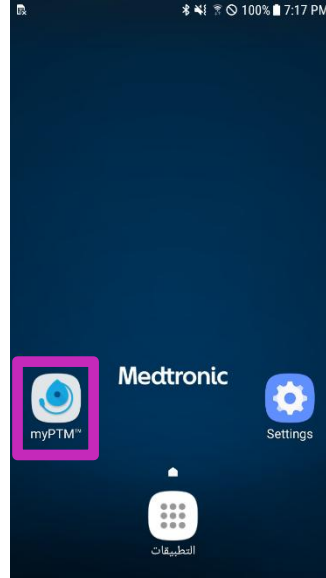


3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للاتصال بالمضخة حتى تصل إلى الشاشة الرئيسية.

تأكد من تشغيل جهاز الاتصال ووضعه مباشرةً فوق المضخة.

قد يحدث تحديث لجهاز الاتصال بناءً على عمر جهاز الاتصال الخاص بك.

4 انقر فوق الأيقونة الموجودة في من الشاشة.

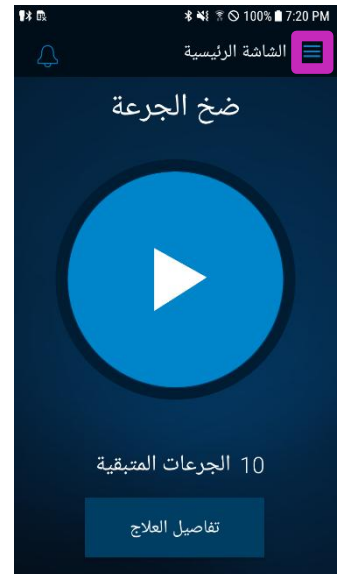

5 انقر فوق (عن) الزاوية العلوية اليمنى



التعليمات الخاصة بهاتف Samsung J3



إذا تطابقت أرقام الإصدارات، فهذا يعني أن التحديث قد اكتمل بنجاح، ويمكنك استخدام الهاتف المحمول كما تفعل عادةً.

إذا لم يتطابق أي من أرقام الإصدارات، فارجع إلى الجزء 2: تحديث التطبيقات وقم بتحديث إصدارات التطبيق مرة أخرى حسب الحاجة.


اكتمل التحديث

تأكد من أنه يظهر:

a. الإصدار: 2.0.3155

b. Communication Manager: 1.0.1325

c. Patient Data Service: 1.0.947

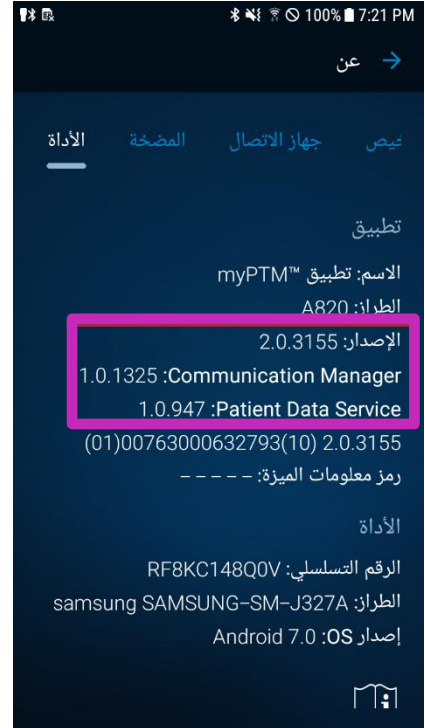

بيان مختصر:

لا ينبغي اعتبار هذه المادة المصدر الحصري للمعلومات، فهي لا تلغي المعلومات الواردة في أدلة استخدام الجهاز أو تحل محلها.

يُرجى ملاحظة أن الاستخدام المقصود للمنتج قد يختلف حسب الموافقات الجغرافية.

ارجع إلى أدلة استخدام الجهاز لمعرفة المعلومات المفصلة بخصوص الاستخدام المقصود، وعملية (الزراعة)، والمؤشرات، وموانع الاستخدام، والتحذيرات، والاحتياطات، والآثار السلبية المحتملة.

بالنسبة للأجهزة المتوافقة مع التصوير بالرنين المغناطيسي، راجع معلومات التصوير بالرنين المغناطيسي الواردة في أدلة استخدام الجهاز قبل إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي.

إذا كان الجهاز مؤهلاً لاستخدام النسخة الإلكترونية من إرشادات الاستخدام، يمكن العثور على إرشادات الاستخدام على موقع الويب الخاص بشركة Medtronic على الرابط manuals.medtronic.com.

يمكن الاطلاع على الأدلة باستخدام إصدار حالي من أي متصفح إنترنت رئيسي. وللحصول على أفضل النتائج، استخدم برنامج Adobe Acrobat® Reader مع المتصفح.

منتجات Medtronic المعروضة في الأسواق تتوافق مع التشريعات (إن وجدت) المتعلقة بالأجهزة الطبية. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع ممثل Medtronic المحلي و/أو زيارة مواقع الويب لشركة Medtronic.

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00