

Medtronic

Актуализация на софтуер на мобилно устройство чрез Wi-Fi

Подготовка

Захранване: Уверете се, че мобилното ви устройство е включено в електрическата мрежа или има повече от 35 процента захранване от батерията, и че комуникаторът ви е наличен и зареден, преди да инсталирате каквито и да било актуализации.

Wi-Fi: Уверете се, че използвате надеждна Wi-Fi мрежа, като например вашия домашен доставчик. Преди да започнете, трябва да имате налични име и парола за Wi-Fi мрежата.

Време: В зависимост от силата на вашата мрежа, този процес може да отнеме до 30 минути.

Модел на мобилното устройство: Определете кой модел мобилно устройство имате, като използвате снимките по-долу. Мобилното устройство Samsung J3 има физически бутон Home (Начало) в централната долна част.



Samsung A10e

Ако имате мобилно устройство Samsung A10e, вижте инструкциите на страница 3.

[Щракнете тук за Samsung A10e](#)



Физически бутон
Home (Начало)

Samsung J3

Ако имате мобилно устройство Samsung J3, вижте инструкциите на страница 10.

[Щракнете тук за Samsung J3](#)




Съдържание

Подготовка	1
Инструкции за мобилно устройство Samsung A10e	3
Част 1: Свързване към Wi-Fi	3
Част 2: Актуализация на приложения	4
Част 3: Потвърждаване на актуализацията на приложенията	8
Инструкции за мобилно устройство Samsung J3	10
Част 1: Свързване към Wi-Fi	10
Част 2: Актуализация на приложения	11
Част 3: Потвърждаване на актуализацията на приложенията	16
Кратко изявление	18




Свързване към Wi-Fi

1 Докоснете иконата **Settings** (Настройки) на началния екран на вашето мобилно устройство.

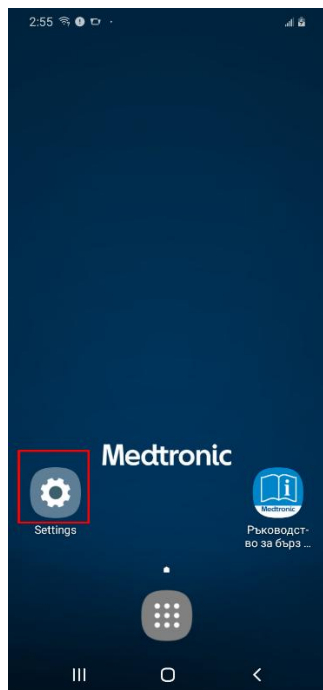

2 Докоснете **Connections** (Връзки).

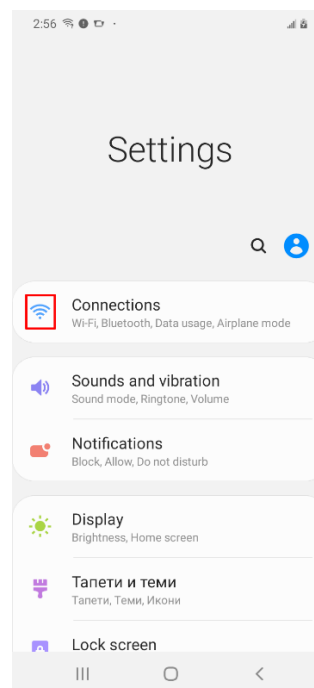


3 Намерете **Wi-Fi** и докоснете превключвателя, така че да се включи и да е в синьо.



4 Докоснете безжичната мрежа, която желаете да използвате.

5 Докоснете **Connect** (Свързване).

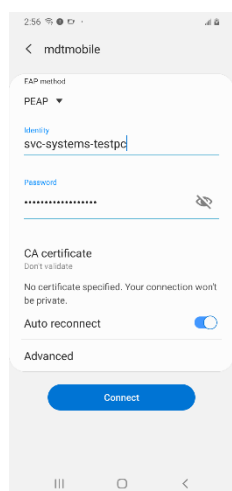




**** Инструкциите ТРЯБВА да се спазват в този ред ****




Част 2: Актуализация на приложения

1 Връщане към началния екран

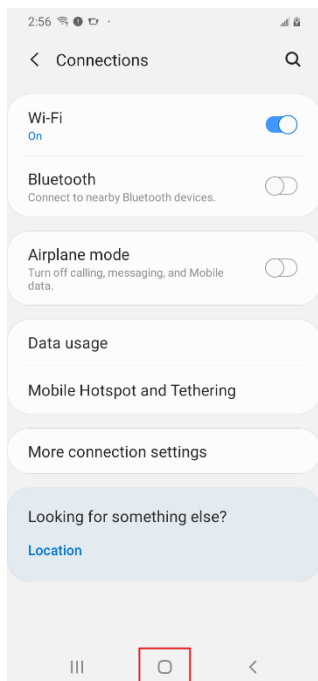


2 Отидете в менюто с приложения от началния екран.

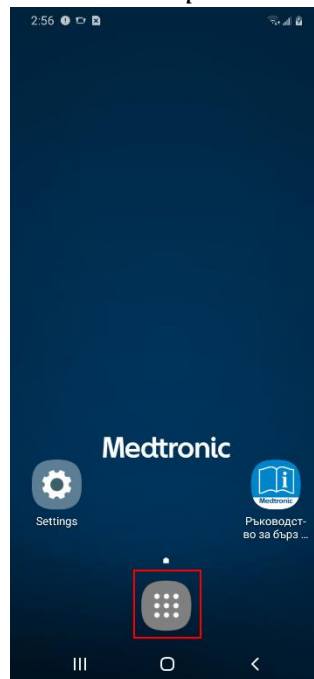

3 Докоснете приложението *Hub*.


(Иконата за приложението *Hub* може да е различна в зависимост от модела на мобилното ви устройство.)

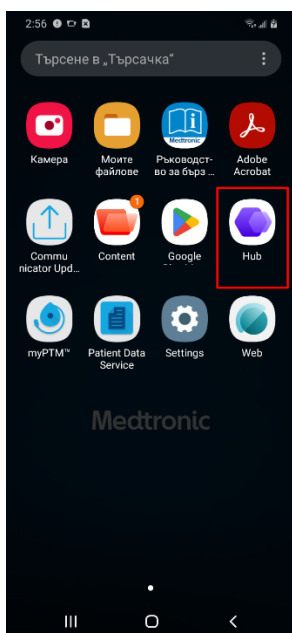


Инструкции за мобилно устройство Samsung A10e



Обновете приложенията, изброени в Hub, като плъзнете надолу екрана с приложения.


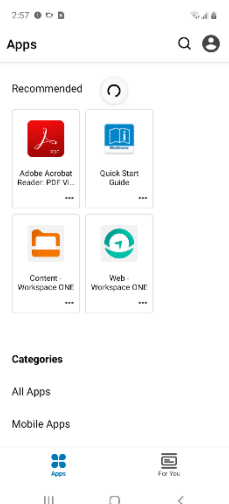


Изберете All Apps (Всички приложения) в Categories (Категории). Може да се наложи да превъртите до долната част на екрана.

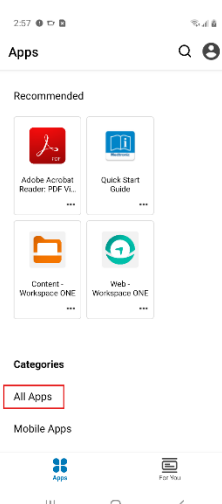



6

Намерете приложението Patient Data Service и докоснете UPDATE (Актуализация). (След това не докосвайте OPEN (Отваряне) или ще се отвори предишната версия на приложението.)

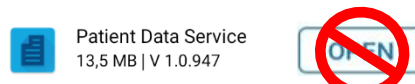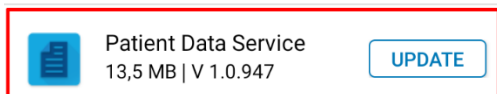



7

Намерете приложението Medtronic Communication Manager и докоснете UPDATE (Актуализация). (След това не докосвайте OPEN (Отваряне) или ще се отвори предишната версия на приложението.)

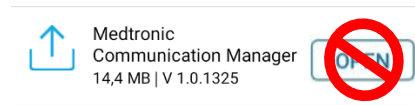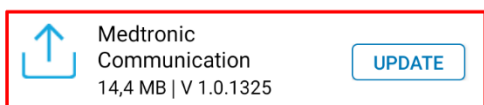

8

Намерете приложението myPTM и докоснете UPDATE (Актуализация). (След това не докосвайте OPEN (Отваряне) или ще се отвори предишната версия на приложението.)

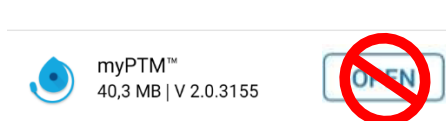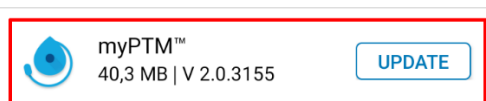

9


Изчакайте 2 минути, докато актуализациите приключат.

Инструкции за мобилно устройство Samsung A10e




Докоснете стрелката назад в горния ляв ъгъл.

10

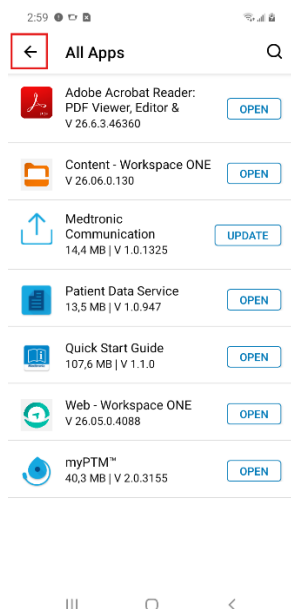


Докоснете иконата на акаунта в горния десен ъгъл. Буквите в иконата на акаунта може да се различават в зависимост от вашето мобилно устройство.

11

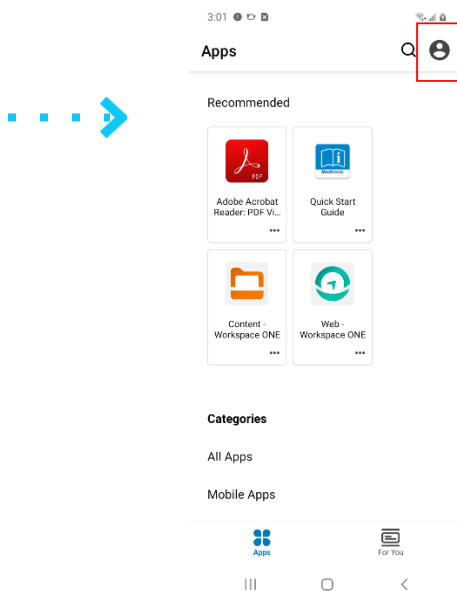


Докоснете *This Device* (Това устройство).

12

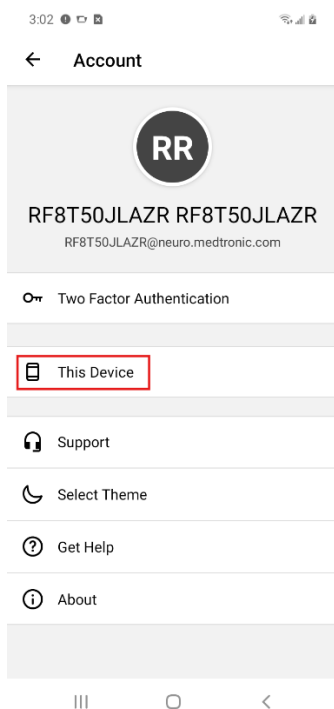

Превъртете до долната част на екрана и докоснете *Sync device* (Синхронизиране на устройство). В долната част на екрана ще се появи „Checking for updates“ (Проверка за актуализации).


13

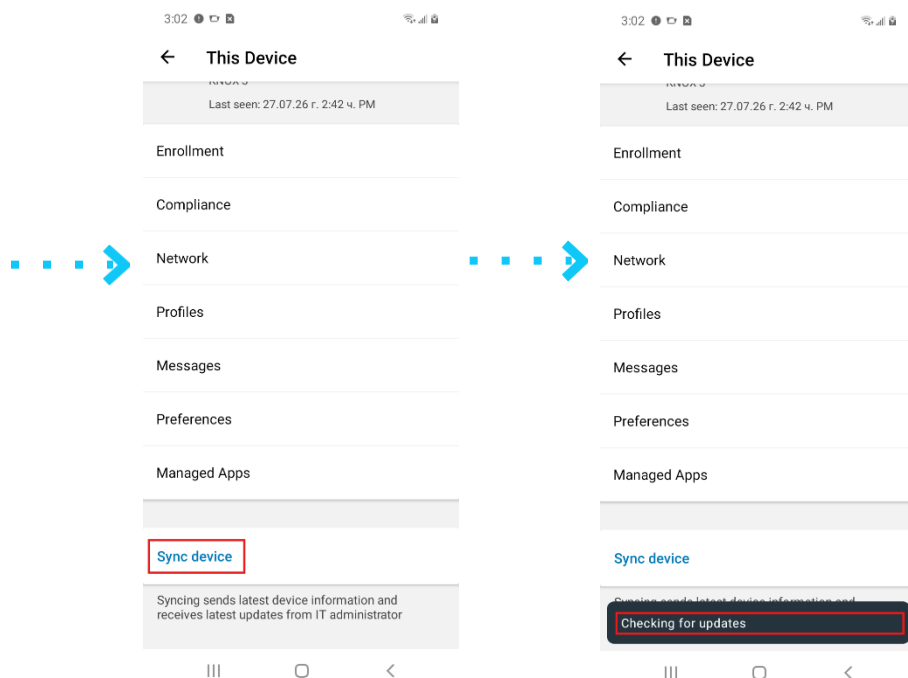

Инструкции за мобилно устройство Samsung A10e




Превъртете обратно до горната част на екрана и потвърдете, че датата и часът на Last seen (последния преглед) са актуализирани до текущата дата и час. Ако не са актуализирани, повторете стъпка 13.

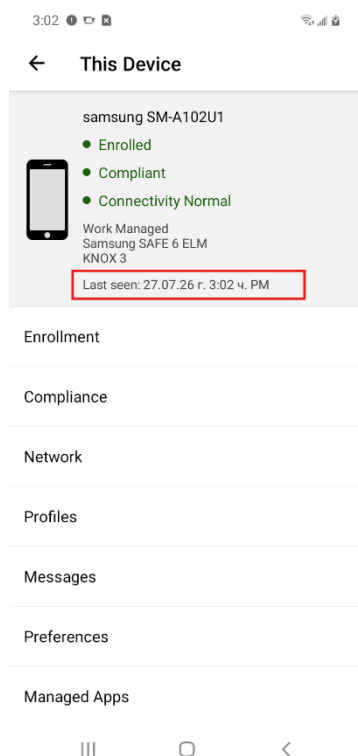




Част 3: Потвърждаване на актуализацията на приложението

1 Връщане към началния екран

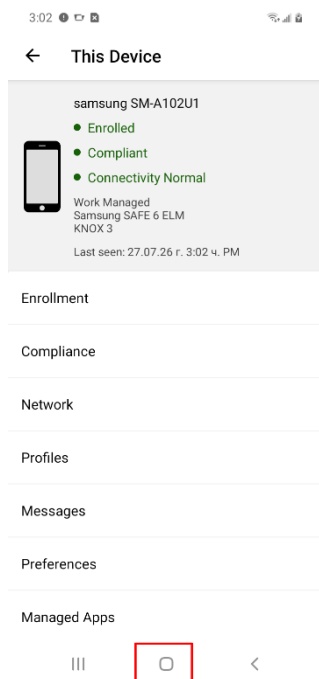

2 Докоснете приложението myPTM.

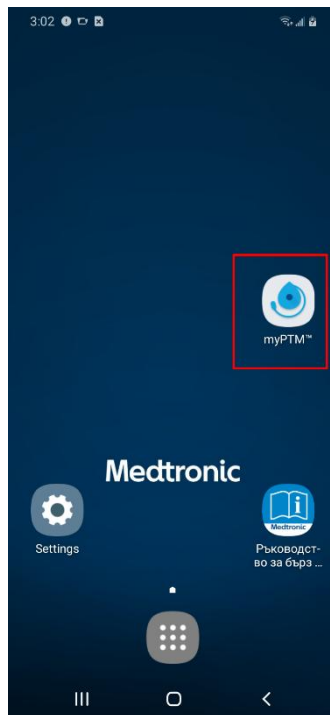


3 Следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете с помпата, докато стигнете до началния екран.

Уверете се, че вашият комуникатор е включен и поставен директно върху помпата.

4 Докоснете иконата на менюто в горния ляв ъгъл на екрана.




5 Докоснете About (Относно)

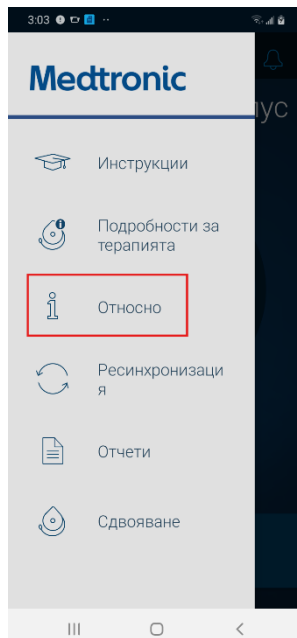



Потвърдете, че показва:

- а. Версия: 2.0.3155
- б. Communication Manager: 1.0.1325
- с. Patient Data Service: 1.0.947

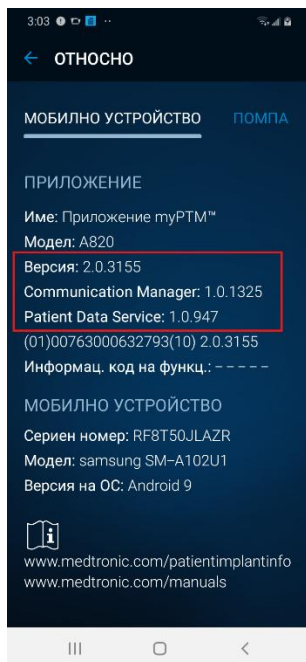

Ако номерата на версиите съвпадат, актуализацията е завършена успешно и можете да използвате мобилното си устройство както обикновено.

Ако някой от номерата на версиите не съвпада, върнете се към Част 2: Актуализация на приложения и актуализирайте версиите на приложенията отново, ако е необходимо.

Завършване на актуализацията


Инструкции за мобилно устройство Samsung J3




Физически
бутон Home
(Начало)

Част 1: Свързване към Wi-Fi



- 1 Докоснете иконата **Settings** (Настройки) на началния екран на вашето мобилно устройство.

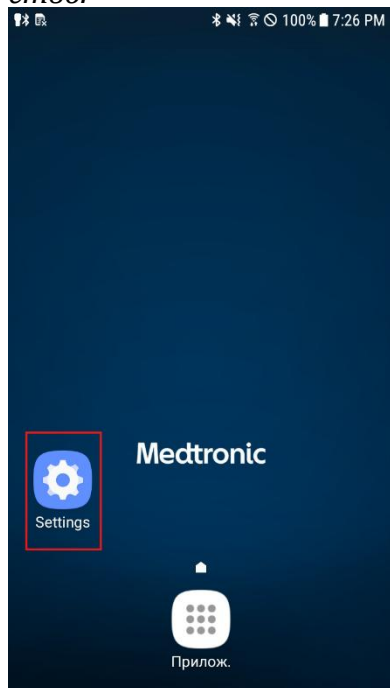

- 2 Докоснете **Connections** (Връзки)

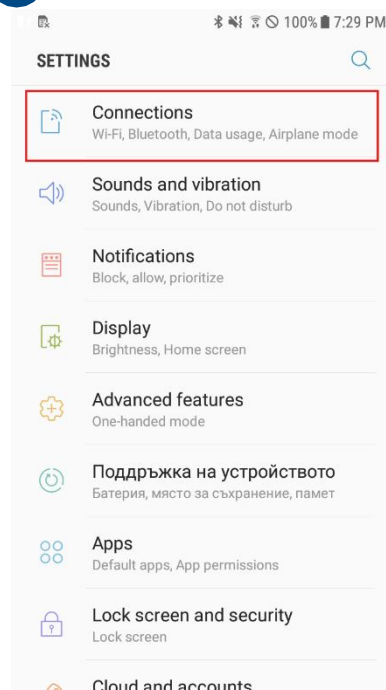


- 3 Намерете **Wi-Fi** и докоснете превключвателя, така че да се включи и да е в синьо

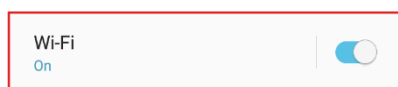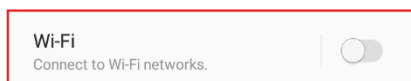

- 4 Докоснете безжичната мрежа, която желаете да използвате.

- 5 Докоснете **Connect** (Свързване)

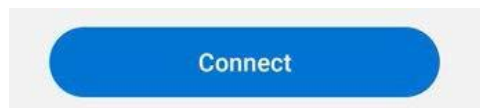

Инструкции за мобилно устройство Samsung J3



**** Инструкциите ТРЯБВА да се спазват в този ред ****




Част 2: Актуализация на приложения

- 1 Върнете се на началния екран, като натиснете бутона *Home* (Начало).




2

- Отидете в менюто с приложения от началния екран.

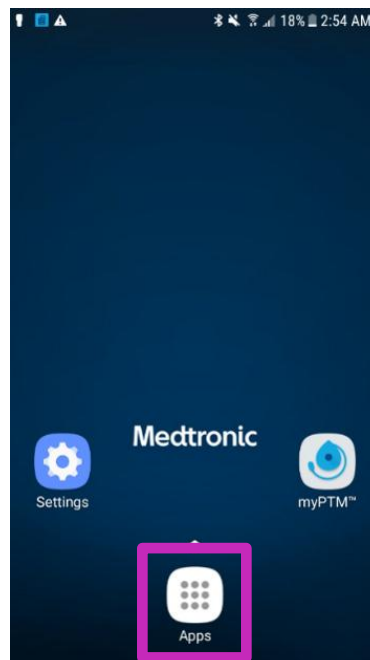

- 3 Докоснете приложението *Hub*.


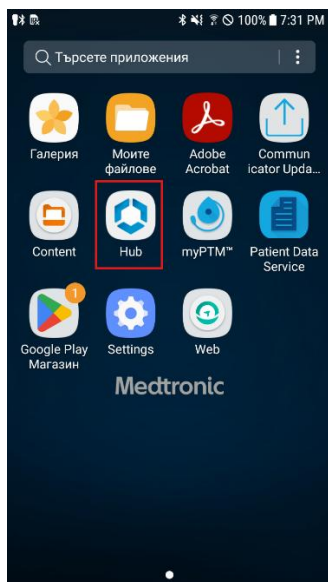


Инструкции за мобилно устройство Samsung J3



Обновете приложенията, изброени в Hub, като плъзнете надолу екрана с приложения.

Изберете All Apps (Всички приложения) в Categories (Категории). Може да се наложи да превъртите до долната част на екрана.

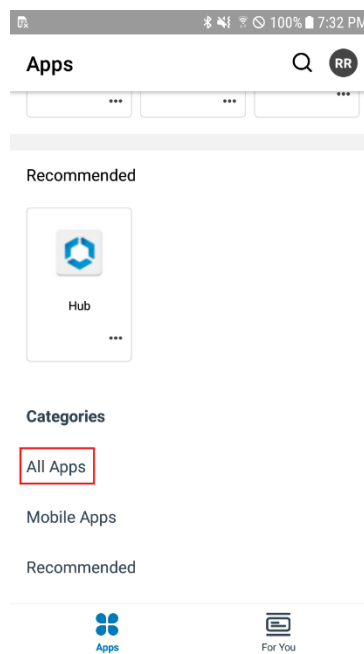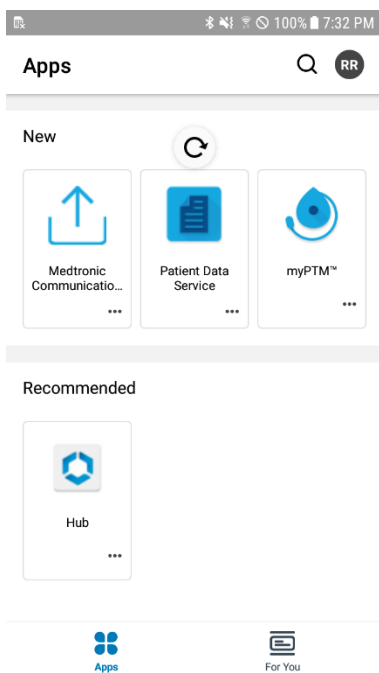

Инструкции за мобилно устройство Samsung J3



Намерете приложението **Intelligent Hub** и докоснете **UPDATE** (Актуализация). Ако не виждате това приложение в списъка си, не е необходима актуализация. Преминете към стъпка 7. (След това не докосвайте **OPEN** (Отваряне) или ще се отвори предишната версия на приложението.)



Intelligent Hub -
Workspace ONE
97.2 MB | V 24.04.0.127

UPDATE



7 Намерете приложението **Patient Data Service** и докоснете **UPDATE** (Актуализация). (След това не докосвайте **OPEN** (Отваряне) или ще се отвори предишната версия на приложението.)



Patient Data Service
13.5 MB | V 1.0.947

UPDATE



8 Намерете приложението **Medtronic Communication Manager** и докоснете **UPDATE** (Актуализация). (След това не докосвайте **OPEN** (Отваряне) или ще се отвори предишната версия на приложението.)



Medtronic
Communication
14.4 MB | V 1.0.1325

UPDATE



9 Намерете приложението **myPTM** и докоснете **UPDATE** (Актуализация). (След това не докосвайте **OPEN** (Отваряне) или ще се отвори предишната версия на приложението.)



myPTM™
40.3 MB | V 2.0.3155

UPDATE




10 Изчакайте 2 минути, докато актуализациите приключат.


Инструкции за мобилно устройство Samsung J3



Докоснете стрелката назад в горния ляв ъгъл.

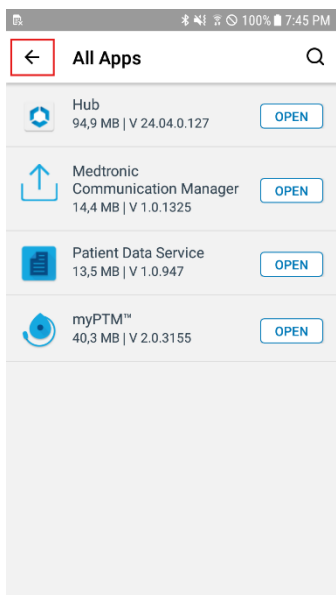


Докоснете иконата на акаунта в горния десен ъгъл. Буквите в иконата на акаунта може да се различават в зависимост от вашето мобилно устройство.

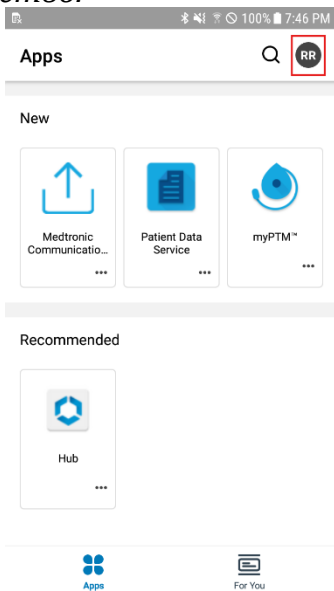



13

Докоснете *This Device* (Това устройство).

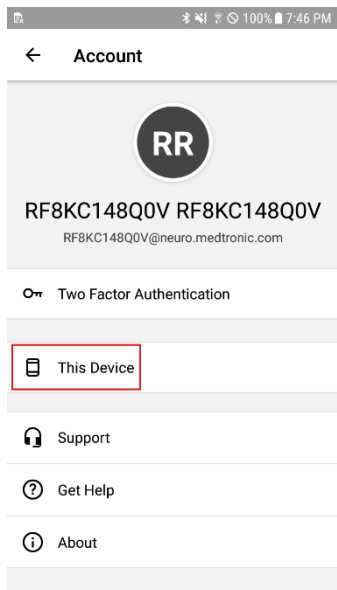

14


Превъртете до долната част на екрана и докоснете *Sync device* (Синхронизиране на устройство). В долната част на екрана ще се появи „Checking for updates“ (Проверка за актуализации).

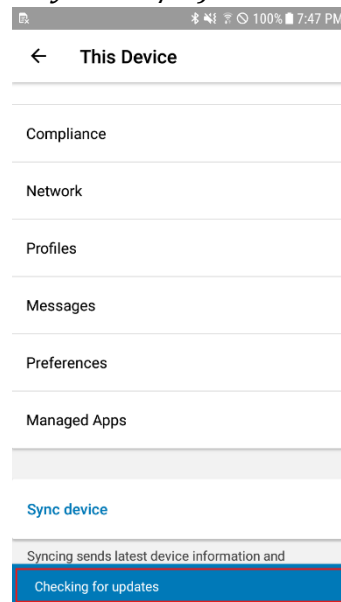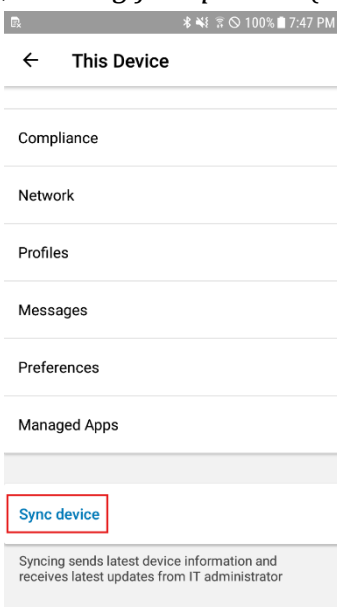

Инструкции за мобилно устройство Samsung J3



Превъртете обратно до горната част на екрана и потвърдете, че датата и часът на *Last seen* (последния преглед) са актуализирани до текущата дата и час. Ако не са актуализирани, повторете стъпка 14.

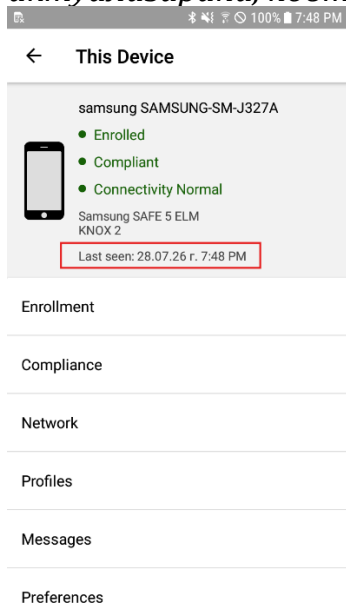




Част 3: Потвърждаване на актуализацията на приложението

- 1 Върнете се на началния екран, като натиснете бутона Home (Начало).



- 2 Докоснете приложението myPTM.

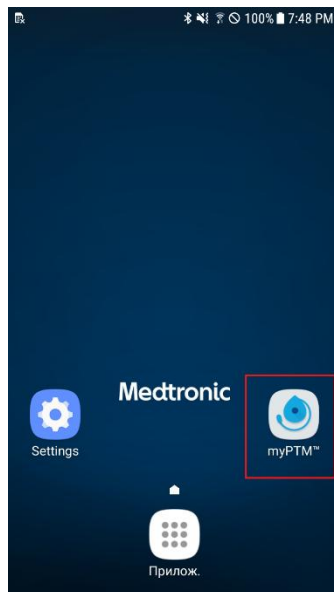


- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да се свържете с помпата, докато стигнете до началния екран.


Уверете се, че вашият комуникатор е включен и поставен директно върху помпата.

В зависимост от модела на вашия комуникатор може да се наложи актуализация на комуникатора.

- 4 Докоснете иконата на менюто в горния ляв ъгъл на екрана.

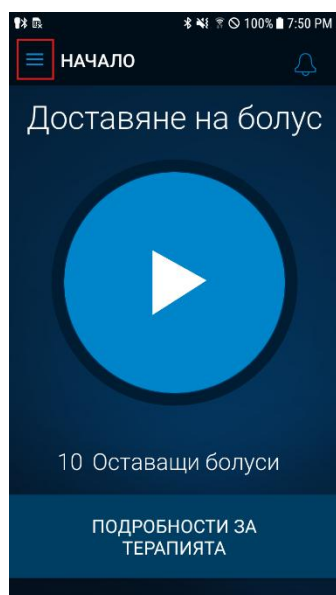


- 5 Докоснете About (Относно)

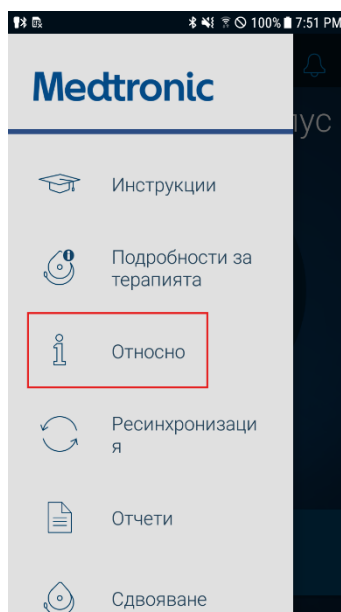



Потвърдете, че показва:

- a. Версия: 2.0.3155
- b. Communication Manager: 1.0.1325
- c. Patient Data Service: 1.0.947

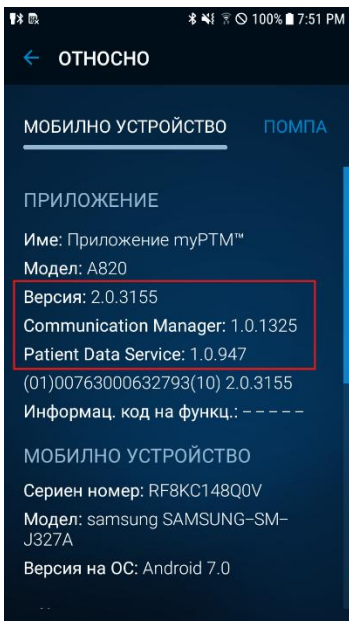

Ако номерата на версиите съвпадат, актуализацията е завършена успешно и можете да използвате мобилното си устройство както обикновено.

Ако някой от номерата на версиите не съвпада, върнете се към Част 2: Актуализация на приложения и актуализирайте версиите на приложенията отново, ако е необходимо.

Завършване на актуализацията

Кратко изявление

Кратко изявление:

Този документ не трябва да се счита за изключителен източник на информация, той не заменя и не замества информацията, съдържаща се в ръководството(ата) на устройството.

Моля, имайте предвид, че предназначението на даден продукт може да варира в зависимост от географските одобрения.

Вижте ръководството на устройството за подробна информация относно предназначението, процедурата (по имплантиране), показанията, противопоказанията, предупрежденията, предпазните мерки и възможните нежелани реакции.

За устройство(а), съвместимо(и) с ЯМР, вижте информацията относно ЯМР в ръководството(ата) преди извършване на ЯМР.

Ако дадено устройство отговаря на условията за използване на електронни ИЗУ, инструкции за употреба могат да бъдат намерени на уебсайта на Medtronic manuals. medtronic.com.

Ръководствата могат да бъдат прегледани в актуална версия на всеки основен интернет браузър. За най-добри резултати използвайте Adobe Acrobat® Reader с браузъра.

Пуснатите на пазарите продукти на Medtronic съответстват на законодателството (ако е приложимо) относно медицинските устройства. За допълнителна информация се свържете със своя местен представител на Medtronic и/или направете справка с уебсайтовете на Medtronic.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland Medtronic
Limited Building 9 Croxley Park
Hatters Lane Watford Herts WD18
8WW www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004