

Medtronic

Aktualizace softwaru mobilního ovladače pomocí sítě Wi-Fi

Příprava

Napájení: Před instalací aktualizací se ujistěte, že je mobilní ovladač zapojen do sítě nebo má baterii nabitou na více než 35 procent a že je komunikátor dostupný a nabitý.

Wi-Fi: Ujistěte se, že používáte důvěryhodnou síť Wi-Fi, např. od svého domácího poskytovatele. Než začnete, připravte si název a heslo sítě Wi-Fi.

Doba trvání: V závislosti na síle sítě může tento proces trvat až 30 minut.

Model mobilního ovladače: Pomocí obrázků níže zjistěte, jaký model mobilního ovladače máte. Mobilní ovladač Samsung J3 má fyzické tlačítko Home (Domů) ve spodní části uprostřed.



Samsung A10e

Pokud máte mobilní ovladač Samsung A10e, přečtěte si pokyny na straně 3.

[Pro Samsung A10e klikněte sem.](#)



Fyzické tlačítko Home (Domů)

Samsung J3

Pokud máte mobilní ovladač Samsung J3, přečtěte si pokyny na straně 10.

[Pro Samsung J3 klikněte sem.](#)

Obsah



Příprava.....	1
Pokyny pro mobilní ovladač Samsung A10e	3
Část 1: Připojení k Wi-Fi	3
Část 2: Aktualizace aplikací	4
Část 3: Potvrďte, že jsou aplikace aktualizovány	8
Pokyny pro mobilní ovladač Samsung J3.....	10
Část 1: Připojení k Wi-Fi.....	10
Část 2: Aktualizace aplikací.....	11
Část 3: Potvrďte, že jsou aplikace aktualizovány	16
Krátké prohlášení.....	18

Pokyny pro mobilní ovladač Samsung A10e



Část 1: Připojení k Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce mobilního ovladače klepněte na ikonu **Settings (Nastavení)**.
- 2 Klepněte na **Connections (Připojení)**.

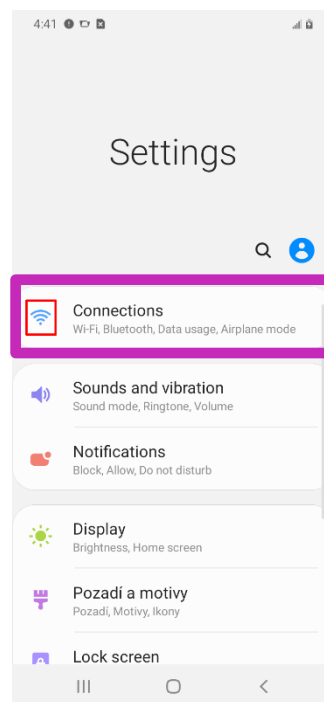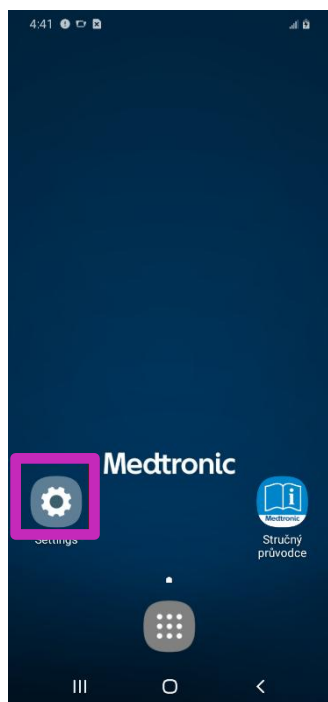


- 3 Najděte **Wi-Fi** a klepněte na přepínač, aby se zapnul a zmodral.



- 4 Klepněte na bezdrátovou síť, kterou chcete používat.

- 5 Vyberte možnost **Connect (Připojit)**.

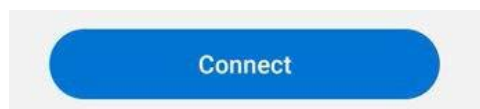



Pokyny pro mobilní ovladač Samsung A10e




**** Pokyny MUSÍ být dodrženy v tomto pořadí. ****

Část 2: Aktualizace aplikací


- 1 Vraťte se na domovskou obrazovku.
- 2 Přejděte z domovské obrazovky do seznamu aplikací.

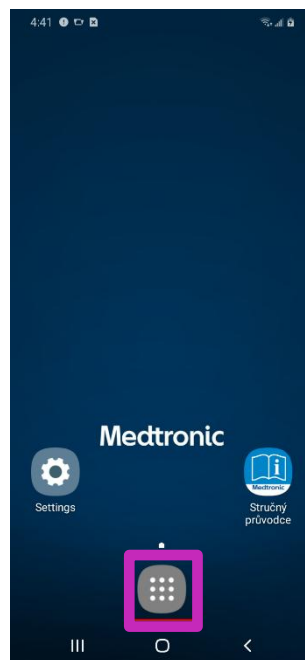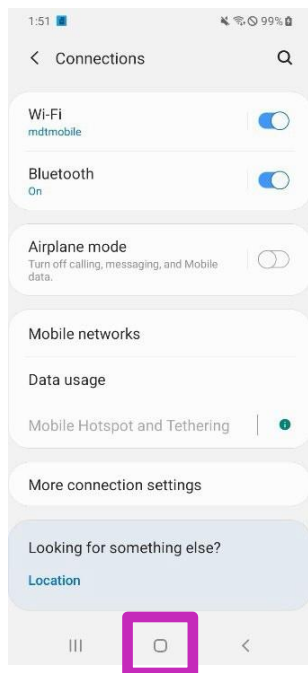

- 3 Klepněte na aplikaci **Hub**.
(Ikona aplikace Hub se může lišit v závislosti na stáří vašeho mobilního ovladače.)

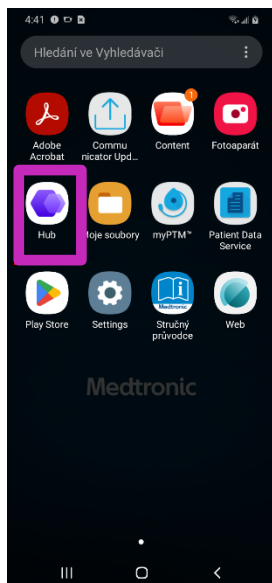


NEBO

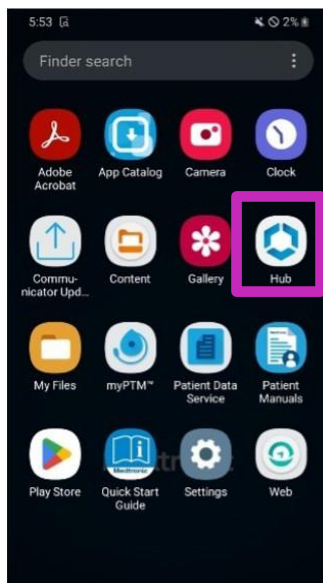


Pokyny pro mobilní ovladač Samsung A10e



- 4 Aktualizujte seznam aplikací uvedený v Hubu potažením prstem dolů na obrazovce Apps (Aplikace).

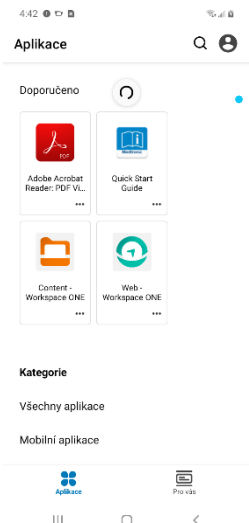

- 5 Vyberte možnost **All Apps (Všechny aplikace)** v části Categories (Kategorie). Možná budete muset posunout obrazovku do spodní části okna.

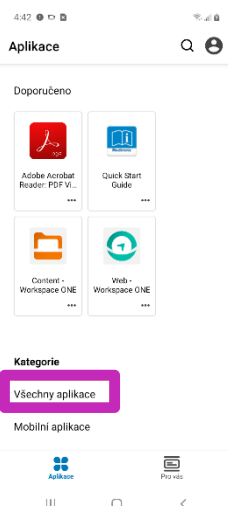

- 6 Vyhledejte aplikaci **Patient Data Service** a klepněte na **UPDATE (AKTUALIZACE)**.
(Neklepejte poté na **OPEN (OTEVŘÍT)**, protože se otevře předchozí verze aplikace.)



Patient Data Service
13.5 MB | V 1.0.947

AKTUALIZACE



- 7 Vyhledejte aplikaci **Medtronic Communication Manager** a klepněte na **UPDATE (AKTUALIZACE)**.

(Neklepejte poté na **OPEN (OTEVŘÍT)**, protože se otevře předchozí verze aplikace.)



Medtronic
Communication
14.4 MB | V 1.0.1325

AKTUALIZACE



- 8 Vyhledejte aplikaci **myPTM** a klepněte na **UPDATE (AKTUALIZACE)**.
(Neklepejte poté na **OPEN (OTEVŘÍT)**, protože se otevře předchozí verze aplikace.)



myPTM™
40.3 MB | V 2.0.3155

AKTUALIZACE




- 9 Počkejte 2 minuty, než se aktualizace dokončí.


Pokyny pro mobilní ovladač Samsung A10e




- 10 Klepněte na šipku zpět v levém horním rohu.

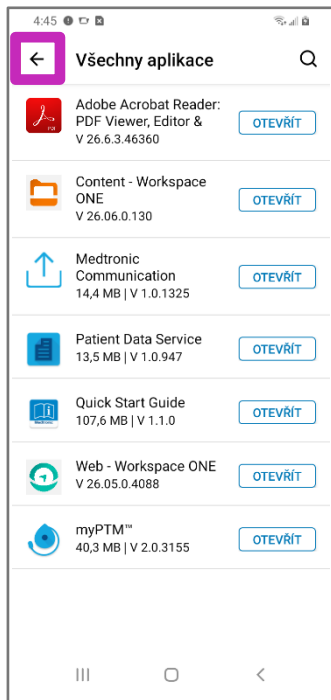



- 11 Klepněte na ikonu účtu v pravém horním rohu. Písmena v ikoně účtu se mohou u vašeho mobilního ovladače lišit.

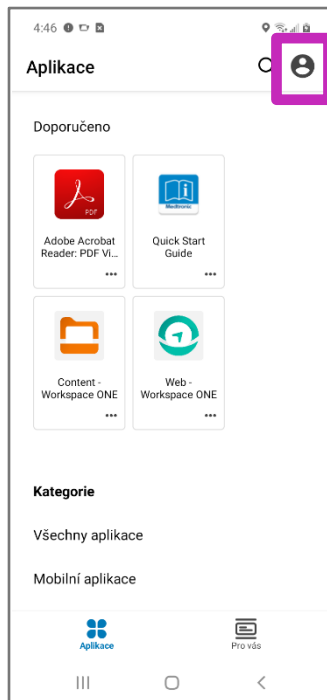

- 12 Klepněte na **This Device (Toto zařízení)**.

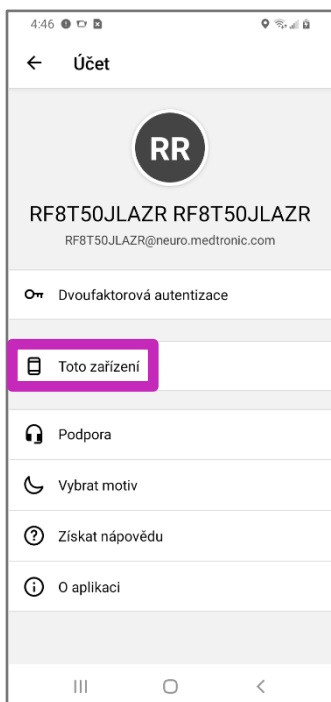


- 13 Přejděte do dolní části okna a klepněte na **Sync device (Synchronizace zařízení)**. Ve spodní části obrazovky se zobrazí hlášení „Checking for updates (Probíhá vyhledávání aktualizací)“.

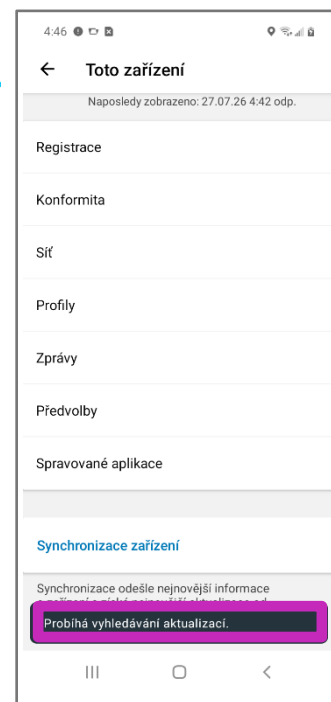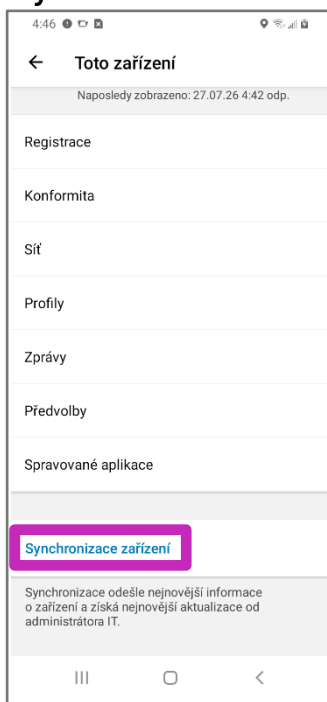

Pokyny pro mobilní ovladač Samsung A10e



- 14 Přejděte zpět na horní část obrazovky a potvrďte, že datum a čas údaje **Last seen (Naposledy zobrazeno)** byly aktualizovány na aktuální datum a čas. Pokud nedošlo k aktualizaci, opakujte krok 13.

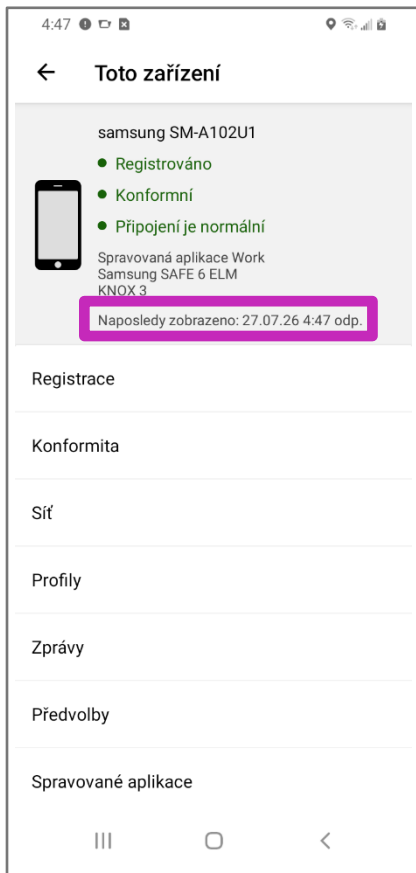


Pokyny pro mobilní ovladač Samsung A10e




Část 3: Potvrďte, že jsou aplikace aktualizovány

- 1 Vraťte se na domovskou obrazovku.

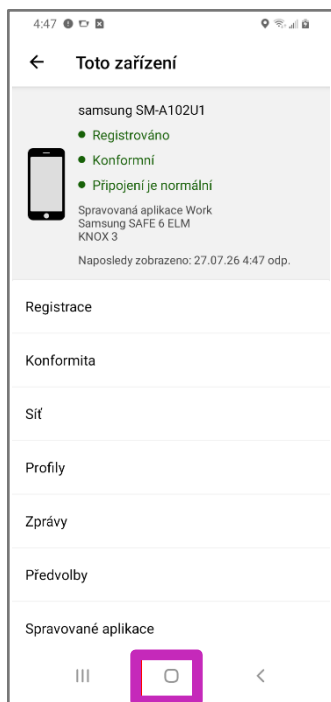

- 2 Klepněte na aplikaci myPTM.

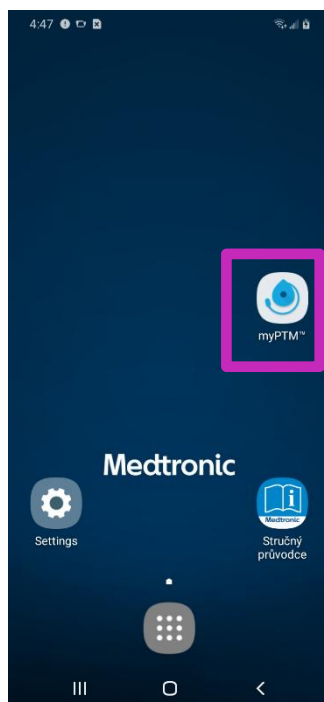


- 3 Postupujte podle pokynů na displeji, abyste se připojili k pumpě a postupujte, dokud se nevrátíte zpět na domovskou obrazovku.

Ujistěte se, že je komunikátor zapnutý a umístěný přímo nad pumpou.

- 4 Klepněte na ikonu nabídky v levém horním rohu okna.




- 5 Klepněte na **About (Informace)**

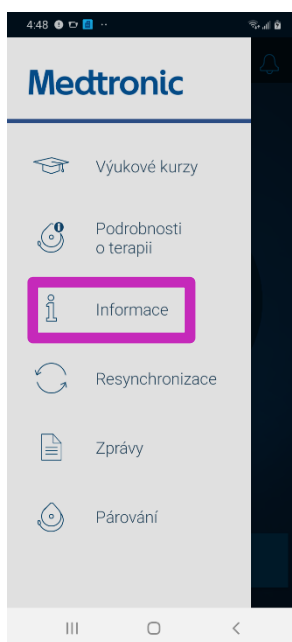

Pokyny pro mobilní ovladač Samsung A10e



- 6 Zkontrolujte, zda se zobrazuje:
- Verze:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

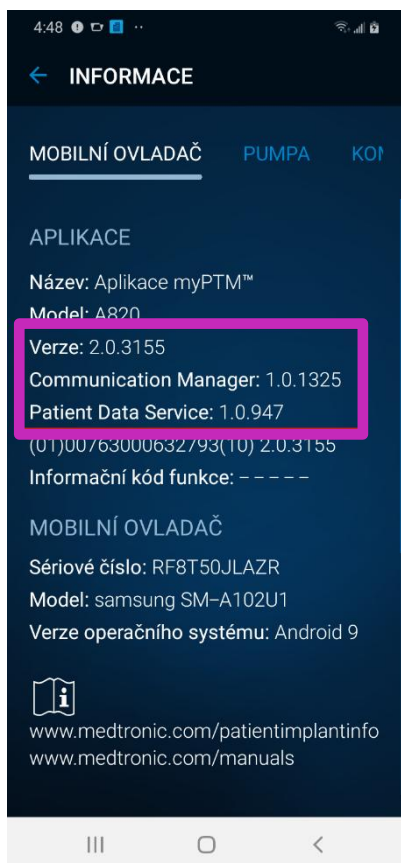

Pokud se čísla verzí shodují, aktualizace byla úspěšně dokončena a mobilní ovladač můžete používat obvyklým způsobem.

Pokud se některé z čísel verzí neshoduje, vraťte se k **části 2: Aktualizace aplikací** a podle potřeby znovu aktualizujte verze aplikací.


Aktualizace je dokončena

Pokyny pro mobilní ovladač Samsung J3




Část 1: Připojení k Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce mobilního ovladače klepněte na ikonu **Settings (Nastavení)**.

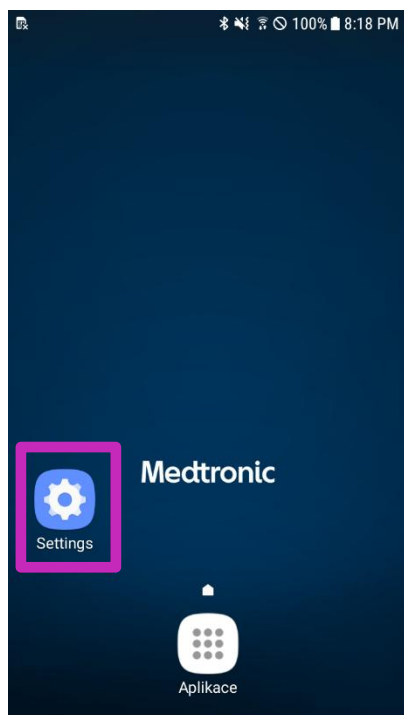

- 2 Klepněte na **Connections (Připojení)**.

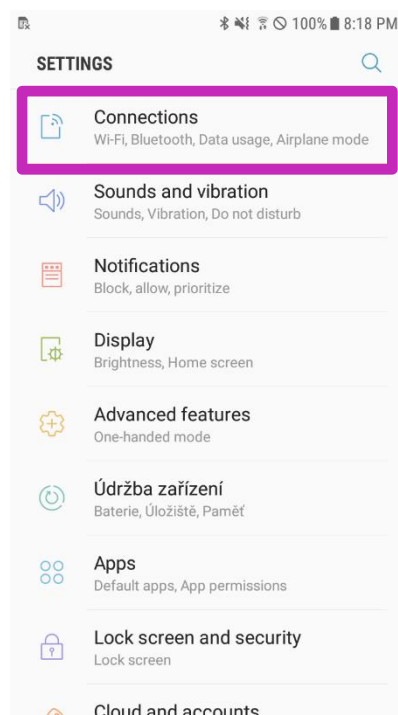


- 3 Najděte **Wi-Fi** a klepněte na přepínač, aby se zapnul a zmodral.



- 4 Klepněte na bezdrátovou síť, kterou chcete používat.

- 5 Vyberte možnost **Connect (Připojit)**.

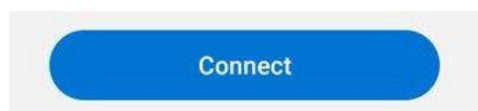


Pokyny pro mobilní ovladač Samsung J3




**** Pokyny MUSÍ být dodrženy v tomto pořadí. ****

Část 2: Aktualizace aplikací

- 1 Vraťte se na domovskou obrazovku stisknutím tlačítka Home (Domů).
- 2 Přejděte z domovské obrazovky do seznamu aplikací.

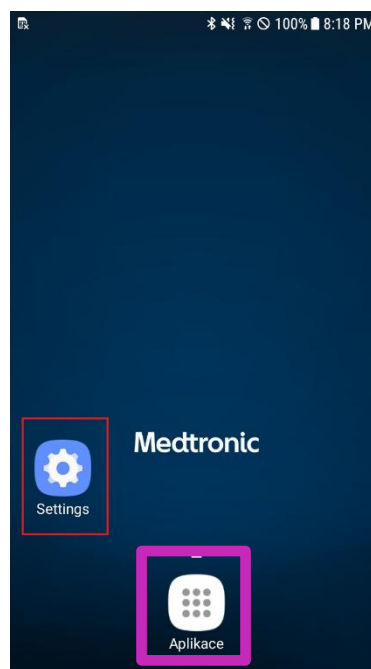


- 3 Klepněte na aplikaci **Hub**.

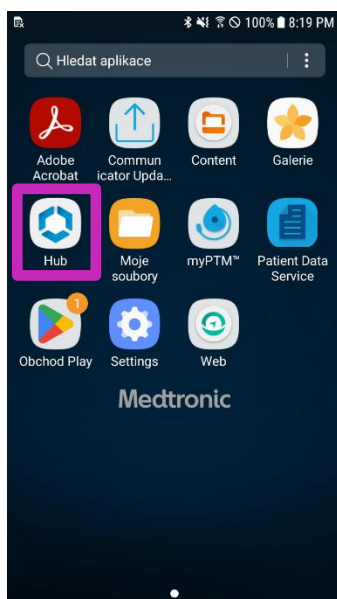


Pokyny pro mobilní ovladač Samsung J3



- 4 Aktualizujte seznam aplikací uvedený v Hubu potažením prstem dolů na obrazovce Apps (Aplikace).

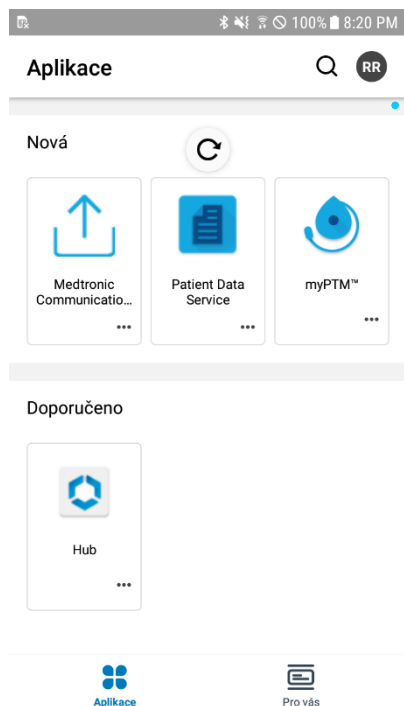

- 5 Vyberte možnost **All Apps (Všechny aplikace)** v části Categories (Kategorie). Možná budete muset posunout obrazovku do spodní části okna.

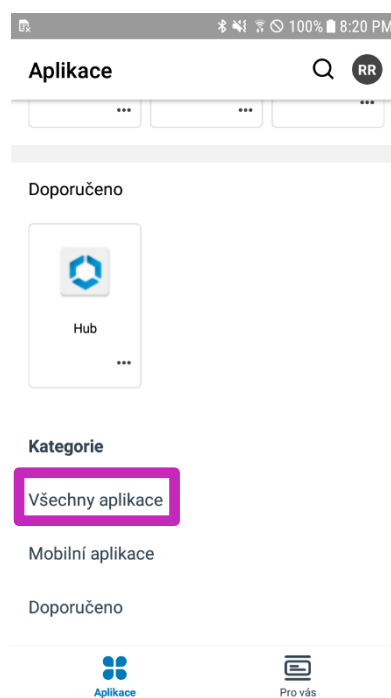

Pokyny pro mobilní ovladač Samsung J3



- 6 Najděte aplikaci **Intelligent Hub** a klepněte na možnost **UPDATE (AKTUALIZACE)**. Pokud tuto aplikaci v seznamu nevidíte, není nutná žádná aktualizace. Přejděte ke kroku 7. (Neklepejte poté na **OPEN (OTEVŘÍT)**, protože se otevře předchozí verze aplikace.)



- 7 Vyhledejte aplikaci **Patient Data Service** a klepněte na **UPDATE (AKTUALIZACE)**. (Neklepejte poté na **OPEN (OTEVŘÍT)**, protože se otevře předchozí verze aplikace.)



- 8 Vyhledejte aplikaci **Medtronic Communication Manager** a klepněte na **UPDATE (AKTUALIZACE)**. (Neklepejte poté na **OPEN (OTEVŘÍT)**, protože se otevře předchozí verze aplikace.)



- 9 Vyhledejte aplikaci **myPTM** a klepněte na **UPDATE (AKTUALIZACE)**. (Neklepejte poté na **OPEN (OTEVŘÍT)**, protože se otevře předchozí verze aplikace.)




- 10 Počkejte 2 minuty, než se aktualizace dokončí.


Pokyny pro mobilní ovladač Samsung J3




- 11 Klepněte na šipku zpět v levém horním rohu.

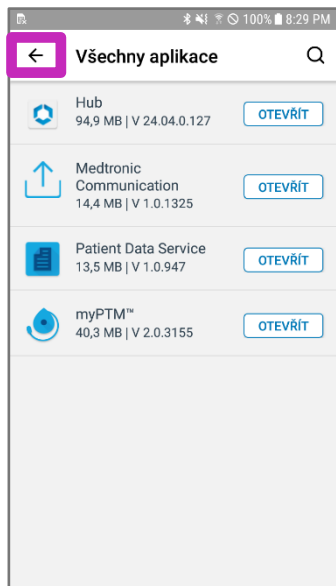



- 12 Klepněte na ikonu účtu v pravém horním rohu. Písmena v ikoně účtu se mohou u vašeho mobilního ovladače lišit.

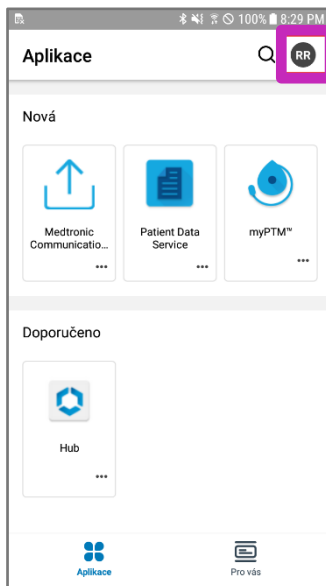

- 13 Klepněte na **This Device (Toto zařízení)**.

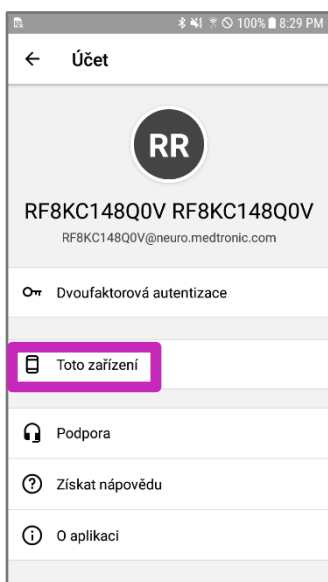


- 14 Přejděte do dolní části okna a klepněte na **Sync device (Synchronizace zařízení)**. Ve spodní části obrazovky se zobrazí hlášení „Checking for updates (Probíhá vyhledávání aktualizací)“.

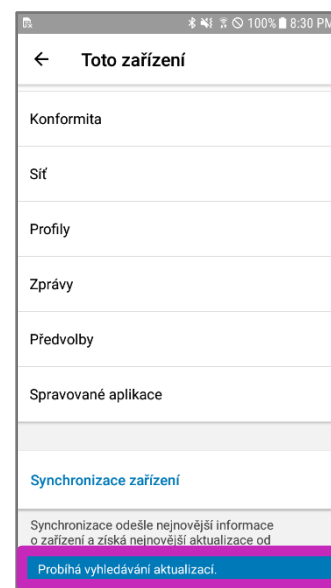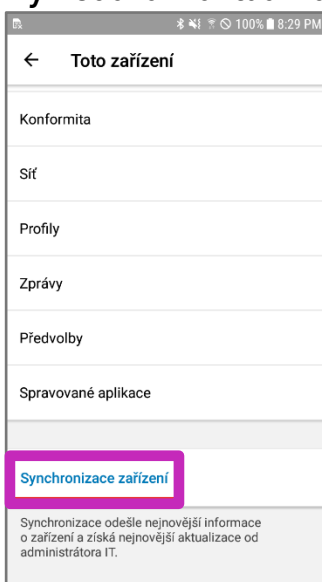

Pokyny pro mobilní ovladač Samsung J3



- 15 Přejděte zpět na horní část obrazovky a potvrďte, že datum a čas údaje **Last seen (Naposledy zobrazeno)** byly aktualizovány na aktuální datum a čas. Pokud nedošlo k aktualizaci, opakujte krok 14.

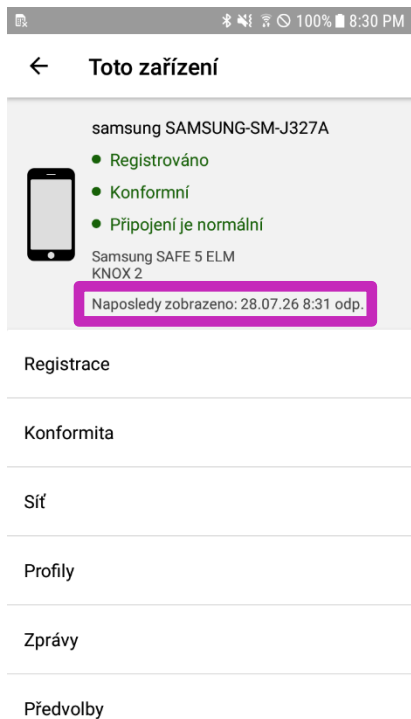

Pokyny pro mobilní ovladač Samsung J3




Část 3: Potvrďte, že jsou aplikace aktualizovány

- 1 Vraťte se na domovskou obrazovku stisknutím tlačítka Home (Domů).



- 2 Klepněte na aplikaci myPTM.

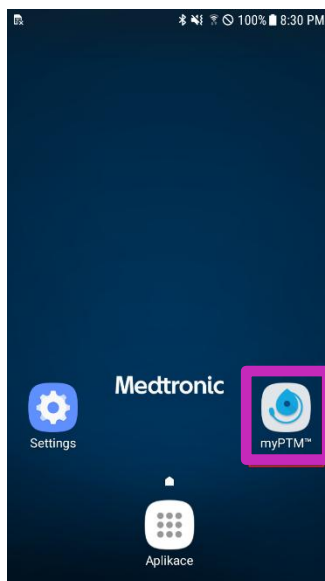


- 3 Postupujte podle pokynů na displeji, abyste se připojili k pumpě a postupujte, dokud se nevrátíte zpět na domovskou obrazovku.


Ujistěte se, že je komunikátor zapnutý a umístěný přímo nad pumpou.

V závislosti na stáří komunikátoru může dojít k aktualizaci komunikátoru.

- 4 Klepněte na ikonu nabídky v levém horním rohu okna.

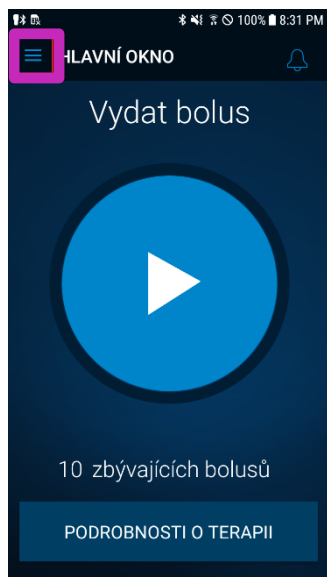


- 5 Klepněte na **About (Informace)**

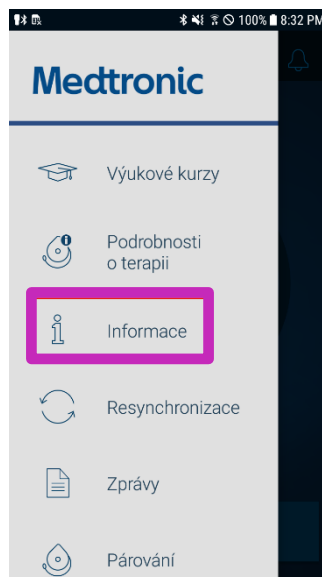

Pokyny pro mobilní ovladač Samsung J3



- 6 Zkontrolujte, zda se zobrazuje:
- Verze:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

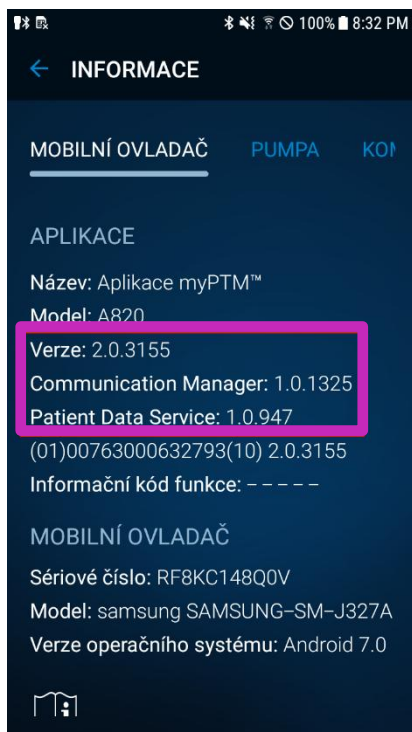

Pokud se čísla verzí shodují, aktualizace byla úspěšně dokončena a mobilní ovladač můžete používat obvyklým způsobem.

Pokud se některé z čísel verzí neshoduje, vraťte se k **části 2: Aktualizace aplikací** a podle potřeby znovu aktualizujte verze aplikací.

Aktualizace je dokončena

Krátké prohlášení

Krátké prohlášení:

Tento materiál nemá být považován za jediný zdroj informací. Nenahrazuje ani nepřevyšuje informace obsažené v příručkách k přístroji.

Vezměte prosím na vědomí, že účel použití výrobku se může lišit v závislosti na schválení v příslušné zemi nebo oblasti.

Podrobné informace týkající se účelu použití, implantace, indikací, kontraindikací, varování, upozornění a možných nežádoucích příhod naleznete v příručce k přístroji.

V případě zařízení, která jsou kompatibilní s magnetickou rezonancí, si před provedením vyšetření MR prostudujte informace o MR uvedené v příručce k danému zařízení.

Pokud je zařízení určeno pro použití s elektronickým návodem k použití (eIFU), najdete návod k použití na webové adrese společnosti Medtronic manuals.medtronic.com.

Příručky lze zobrazit pomocí aktuální verze libovolného běžně používaného internetového prohlížeče. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití programu Adobe Acrobat® Reader s prohlížečem.

Výrobky společnosti Medtronic uváděné na trh jsou v souladu s právními předpisy (jsou-li relevantní) týkajícími se zdravotnických prostředků. Další informace získáte od místního zástupce společnosti Medtronic a/nebo na webových stránkách společnosti Medtronic.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004