

Medtronic

Aktualisieren der Software des Handgeräts über WLAN

Vorbereitung

Stromversorgung: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handgerät angeschlossen ist oder mehr als 35 % Akkukapazität hat und dass Ihr Kommunikationsgerät verfügbar und aufgeladen ist, bevor Sie Updates installieren.

WLAN: Achten Sie darauf, dass Sie ein vertrauenswürdiges WLAN-Netzwerk verwenden, z. B. Ihren Heimanbieter. Halten Sie den Namen und das Passwort des WLAN-Netzwerks bereit, bevor Sie beginnen.

Zeit: Je nach Signalstärke des Netzwerks kann dieser Vorgang bis zu 30 Minuten dauern.

Handgerätemodell: Ermitteln Sie Ihr Handgerätemodell anhand der folgenden Bilder. Das Handgerät Samsung J3 hat unten in der Mitte eine physische Home-Taste.



Samsung A10e

Wenn Sie ein Handgerät Samsung A10e haben, beachten Sie die Anleitung auf Seite 3.

Weiter mit Samsung A10e



Samsung J3

Wenn Sie ein Handgerät Samsung J3 haben, beachten Sie die Anleitung auf Seite 10.

Weiter mit Samsung J3



Inhaltsverzeichnis



Vorbereitung	1
Anleitung für Handgerät Samsung A10e	3
Teil 1: Verbindung mit WLAN.....	3
Teil 2: Apps aktualisieren	4
Teil 3: Aktualisierung der Apps überprüfen	8
Anleitung für Handgerät Samsung J3	10
Teil 1: Verbindung mit WLAN.....	10
Teil 2: Apps aktualisieren.....	11
Teil 3: Aktualisierung der Apps überprüfen	16
Wichtige Hinweise	18

Anleitung für Handgerät Samsung A10e




Teil 1: Verbindung mit WLAN

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm Ihres Handgeräts auf das Symbol **Settings** (Einstellungen).
- 2 Tippen Sie auf **Connections** (Verbindungen).

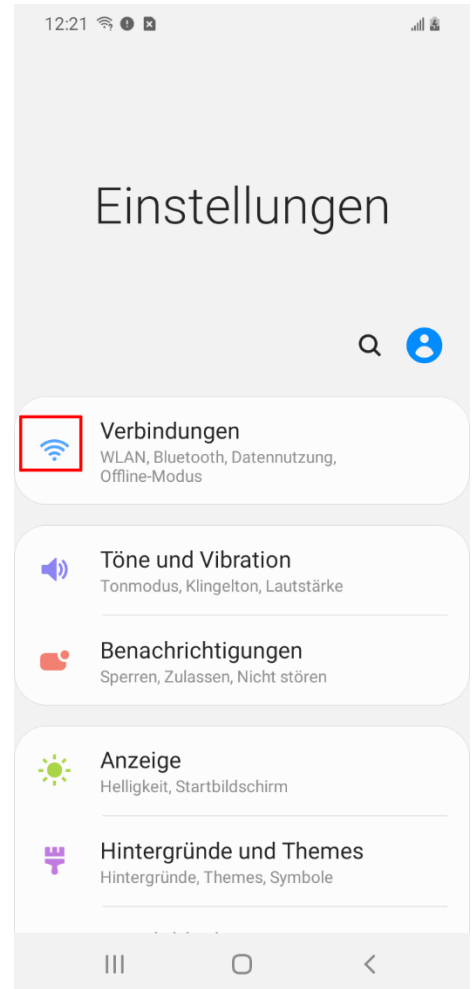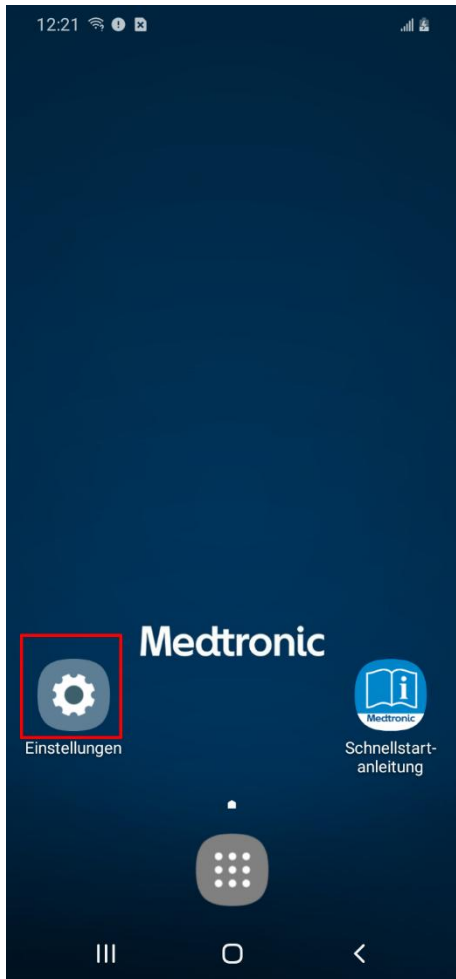

- 3 Suchen Sie **WiFi** (WLAN) und tippen Sie auf den Schalter. Durch das Einschalten wird der Schalter blau.

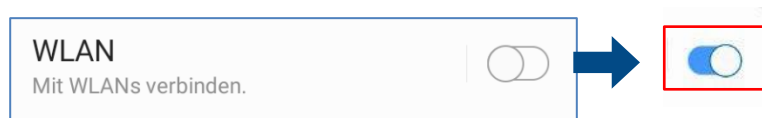

- 4 Tippen Sie auf das drahtlose Netzwerk, das Sie verwenden möchten.

Anleitung für Handgerät Samsung A10e



5 Tippen Sie auf **Connect** (Verbinden).

The screenshot shows the 'mdtmobile' connection settings. At the top, the status bar shows the time 12:21 and various icons. Below the title bar, the 'EAP-Methode' is set to 'PEAP'. The 'Identität' field contains 'svc-systems-testpc'. The 'Passwort' field is masked with dots and has an eye icon to toggle visibility. Under 'CA-Zertifikat', it says 'Nicht bestätigen' and 'Kein Zertifikat angegeben. Ihre Verbindung ist nicht privat.' There is a toggle for 'Automatisch erneut verbinden' which is currently turned on. At the bottom of the settings card is an 'Erweitert' section. Below the settings card is a large blue button labeled 'Verbinden'. The bottom of the screen shows the Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.


Anleitung für Handgerät Samsung A10e




**** Die Anweisungen MÜSSEN in dieser Reihenfolge ausgeführt werden ****

Teil 2: Apps aktualisieren

1 Gehen Sie zum Startbildschirm zurück.

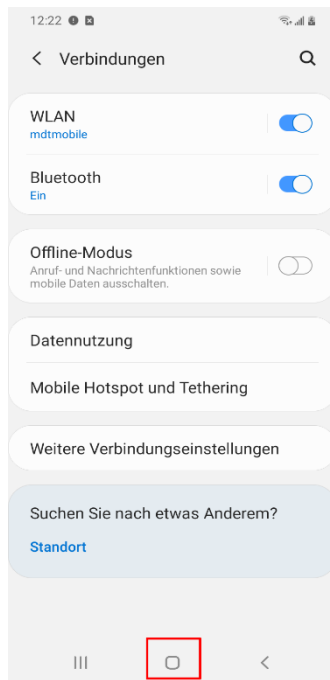


2 Öffnen Sie vom Startbildschirm aus den App Drawer.

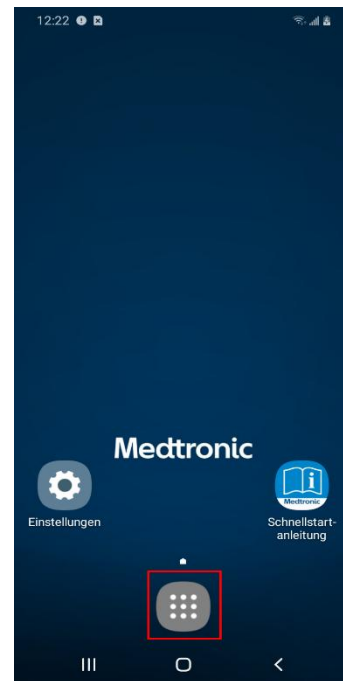


3 Tippen Sie auf die **Hub** App.

(Das Symbol der Hub App kann je nach Alter Ihres Handgeräts unterschiedlich aussehen.)

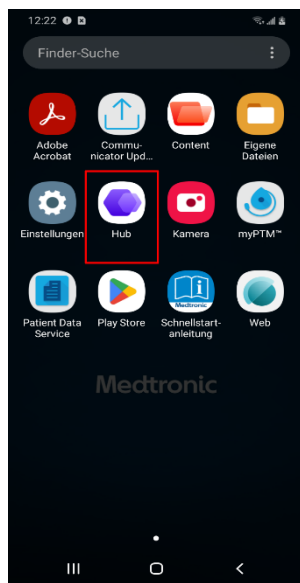

ODER


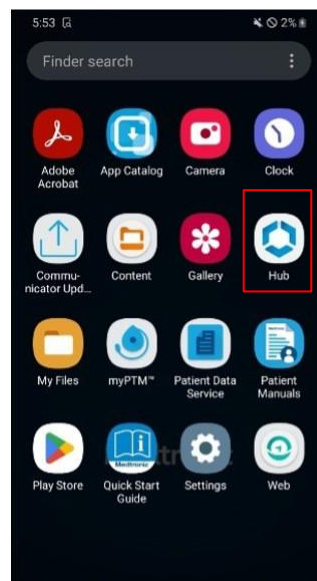


Anleitung für Handgerät Samsung A10e





4 Aktualisieren Sie die in Hub aufgelisteten Apps, indem Sie auf dem Bildschirm „Apps“ nach unten wischen.

5 Wählen Sie unter „Categories“ (Kategorien) die Option **All Apps** (Alle Apps). Möglicherweise müssen Sie bis zum unteren Bildschirmrand blättern.

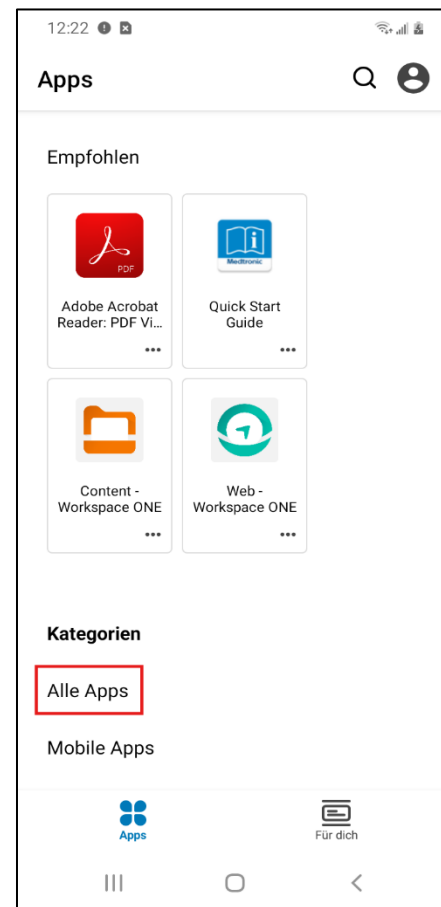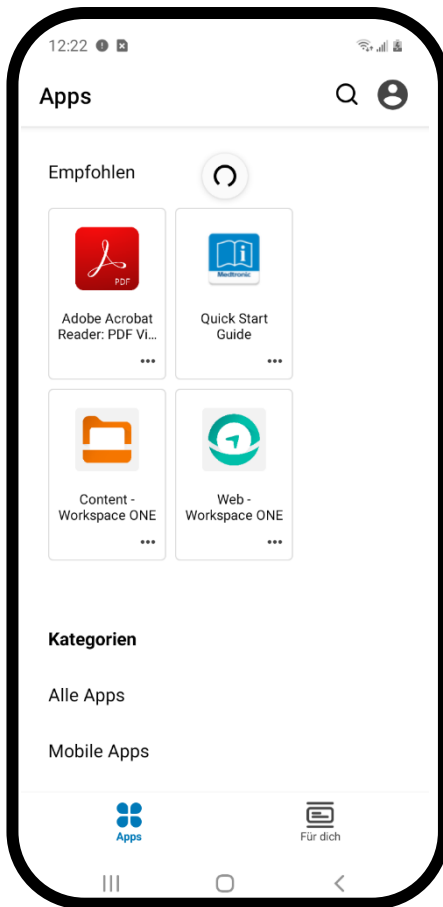



6 Suchen Sie die App **Patient Data Service** und tippen Sie auf **UPDATE** (AKTUALISIEREN). (Tippen Sie anschließend nicht auf „OPEN“ (ÖFFNEN), da ansonsten die vorherige Version der App geöffnet wird.)

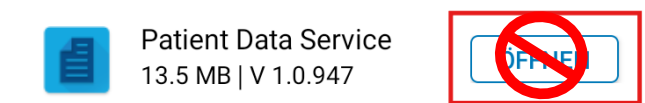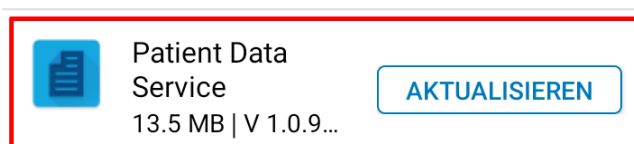



Anleitung für Handgerät Samsung A10e



- 7 Suchen Sie die App **Medtronic Communication Manager** und tippen Sie auf **UPDATE** (AKTUALISIEREN).
(Tippen Sie anschließend nicht auf „OPEN“ (ÖFFNEN), da ansonsten die vorherige Version der App geöffnet wird.)

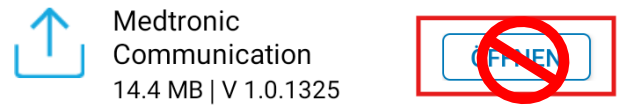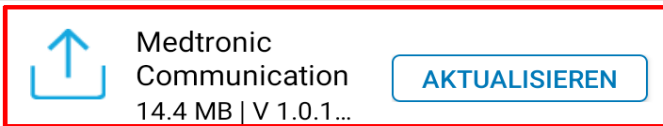

- 8 Suchen Sie die App **myPTM** und tippen Sie auf **UPDATE** (AKTUALISIEREN).
(Tippen Sie anschließend nicht auf „OPEN“ (ÖFFNEN), da ansonsten die vorherige Version der App geöffnet wird.)

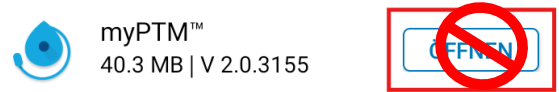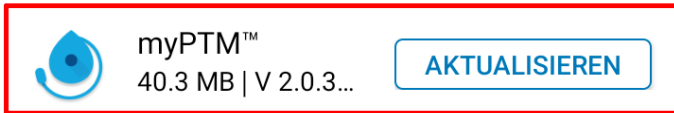


- 9 Warten Sie 2 Minuten, bis die Aktualisierungen abgeschlossen sind.


Anleitung für Handgerät Samsung A10e



- 10 Tippen Sie oben links auf den Rückwärtspfeil.



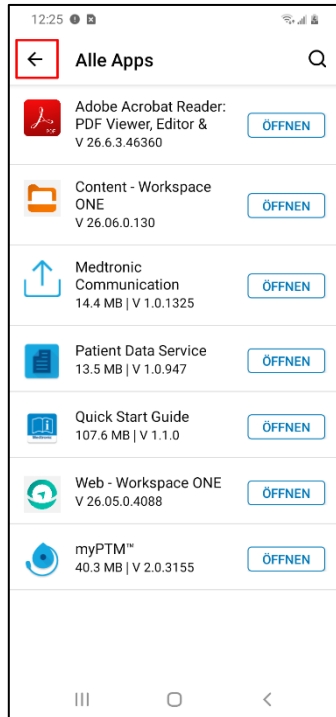


- 11 Tippen Sie oben rechts auf das Kontosymbol. Die Buchstaben des Kontosymbols können je nach Handgerät unterschiedlich sein.

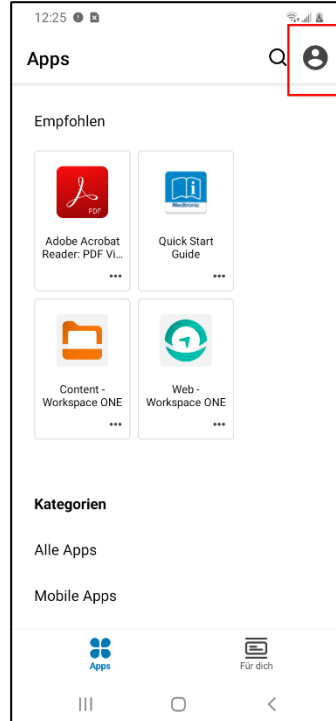

- 12 Tippen Sie auf **This Device** (Dieses Gerät).


- 13 Blättern Sie bis zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **Sync device** (Gerät synchronisieren). Unten im Bildschirm wird die Meldung „**Checking for updates**“ (Prüfung auf Updates läuft) angezeigt.

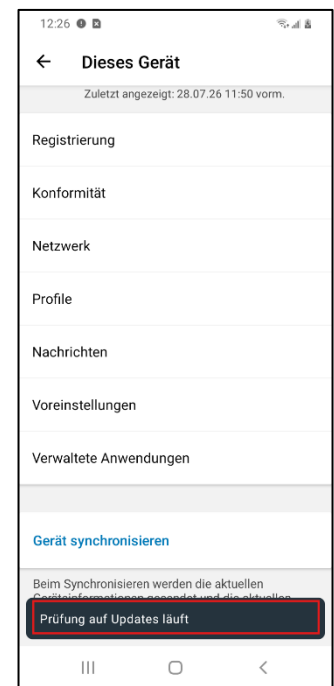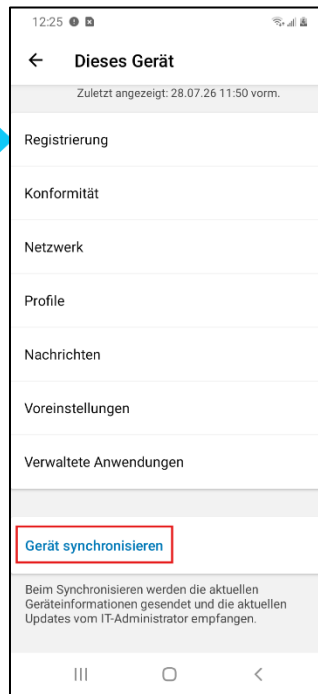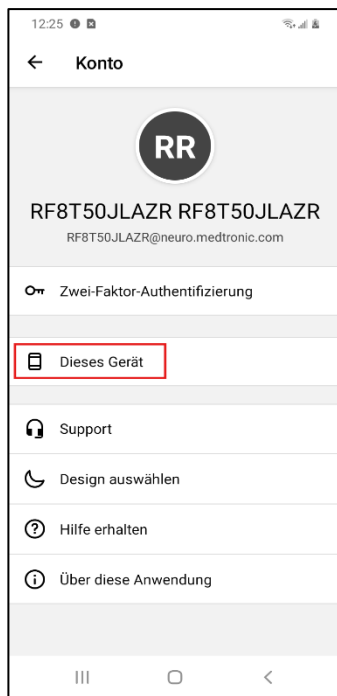

Anleitung für Handgerät Samsung A10e



- 14 Blättern Sie zurück zum oberen Bildschirmrand und vergewissern Sie sich, dass Datum und Uhrzeit für **Last seen** (Zuletzt angezeigt) mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit aktualisiert wurden. Ist keine Aktualisierung erfolgt, wiederholen Sie Schritt 13.

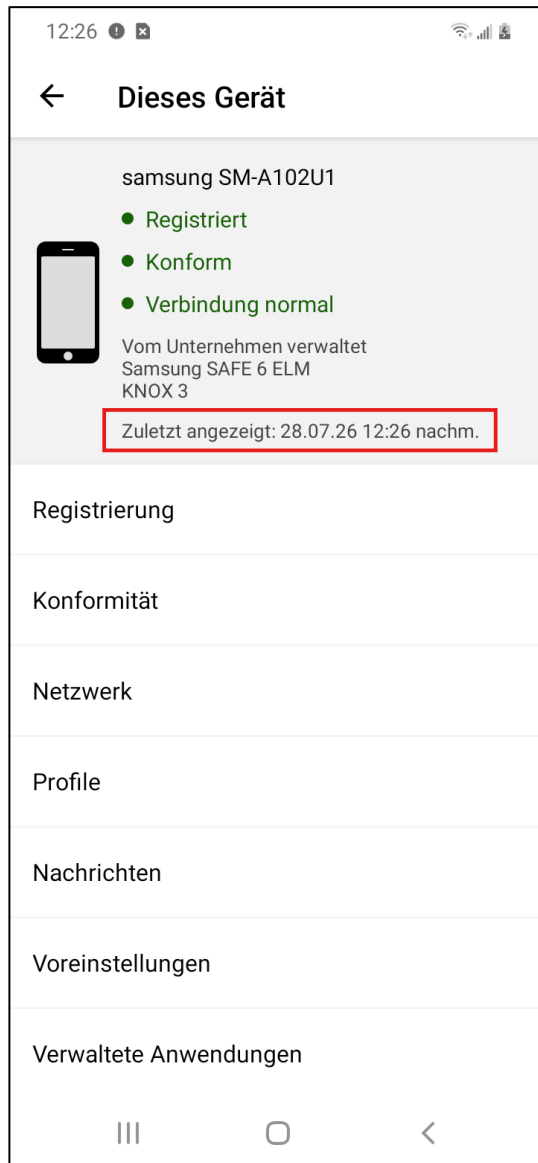


Anleitung für Handgerät Samsung A10e




Teil 3: Aktualisierung der Apps überprüfen

- 1 Gehen Sie zum Startbildschirm zurück.

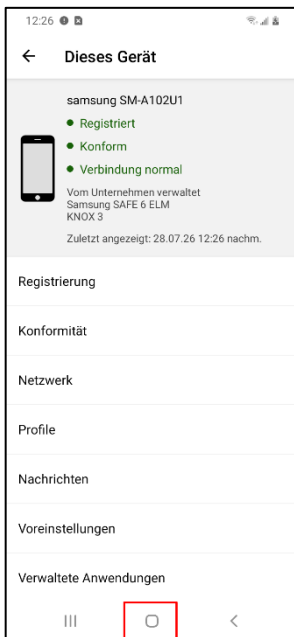

- 2 Tippen Sie auf die App myPTM.

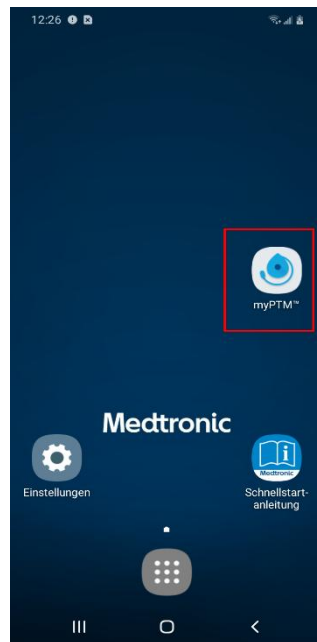


- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zur Pumpe herzustellen, bis Sie wieder zum Startbildschirm gelangen.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kommunikationsgerät eingeschaltet und direkt über der Pumpe platziert ist.

- 4 Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Menüsymbol.



- 5 Tippen Sie auf **About** (Info).

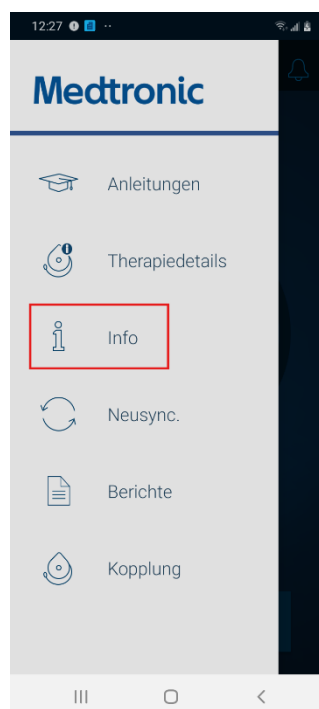


Anleitung für Handgerät Samsung A10e



6 Vergewissern Sie sich, dass Folgendes angezeigt wird:

- a. **Version:** 2.0.3155
- b. **Communication Manager:** 1.0.1325
- c. **Patient Data Service:** 1.0.947

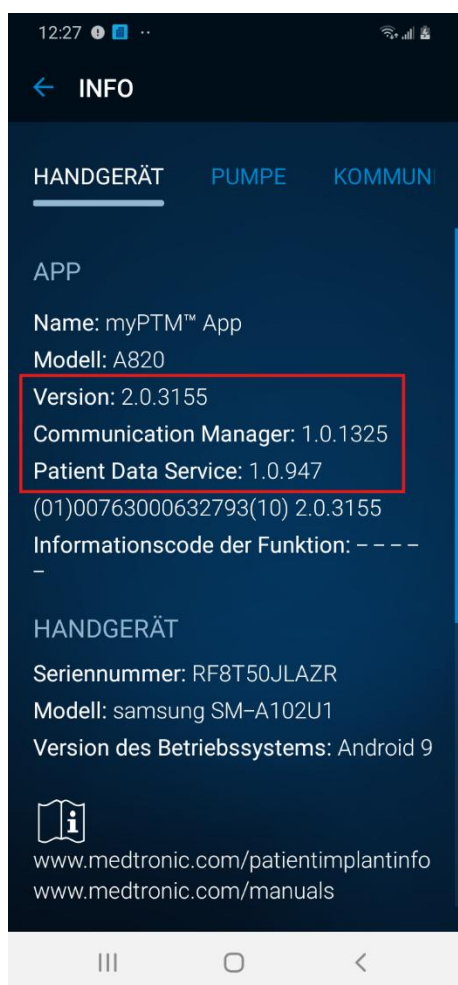

7 Wenn die Versionsnummern übereinstimmen, wurde die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen und Sie können Ihr Handgerät wie gewohnt verwenden.

Wenn eine der Versionsnummern abweicht, kehren Sie zu **Teil 2: Apps aktualisieren** zurück und aktualisieren Sie die entsprechenden App-Versionen erneut.


Aktualisierung abgeschlossen

Anleitung für Handgerät Samsung J3




Teil 1: Verbindung mit WLAN


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm Ihres Handgeräts auf das Symbol **Settings** (Einstellungen).

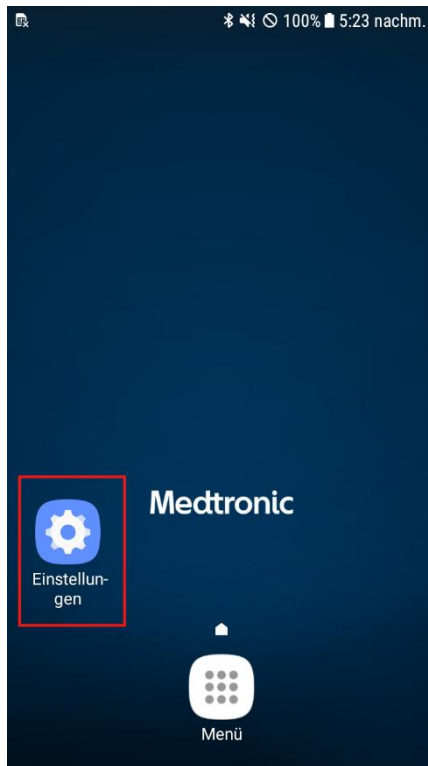

- 2 Tippen Sie auf **Connections** (Verbindungen).

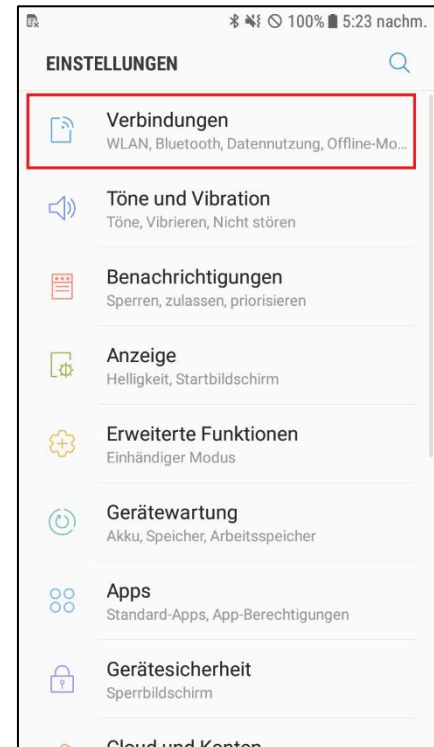


- 3 Suchen Sie **Wi-Fi** (WLAN) und tippen Sie auf den Schalter. Durch das Einschalten wird der Schalter blau.

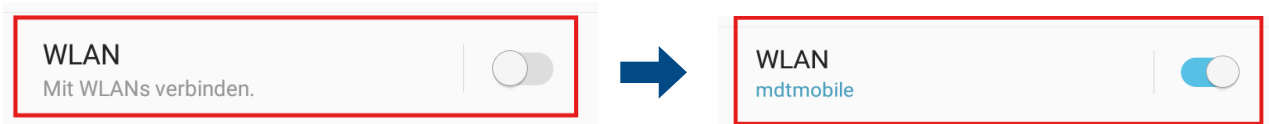

- 4 Tippen Sie auf das drahtlose Netzwerk, das Sie verwenden möchten.

- 5 Tippen Sie auf **Connect** (Verbinden).

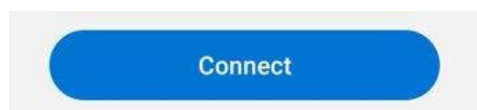

Anleitung für Handgerät Samsung J3




**** Die Anweisungen **MÜSSEN** in dieser Reihenfolge ausgeführt werden ****

Teil 2: Apps aktualisieren


- 1 Gehen Sie zum Startbildschirm zurück, indem Sie die Home-Taste drücken.



- 2 Öffnen Sie vom Startbildschirm aus den App Drawer.

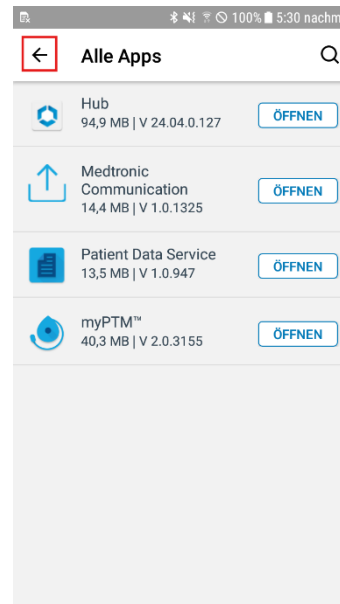


- 3 Tippen Sie auf die **Hub** App.

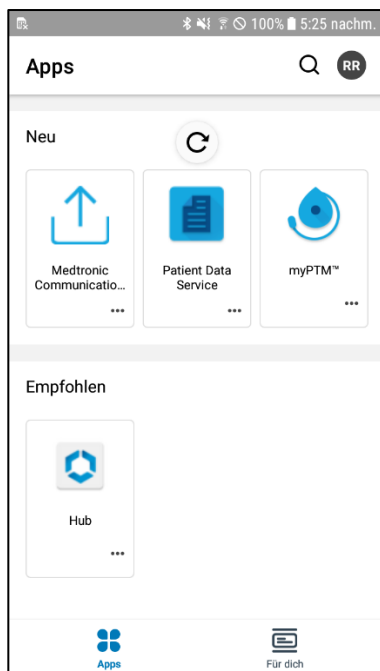


Anleitung für Handgerät Samsung J3



- 4 Aktualisieren Sie die in Hub aufgelisteten Apps, indem Sie auf dem Bildschirm „Apps“ nach unten wischen.

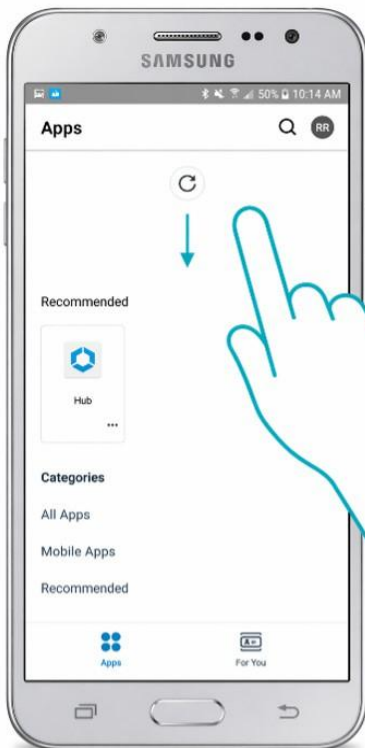

- 5 Wählen Sie unter „Categories“ (Kategorien) die Option **All Apps** (Alle Apps). Möglicherweise müssen Sie bis zum unteren Bildschirmrand blättern.

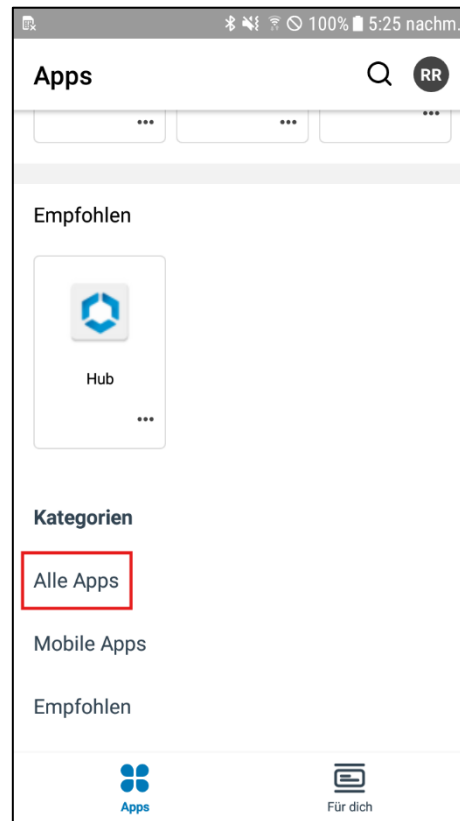

Anleitung für Handgerät Samsung J3




- 6 Suchen Sie die App **Intelligent Hub** und tippen Sie auf **UPDATE** (AKTUALISIEREN).
Wenn diese App nicht in der Liste aufgeführt wird, ist kein Update erforderlich. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
(Tippen Sie anschließend nicht auf „OPEN“ (ÖFFNEN), da ansonsten die vorherige Version der App geöffnet wird.)



- 7 Suchen Sie die App **Patient Data Service** und tippen Sie auf **UPDATE** (AKTUALISIEREN).
(Tippen Sie anschließend nicht auf „OPEN“ (ÖFFNEN), da ansonsten die vorherige Version der App geöffnet wird.)



- 8 Suchen Sie die App **Medtronic Communication Manager** und tippen Sie auf **UPDATE** (AKTUALISIEREN).
(Tippen Sie anschließend nicht auf „OPEN“ (ÖFFNEN), da ansonsten die vorherige Version der App geöffnet wird.)

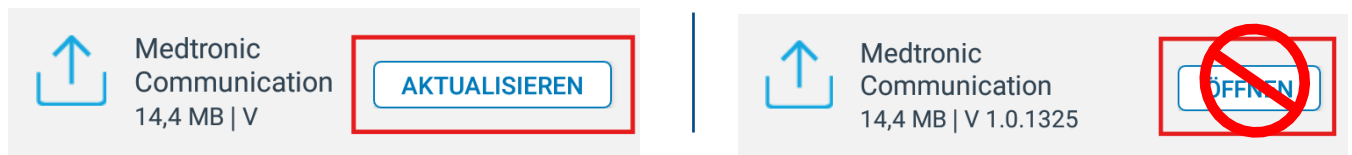

- 9 Suchen Sie die App **myPTM** und tippen Sie auf **UPDATE** (AKTUALISIEREN).
(Tippen Sie anschließend nicht auf „OPEN“ (ÖFFNEN), da ansonsten die vorherige Version der App geöffnet wird.)




- 10 **Warten** Sie 2 Minuten, bis die Aktualisierungen abgeschlossen sind.


Anleitung für Handgerät Samsung J3




- 11 Tippen Sie oben links auf den Rückwärtspfeil.

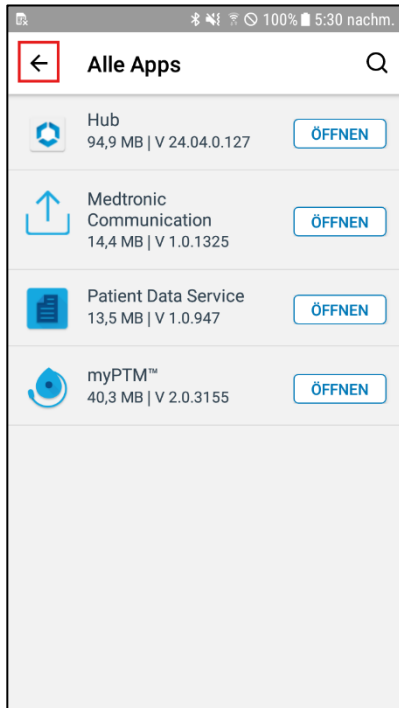



- 13 Tippen Sie oben rechts auf das Kontosymbol. Die Buchstaben des Kontosymbols können je nach Handgerät unterschiedlich sein.

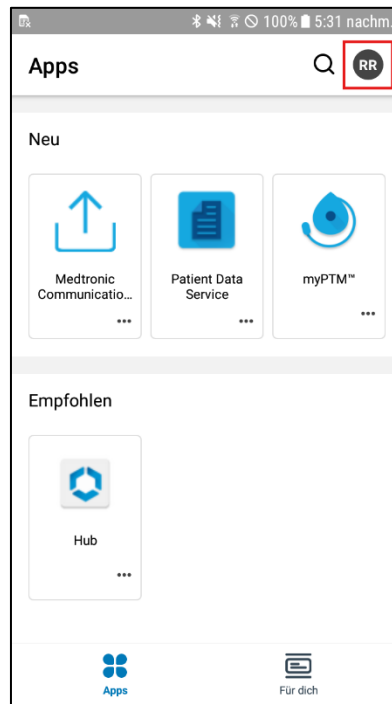

- 13 Tippen Sie auf **This Device** (Dieses Gerät).

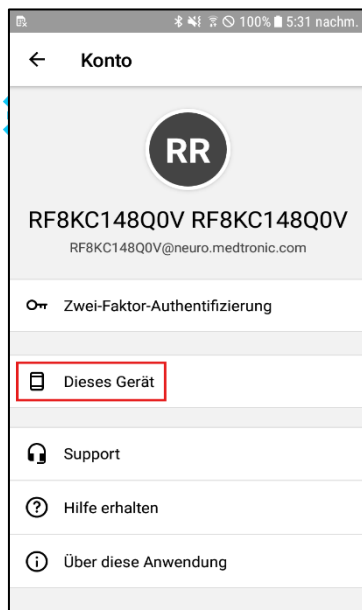


- 14 Blättern Sie bis zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **Sync device** (Gerät synchronisieren). Unten im Bildschirm wird die Meldung „**Checking for updates**“ (Prüfung auf Updates läuft) angezeigt.

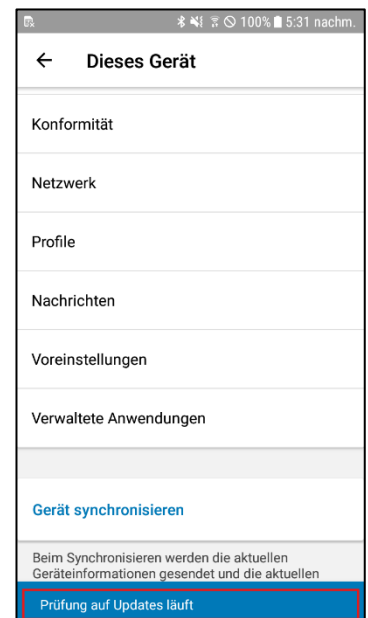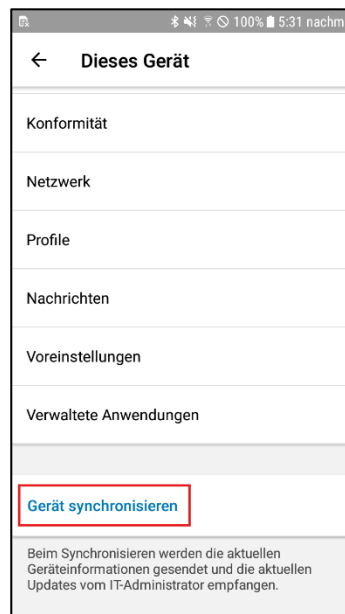

Anleitung für Handgerät Samsung J3



- 15 Blättern Sie zurück zum oberen Bildschirmrand und vergewissern Sie sich, dass Datum und Uhrzeit für **Last seen** (Zuletzt angezeigt) mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit aktualisiert wurden. Ist keine Aktualisierung erfolgt, wiederholen Sie Schritt 14.

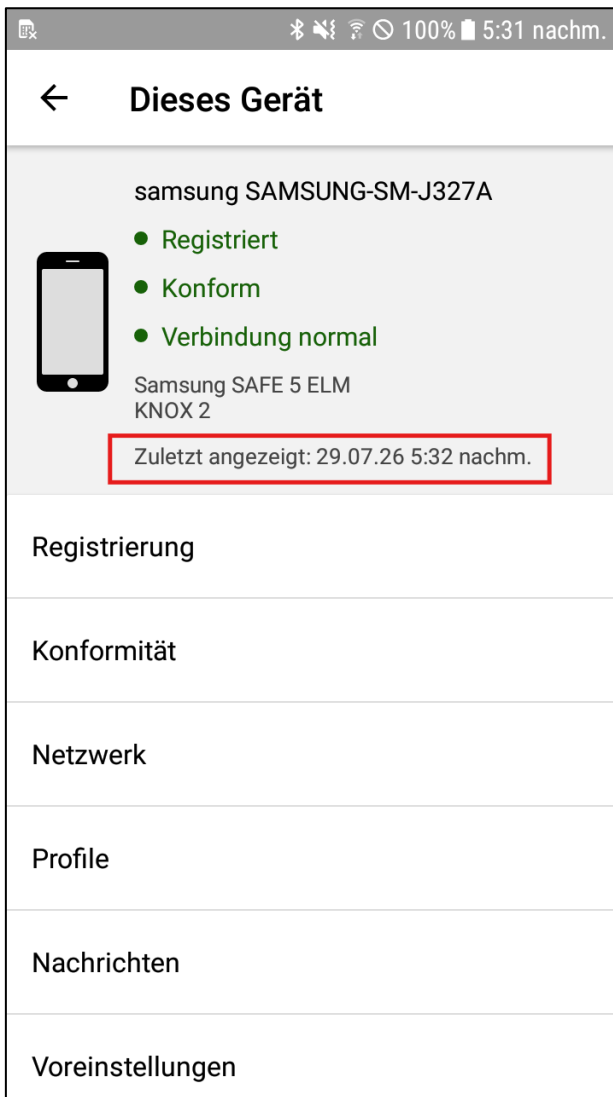

Anleitung für Handgerät Samsung J3




Teil 3: Aktualisierung der Apps überprüfen

- 1 Gehen Sie zum Startbildschirm zurück, indem Sie die Home-Taste drücken.



- 2 Tippen Sie auf die App **myPTM**.

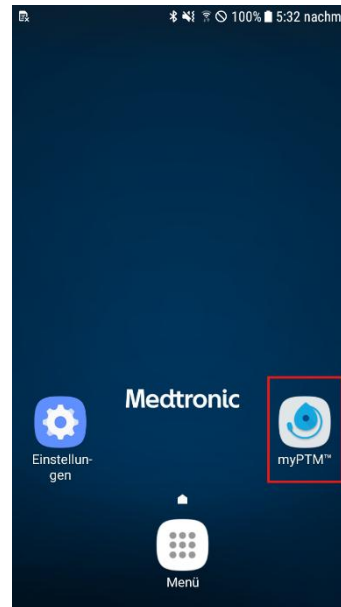


- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zur Pumpe herzustellen, bis Sie wieder zum Startbildschirm

Vergewissern Sie sich, dass Ihr


Kommunikationsgerät eingeschaltet und direkt über der Pumpe platziert ist.

Je nach Alter Ihres Kommunikationsgeräts wird eine Aktualisierung des Kommunikationsgeräts durchgeführt.

- 4 Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Menüsymbol.

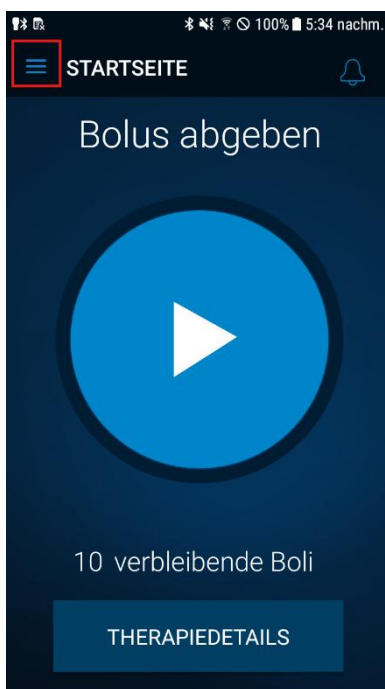

- 5 Tippen Sie auf **About** (Info).

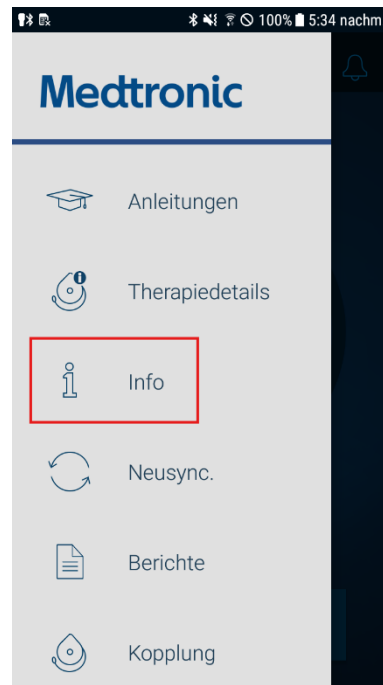


Anleitung für Handgerät Samsung J3



6 Vergewissern Sie sich, dass Folgendes angezeigt wird:

- a. **Version:** 2.0.3155
- b. **Communication Manager:** 1.0.1325
- c. **Patient Data Service:** 1.0.947

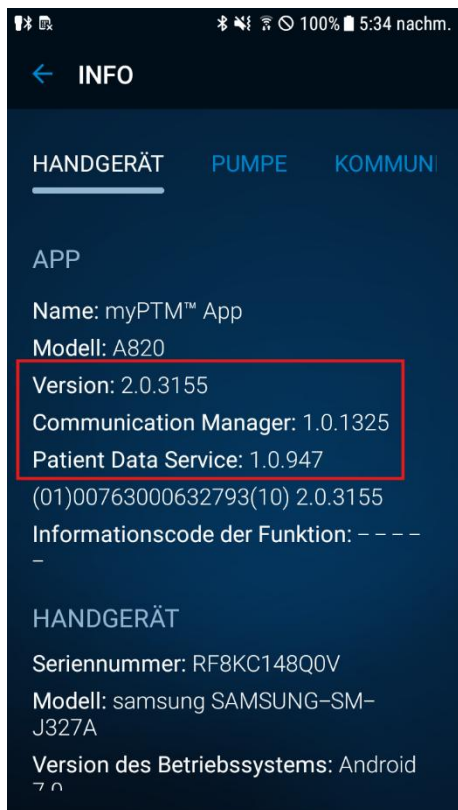

7 Wenn die Versionsnummern übereinstimmen, wurde die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen und Sie können Ihr Handgerät wie gewohnt verwenden.

Wenn eine der Versionsnummern abweicht, kehren Sie zu **Teil 2: Apps aktualisieren** zurück und aktualisieren Sie die entsprechenden App-Versionen erneut.

Aktualisierung abgeschlossen

Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise:

Dieses Material sollte nicht als ausschließliche Informationsquelle betrachtet werden und ersetzt nicht die im Handbuch/in den Handbüchern des Geräts enthaltenen Informationen.

Bitte beachten Sie, dass der Verwendungszweck eines Produkts je nach geografischen Zulassungen variieren kann.

Ausführliche Informationen zum Verwendungszweck, zur (Implantations-)Prozedur, zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen Komplikationen sind dem Produkthandbuch/den Produkthandbüchern zu entnehmen.

Bei MRT-kompatiblen Geräten sind vor der Durchführung einer MRT die MRT-Informationen in der Bedienungsanleitung/den Bedienungsanleitungen des Produkts zu beachten.

Wenn ein Produkt für die Verwendung einer elektronischen Gebrauchsanweisung geeignet ist, finden Sie die Gebrauchsanweisung auf der Medtronic Webseite manuals.medtronic.com.

Handbücher können unter Verwendung der aktuellen Version eines gängigen Internetbrowsers eingesehen werden. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie den Adobe Acrobat® Reader zusammen mit dem Browser.

Medtronic Produkte, die auf Märkten vertrieben werden, erfüllen die Gesetzgebung in Bezug auf Medizinprodukte (sofern zutreffend). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Medtronic Fachpersonal und/oder auf den Medtronic Webseiten.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004

