

Medtronic

Aktualizácia softvéru mobilného ovládača pomocou siete Wi-Fi

Príprava

Napájanie: Pred inštaláciou aktualizácií sa uistite, že mobilný ovládač je zapojený do elektrickej siete alebo má viac ako 35 % kapacity, a že váš komunikátor je dostupný a nabitý.

Wi-Fi: Uistite sa, že používate dôveryhodnú sieť Wi-Fi, napríklad od vášho poskytovateľa siete v domácnosti. Skôr ako začnete, majte k dispozícii názov a heslo na prihlásenie do siete Wi-Fi.

Čas: V závislosti od intenzity siete môže tento proces trvať až 30 minút.

Model mobilného ovládača: Pomocou obrázkov nižšie zistíte, ktorý model mobilného ovládača vlastníte. Mobilný ovládač Samsung J3 má v strede dolnej časti fyzické tlačidlo domovskej obrazovky



Samsung A10e

Ak máte mobilný ovládač Samsung A10e, postupujte podľa pokynov na strane 3.

Informácie týkajúce sa ovládača Samsung A10e sa zobrazia kliknutím sem



Samsung J3

Ak máte mobilný ovládač Samsung J3, postupujte podľa pokynov na strane 10.

Informácie týkajúce sa ovládača Samsung J3 sa zobrazia kliknutím sem

Obsah

Príprava.....	1
Pokyny pre mobilný ovládač Samsung A10e	3
Časť 1: Pripojenie k sieti Wi-Fi.....	3
Časť 2: Aktualizácia aplikácií.....	4
Časť 3: Kontrola, či sú aplikácie aktualizované	8
Pokyny pre mobilný ovládač Samsung J3.....	10
Časť 1: Pripojenie k sieti Wi-Fi.....	10
Časť 2: Aktualizácia aplikácií.....	11
Časť 3: Kontrola, či sú aplikácie aktualizované	16
Stručné vyhlásenie	18

Pokyny pre mobilný ovládač Samsung A10e




Časť 1: Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Ťuknite na ikonu **Settings** (Nastavenie) na domovskej obrazovke mobilného ovládača.



- 2 Ťuknite na položku **Connections** (Pripojenia).

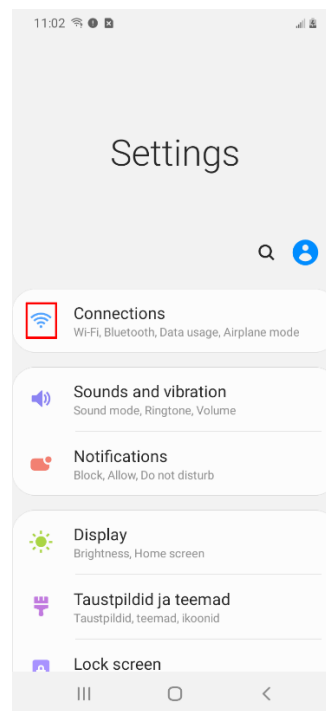


- 3 Nájdite sieť **Wi-Fi**, ťuknutím na prepínač ho zapnete a jeho farba sa zmení na modrú



- 4 Ťuknite na bezdrôtovú sieť, ktorú chcete použiť.

- 5 Ťuknite na možnosť **Connect** (Pripojiť)

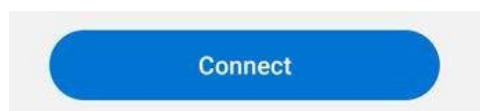


Pokyny pre mobilný ovládač Samsung A10e




**** Pokyny MUSIA byť dodržané v uvedenom poradí ****

Časť 2: Aktualizácia aplikácií


- 1 Vráťte sa na domovskú obrazovku.
- 2 Z domovskej obrazovky prejdite do zásuvky s aplikáciami.

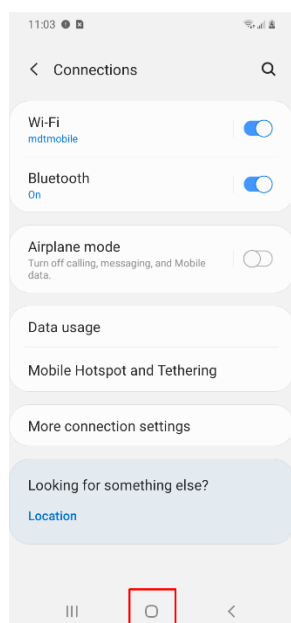

- 3 Ťuknite na aplikáciu **Hub**.
(Ikona aplikácie Hub sa môže líšiť v závislosti od vášho mobilného ovládača.)

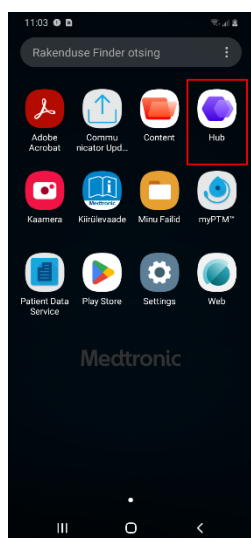


ALEBO

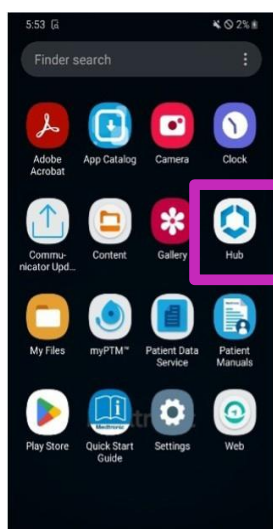


Pokyny pre mobilný ovládač Samsung A10e




- 4 Potiahnutím prstom nadol na obrazovke Apps (Aplikácie) obnovte aplikácie uvedené v aplikácii Hub.

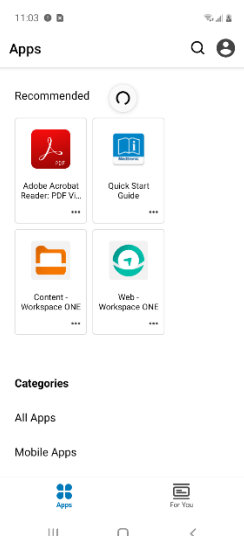


- V časti Categories (Kategórie) vyberte možnosť **All Apps** (Všetky aplikácie). Možno budete musieť rolovať na spodnú časť obrazovky.

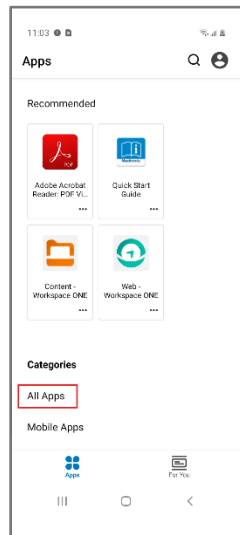


- 6 Vyhľadajte aplikáciu **Patient Data Service** a ťuknite na možnosť **UPDATE** (AKTUALIZOVAŤ). (Následne už neťukajte na možnosť **OPEN** (OTVORIŤ), inak sa otvorí predchádzajúca verzia aplikácie.)

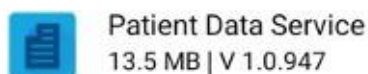

- 7 Vyhľadajte aplikáciu **Medtronic Communication Manager** a ťuknite na možnosť **UPDATE** (AKTUALIZOVAŤ). (Následne už neťukajte na možnosť **OPEN** (OTVORIŤ), inak sa otvorí predchádzajúca verzia aplikácie.)

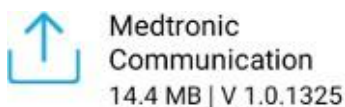

- 8 Vyhľadajte aplikáciu **myPTM** a ťuknite na možnosť **UPDATE** (AKTUALIZOVAŤ). (Následne už neťukajte na možnosť **OPEN** (OTVORIŤ), inak sa otvorí predchádzajúca verzia aplikácie.)

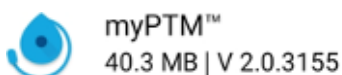


- 9 Počkajte 2 minúty na dokončenie aktualizácií.


Pokyny pre mobilný ovládač Samsung A10e




- 10 Ťuknite na šípku späť v ľavom hornom rohu.

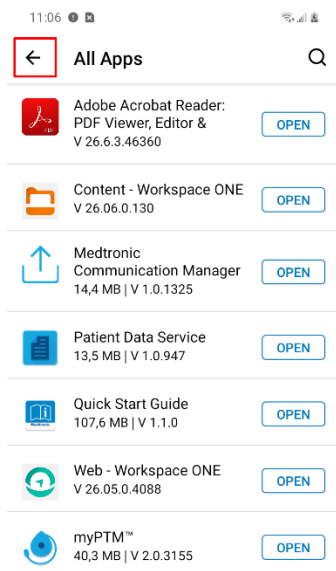



- Ťuknite na ikonu konta v pravom hornom rohu. Písmená v ikone konta sa môžu pre váš mobilný ovládač líšiť.

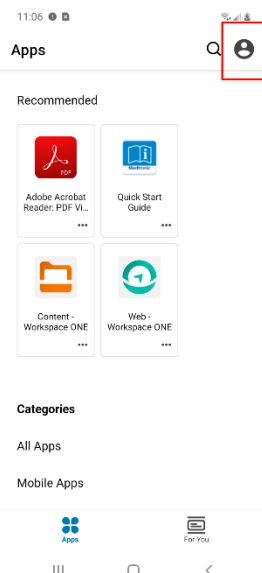

- 12 Ťuknite na možnosť **This Device** (Toto zariadenie).

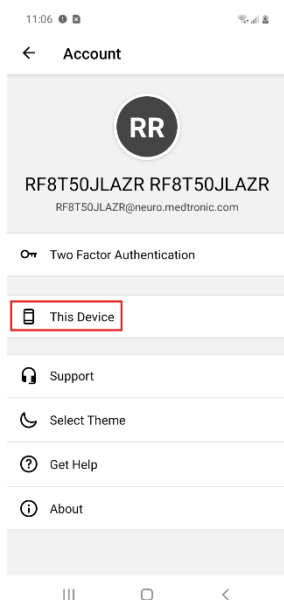


- 13 Rolujte na spodnú časť obrazovky a ťuknite na možnosť **Sync device** (Synchronizovať zariadenie). V spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa **Checking for updates** (Hľadajú sa aplikácie).

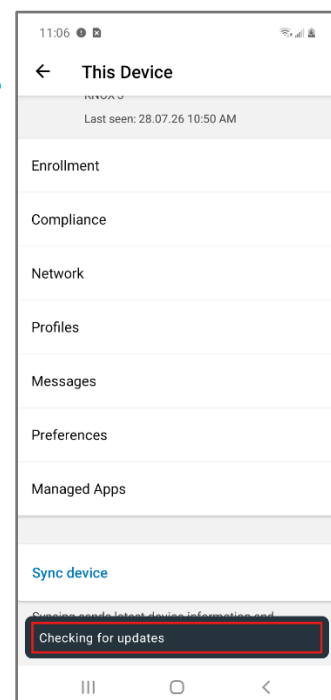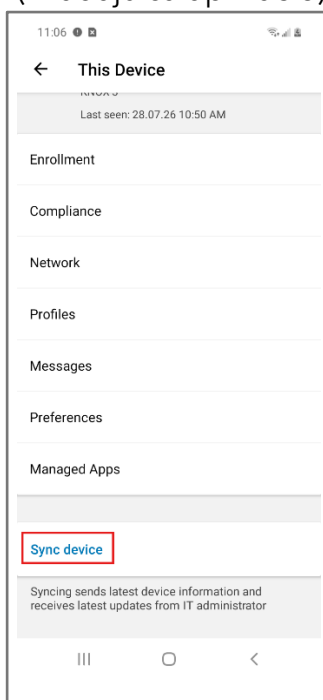

Pokyny pre mobilný ovládač Samsung A10e



- 14 Prejdite späť do hornej časti obrazovky a skontrolujte, či sa dátum a čas položky **Last seen** (Naposledy zobrazené) aktualizovali na aktuálny dátum a čas. Ak sa tieto údaje neaktualizovali, zopakujte krok 13.

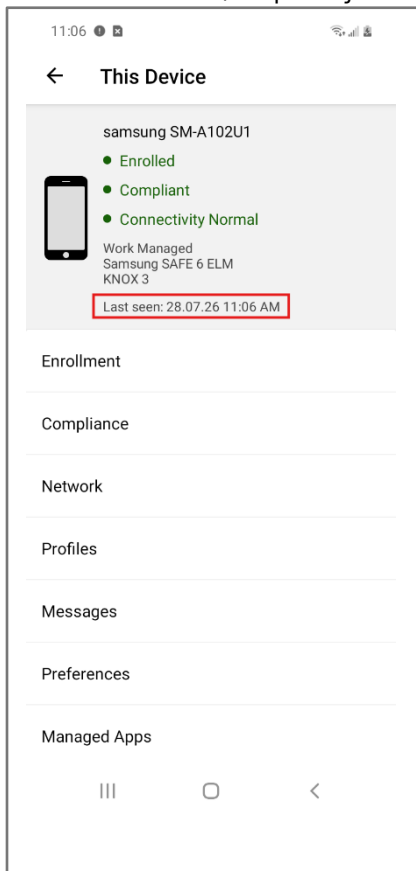


Pokyny pre mobilný ovládač Samsung A10e




Časť 3: Kontrola, či sú aplikácie aktualizované

- 1 Vráťte sa na domovskú obrazovku.

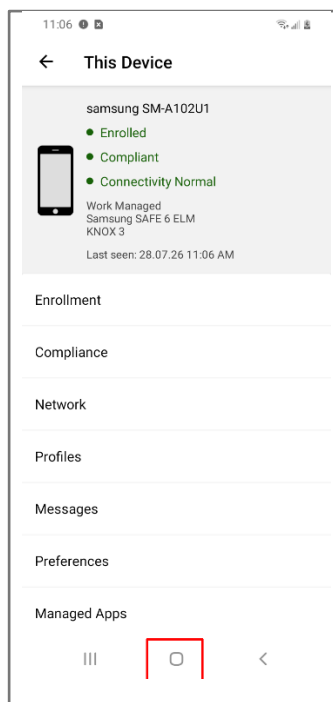

- 2 Ťuknite na aplikáciu **myPTM**.

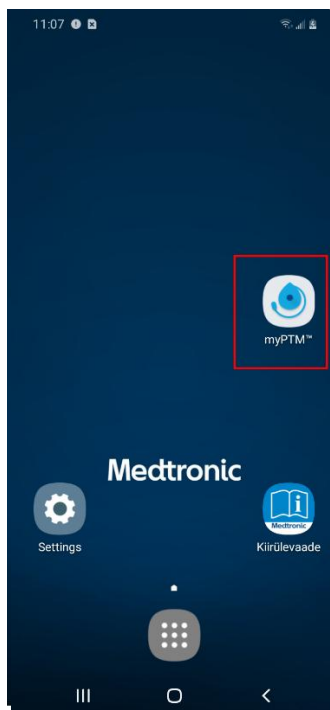


- 3 Pri pripájaní pumpy postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nezobrazí domovská obrazovka.

Uistite sa, že váš komunikátor je zapnutý a umiestnený priamo nad pumpou.

- 4 Ťuknite na ikonu ponuky v ľavom rohu obrazovky.




- 5 Ťuknite na možnosť **About** (Informácie).

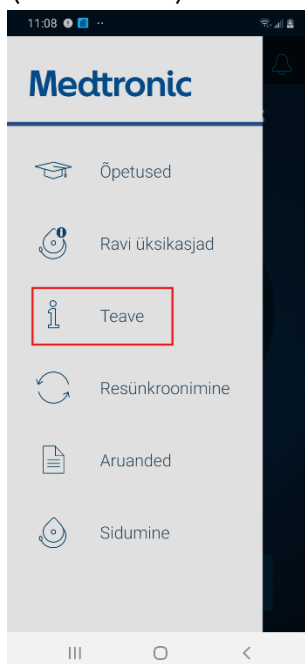

Pokyny pre mobilný ovládač Samsung A10e



- 6 Skontrolujte, či sa zobrazujú nasledujúce údaje:
- Version** (Verzia): 2.0.3155
 - Communication Manager**: 1.0.1325
 - Patient Data Service**: 1.0.947

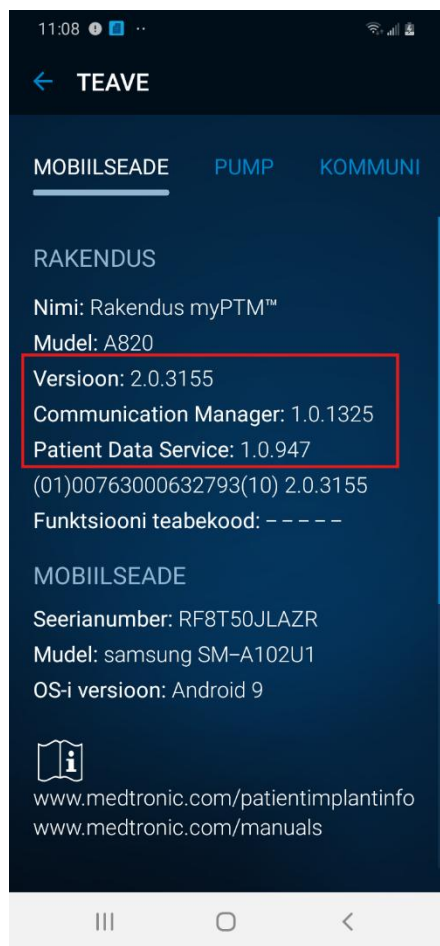

Ak sa čísla verzií zhodujú, aktualizácia sa úspešne dokončila a mobilný ovládač môžete používať ako zvyčajne.

Ak sa niektoré čísla verzií nezhodujú, vráťte sa na krok **Časť 2: Aktualizácia aplikácií** a podľa potreby znova aktualizujte verzie aplikácií.


Aktualizácia dokončená

Pokyny pre mobilný ovládač Samsung J3




Časť 1: Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Ťuknite na ikonu **Settings** (Nastavenie) na domovskej obrazovke mobilného ovládača.

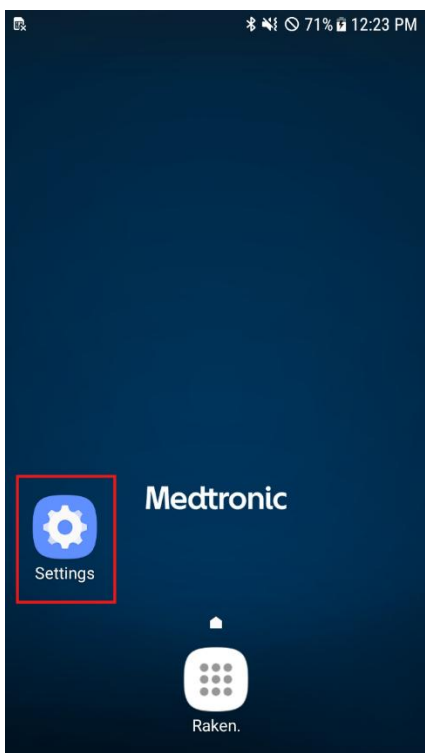

- 2 Ťuknite na položku **Connections** (Pripojenia).

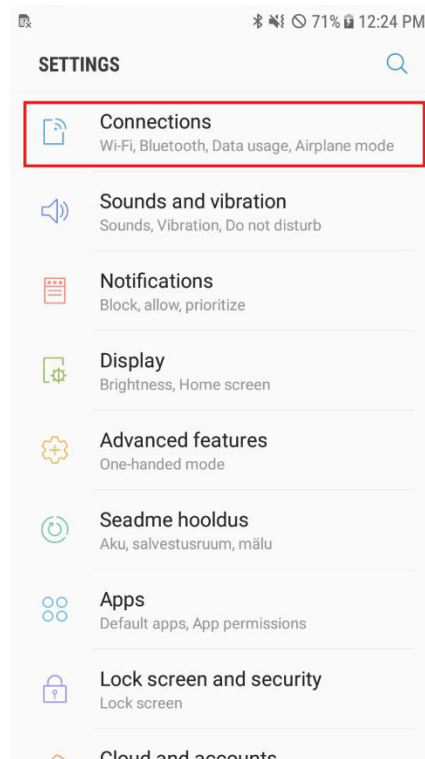


- 3 Nájdite sieť **Wi-Fi**, ťuknutím na prepínač ho zapnete a jeho farba sa zmení na modrú



- 4 Ťuknite na bezdrôtovú sieť, ktorú chcete použiť.

- 5 Ťuknite na možnosť **Connect** (Pripojiť)

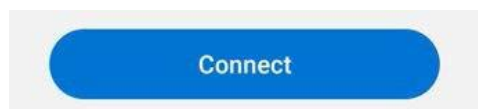

Pokyny pre mobilný ovládač Samsung J3




**** Pokyny MUSIA byť dodržané v uvedenom poradí ****

Časť 2: Aktualizácia aplikácií


- 1 Stlačením tlačidla domovskej obrazovky sa vrátte na domovskú obrazovku.



- 2 Z domovskej obrazovky prejdite do zásuvky s aplikáciami.

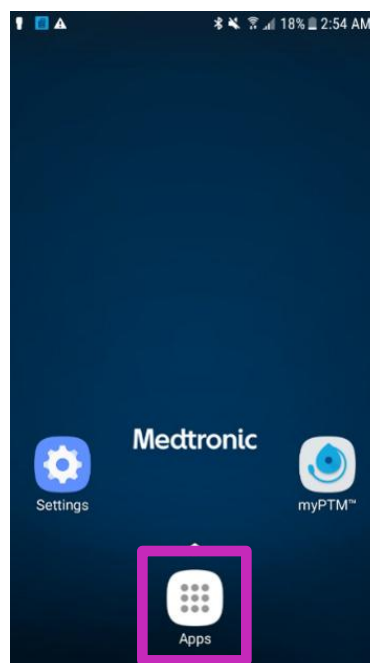


- 3 Ťuknite na aplikáciu **Hub**.

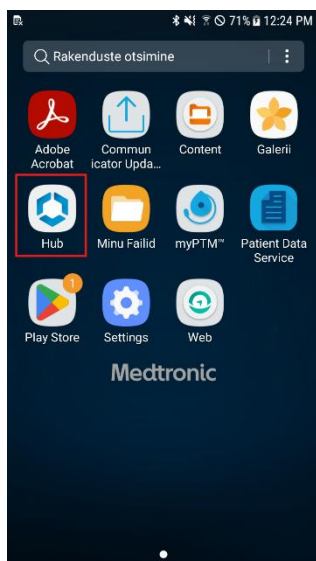


Pokyny pre mobilný ovládač Samsung J3



- 4 Potiahnutím prstom nadol na obrazovke Apps (Aplikácie) obnovte aplikácie uvedené v aplikácii Hub.

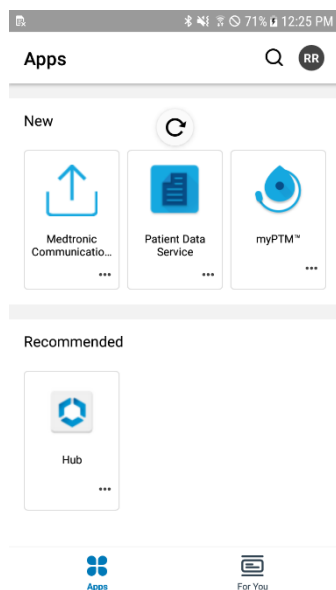

- 5 V časti Categories (Kategórie) vyberte možnosť **All Apps** (Všetky aplikácie). Možno budete musieť rolovať na spodnú časť obrazovky.

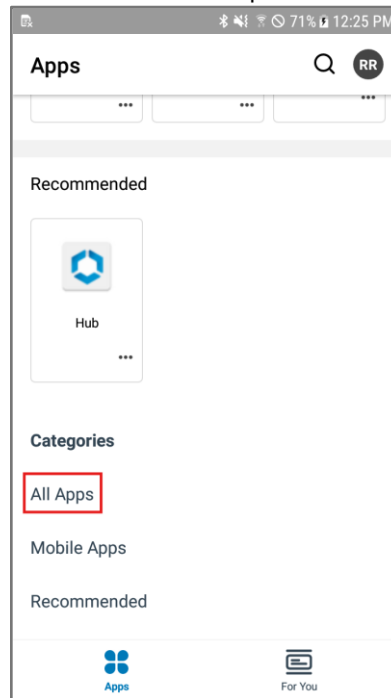

Pokyny pre mobilný ovládač Samsung J3



- 6 Vyhľadajte aplikáciu **Intelligent Hub** a ťuknite na možnosť **UPDATE** (AKTUALIZOVAŤ). Ak sa táto aplikácia nenachádza v zozname, nie je potrebná žiadna aktualizácia. Prejdite na krok 7.

(Následne už neťukajte na možnosť **OPEN** (OTVORIŤ), inak sa otvorí predchádzajúca verzia aplikácie.)



Intelligent Hub -
Workspace ONE
97.2 MB | V 24.04.0.127

UPDATE

OPEN

- 7 Vyhľadajte aplikáciu **Patient Data Service** a ťuknite na možnosť **UPDATE** (AKTUALIZOVAŤ). (Následne už neťukajte na možnosť **OPEN** (OTVORIŤ), inak sa otvorí predchádzajúca verzia aplikácie.)



Patient Data Service
13.5 MB | V 1.0.947

UPDATE

OPEN

- 8 Vyhľadajte aplikáciu **Medtronic Communication Manager** a ťuknite na možnosť **UPDATE** (AKTUALIZOVAŤ). (Následne už neťukajte na možnosť **OPEN** (OTVORIŤ), inak sa otvorí predchádzajúca verzia aplikácie.)



Medtronic
Communication
14.4 MB | V 1.0.1325

UPDATE

OPEN

- 9 Vyhľadajte aplikáciu **myPTM** a ťuknite na možnosť **UPDATE** (AKTUALIZOVAŤ). (Následne už neťukajte na možnosť **OPEN** (OTVORIŤ), inak sa otvorí predchádzajúca verzia aplikácie.)



myPTM™
40.3 MB | V 2.0.3155

UPDATE


OPEN

- 10 Počkajte 2 minúty na dokončenie aktualizácií.


Pokyny pre mobilný ovládač Samsung J3




- 11 Ťuknite na šípku späť v ľavom hornom rohu.

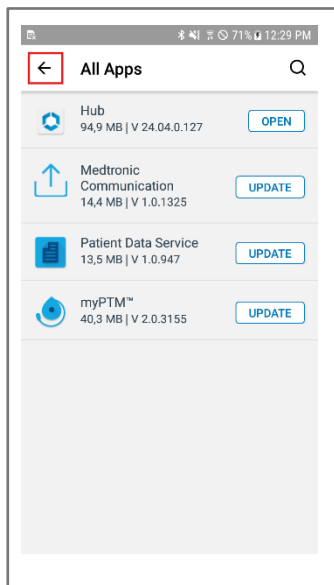



- 12 Ťuknite na ikonu konta v pravom hornom rohu. Písmená v ikone konta sa môžu pre váš mobilný ovládač líšiť.

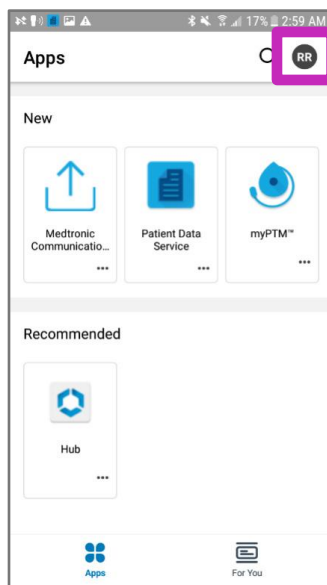

- 13 Ťuknite na možnosť **This Device** (Toto zariadenie).

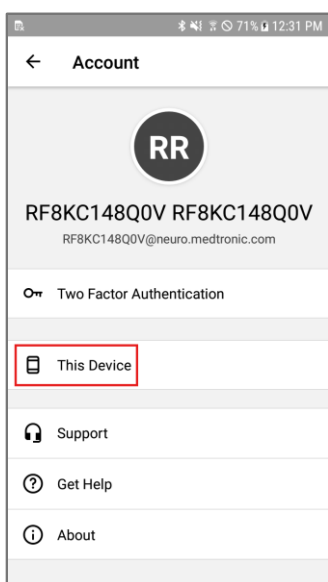


- 14 Rolujte na spodnú časť obrazovky a ťuknite na možnosť **Sync device** (Synchronizovať zariadenie). V spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa **Checking for updates** (Hľadajú sa aplikácie).

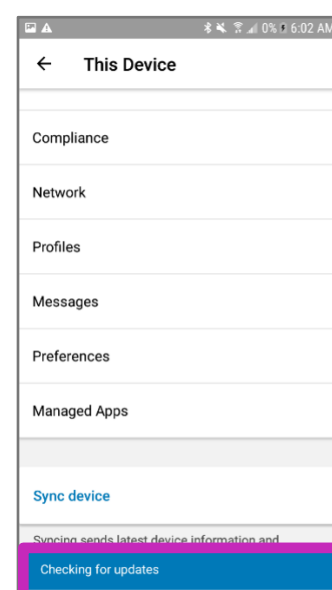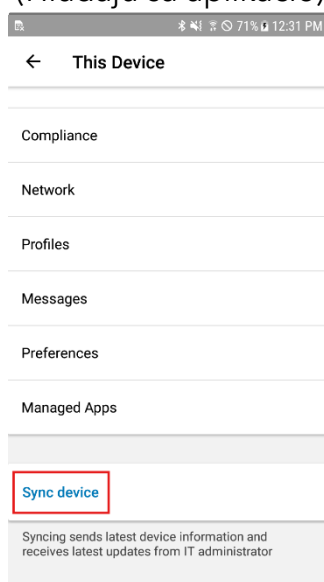

Pokyny pre mobilný ovládač Samsung J3



- 15 Prejdite späť do hornej časti obrazovky a skontrolujte, či sa dátum a čas položky **Last seen** (Naposledy zobrazené) aktualizovali na aktuálny dátum a čas. Ak sa tieto údaje neaktualizovali, zopakujte krok 14.

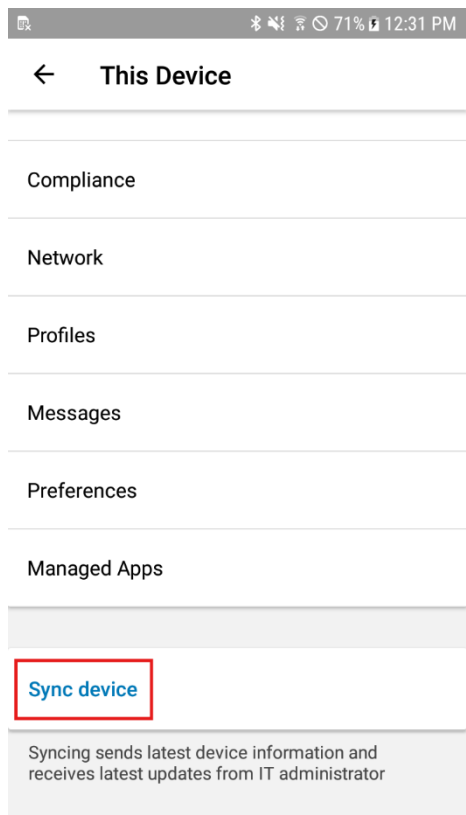

Pokyny pre mobilný ovládač Samsung J3




Časť 3: Kontrola, či sú aplikácie aktualizované

- 1 Stlačením tlačidla domovskej obrazovky sa vrátte na domovskú obrazovku.



- 2 Ťuknite na aplikáciu **myPTM**

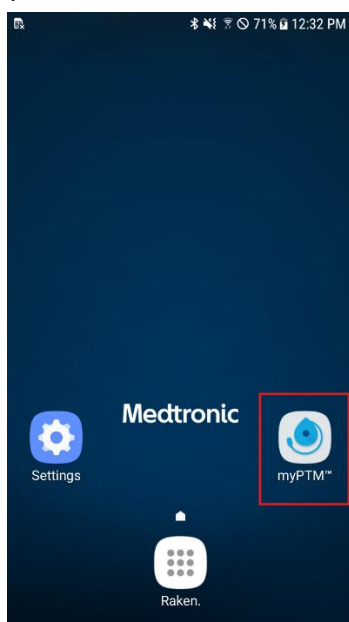


- 3 Pri pripájaní pumpy postupujte podľa pokynov na obrazovke, až kým sa nezobrazí domovská obrazovka.


Uistite sa, že váš komunikátor je zapnutý a umiestnený priamo nad pumpou.

Aktualizácia komunikátora môže byť k dispozícii v závislosti od veku vášho komunikátora.

- 4 Ťuknite na ikonu ponuky v ľavom rohu obrazovky.

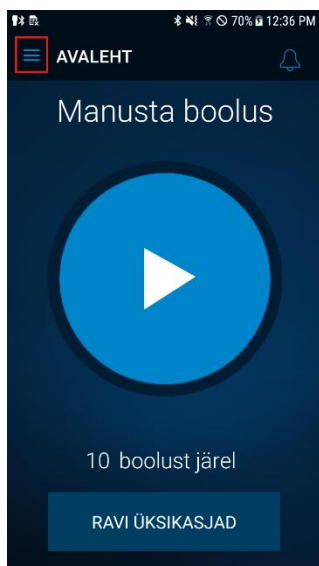

- 5 Ťuknite na možnosť **About** (Informácie).

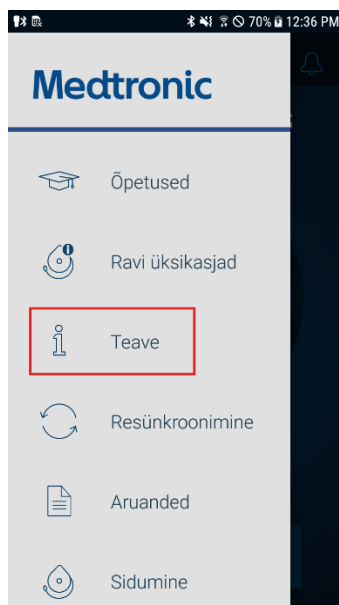


Pokyny pre mobilný ovládač Samsung J3



6

Skontrolujte, či sa zobrazujú nasledujúce údaje:

- Version** (Verzia): 2.0.3155
- Communication Manager**: 1.0.1325
- Patient Data Service**: 1.0.947

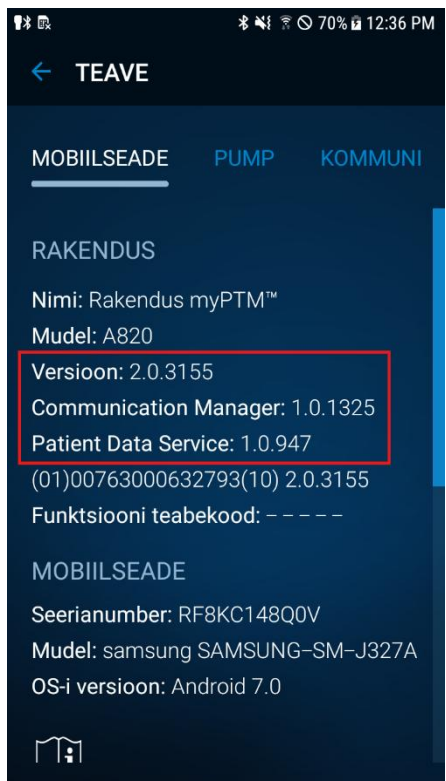

Ak sa čísla verzií zhodujú, aktualizácia sa úspešne dokončila a mobilný ovládač môžete používať ako zvyčajne.

Ak sa niektoré čísla verzií nezhodujú, vráťte sa na krok **Časť 2: Aktualizácia aplikácií** a podľa potreby znova aktualizujte verzie aplikácií.

Aktualizácia dokončená

Stručné vyhlásenie

Stručné vyhlásenie:

Tento materiál sa nemá považovať za výlučný zdroj informácií, nenahrádza ani nepotláča informácie uvedené v príručkách k zariadeniu.

Upozorňujeme, že určené použitie výrobku sa môže líšiť v závislosti od schválení v danej geografickej oblasti.

Podrobné informácie o určenom použití, zákroku (implantácie), indikáciách, kontraindikáciách, varovaniach, bezpečnostných opatreniach a potenciálnych nežiaducich účinkoch nájdete v príručke ku konkrétnemu zariadeniu.

Informácie o zariadeniach kompatibilných s vyšetrením MRI si prečítajte v príručkách k zariadeniam v časti venovanej vyšetreniu MRI ešte pred vykonaním vyšetrenia MRI.

Ak je zariadenie oprávnené na používanie elektronického návodu na použitie, nájdete ho na webovej lokalite spoločnosti Medtronic na adrese manuals.medtronic.com.

Príručky je možné zobrazíť pomocou aktuálnej verzie ktoréhokoľvek široko používaného internetového prehliadača. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak s prehliadačom použijete Adobe Acrobat® Reader.

Výrobky od spoločnosti Medtronic uvedené na trh sú v súlade s právnymi predpismi (ak sú relevantné) o zdravotníckych pomôckach. Akékoľvek ďalšie informácie získate od miestneho zástupcu spoločnosti Medtronic a/alebo na webových lokalitách spoločnosti Medtronic.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004