

Medtronic

Ažuriranje softvera ručnog sklopa putem Wi-Fi mreže


Priprema

Napajanje: provjerite je li ručni sklop uključen u struju ili ima li više od 35 posto snage baterije te je li komunikator dostupan i napunjen prije instaliranja bilo kakvih ažuriranja.

Wi-Fi: obavezno upotrebljavajte pouzdanu Wi-Fi mrežu, kao što je vaš kućni pružatelj usluga. Prije početka imajte pri ruci naziv Wi-Fi mreže i lozinku.

Vrijeme: ovisno o jačini mreže, ovaj postupak može potrajati i do 30 minuta.

Model ručnog sklopa: pomoću slika u nastavku odredite koji model ručnog sklopa imate. Ručni sklop Samsung J3 ima fizički početni gumb u donjem srednjem dijelu.

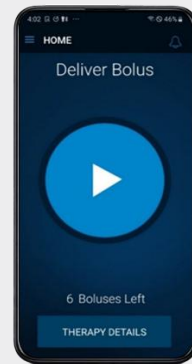

Samsung A10e

Ako imate ručni sklop Samsung A10e, pogledajte upute na stranici 3.

[Kliknite ovdje za Samsung A10e](#)



Fizički Početni gumb

Samsung J3

Ako imate ručni sklop Samsung J3, pogledajte upute na stranici 10.

[Kliknite ovdje za Samsung J3](#)

Sadržaj



Priprema	1
Upute za ručni sklop Samsung A10e	3
1. dio: povezivanje s Wi-Fi mrežom	3
2. dio: ažurirajte aplikacije	4
3. dio: potvrdite da su aplikacije ažurirane	8
Upute za ručni sklop Samsung J3.....	10
1. dio: povezivanje s Wi-Fi mrežom	10
2. dio: ažurirajte aplikacije	11
3. dio: potvrdite da su aplikacije ažurirane	16
Kratka izjava	18

Upute za ručni sklop Samsung A10e




1. dio: povezivanje s Wi-Fi mrežom

1. Dodirnite ikonu **Settings** (Postavke) na početnom zaslonu ručnog sklopa.
2. Dodirnite **Connections** (Veze).

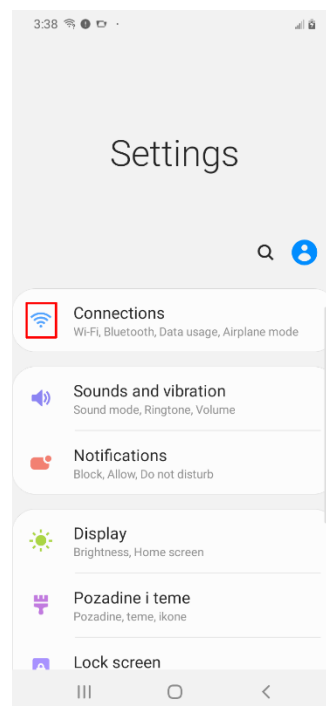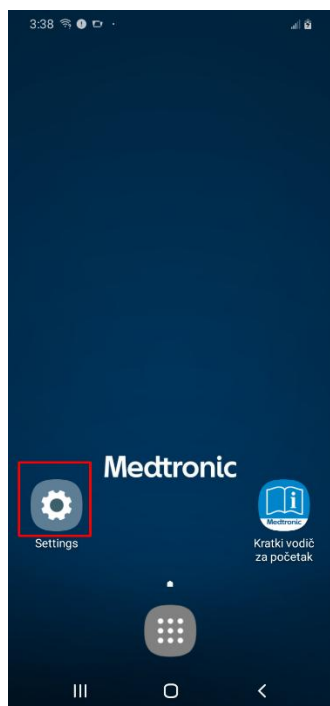


3. Pronađite **Wi-Fi** i dodirnite prekidač tako da se prebaci na ON (Uključeno) i postane plave boje

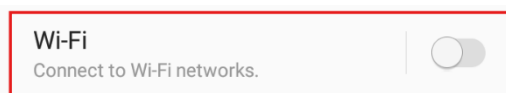

4. Dodirnite bežičnu mrežu koju želite upotrijebiti.

5. Dodirnite **Connect** (Poveži).

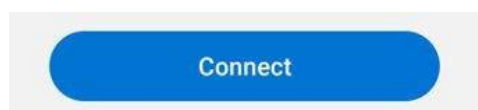


Upute za ručni sklop Samsung A10e



**** Upute se MORAJU slijediti ovim redoslijedom ****

2. dio: ažurirajte aplikacije


1. Povratak na početni zaslon

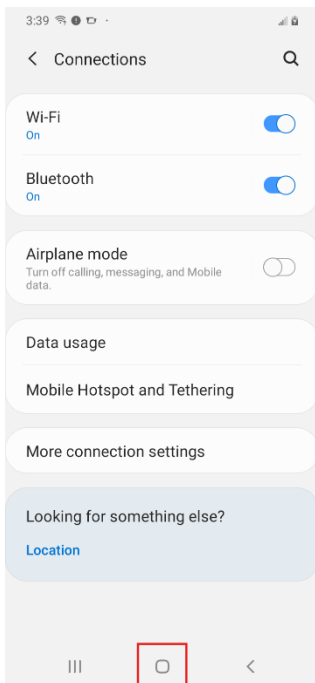

2. Otvorite odjeljak aplikacije na početnom zaslonu.




3. Dodirnite aplikaciju **Hub**.
(Ikona aplikacije Hub može se razlikovati ovisno o starosti ručnog sklopa.)

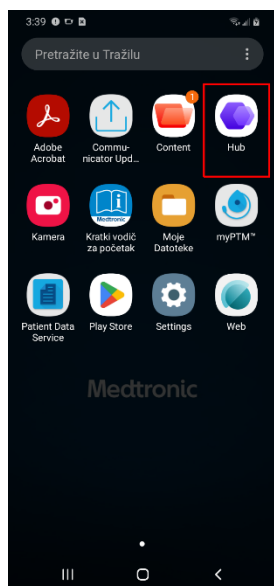


Upute za ručni sklop Samsung A10e




4. Osvježite aplikacije navedene u aplikaciji Hub tako da prstom povučete prema dolje na zaslonu Apps (Aplikacije).
5. U odjeljku Categories (Kategorije) odaberite **All Apps** (Sve aplikacije). Možda ćete se morati pomaknuti prema dolje do dna zaslona.

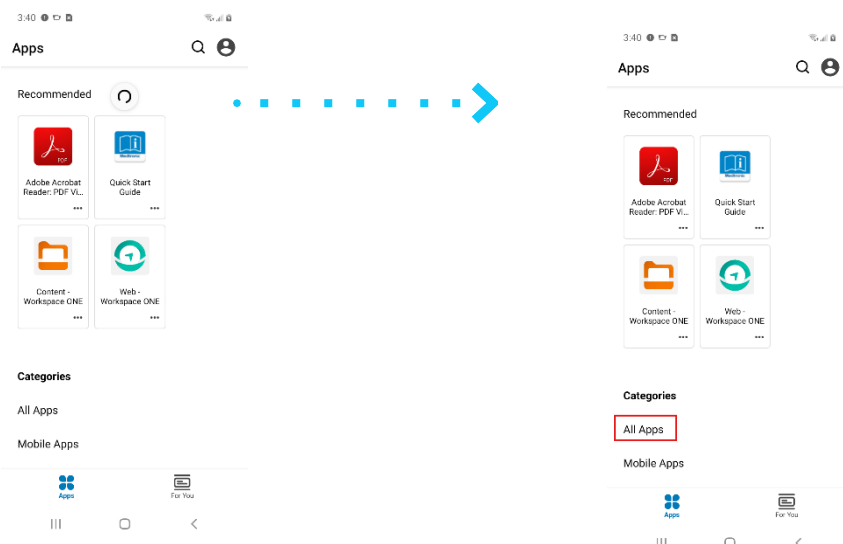


6. Pronađite aplikaciju **Patient Data Service** i dodirnite **UPDATE** (AŽURIRAJ).
(Nemojte dodirnuti **OPEN** (OTVORI) nakon toga jer će se otvoriti prethodna inačica aplikacije.)

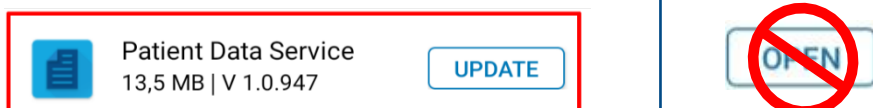

7. Pronađite aplikaciju **Medtronic Communication Manager** i dodirnite **UPDATE** (AŽURIRAJ).
(Nemojte dodirnuti **OPEN** (OTVORI) nakon toga jer će se otvoriti prethodna inačica aplikacije.)

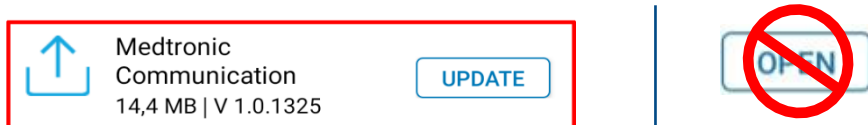

8. Pronađite aplikaciju **myPTM** i dodirnite **UPDATE** (AŽURIRAJ).

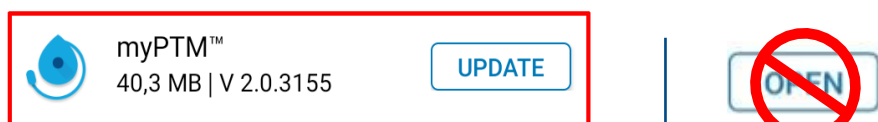


(Nemojte dodirnuti **OPEN** (OTVORI) nakon toga jer će se otvoriti prethodna inačica aplikacije.)

9. Pričekajte 2 minute da se ažuriranja završe.


Upute za ručni sklop Samsung A10e




10. Dodirnite strelicu za natrag u gornjem lijevom kutu.

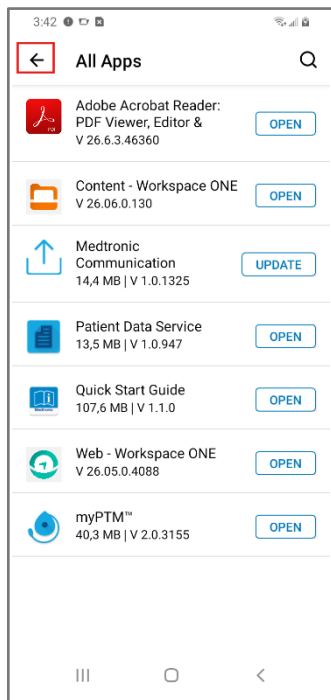



11. Dodirnite ikonu računa u gornjem desnom kutu. Slova u ikoni računa mogu se razlikovati za vaš ručni sklop.

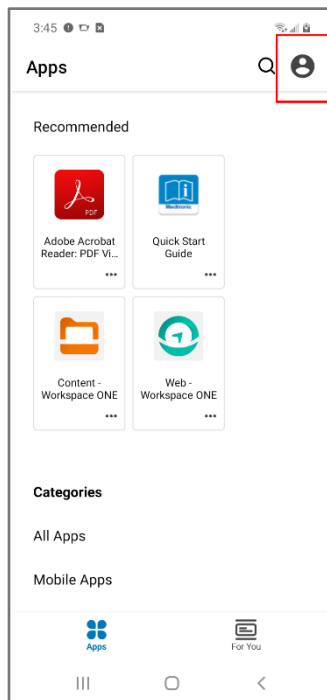

12. Dodirnite **This Device** (Ovaj uređaj).

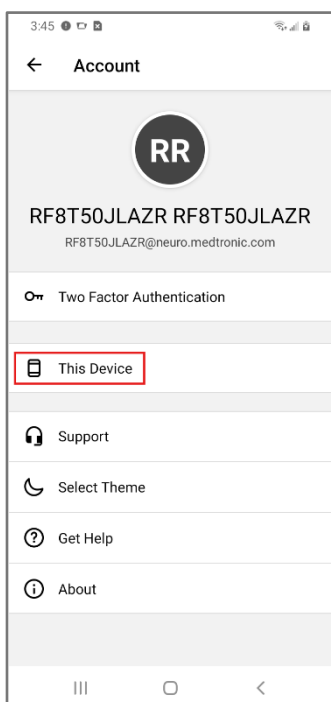


13. Pomaknite se do dna zaslona i dodirnite **Sync device** (Sinkroniziraj uređaj). Na dnu zaslona prikazat će se poruka „**Checking for updates**” (Tražim ažuriranja).

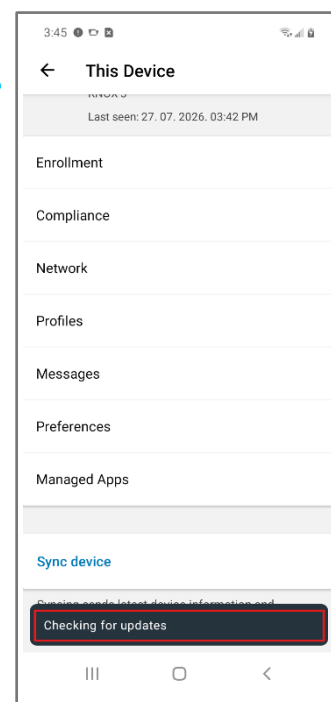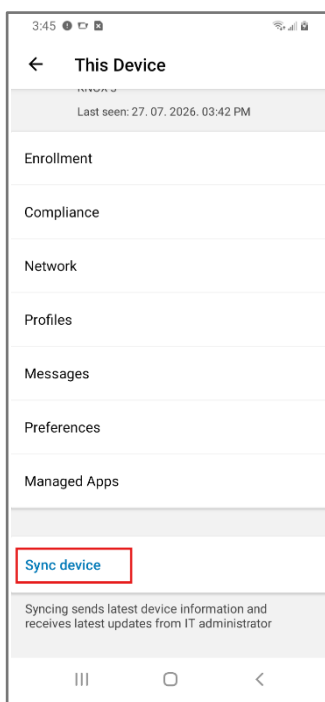

Upute za ručni sklop Samsung A10e



14. Vratite se na vrh zaslona i potvrdite da su datum i vrijeme u odjeljku **Last seen** (Posljednji pregled) ažurirani na trenutni datum i vrijeme. Ako nisu ažurirani, ponovite 13. korak.

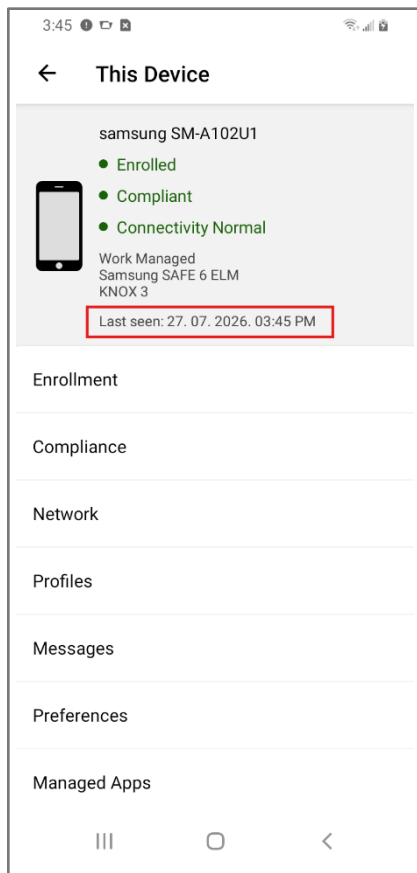


Upute za ručni sklop Samsung A10e



3. dio: potvrdite da su aplikacije ažurirane

1. Povratak na početni zaslon

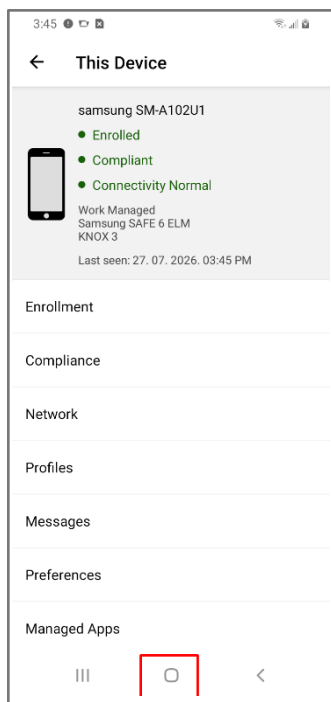

2. Dodirnite aplikaciju **myPTM**.




3. Slijedite upute na zaslonu da biste se spojili na pumpu sve dok ne dođete do početnog zaslona.

Pazite da komunikator bude uključen i postavljen izravno iznad pumpe.

4. U gornjem lijevom kutu zaslona dodirnite ikonu izbornika.




5. Dodirnite **About** (O sustavu)

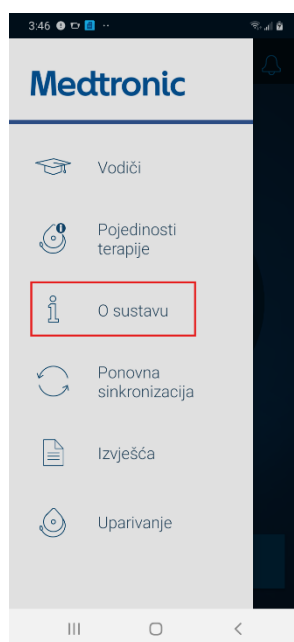

Upute za ručni sklop Samsung A10e



6. Potvrdite da prikazuje:
- Inačica:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

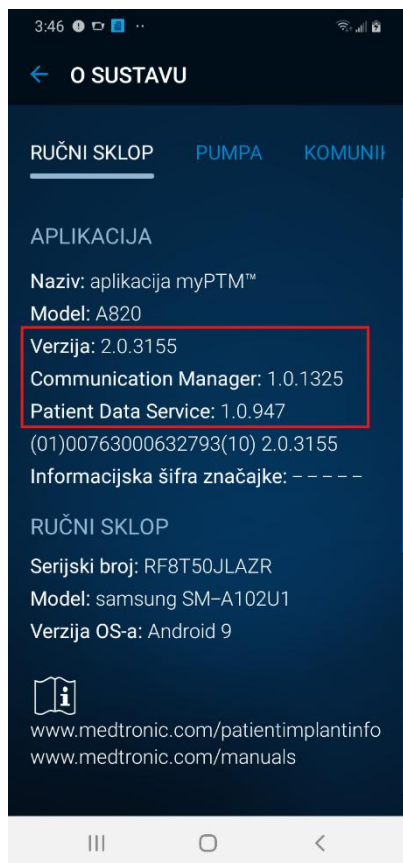

Ako se brojevi inačica podudaraju, ažuriranje je uspješno dovršeno i možete upotrebljavati ručni sklop na uobičajeni način.

Ako se bilo koji od brojeva inačica ne podudara, vratite se na **2. dio: ažurirajte aplikacije** i po potrebi ponovo ažurirajte inačice aplikacije.


Ažuriranje dovršeno

Upute za ručni sklop Samsung J3




1. dio: povezivanje s Wi-Fi mrežom

1. Dodirnite ikonu **Settings** (Postavke) na početnom zaslonu ručnog sklopa.

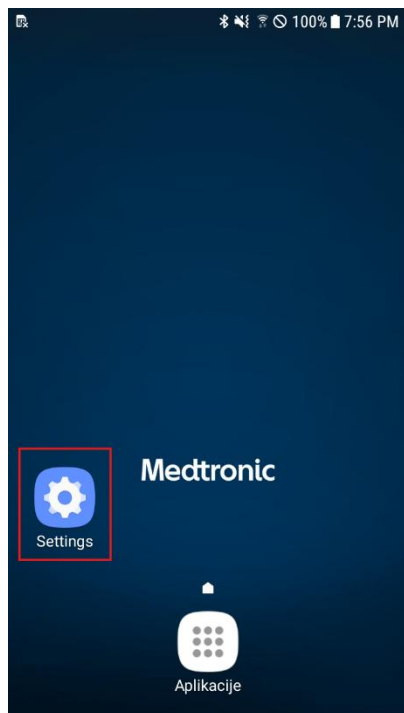

2. Dodirnite **Connections** (Veze).

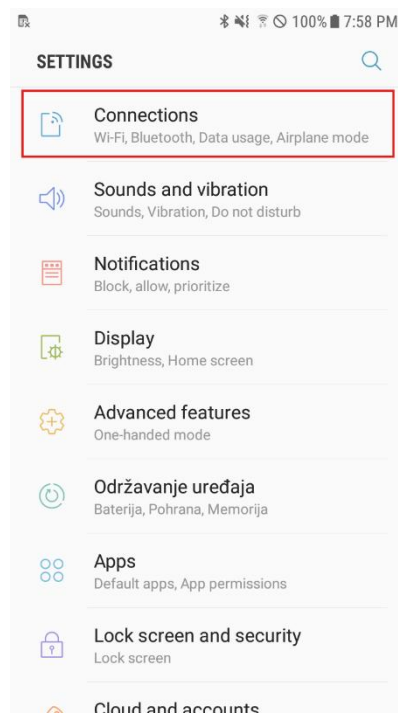


3. Pronađite **Wi-Fi** i dodirnite prekidač tako da se prebaci na ON (Uključeno) i postane plave boje



4. Dodirnite bežičnu mrežu koju želite upotrijebiti.

5. Dodirnite **Connect** (Poveži).

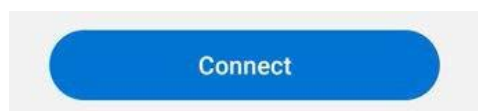


Upute za ručni sklop Samsung J3




**** Upute se MORAJU slijediti ovim redoslijedom ****

2. dio: ažurirajte aplikacije

1. Pritiskom na početni gumb vratite se na početni zaslon.
2. Otvorite odjeljak aplikacije na početnom zaslonu.

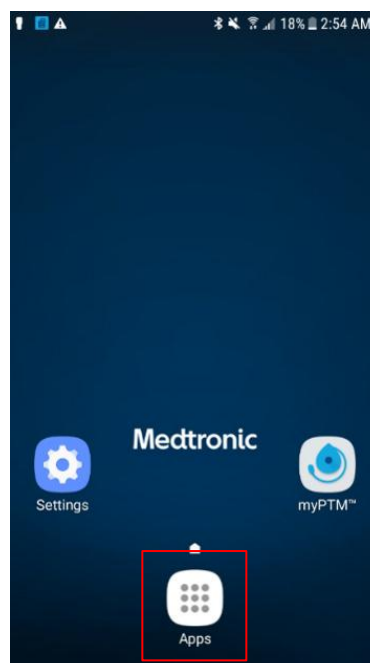



3. Dodirnite aplikaciju **Hub**.

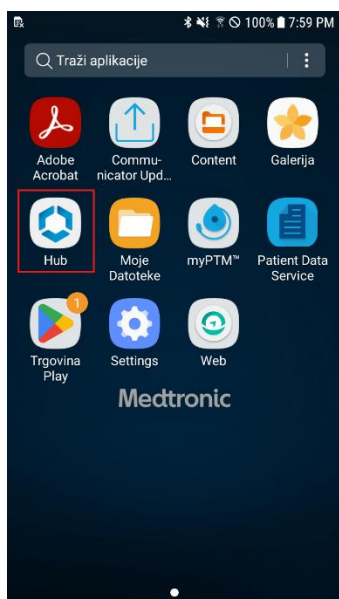

Upute za ručni sklop Samsung J3



4. Osvježite aplikacije navedene u aplikaciji Hub tako da prstom povučete prema dolje na zaslonu Apps (Aplikacije).
5. U odjeljku Categories (Kategorije) odaberite **All Apps** (Sve aplikacije). Možda ćete se morati pomaknuti prema dolje do dna zaslona.

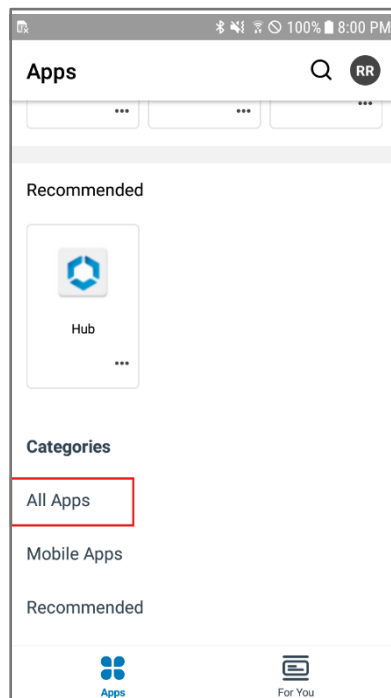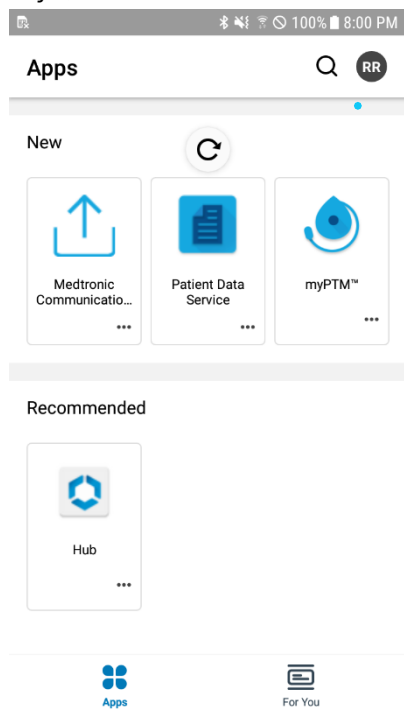


Upute za ručni sklop Samsung J3




6. Pronađite aplikaciju **Intelligent Hub** i dodirnite **UPDATE** (AŽURIRAJ).
Ako ne vidite ovu aplikaciju na popisu, nije potrebno ažuriranje. Prijeđite na korak 7.
(Nemojte dodirnuti **OPEN** (OTVORI) nakon toga jer će se otvoriti prethodna inačica aplikacije.)




7. Pronađite aplikaciju **Patient Data Service** i dodirnite **UPDATE** (AŽURIRAJ).
(Nemojte dodirnuti **OPEN** (OTVORI) nakon toga jer će se otvoriti prethodna inačica aplikacije.)

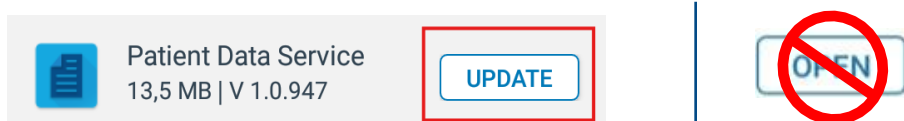

8. Pronađite aplikaciju **Medtronic Communication Manager** i dodirnite **UPDATE** (AŽURIRAJ).
(Nemojte dodirnuti **OPEN** (OTVORI) nakon toga jer će se otvoriti prethodna inačica aplikacije.)

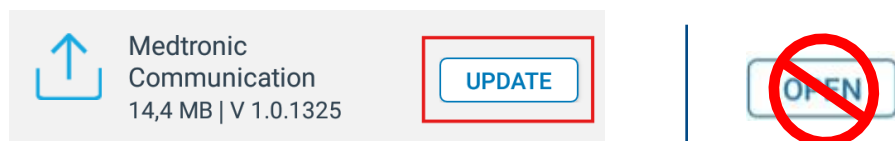

9. Pronađite aplikaciju **myPTM** i dodirnite **UPDATE** (AŽURIRAJ).
(Nemojte dodirnuti **OPEN** (OTVORI) nakon toga jer će se otvoriti prethodna inačica aplikacije.)

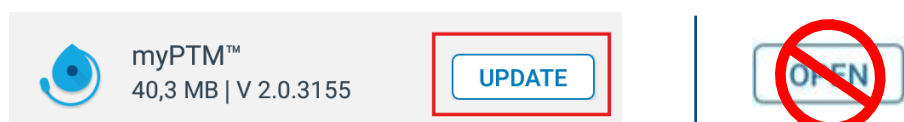


10. **Pričekajte** 2 minute da se ažuriranja završe.


Upute za ručni sklop Samsung J3




11. Dodirnite strelicu za natrag u gornjem lijevom kutu.

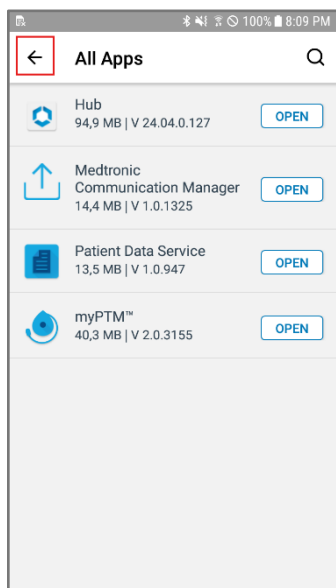



12. Dodirnite ikonu računa u gornjem desnom kutu. Slova u ikoni računa mogu se razlikovati za vaš ručni sklop.

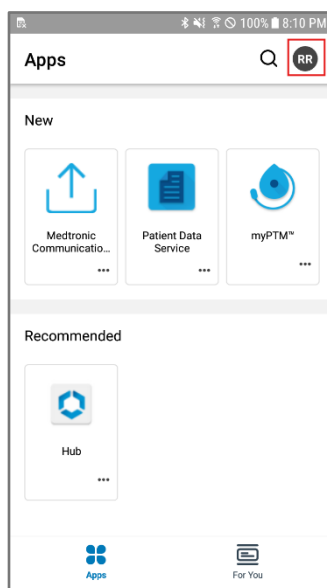

13. Dodirnite **This Device** (Ovaj uređaj).

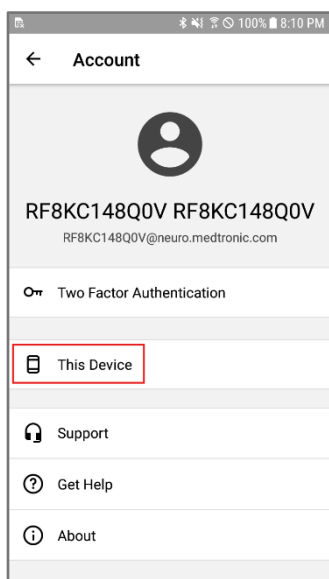


14. Pomaknite se do dna zaslona i dodirnite **Sync device** (Sinkroniziraj uređaj). Na dnu zaslona prikazat će se poruka „**Checking for updates**” (Tražim ažuriranja).

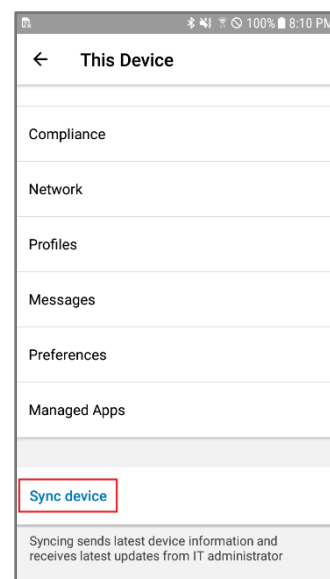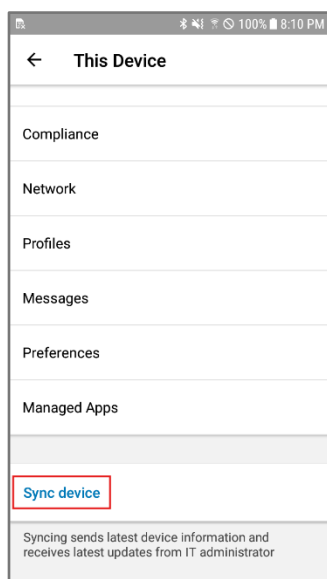

Upute za ručni sklop Samsung J3



15. Vratite se na vrh zaslona i potvrdite da su datum i vrijeme u odjeljku **Last seen** (Posljednji pregled) ažurirani na trenutačni datum i vrijeme. Ako nisu ažurirani, ponovite 14. korak.

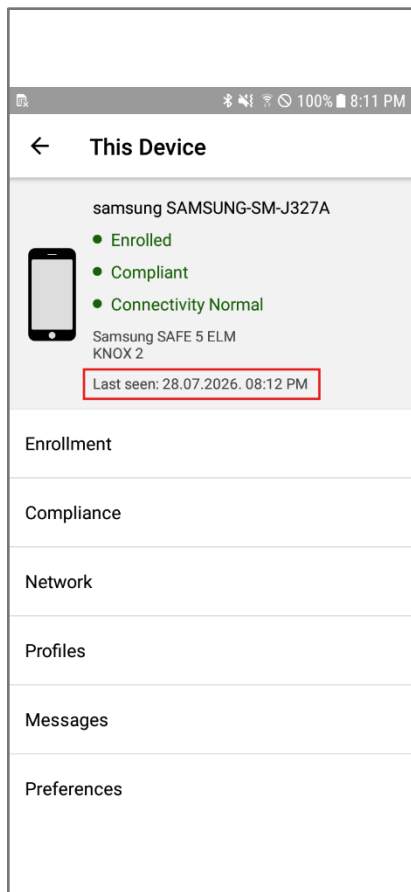

Upute za ručni sklop Samsung J3




3. dio: potvrdite da su aplikacije ažurirane

1. Pritiskom na početni gumb vratite se na početni zaslon.



2. Dodirnite aplikaciju **myPTM**.

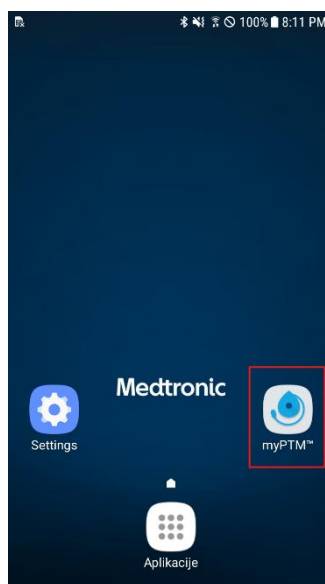


3. Slijedite upute na zaslonu da biste se spojili na pumpu sve dok ne dođete do početnog zaslona.


Pazite da komunikator bude uključen i postavljen izravno iznad pumpe.

Ažuriranje komunikatora može nastupiti, ovisno o starosti komunikatora.

4. U gornjem lijevom kutu zaslona dodirnite ikonu izbornika.

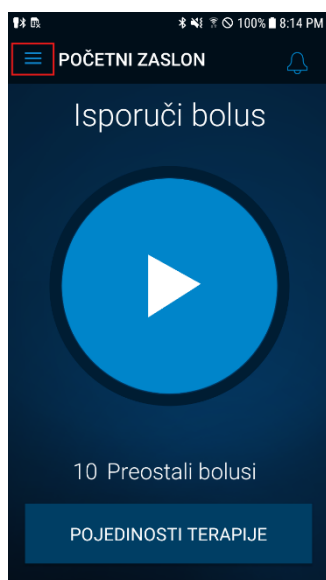


5. Dodirnite **About** (O sustavu)

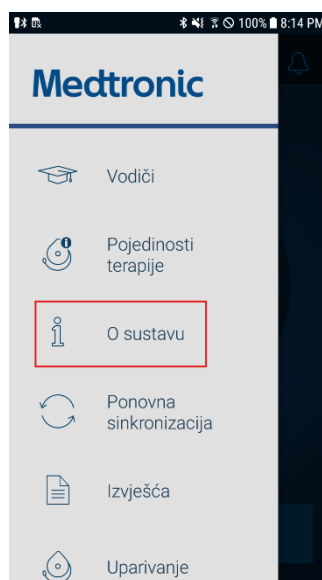

Upute za ručni sklop Samsung J3



6. Potvrdite da prikazuje:
- Inačica:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

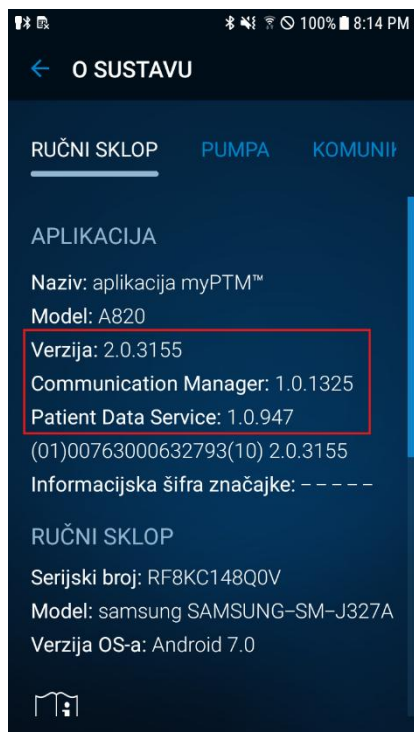

Ako se brojevi inačica podudaraju, ažuriranje je uspješno dovršeno i možete upotrebljavati ručni sklop na uobičajeni način.

Ako se bilo koji od brojeva inačica ne podudara, vratite se na **2. dio: ažurirajte aplikacije** i po potrebi ponovo ažurirajte inačice aplikacije.

Ažuriranje dovršeno

Kratka izjava

Kratka izjava:

Ovaj se materijal ne smije smatrati isključivim izvorom informacija, ne zamjenjuje niti nadjačava informacije sadržane u priručnicima za proizvod(e).

Napominjemo da se predviđena uporaba proizvoda može razlikovati ovisno o odobrenjima u različitim geografskim područjima.

U priručnicima za proizvod(e) potražite detaljne informacije o predviđenoj upotrebi, postupku implantacije, indikacijama, kontraindikacijama, upozorenjima, mjerama opreza i potencijalnim nuspojavama.

Kad je riječ o proizvodima kompatibilnima za upotrebu s MR-om, prije snimanja MR-om pogledajte informacije o snimanju MR-om u priručniku za proizvod

.

Ako je proizvod prikladan za upotrebu e-uputa za upotrebu, upute za upotrebu dostupne su na web-mjestu tvrtke Medtronic manuals.medtronic.com.

Priručnike je moguće pogledati s pomoću aktualne verzije svih važnijih internetskih preglednika. Za najbolje rezultate uz preglednik upotrijebite Adobe Acrobat® Reader.

Proizvodi tvrtke Medtronic dostupni na tržištima u skladu su sa zakonodavstvom (ako je primjenjivo) o medicinskim proizvodima. Za više informacija obratite se svom lokalnom predstavniku društva Medtronic i/ili posjetite internetske stranice društva Medtronic.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004