

Medtronic

A készülék szoftverének frissítése Wi-Fi segítségével

Előkészítés

Áramellátás: Minden frissítés telepítése előtt győződjön meg róla, hogy a készüléke csatlakoztatva van, vagy az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 35 százalékot, továbbá a kommunikációs készülék elérhető és feltöltött állapotban van.

Wi-Fi: Ügyeljen arra, hogy megbízható Wi-Fi-hálózatot használjon, például az otthoni szolgáltatóját. Kezds előtt legyen kéznél a Wi-Fi-hálózat neve és jelszava.

Idő: A hálózat erősségétől függően ez a folyamat akár 30 percet is igénybe vehet.

A készülék típusa: Az alábbi képek segítségével állapítsa meg, hogy melyik készülék-típussal rendelkezik. A Samsung J3 készülék alsó részének közepén fizikai kezdőoldal gomb található.



Samsung A10e

Ha Samsung A10e készüléke van, olvassa el a 3. oldalon található utasításokat.

[Kattintson ide a Samsung A10e készülékhez](#)



Fizikai kezdőoldal gomb

Samsung J3

Ha Samsung J3 készüléke van, olvassa el a 10. oldalon található utasításokat.

[Kattintson ide a Samsung J3 készülékhez](#)



Tartalomjegyzék



Előkészítés	1
Útmutató a Samsung A10e készülékhez	3
1. rész: Csatlakozás Wi-Fi-hez.....	3
2. rész: Alkalmazások frissítése.....	4
3. rész: Az alkalmazások frissítésének megerősítése	8
Útmutató a Samsung J3 készülékhez.....	10
1. rész: Csatlakozás Wi-Fi-hez.....	10
2. rész: Alkalmazások frissítése.....	11
3. rész: Az alkalmazások frissítésének megerősítése	16
Rövid nyilatkozat	18

Útmutató a Samsung A10e készülékhez



1. rész: Csatlakozás Wi-Fi-hez

- 1 Koppintson a **Settings (Beállítások)** ikonra a készülék kezdőképernyőjén.
- 2 Koppintson a **Connections (Kapcsolatok)** lehetőségre.

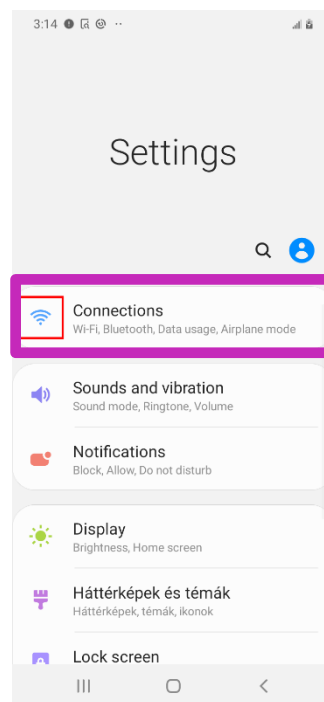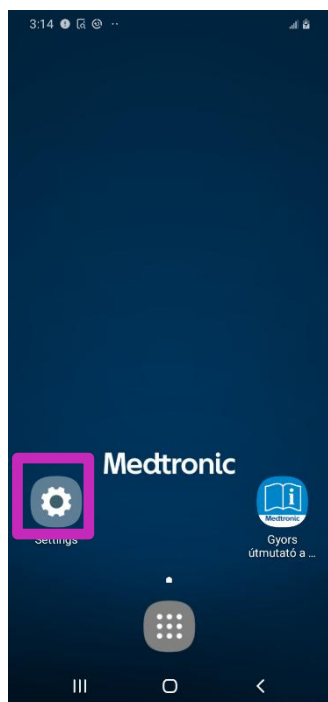


- 3 Keresse meg a **Wi-Fi** elemet, és koppintson a kapcsolóra, hogy bekapcsoljon és kék legyen



- 4 Koppintson a használni kívánt vezeték nélküli hálózatra.

- 5 Koppintson a **Connect (Csatlakozás)** elemre.

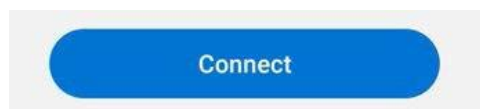


Útmutató a Samsung A10e készülékhez



** Az utasításokat ebben a sorrendben **KELL** követni **

2. rész: Alkalmazások frissítése

1 Visszatérés a kezdőképernyőre

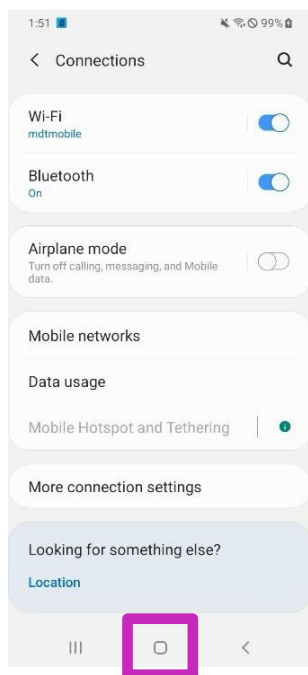


2 Miután a készülék újraindul, a kezdőképernyőről nyissa meg az alkalmazásfiókot.




3 Koppintson a **Hub** alkalmazásra.

(A Hub alkalmazás ikonja a készülék korától függően eltérő lehet.)

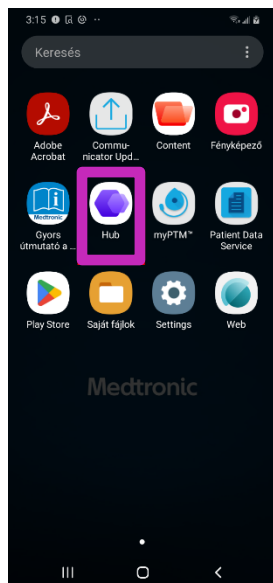


VAGY

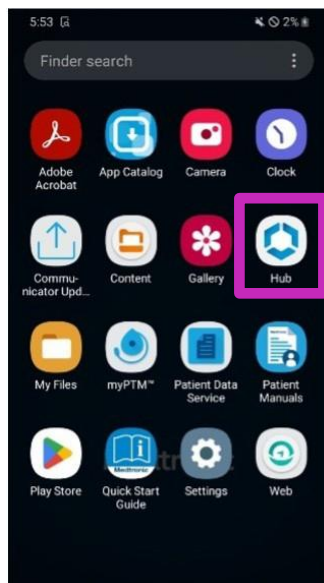


Útmutató a Samsung A10e készülékhez





- 4 Frissítse a Hub alkalmazásban felsorolt alkalmazásokat az Apps (Alkalmazások) képernyőn lefelé pöccintve.

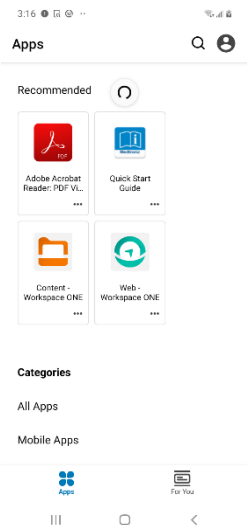

- 5 Válassza az **All Apps (Minden alkalmazás)** lehetőséget a Categories (Kategóriák) alatt. Előfordulhat, hogy le kell görgetnie a képernyő aljára.

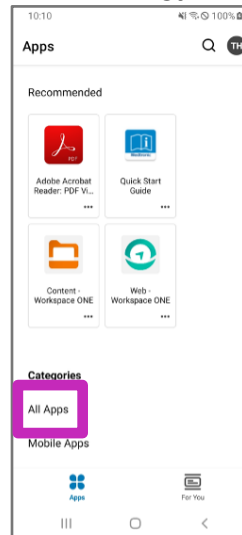


- 6 Keresse meg a **Patient Data Service (Betegadat-szolgáltatás)** alkalmazást, és koppintson az **UPDATE (FRISSÍTÉS)** gombra. (Ezután ne koppintson az **OPEN (MEGNYITÁS)** gombra, mert az alkalmazás előző verziója nyílik meg.)

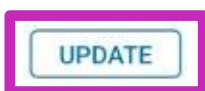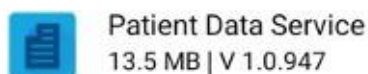

- 7 Keresse meg a **Medtronic Communication Manager (Kommunikációkezelő)** alkalmazást, és koppintson az **UPDATE (FRISSÍTÉS)** gombra. (Ezután ne koppintson az **OPEN (MEGNYITÁS)** gombra, mert az alkalmazás előző verziója nyílik meg.)



- 8 Keresse meg a **myPTM** alkalmazást, és koppintson az **UPDATE (FRISSÍTÉS)** gombra. (Ezután ne koppintson az **OPEN (MEGNYITÁS)** gombra, mert az alkalmazás előző verziója nyílik meg.)

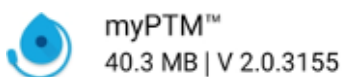


- 9 Várjon 2 percet, amíg a frissítések befejeződnek.


Útmutató a Samsung A10e készülékhez




- 10 Koppintson a bal felső sarokban lévő vissza nyílra.

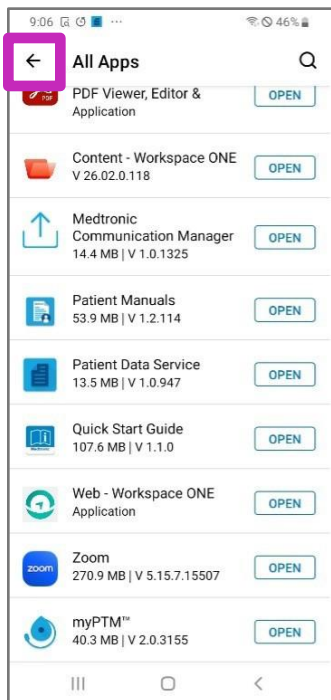



- 11 Koppintson a fiók ikonra a jobb felső sarokban. A fiók ikonon szereplő betűk eltérhetnek a készüléktől.

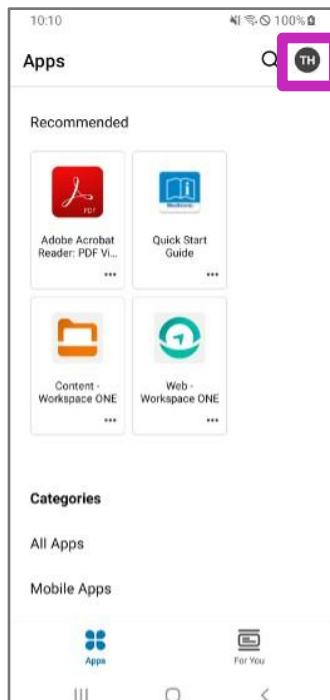

- 12 Koppintson a **This Device** (Ez az eszköz) lehetőségre.

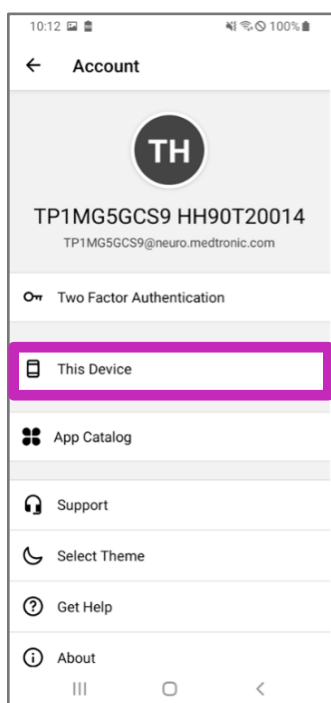


- 13 Görgessen a képernyő alsó részére, és koppintson a **Sync device** (Készülék frissítése) lehetőségre. A "Checking for updates (Frissítések keresése)" üzenet jelenik meg a képernyő alján.

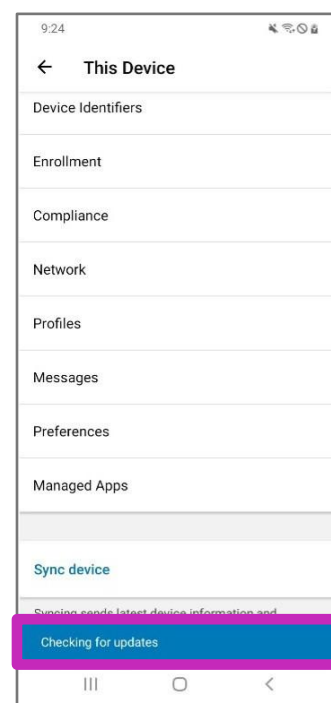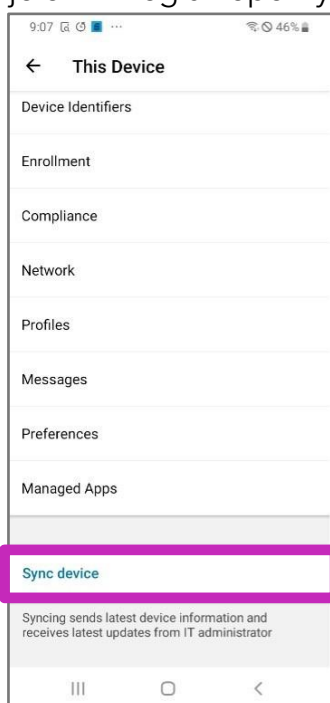

Útmutató a Samsung A10e készülékhez



- 14 Görgessen vissza a képernyő tetejére, és ellenőrizze, hogy a **Last seen (Legutóbb látva)** dátuma és időpontja frissült-e az aktuális dátumra és időpontra. Ha nem frissült, ismételje meg a 13. lépést.

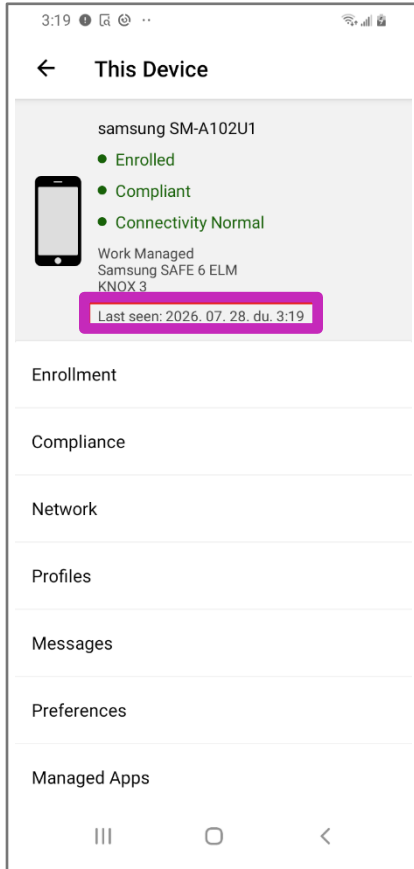


Útmutató a Samsung A10e készülékhez




3. rész: Az alkalmazások frissítésének megerősítése

- 1 Visszatérés a kezdőképernyőre

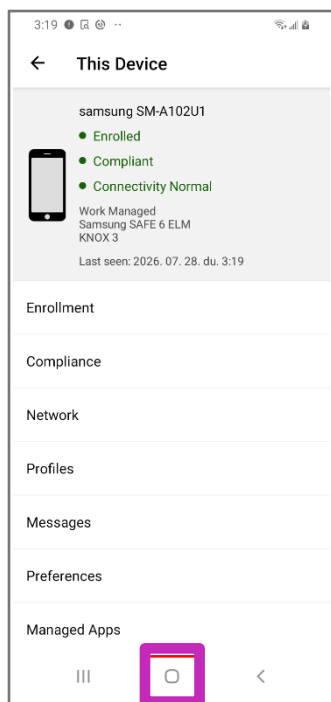

- 2 Koppintson a **myPTM** alkalmazásra.

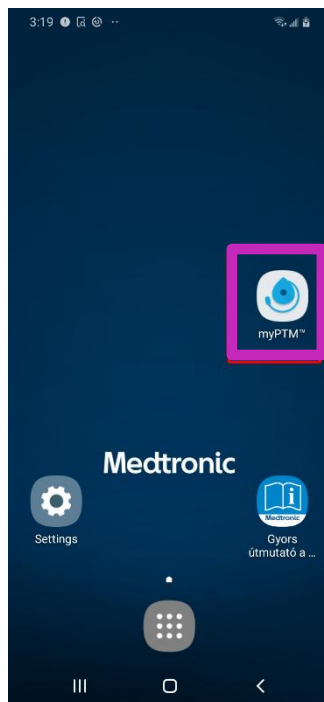


- 3 A pumpához való csatlakozáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg el nem éri a kezdőképernyőt.

Győződjön meg róla, hogy a kommunikációs készülék be van kapcsolva, és közvetlenül a pumpa fölé van helyezve.

- 4 Koppintson a képernyő bal felső sarkában található menü ikonra.



- 5 Koppintson az **About (Név-jegy)** lehetőségre

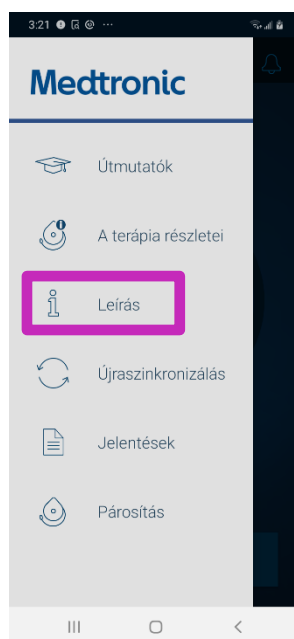


Útmutató a Samsung A10e készülékhez



- 6 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a következő:
- Version (Verzió):** 2.0.3155
 - Communication Manager (Kommunikációkezelő):** 1.0.1325
 - Patient Data Service (Betegadat-szolgáltatás):** 1.0.947

- 7 Amennyiben a verziószámok megegyeznek, a frissítés sikeresen befejeződött, és a szokásos módon használhatja a készüléket.

Ha valamelyik verziószám nem egyezik, térjen vissza a **2. rész: Alkalmazások frissítése** részhez, és szükség szerint frissítse újra az alkalmazás verzióit.

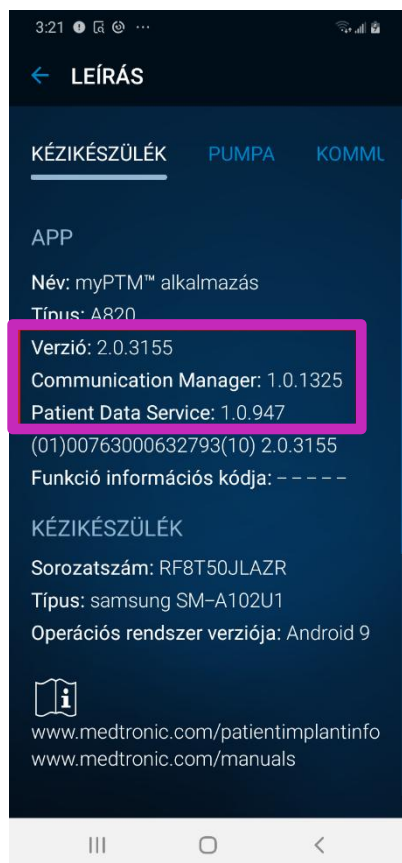


Frissítés kész

Útmutató a Samsung J3 készülékhez




1. rész: Csatlakozás Wi-Fi-hez

- 1 Koppintson a **Settings (Beállítások)** ikonra a kézi-készülék kezdőképernyőjén.

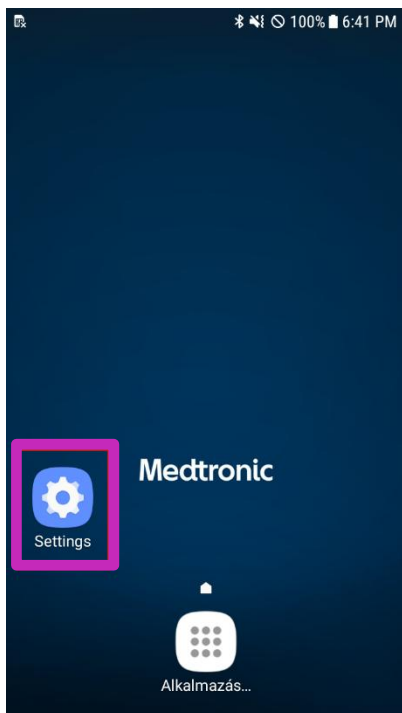

- 2 Koppintson a **Connections (Kapcsolatok)** lehetőségre.

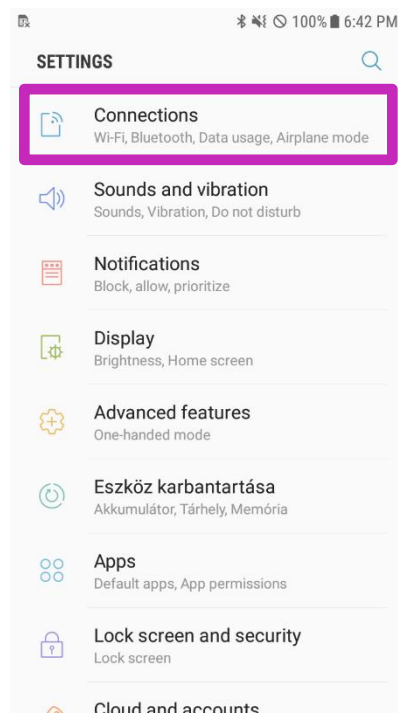


- 3 Keresse meg a **Wi-Fi** elemet, és koppintson a kapcsolóra, hogy bekapcsoljon és kék legyen



- 4 Koppintson a használni kívánt vezeték nélküli hálózatra.

- 5 Koppintson a **Connect (Csatlakozás)** elemre.

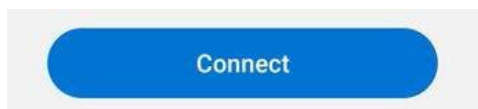

Útmutató a Samsung J3 készülékhez




** Az utasításokat ebben a sorrendben **KELL** követni **

2. rész: Alkalmazások frissítése


- 1 Térjen vissza a kezdőoldalra a kezdőoldal gomb megnyomásával.



- 2 Miután a készülék újraindul, a kezdőképernyőről nyissa meg az alkalmazásfiókot.

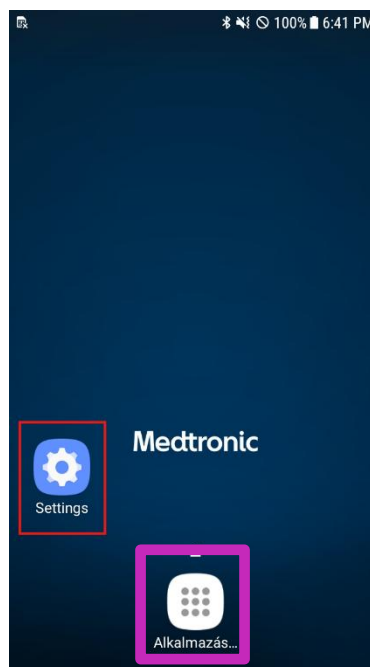


- 3 Koppintson a **Hub** alkalmazásra.

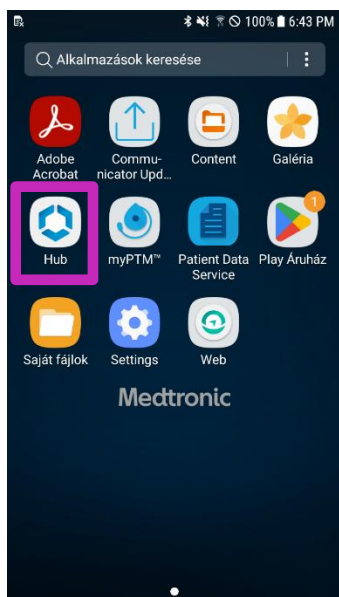


Útmutató a Samsung J3 készülékhez



- 4 Frissítse a Hub alkalmazásban felsorolt alkalmazásokat az Apps (Alkalmazások) képernyőn lefelé pöccintve.

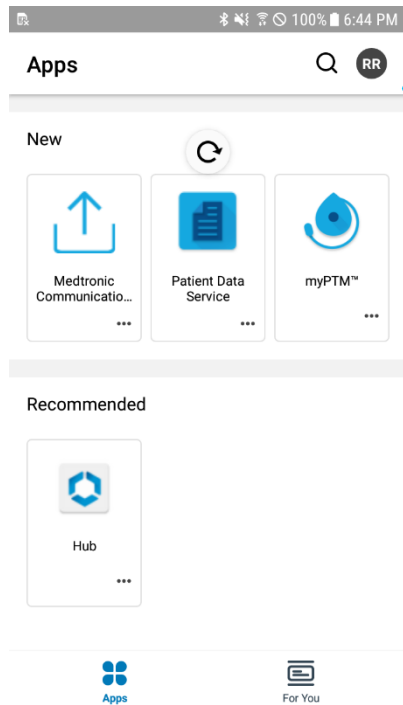

- 5 Válassza az **All Apps (Minden alkalmazás)** lehetőséget a Categories (Kategóriák) alatt. Előfordulhat, hogy le kell görgetnie a képernyő aljára.

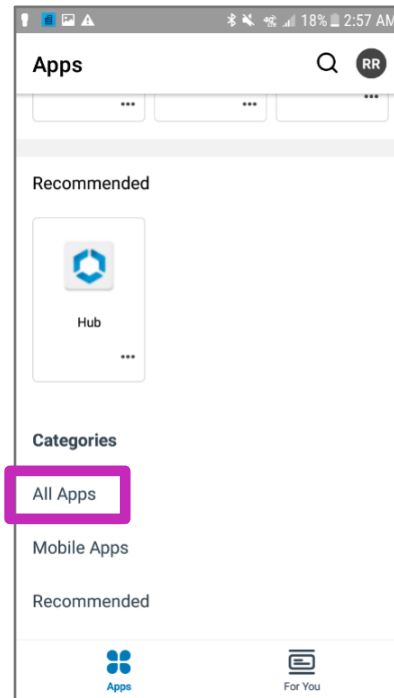

Útmutató a Samsung J3 készülékhez




- 6 Keresse meg az **Intelligent Hub** alkalmazást, és kattintson az **UPDATE (FRISSÍTÉS)** gombra. Ha nem látja ezt az alkalmazást a listában, nincs szükség frissítésre. Lépjen tovább a 7. lépésre. (Ezután ne kattintson az **OPEN (MEGNYITÁS)** gombra, mert az alkalmazás előző verziója nyílik meg.)



- 7 Keresse meg a **Patient Data Service (Betegadat-szolgáltatás)** alkalmazást, és kattintson az **UPDATE (FRISSÍTÉS)** gombra. (Ezután ne kattintson az **OPEN (MEGNYITÁS)** gombra, mert az alkalmazás előző verziója nyílik meg.)



- 8 Keresse meg a **Medtronic Communication Manager (Kommunikációkezelő)** alkalmazást, és kattintson az **UPDATE (FRISSÍTÉS)** gombra. (Ezután ne kattintson az **OPEN (MEGNYITÁS)** gombra, mert az alkalmazás előző verziója nyílik meg.)

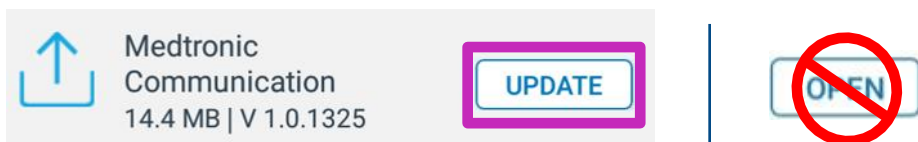

- 9 Keresse meg a **myPTM** alkalmazást, és kattintson az **UPDATE (FRISSÍTÉS)** gombra. (Ezután ne kattintson az **OPEN (MEGNYITÁS)** gombra, mert az alkalmazás előző verziója nyílik meg.)




- 10 Várjon 2 percet, amíg a frissítések befejeződnek.


Útmutató a Samsung J3 készülékhez




- 11 Koppintson a bal felső sarokban lévő vissza nyílra.

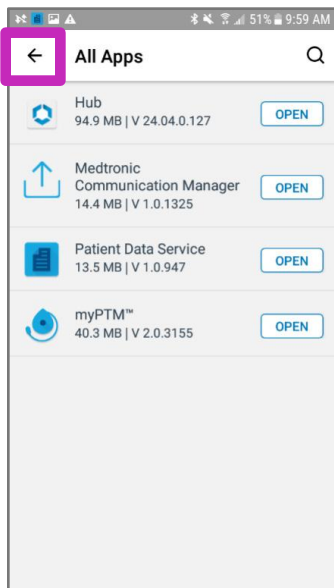



- 12 Koppintson a fiók ikonra a jobb felső sarokban. A fiók ikonon szereplő betűk eltérhetnek a készüléktől.

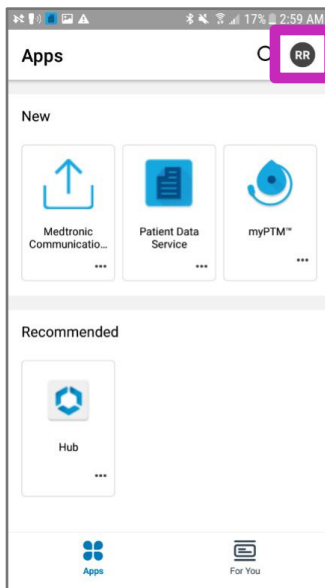

- 13 Koppintson a **This Device** (Ez az eszköz) lehetőségre.

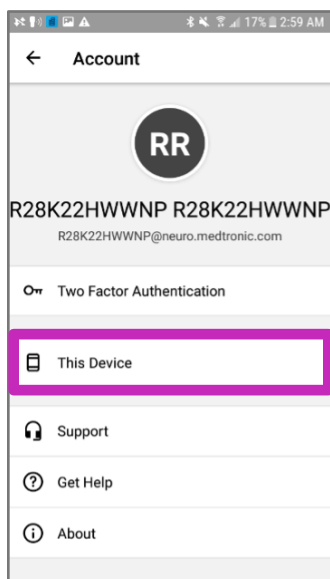


- 14 Görgessen a képernyő alsó részére, és koppintson a **Sync device (Készülék frissítése)** lehetőségre. A "Checking for updates (Frissítések keresése)" üzenet jelenik meg a képernyő alján.

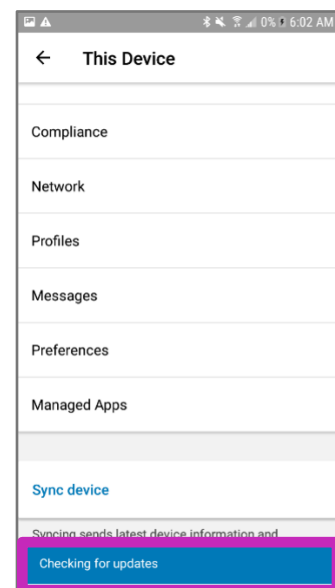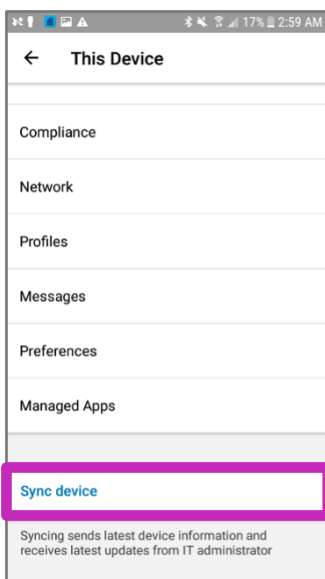

Útmutató a Samsung J3 készülékhez



- 15 Görgessen vissza a képernyő tetejére, és ellenőrizze, hogy a **Last seen (Legutóbb látva)** dátuma és időpontja frissült-e az aktuális dátumra és időpontra. Ha nem frissült, ismételje meg a 14. lépést.

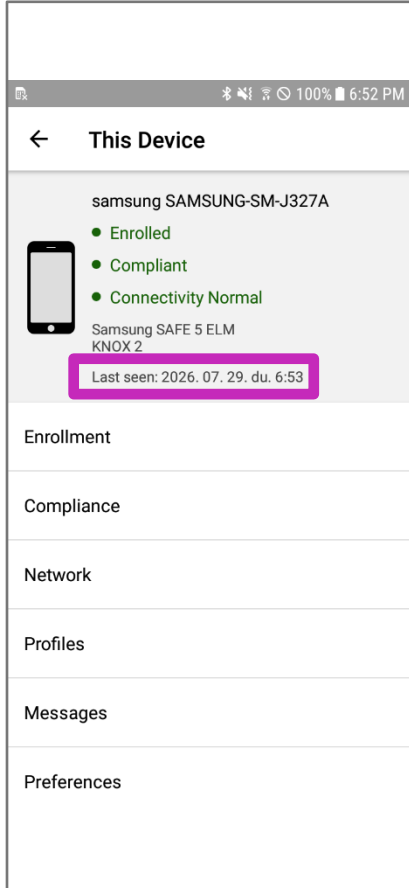

Útmutató a Samsung J3 készülékhez




3. rész: Az alkalmazások frissítésének megerősítése

- 1 Térjen vissza a kezdőoldalra a kezdőoldal gomb megnyomásával.



- 2 Koppintson a **myPTM** alkalmazásra.

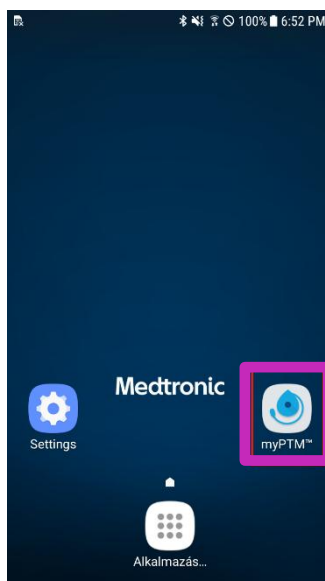

- 3 A pumpához való csatlakozáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg el nem éri a kezdőképernyőt.


Győződjön meg róla, hogy a kommunikációs készülék be van kapcsolva, és közvetlenül a pumpa fölé van helyezve.

A kommunikációs készülék korától függően előfordulhat, hogy a kommunikációs készüléket frissíteni kell.

- 4 Koppintson a képernyő bal felső sarkában található menü ikonra.




- 5 Koppintson az **About (Névjegy)** lehetőségre

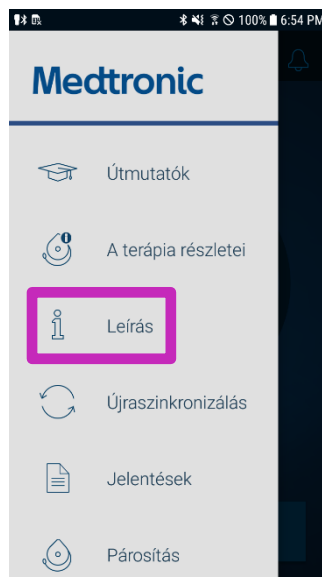

Útmutató a Samsung J3 készülékhez



- 6 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a következő:
- Version (Verzió):** 2.0.3155
 - Communication Manager (Kommunikációkezelő):** 1.0.1325
 - Patient Data Service (Betegadat-szolgáltatás):** 1.0.947

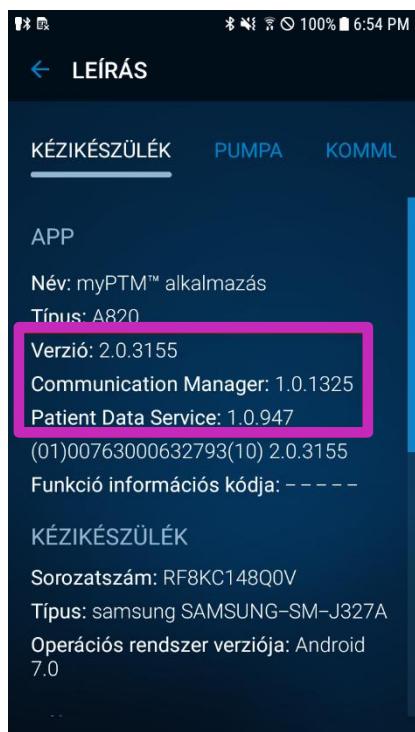

- 7 Amennyiben a verziószámok megegyeznek, a frissítés sikeresen befejeződött, és a szokásos módon használhatja a készüléket.

Ha valamelyik verziószám nem egyezik, térjen vissza a **2. rész: Alkalmazások frissítése** részhez, és szükség szerint frissítse újra az alkalmazás verzióit.

Frissítés kész

Rövid nyilatkozat

Rövid nyilatkozat:

Ez az anyag nem tekinthető kizárólagos információforrásnak, és nem helyettesíti vagy helyettesíti az eszköz kézikönyvében/kézikönyveiben található információkat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék rendeltetése a földrajzi engedélyektől függően változhat.

Az eszköz használati útmutatójában részletes tudnivalókat talál a következőkkel kapcsolatban: rendeltetés szerinti használat, (beszúrási) eljárás, javallatok, ellenjavallatok, figyelmeztetések, óvintézkedések, esetleges nemkívánatos események.

MRI-kompatibilis eszköz(ök) esetében olvassa el az MRI-re vonatkozó információkat az eszköz kézikönyvében/kézikönyveiben

MRI-vizsgálat végzése előtt.

Ha egy eszköz esetében elektronikus használati útmutató használható, a használati útmutató a Medtronic weboldalán található: manuals.medtronic.com.

A kézikönyveket bármely elterjedt böngésző naprakész verziójával megtekintheti. A legjobb eredmény érdekében használjon a böngészőjével Adobe Acrobat® Reader alkalmazást.

A piacon forgalomba hozott Medtronic termékek megfelelnek az orvostechikai eszközökre vonatkozó jogszabályoknak (ha vannak ilyenek). Ha további információkra van szüksége, lépjen kapcsolatba a Medtronic képviselőjével, és/vagy keresse fel a Medtronic weboldalait.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004