

Medtronic

Hugbúnaður síma uppfærður um þráðlaust net

Undirbúningur

Rafmagn: Hafðu símann í sambandi eða með yfir 35% rafhlöðuhleðslu og samskiptatækið tiltækt og hlaðið áður en uppfærslur eru settar upp.

Þráðlaust net: Notaðu traust þráðlaust net eins og heimanetið þitt. Hafðu heiti og lykilorð þráðlausa netsins tiltækt áður en þú byrjar.

Tími: Ferlið gæti tekið allt að 30 mínútur, háð styrk þráðlausa netsins.

Gerð síma: Finndu út hvaða gerð síma þú ert með af myndunum hér fyrir neðan. Samsung J3 síminn hefur áþreifanlegan heimahnapp neðst fyrir miðju.



Samsung A10e

Ef þú átt Samsung A10e síma skaltu fylgja leiðbeiningunum á bls. 3.

[Smelltu hér fyrir Samsung A10e](#)



Áþreifanlegur heimahnappur

Samsung J3

Ef þú átt Samsung J3 síma skaltu fylgja leiðbeiningunum á bls. 10.

[Smelltu hér fyrir Samsung J3](#)



Efnisyfirlit


Undirbúningur	1
Leiðbeiningar fyrir Samsung A10e síma.....	3
1. hluti: Tengjast þráðlausu neti	3
2. hluti: Uppfærsla forrita	4
3. hluti: Staðfesting á að forrit hafi verið uppfærð.....	8
Leiðbeiningar fyrir Samsung J3 síma	10
1. hluti: Tengjast þráðlausu neti	10
2. hluti: Uppfærsla forrita	11
3. hluti: Staðfesting á að forrit hafi verið uppfærð.....	16
Stutt yfirlit.....	18

Leiðbeiningar fyrir Samsung A10e síma




1. hluti: Tengst þráðlausu neti

1. Þikkaðu á táknið **Settings** (Stillingar) á heimaskjá símans.

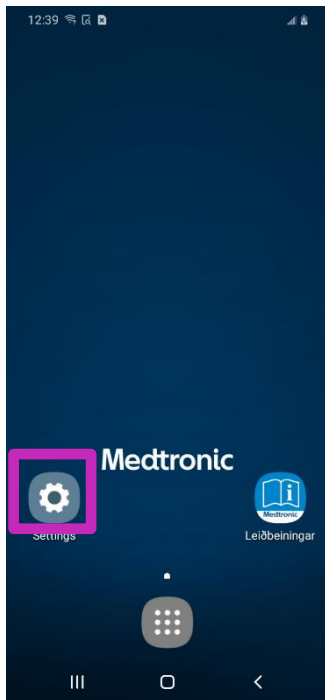

2. Þikkaðu á **Connections** (Tengingar).

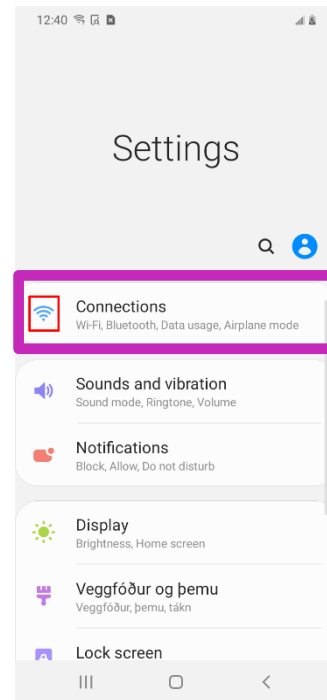


3. Finndu **Wi-Fi** (Þráðlaust net) og þikkaðu á rofann svo það kvikni á honum og hann lýsi bláu



4. Þikkaðu á þráðlausa netið sem þú vilt nota.

5. Þikkaðu á **Connect** (Tengjast).

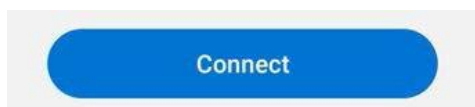


Leiðbeiningar fyrir Samsung A10e síma




**** Það VERÐUR að fylgja leiðbeiningunum í þessari röð ****

2. hluti: Forrit uppfærð

1 Farðu aftur á heimaskjáinn

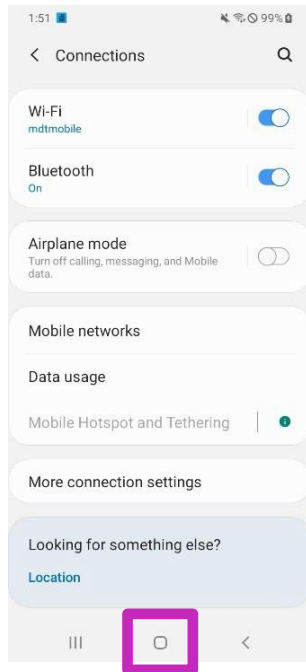


2 Farðu í forritaskúffuna á heimaskjánum.

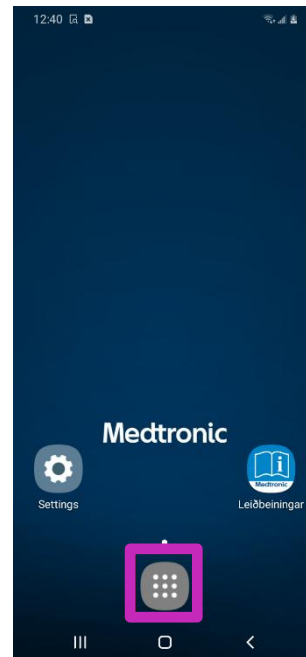

3 Pikkaðu á forritið **Hub** (Nöf).

(Táknið fyrir forritið Hub getur verið mismunandi eftir aldri símans.)

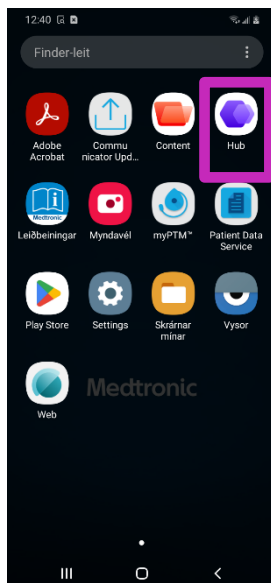


EDA




Leiðbeiningar fyrir Samsung A10e síma



- 4 Endurglæddu forritin sem eru tilgreind í Hub með því að strjúka niður á skjánum Apps (Forrit).

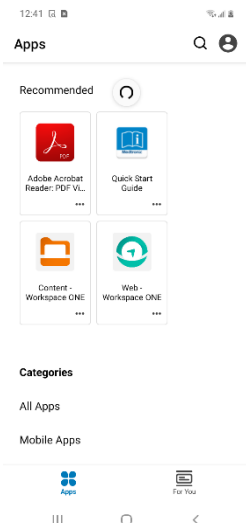

- 5 Veldu **All Apps** (Öll forrit) undir Categories (Flokkum). Þú gætir þurft að skruna niður neðst á skjáinn.

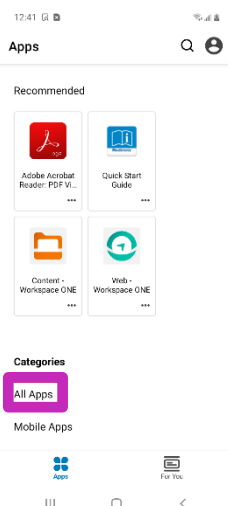

- 6 Finndu forritið **Patient Data Service** (Gagnþjónustu sjúklings) og pikkaðu á **UPDATE** (UPPFÆRA).

(Ekki pikka svo á OPEN (OPNA) því þá opnast eldri útgáfa forritsins.)



- 7 Finndu forritið **Medtronic Communication Manager** (Samskiptastjóra Medtronic) og pikkaðu á **UPDATE** (UPPFÆRA).

(Ekki pikka svo á OPEN (OPNA) því þá opnast eldri útgáfa forritsins.)



- 8 Finndu forritið **myPTM** og pikkaðu á **UPDATE** (UPPFÆRA).

(Ekki pikka svo á OPEN (OPNA) því þá opnast eldri útgáfa forritsins.)




- 9 Bíddu í 2 mínútur þar til uppfærslunum lýkur.


Leiðbeiningar fyrir Samsung A10e síma




- 10 Píkkaðu á örina til baka efst í vinstra horni.

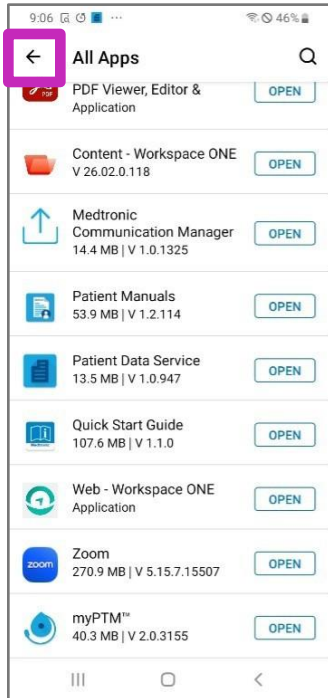



- 11 Píkkaðu á reikningstáknið efst í hægra horni. Stafirnir í reikningstákninu geta verið mismunandi eftir símum.

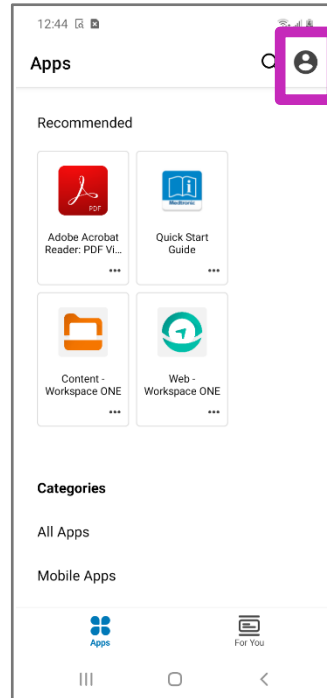

- 12 Píkkaðu á **This Device** (Þetta tæki).

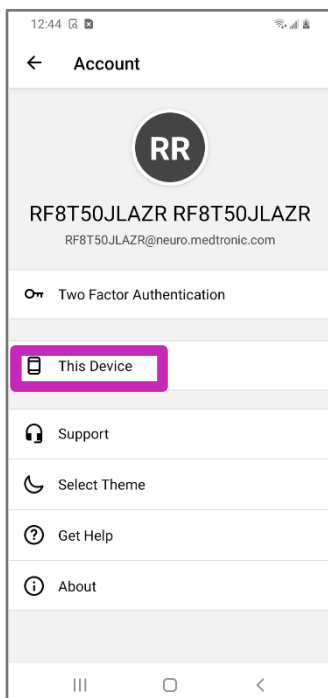


- 13 Skrunaðu niður neðst á skjáinn og píkkaðu á **Sync device** (Samstillta tæki). „**Checking for updates**“ (Gái að uppfærslum) birtist neðst á skjánum.

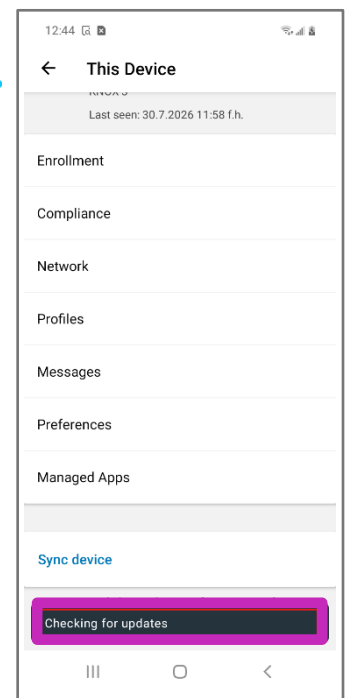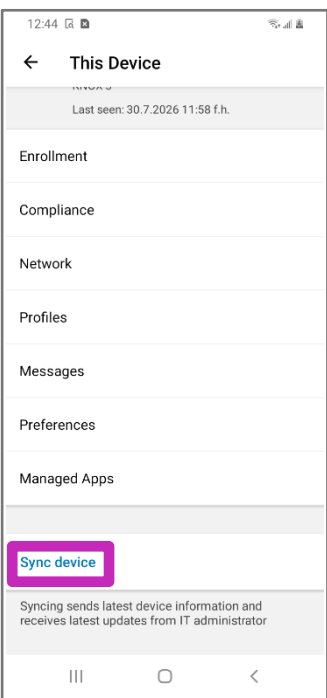

Leiðbeiningar fyrir Samsung A10e síma



- 14 Skrunaðu aftur efst á skjáinn og staðfestu að sú dagsetning og tími sem sást síðast, **Last seen** (Sást síðast), hafi uppfærst í núgildandi dagsetningu og tíma. Ef þau hafa ekki uppfærst skaltu endurtaka skref 13.

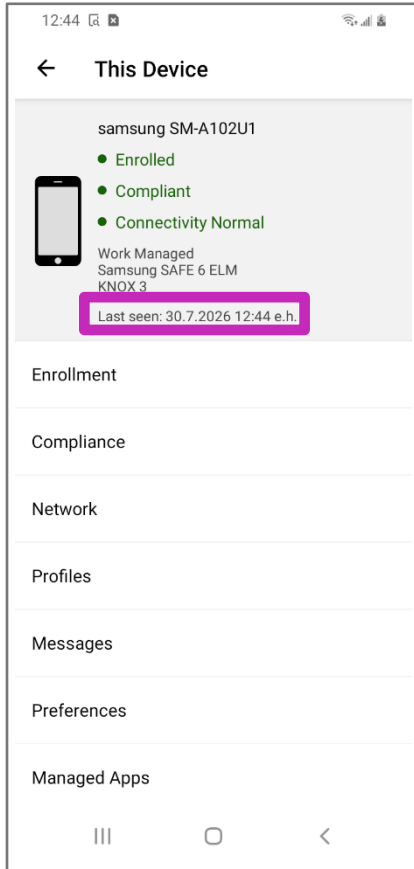




Leiðbeiningar fyrir Samsung A10e síma



3. hluti: Staðfest að forrit hafi uppfærst

- 1 Farðu aftur á heimaskjáinn
- 2 Pikkaðu á forritið **myPTM**.
- 3 Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að tengjast dæluinni þar til þú kemur á Heimaskjáinn.


Gakktu úr skugga um að kveikt sé á samskiptatækinu og að það sé beint yfir dæluinni.
- 4 Pikkaðu á valmyndartáknið efst í vinstra horni skjásins.
- 5 Pikkaðu á **About** (Um).

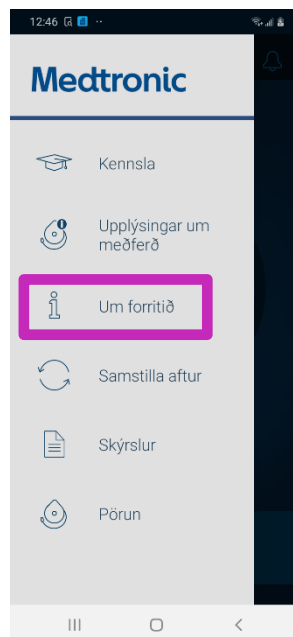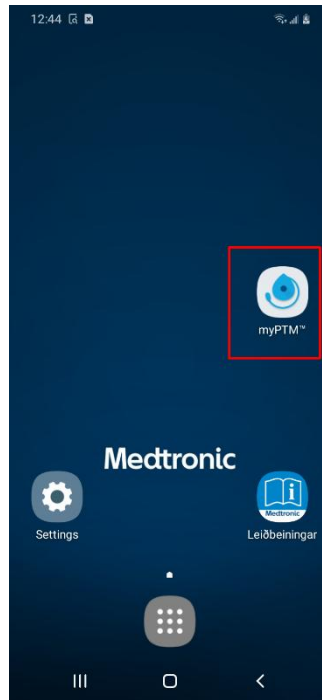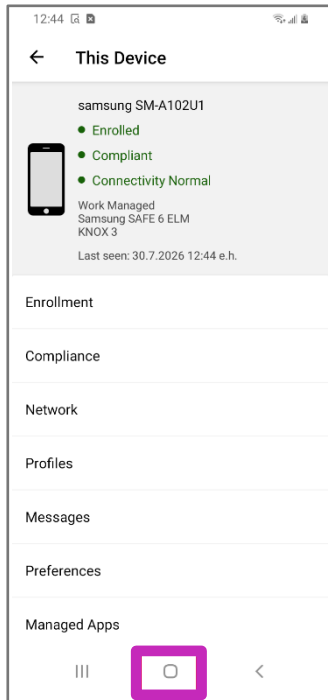

Leiðbeiningar fyrir Samsung A10e síma



- 6 Staðfestu að hann sýni:
- Útgáfu:** 2.0.3155
 - Communication Manager** (Samskiptastjóra): 1.0.1325
 - Patient Data Service** (Gagnþjónusta sjúklings): 1.0.947

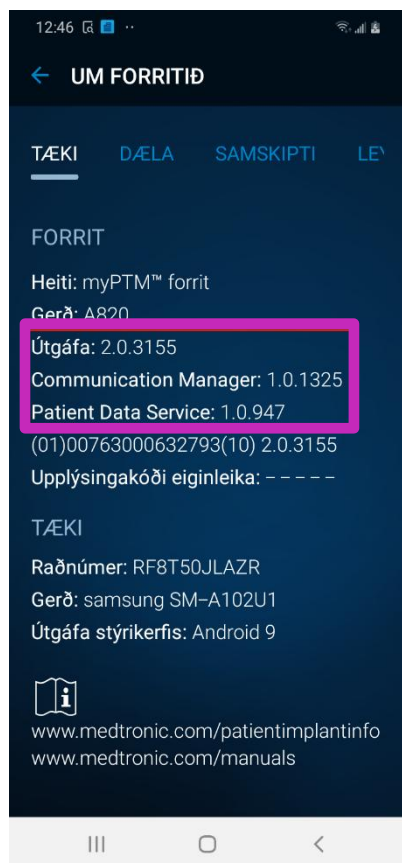

Ef útgáfunúmerin eru þau sömu hefur uppfærslan tekist og þú getur notað símann eins og venjulega.

Ef einhver útgáfunúmer eru ekki þau sömu skaltu fara aftur í **2. hluta: Forrit uppfærð** og uppfæra útgáfur forritsins aftur eftir þörfum.


Uppfærslu lokið

Leiðbeiningar fyrir Samsung J3-síma




1. hluti: Tengst þráðlausu neti

1. Pikkaðu á táknið **Settings** (Stillingar) á heimaskjá símans.

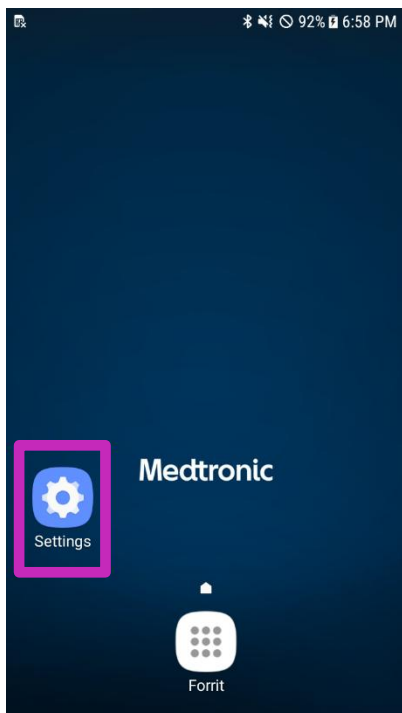

2. Pikkaðu á **Connections** (Tengingar).

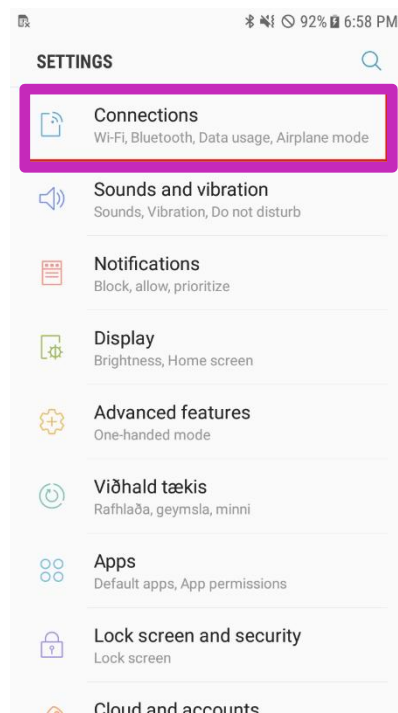


3. Finndu **Wi-Fi** (Þráðlaust net) og pikkaðu á rofann svo það kvikni á honum og hann lýsi bláu



4. Pikkaðu á þráðlausu netið sem þú vilt nota.

5. Pikkaðu á **Connect** (Tengjast).

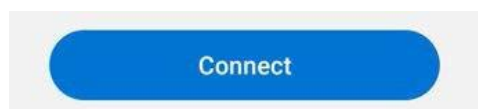


Leiðbeiningar fyrir Samsung J3-síma




**** Það VERÐUR að fylgja leiðbeiningunum í þessari röð ****

2. hluti: Forrit uppfærð

- 1 Farðu aftur á heimaskjáinn með því að styðja á heimahnappinn.
- 2 Farðu í forritaskúffuna á heimaskjánum.

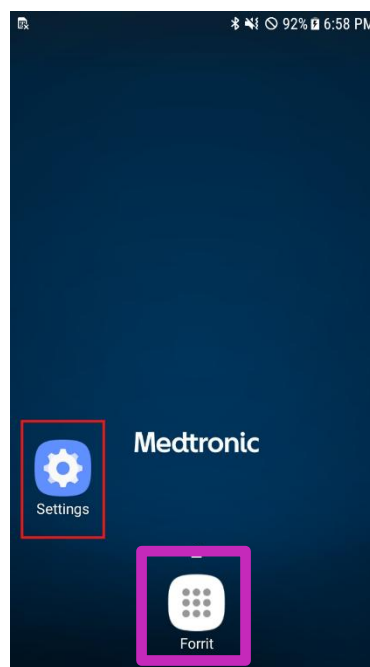


- 3 Pikkaðu á forritið **Hub** (Nöf).

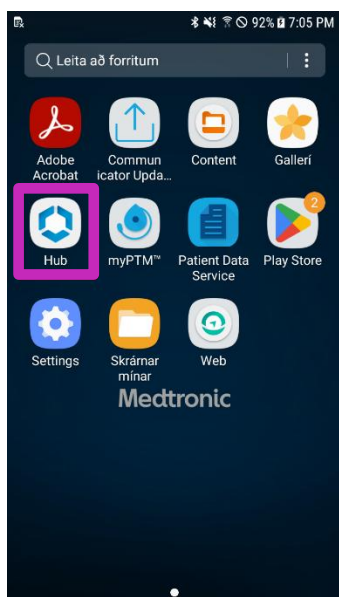


Leiðbeiningar fyrir Samsung J3-síma



- 4 Endurglæddu forritin sem eru tilgreind í Hub með því að strjúka niður á skjánum Apps (Forrit).

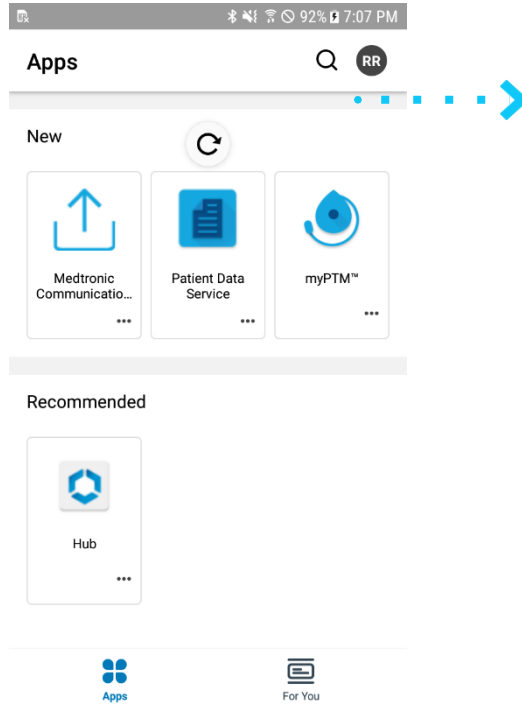

- 5 Veldu **All Apps** (Öll forrit) undir Categories (Flokkum). Þú gætir þurft að skruna niður neðst á skjáinn.

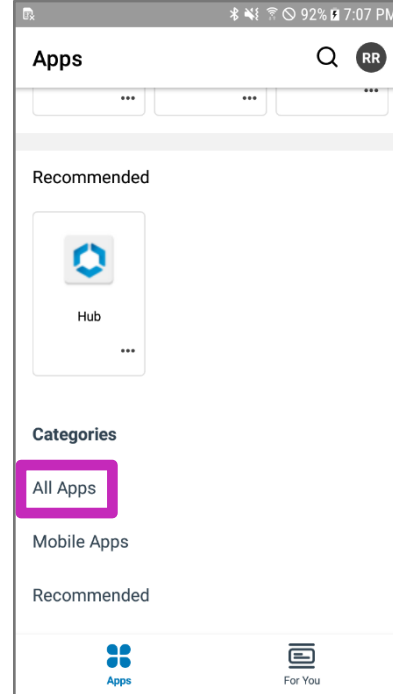


Leiðbeiningar fyrir Samsung J3-síma





- 6 Finndu forritið **Intelligent Hub** (Snjallnöf) og pikkaðu á **UPDATE** (UPPFÆRA).
Ef þú sérð það forrit ekki á listanum er ekki þörf á neinum uppfærslum. Farðu í 7. skref.
(Ekki pikka svo á **OPEN** (OPNA) því þá opnast eldri útgáfa forritsins.)



- 7 Finndu forritið **Patient Data Service** (Gagnabjónustu sjúklings) og pikkaðu á **UPDATE** (UPPFÆRA).
(Ekki pikka svo á **OPEN** (OPNA) því þá opnast eldri útgáfa forritsins.)

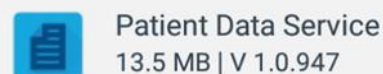

- 8 Finndu forritið **Medtronic Communication Manager** og pikkaðu á **UPDATE** (UPPFÆRA).
(Ekki pikka svo á **OPEN** (OPNA) því þá opnast eldri útgáfa forritsins.)

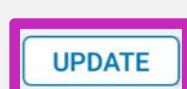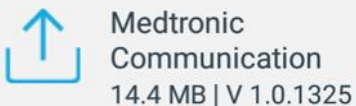

- 9 Finndu forritið **myPTM** og pikkaðu á **UPDATE** (UPPFÆRA).
(Ekki pikka svo á **OPEN** (OPNA) því þá opnast eldri útgáfa forritsins.)




- 10 Bíddu í 2 mínútur þar til uppfærslunum lýkur.


Leiðbeiningar fyrir Samsung J3-síma




- 11 Pikkaðu á örina til baka efst í vinstra horni.

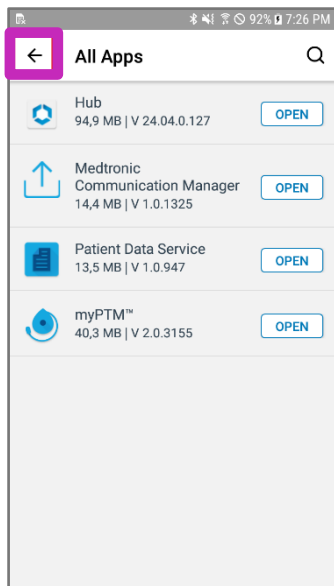



- 12 Pikkaðu á reikningstáknið efst í hægra horni. Stafririr í reikningstákninu geta verið mismunandi eftir sínum.

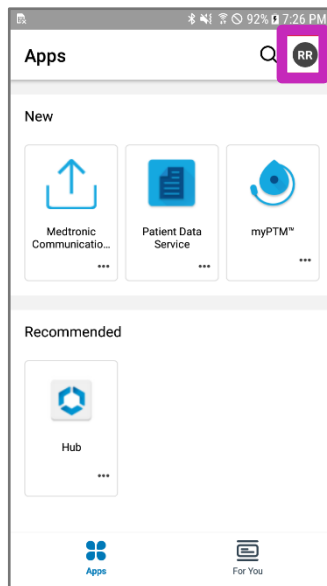

- 13 Pikkaðu á **This Device** (Þetta tæki).

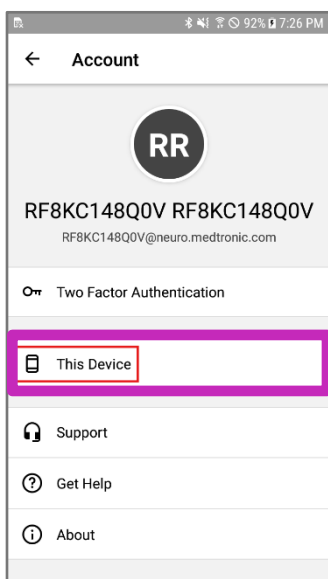


- 14 Skrúnaðu niður neðst á skjáinn og pikkaðu á **Sync device** (Samstillta tæki). „Checking for updates“ (Gái að uppfærslum) birtist neðst á skjánum.

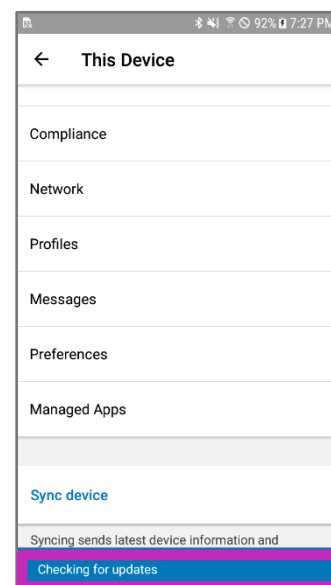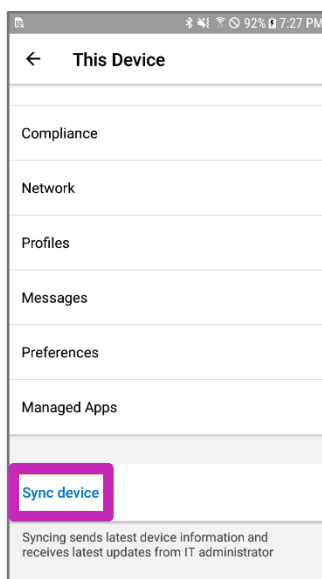

Leiðbeiningar fyrir Samsung J3-síma



- 15 Skrúnaðu aftur efst á skjáinn og staðfestu að sú dagsetning og tími sem sást síðast, **Last seen** (Sást síðast), hafi uppfærst í núgildandi dagsetningu og tíma. Ef þau hafa ekki uppfærst skaltu endurtaka skref 14.

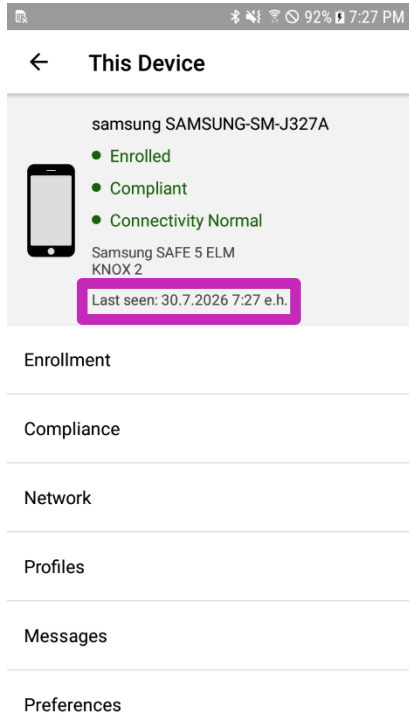

Leiðbeiningar fyrir Samsung J3-síma




3. hluti: Staðfest að forrit hafi uppfærst

- 1 Farðu aftur heim með því að styðja á heimahnappinn.



- 2 Pikkaðu á forritið **myPTM**.

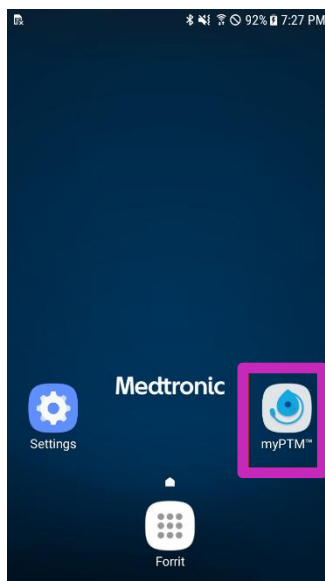


- 3 Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að tengjast dælunni þar til þú kemur á Heimaskjáinn.


Gakktu úr skugga um að kveikt sé á samskiptatækinu og að það sé beint yfir dælunni.

Uppfærsla á samskiptatækinu kann að fara fram, háð aldri þess.

- 4 Pikkaðu á valmyndartáknið efst í vinstra horni skjásins.

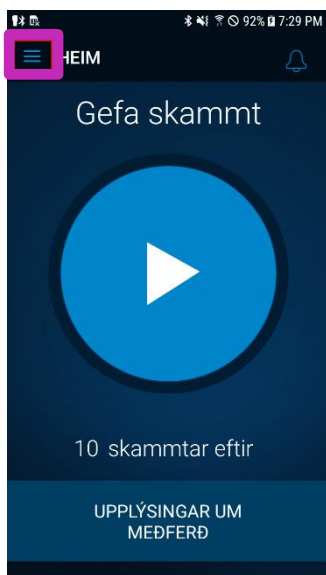


- 5 Pikkaðu á **About** (Um).

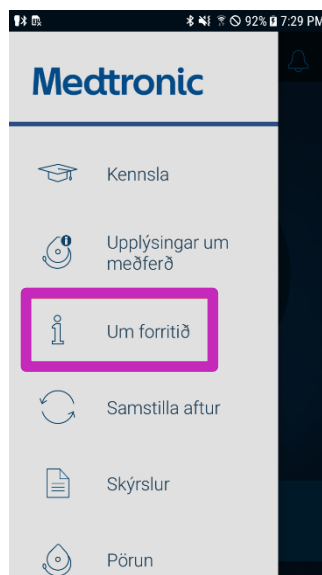

Leiðbeiningar fyrir Samsung J3-síma



- 6 Staðfestu að hann sýni:
- Útgáfu:** 2.0.3155
 - Communication Manager** (Samskip-tastjóra): 1.0.1325
 - Patient Data Service** (Gagnþjónustu sjúklings): 1.0.947

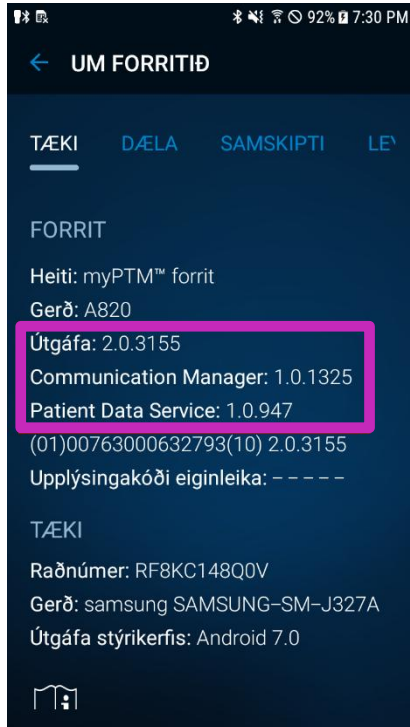

Ef útgáfunúmerin eru þau sömu hefur uppfærslan tekist og þú getur notað símann eins og venjulega.

Ef einhver útgáfunúmer eru ekki þau sömu skaltu fara aftur í **2. hluta: Forrit uppfærð** og uppfæra útgáfur forritsins aftur eftir þörfum.

Uppfærslu lokið

Stutt yfirlýsing

Stutt yfirlýsing:

Þetta efni ætti ekki að teljast eina uppspretta upplýsinga. Það kemur ekki í stað upplýsinga í handbók(um) tækisins.

Athugið að ætluð notkun vöru getur verið breytileg eftir landfræðilegum leyfum.

Í handbók(um) tækisins má finna ítarlegar upplýsingar um ætlaða notkun, aðgerðina (ígræðsluna), ábendingar, frábendingar, varnaðarorð, varúðarreglur og hugsanleg meintilvik.

Ef um er að ræða tæki sem eru segulómunarsamhæf skal skoða upplýsingarnar um segulómun í handbók(um) tækisins áður en segulómskoðun er framkvæmd.

Ef tæki er gjaldgengt fyrir notkun með rafrænum notkunarleiðbeiningum má finna þær á vefsíðu Medtronic: manuals.medtronic.com.

Skoða má handbækur með nýjustu útgáfu einhvers af helstu netvöfrunum. Best útkoma fæst með því að nota Adobe Acrobat® Reader með vafranum.

Markaðssettar Medtronic-vörur samræmast lögum um lækningatæki (ef við á). Fá má frekari upplýsingar með því að hafa samband við fulltrúa Medtronic á þínum stað og/eða skoða vefsíður Medtronic.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliu 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004