

Medtronic

Mobiliojo įrenginio programinės įrangos naujinimas naudojant „Wi-Fi“



Pasiruošimas

Maitinimas: prieš diegdami naujinius įsitikinkite, kad mobilusis įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio arba baterijos įkrova yra daugiau nei 35 procentų, o komunikatorius yra parengtas ir įkrautas.

„Wi-Fi“: naudokite patikimą „Wi-Fi“ tinklą, pvz., namų ryšio teikėjo. Prieš pradėdami turėkite „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą ir slaptažodį.

Trukmė: atsižvelgiant į tinklo ryšio stiprumą, šis procesas gali užtrukti iki 30 minučių.

Mobiliojo įrenginio modelis: pagal toliau pateiktus paveikslėlius nustatykite, kokio modelio mobiliąjį įrenginį turite. „Samsung J3“ mobiliojo įrenginio apačioje viduryje yra fizinis pradžios mygtukas.



Samsung A10e

Jei turite „Samsung A10e“ mobiliąjį įrenginį, vadovaukitės 3 puslapyje pateiktomis instrukcijomis.

Spustelėkite čia, jei naudojate „Samsung A10e“



Fizinis pradžios mygtukas

Samsung J3

Jei turite „Samsung J3“ mobiliąjį įrenginį, vadovaukitės 10 puslapyje pateiktomis instrukcijomis.

Spustelėkite čia, jei naudojate „Samsung J3“

Turinys


Pasiruošimas.....	1
„Samsung A10e“ mobiliojo įrenginio instrukcijos.....	3
1 dalis. Prisijunkite prie „Wi-Fi“	3
2 dalis. Atnaujinkite programas.....	4
3 dalis. Patikrinkite, ar programos atnaujintos.....	8
„Samsung J3“ mobiliojo įrenginio instrukcijos.....	10
1 dalis. Prisijunkite prie „Wi-Fi“	10
2 dalis. Atnaujinkite programas.....	11
3 dalis. Patikrinkite, ar programos atnaujintos	16
Trumpas pareiškimas.....	18

„Samsung A10e“ mobiliojo įrenginio instrukcijos




1 dalis. Prisijunkite prie „Wi-Fi“

- 1 Bakstelėkite piktogramą *Settings* (nustatymai) mobiliojo įrenginio pagrindiniame ekrane.

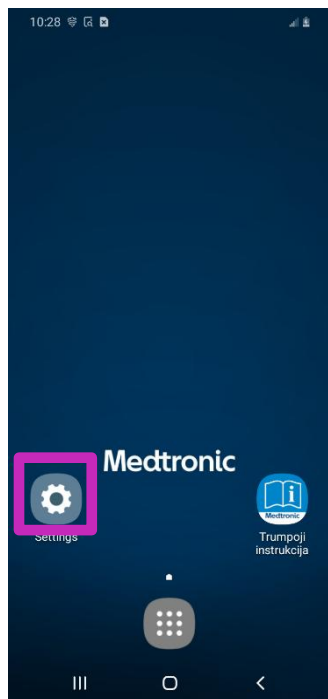

- 2 Bakstelėkite *Connections* (ryšys)

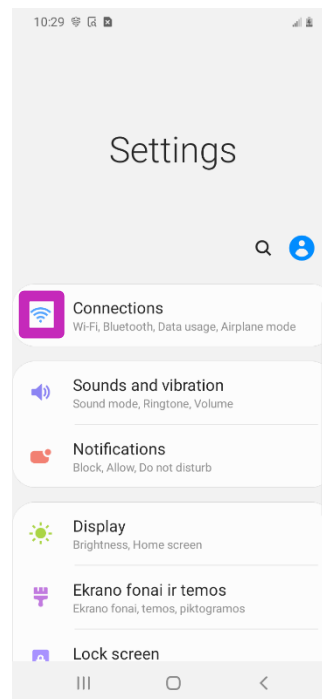


- 3 Raskite „Wi-Fi“ ir bakstelėkite jungiklį, kad jis įsijungtų ir būtų mėlynas



- 4 Bakstelėkite belaidį tinklą, kurį norite naudoti. Bakstelėkite

- 5 *Connect* (prisijungti).

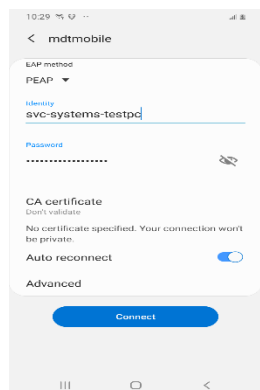

„Samsung A10e“ mobiliojo įrenginio instrukcijos




**** Instrukcijas REIKIA atlikti šia tvarka ****



2 dalis. Atnaujinkite programas

1 Grįžkite į pagrindinį ekraną

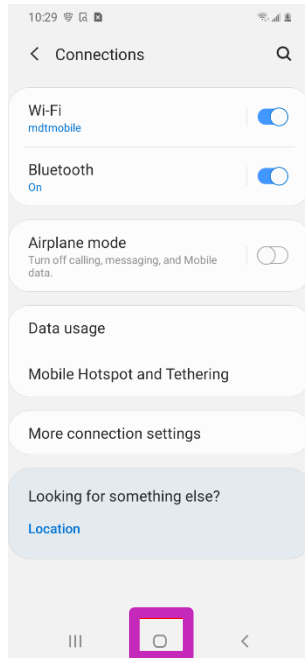


2 Pagrindiniame ekrane eikite į programų stalčių.




3 Bakstelėkite programą Hub.

(Programos „Hub“ piktograma gali skirtis atsižvelgiant į jūsų mobiliojo įrenginio amžių.)

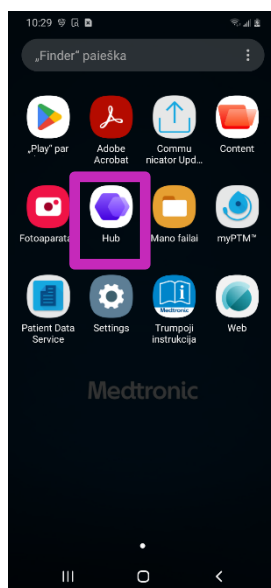


ARBA

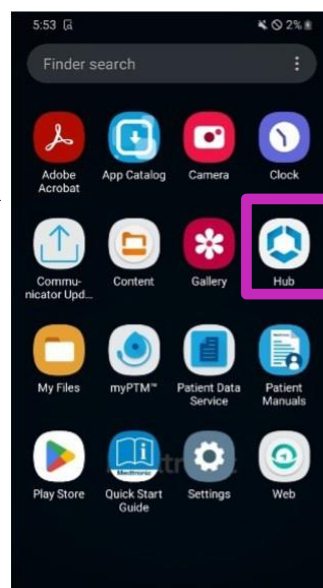


„Samsung A10e“ mobiliojo įrenginio instrukcijos





Atnaujinkite „Hub“ išvardytas programas braukdami programų ekrane žemyn.

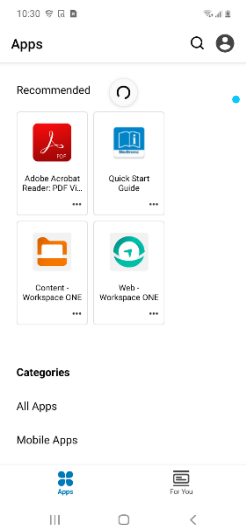



Dalyje „Categories“ (kategorijos) pasirinkite All Apps (visos programos). Gali reikėti slinkti žemyn iki ekrano apačios.

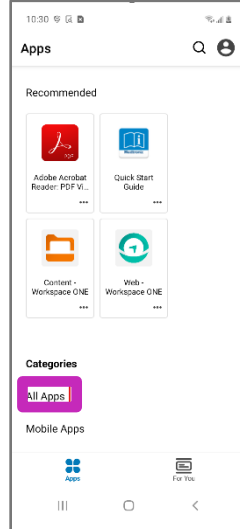



- 6 Raskite programą Patient Data Service ir bakstelėkite UPDATE (naujinti).
(Po to nebakstelėkite OPEN (atidaryti), nes bus atidaryta ankstesnė programos versija.)

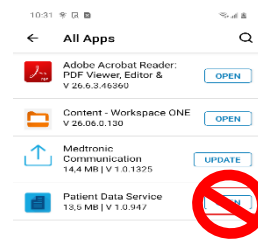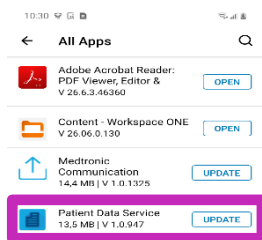

- 7 Raskite programą Medtronic Communication Manager programą ir bakstelėkite UPDATE (naujinti).
(Po to nebakstelėkite OPEN (atidaryti), nes bus atidaryta ankstesnė programos versija.)

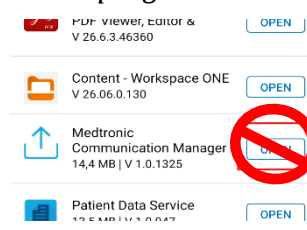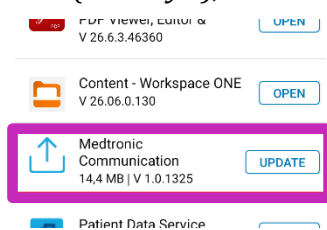


- 8 Raskite programą myPTM ir bakstelėkite UPDATE (naujinti).
(Po to nebakstelėkite OPEN (atidaryti), nes bus atidaryta ankstesnė programos versija.)

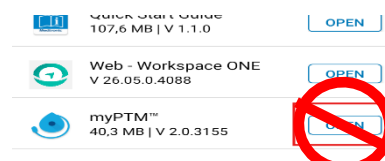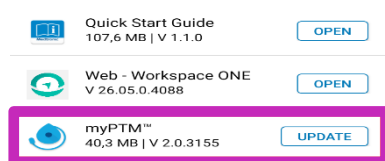


„Samsung A10e“ mobiliojo įrenginio instrukcijos




Bakstelėkite rodyklę atgal viršutiniame kairiajame kampe.

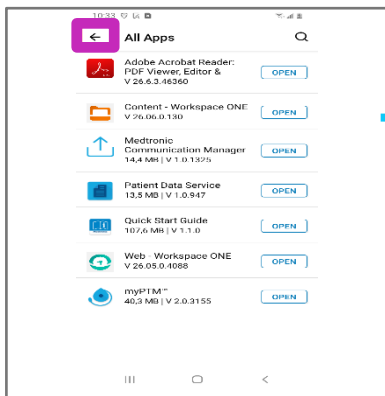



Bakstelėkite paskyros piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe. Jūsų mobiliojo įrenginio paskyros piktogramoje esančios raidės gali skirtis.

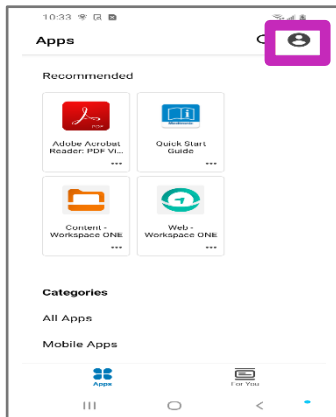

12 Bakstelėkite *This Device* (šis įrenginys).

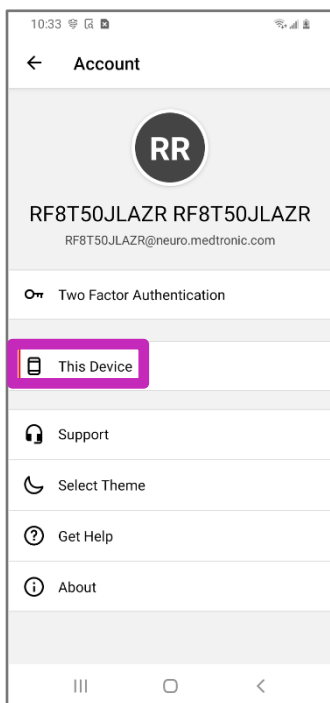


13 Slinkite žemyn iki ekrano apačios ir bakstelėkite *Sync device* (sinchronizuoti įrenginį). Ekrano apačioje bus rodoma „Checking for updates“ (tikrinama, ar nėra naujinių).

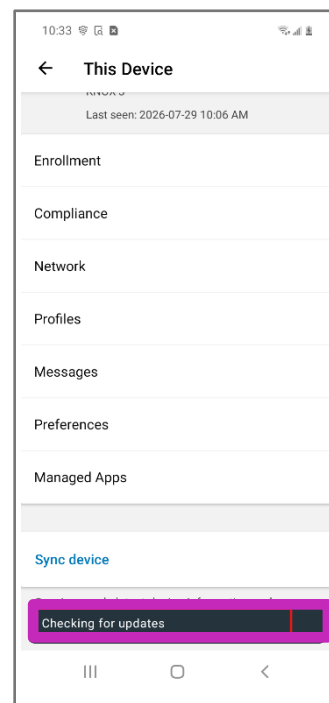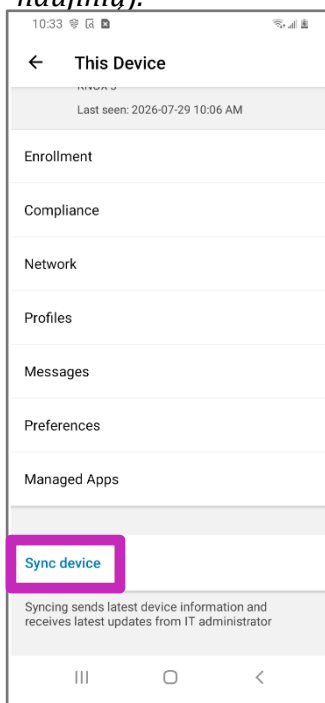

„Samsung A10e“ mobiliojo įrenginio instrukcijos



Slinkite atgal į ekrano viršų ir patikrinkite, ar laikas ir data Last seen (paskutinį kartą matytas) atnaujinti į dabartinę datą ir laiką. Jei jie neatnaujinti, pakartokite 13 veiksmą.

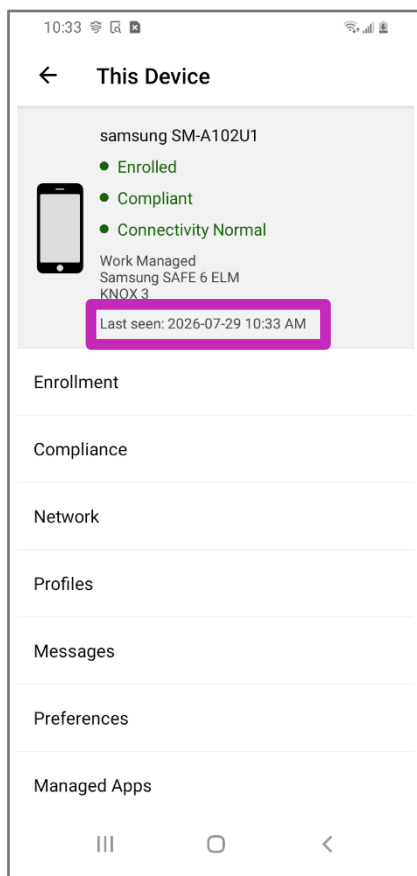


„Samsung A10e“ mobiliojo įrenginio instrukcijos




3 dalis. Patikrinkite, ar programos atnaujintos

1 Grįžkite į pagrindinį ekraną

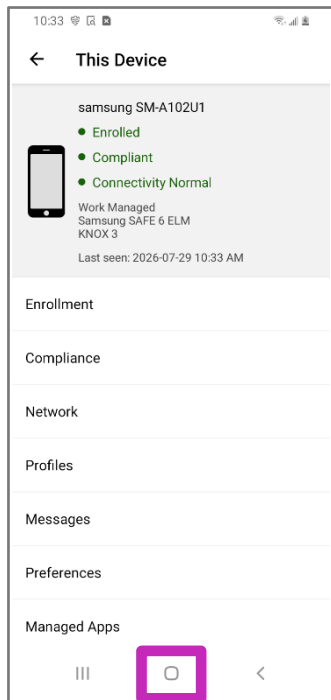

2

Bakstelėkite programą myPTM.

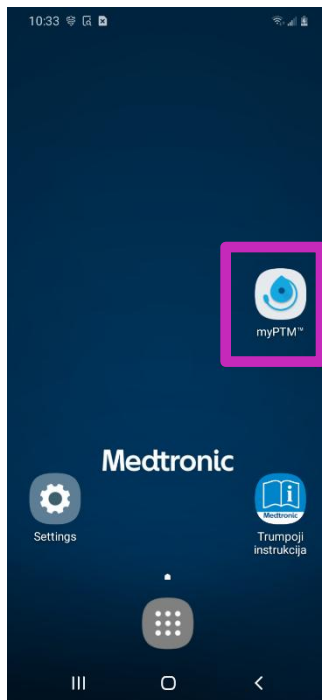

3

Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir prisijunkite prie pompas, kol pasieksite pagrindinį rodinį.


Įsitikinkite, kad komunikatorius įjungtas ir padėtas tiesiai virš pompas.

4 Viršutiniame kairiajame ekrano kampe palieskite meniu piktogramą.



5

Bakstelėkite About (apie)

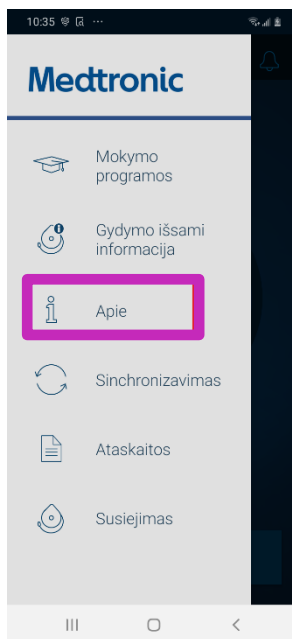

„Samsung A10e“ mobiliojo įrenginio instrukcijos




Įsitikinkite, kad jame rodoma:

- „Version“ (versija): 2.0.3155
- Communication Manager: 1.0.1325
- Patient Data Service: 1.0.947

Jei versijų numeriai sutampa, naujinimas atliktas sėkmingai ir mobilių įrenginį galite naudoti kaip įprastai.

Jei kuris nors iš versijų numerių nesutampa, grįžkite į 2 dalį: „Atnaujinkite programas“ ir, jei reikia, dar kartą atnaujinkite programų versijas.

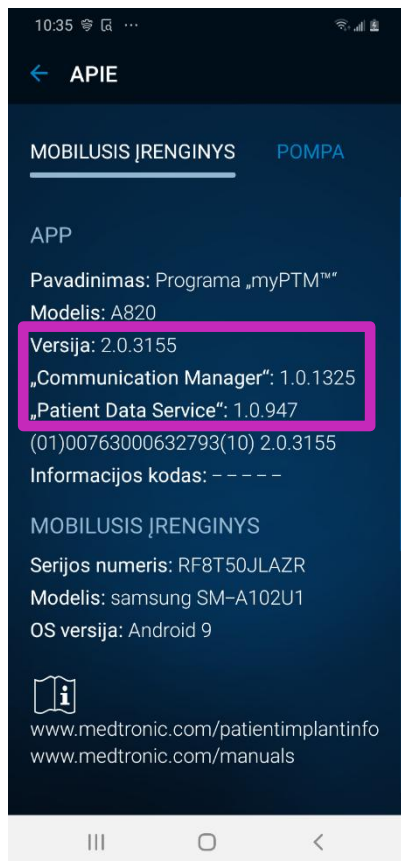


Naujinimas baigtas

„Samsung J3“ mobiliojo įrenginio instrukcijos




1 dalis. Prisijunkite prie „Wi-Fi“

- 1 Bakstelėkite piktogramą Settings (nustatymai) mobiliojo įrenginio pagrindiniame ekrane.

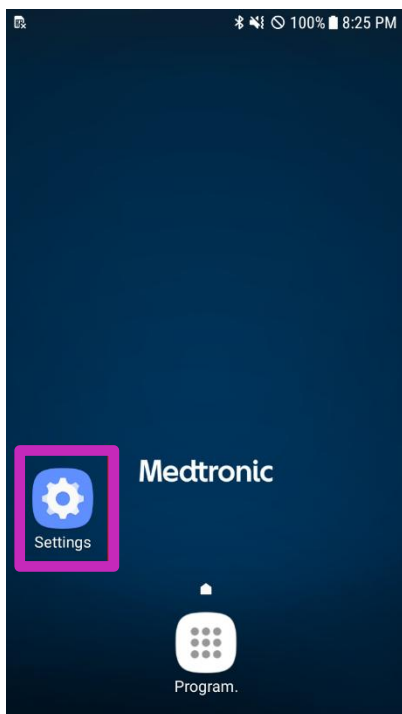

- 2 Bakstelėkite Connections (ryšys)

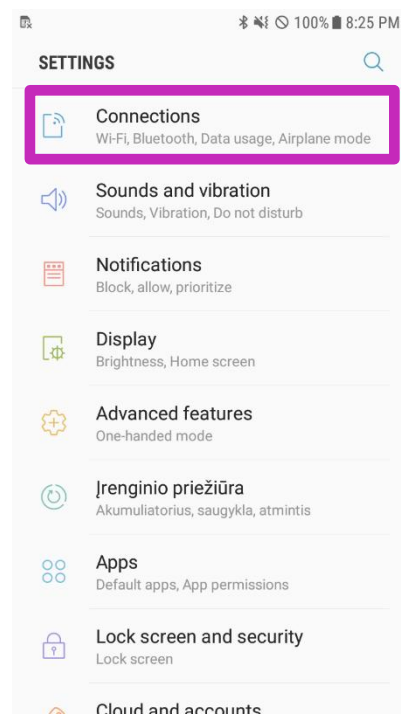


- 3 Raskite „Wi-Fi“ ir bakstelėkite jungiklį, kad jis įsijungtų ir būtų mėlynas



- 4 Bakstelėkite belaidį tinklą, kurį norite naudoti. Bakstelėkite

- 5 Connect (prisijungti).

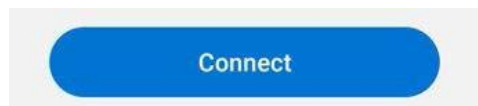

„Samsung J3“ mobiliojo įrenginio instrukcijos



**** Instrukcijas REIKIA atlikti šia tvarka ****




2 dalis. Atnaujinkite programas

1 Grįžkite į pradžią paspausdami pradžios mygtuką.




2

Pagrindiniame ekrane eikite į programų stalčių.

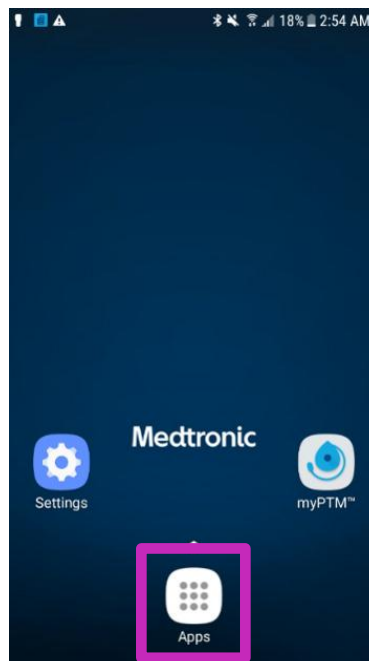

3

Bakstelėkite programą Hub.

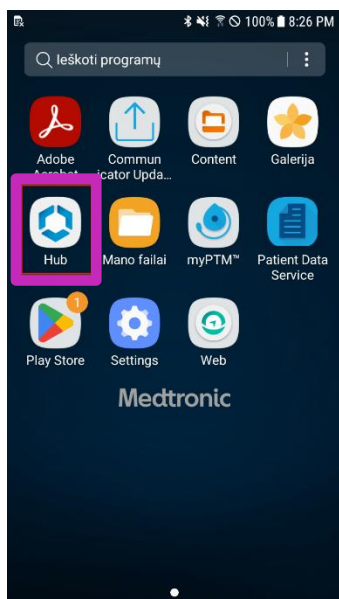


„Samsung J3“ mobiliojo įrenginio instrukcijos




Pažinti pradžios mygtukus

Atnaujinkite „Hub“ išvardytas programąs braukdami programų ekrane žemyn.

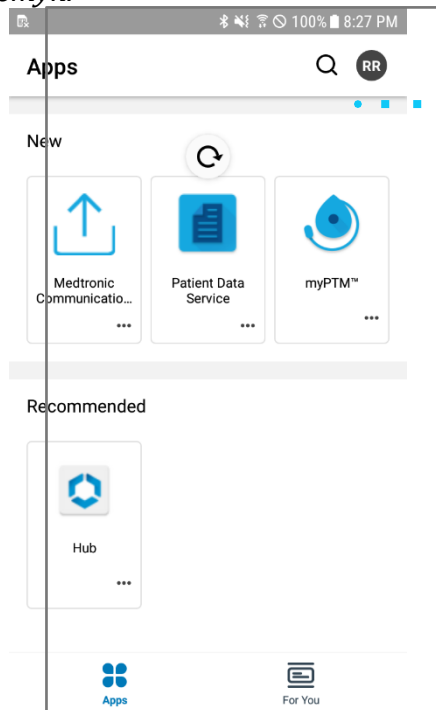

Dalyje „Categories“ (kategorijos) pasirinkite All Apps (visos programos). Gali reikėti slinkti žemyn iki ekrano apačios.

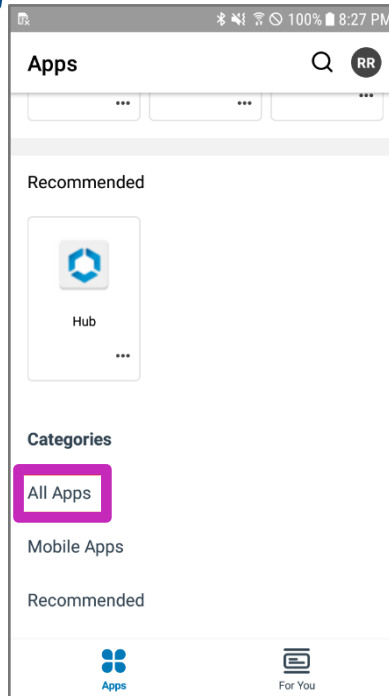

„Samsung J3“ mobiliojo įrenginio instrukcijos



Raskite programą *Intelligent Hub* ir bakstelėkite *UPDATE* (naujinti).


Jei sąrašė nematote šios programos, naujinti nereikia. Pereikite prie 7 veiksmo.

(Po to nebakstelėkite *OPEN* (atidaryti), nes bus atidaryta ankstesnė programos versija.)



7 Raskite programą *Patient Data Service* ir bakstelėkite *UPDATE* (naujinti).

(Po to nebakstelėkite *OPEN* (atidaryti), nes bus atidaryta ankstesnė programos versija.)

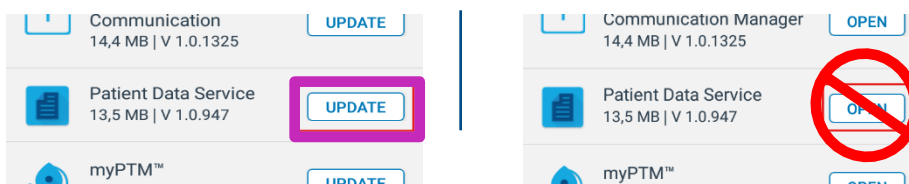

8 Raskite programą *Medtronic Communication Manager* ir bakstelėkite *UPDATE* (naujinti).

(Po to nebakstelėkite *OPEN* (atidaryti), nes bus atidaryta ankstesnė programos versija.)



9 Raskite programą *myPTM* ir bakstelėkite *UPDATE* (naujinti).

(Po to nebakstelėkite *OPEN* (atidaryti), nes bus atidaryta ankstesnė programos versija.)




10 Palaukite 2 minutes, kol naujinimai bus baigti.

„Samsung J3“ mobiliojo įrenginio instrukcijos




Finisė pradžios mygtukas

Bakstelėkite rodyklę atgal viršutiniame kairiajame kampe.

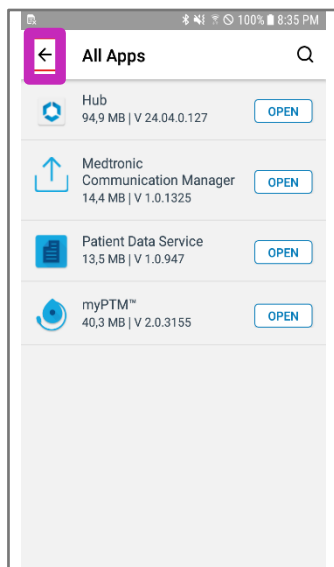


Bakstelėkite paskyros piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.



Jūsų mobiliojo įrenginio paskyros piktogramoje esančios raidės gali skirtis.

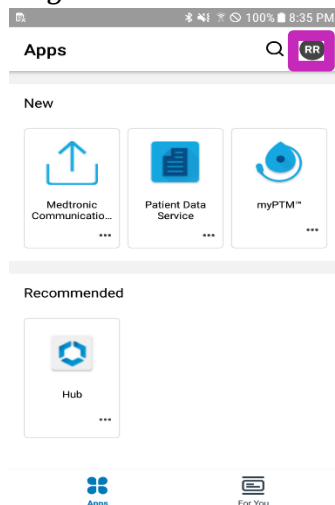

13 Bakstelėkite This Device (šis įrenginys).

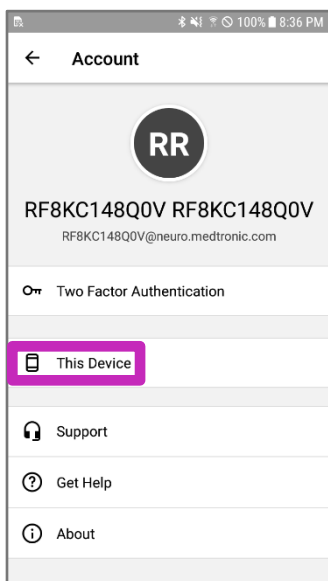


14 Slinkite žemyn iki ekrano apačios ir bakstelėkite Sync device (synchronizuoti įrenginį). Ekrano apačioje bus rodoma „Checking for updates“ (tikrinama, ar nėra naujinių).

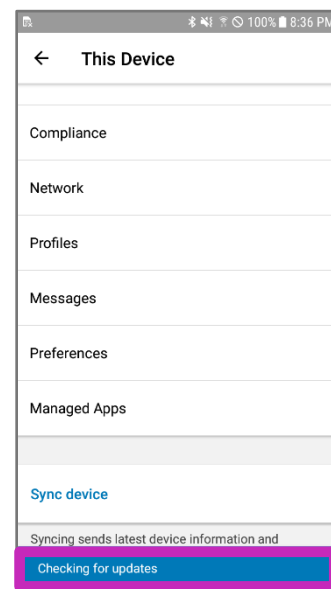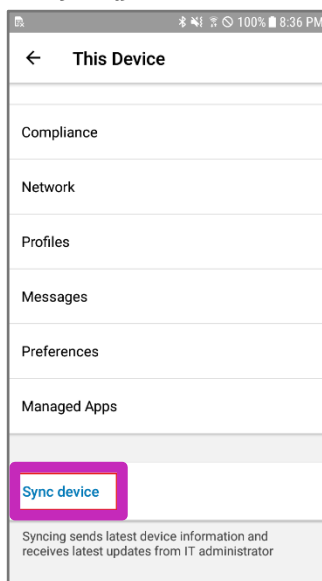

„Samsung J3“ mobiliojo įrenginio instrukcijos



Slinkite atgal į ekrano viršų ir patikrinkite, ar laikas ir data *Last seen* (paskutinį kartą matytas) atnaujinti į dabartinę datą ir laiką. Jei jie neatnaujinti, pakartokite 14 veiksmą.

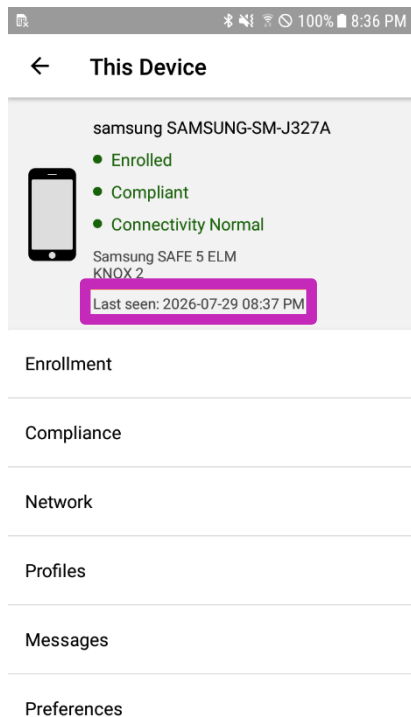




3 dalis. Patikrinkite, ar programos atnaujintos

1 Grįžkite į pradžią paspausdami pradžios mygtuką.



2

Bakstelėkite programą myPTM.

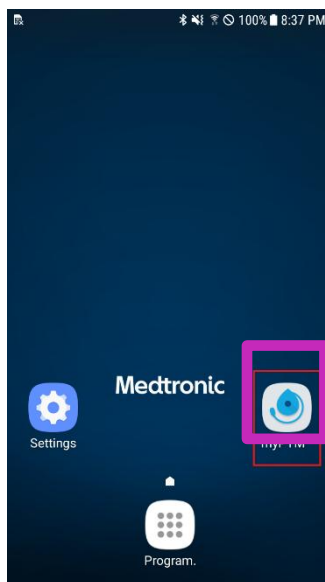


Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir prisijunkite prie pompos, kol pasieksite pagrindinį rodinį.

Įsitikinkite, kad komunikatorius įjungtas ir padėtas tiesiai virš pompos.


Atsižvelgiant į jūsų komunikatoriaus amžių, gali būti atliekamas komunikatoriaus naujinimas.

4 Viršutiniame kairiajame ekrano kampe palieskite meniu piktogramą.

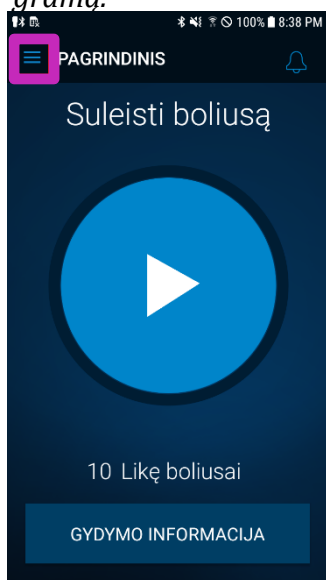

5

Bakstelėkite About (apie)

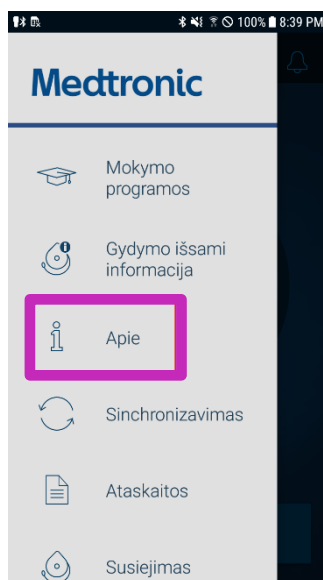


„Samsung J3“ mobiliojo įrenginio instrukcijos



Įsitikinkite, kad jame rodoma:

- „Version“ (versija): 2.0.3155
- Communication Manager: 1.0.1325
- Patient Data Service: 1.0.947

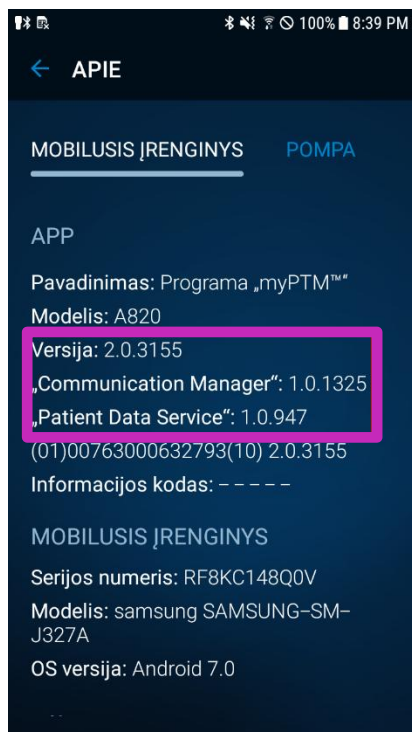

Jei versijų numeriai sutampa, naujinimas atliktas sėkmingai ir mobilių įrenginį galite naudoti kaip įprastai.

Jei kuris nors iš versijų numerių nesutampa, grįžkite į 2 dalį: „Atnaujinkite programas“ ir, jei reikia, dar kartą atnaujinkite programų versijas.

Naujinimas baigtas

Trumpas pareiškimas

Trumpas pareiškimas

Ši medžiaga neturėtų būti laikoma vieninteliu informacijos šaltiniu, ji neatstoja ir nepakeičia informacijos, pateiktos priemonės vadove (-uose).

Atkreipkite dėmesį, kad produkto paskirtis gali skirtis priklausomai nuo geografinių patvirtinimų.

Išsamesnės informacijos apie numatytąją paskirtį, (implantavimo) procedūrą, indikacijas, kontraindikacijas, išpėjimus, atsargumo priemones ir galimus nepageidaujamus įvykius žr. priemonės vadove (-uose).

Informacijos apie su MRT suderinamą (-as) priemonę (-es) žr. priemonės vadove (-uose) pateiktą MRT informaciją

prieš atlikdami MRT.

Jeigu priemonė tinkama naudoti su eIFU, naudojimo instrukcijas galima rasti „Medtronic“ svetainėje manuals.medtronic.com.

Vadovus galima peržiūrėti naudojant naujausią daugelio interneto naršyklių versiją. Geriausių rezultatų pasieksite, jeigu su naršykle naudosite „Adobe Acrobat® Reader“.

„Medtronic“ gaminiai, pateikiami rinkai, atitinka teisės aktus (jeigu taikoma) dėl medicinos priemonių. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį „Medtronic“ atstovą ir (arba) žr.

„Medtronic“ svetainės.

*Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliou31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00*

*United Kingdom/Ireland Medtronic
Limited Building 9 Croxley Park
Hatters Lane Watford Herts WD18
8WW www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004*