

Medtronic

Mobilās ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi

Sagatavošanās

Barošana: pirms atjauninājumu instalēšanas nodrošiniet, lai mobilā ierīce būtu pievienota elektroapgādes tīklam vai tās akumulators būtu uzlādēts par vairāk nekā 35 procentiem un sakaru ierīce būtu pieejama un uzlādēta.

Wi-Fi: noteikti izmantojiet uzticamu Wi-Fi tīklu, piemēram, to, kas tiek nodrošināts jūsu dzīvesvietā. Pirms sākat, nodrošiniet, lai tūlītēji būtu pieejams Wi-Fi tīkla nosaukums un parole.

Laiks: atkarībā no tīkla stipruma šis process var ilgt līdz pat 30 minūtēm.

Mobilās ierīces modelis: nosakiet, kurš mobilās ierīces modelis ir jūsu rīcībā, izmantojot tālāk redzamos attēlus. Mobilās ierīces Samsung J3 apakšdaļas centrā ir fiziska sākumstāvkļa poga.



Samsung A10e

Ja jums ir mobilā ierīce Samsung A10e, skatiet norādījumus 3. lpp.

Samsung A10e gadījumā noklikšķiniet šeit




Fiziskā sākumstāvkļa poga

Samsung J3

Ja jums ir mobilā ierīce Samsung J3, skatiet norādījumus 10. lpp.

Samsung J3 gadījumā noklikšķiniet šeit

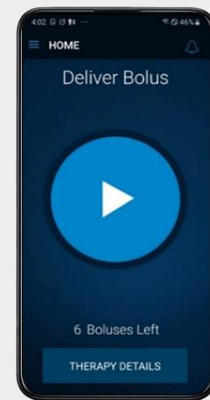

Satura rādītājs


Sagatavošanās	1
Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung A10e	3
1. daļa. Savienojuma ar Wi-Fi tīklu izveidošana.....	3
2. daļa. Lietotņu atjaunināšana.....	4
3. daļa. Lietotņu atjaunināšanas apstiprināšana.....	8
Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung J3	10
1. daļa. Savienojuma ar Wi-Fi tīklu izveidošana.....	10
2. daļa. Lietotņu atjaunināšana.....	11
3. daļa. Lietotņu atjaunināšanas apstiprināšana.....	16
Īss paziņojums	18

Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung A10e




1. daļa. Savienojuma ar Wi-Fi tīklu izveidošana

1. Pieskarieties ikonai **Settings** (Iestatījumi) mobilās ierīces sākuma ekrānā.

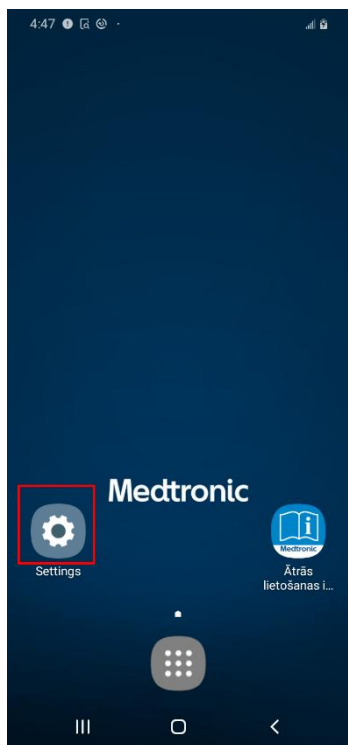

2. Pieskarieties pie **Connections** (Savienojumi).

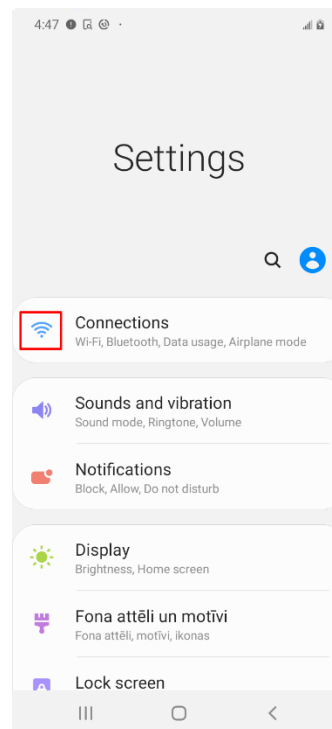


3. Atrodiet **Wi-Fi** un pieskarieties slēdzim, lai to pārslēgtu stāvoklī ON (Iesl.) un tā krāsa būtu zila.



4. Pieskarieties pie bezvadu tīkla, kuru vēlaties izmantot.

5. Pieskarieties pie **Connect** (Izveidot savienojumu).

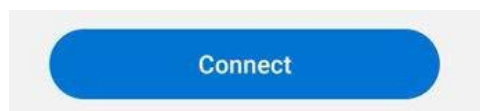


Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung A10e




**** Norādījumi JĀIZPILDA šādā secībā ****

2. daļa. Lietotņu atjaunināšana

1. Atgriezieties sākuma ekrānā

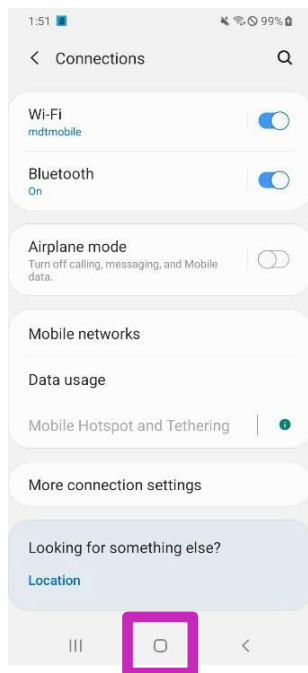


2. Sākuma ekrānā atveriet lietotņu izvēlni.

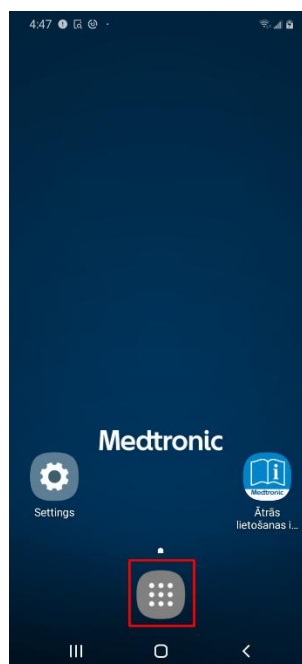

3. Pieskarieties pie lietotnes **Hub**.

(Lietotnes Hub ikona var atšķirties atkarībā no mobilās ierīces vecuma.)

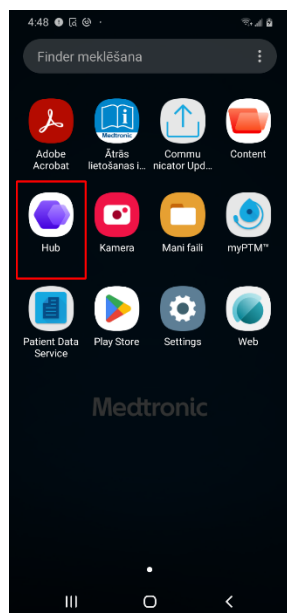


VAI




Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung A10e




4. Atsvaidziniet lietotnē Hub norādītās lietotnes, pavelkot uz leju ekrānā Apps (Lietotnes).

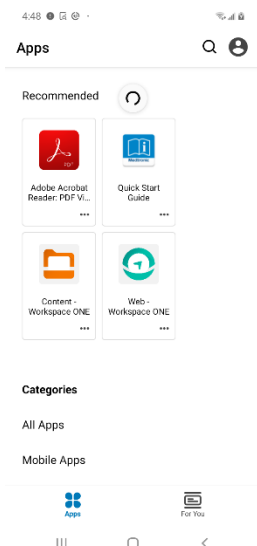

- Sadaļā Categories (Kategorijas) atlasiet **All Apps** (Visas lietotnes). Iespējams, būs jāritina uz leju līdz ekrāna apakšai.

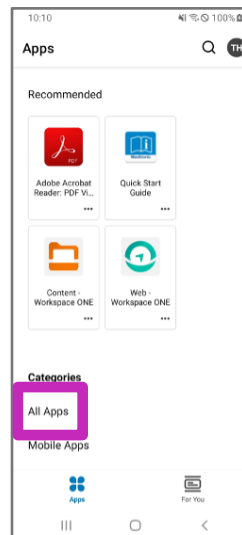


6. Atrodiet lietotni **Patient Data Service** un pieskarieties pie **UPDATE** (Atjaunināt).
(Pēc tam nepieskarieties pie OPEN (Atvērt), jo pretējā gadījumā tiks atvērta iepriekšējā lietotnes versija.)

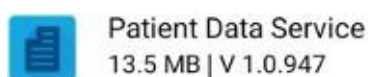

7. Atrodiet lietotni **Medtronic Communication Manager** un pieskarieties vienumam **UPDATE** (Atjaunināt).
(Pēc tam nepieskarieties pie OPEN (Atvērt), jo pretējā gadījumā tiks atvērta iepriekšējā lietotnes versija.)



8. Atrodiet lietotni **myPTM** un pieskarieties pie **UPDATE** (Atjaunināt).
(Pēc tam nepieskarieties pie OPEN (Atvērt), jo pretējā gadījumā tiks atvērta iepriekšējā lietotnes versija.)

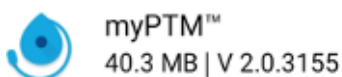


9. Nogaidiet 2 minūtes, līdz atjauninājumi ir pabeigti.


Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung A10e




10. Pieskarieties pie bultiņas At-pakaļ kreisajā augšējā stūrī.

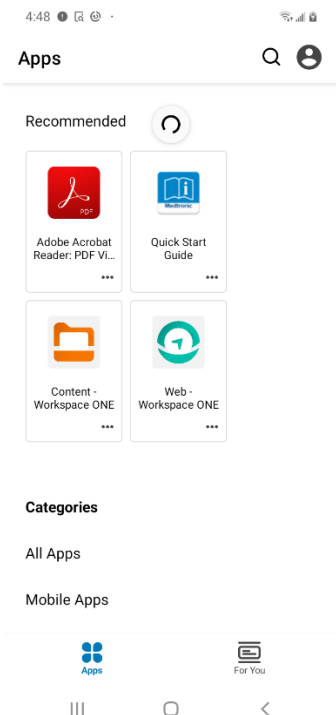



11. Pieskarieties konta ikonai augšējā labajā stūrī. Konta ikonas burti konkrētajai mobilajai ierīcei var atšķirties.

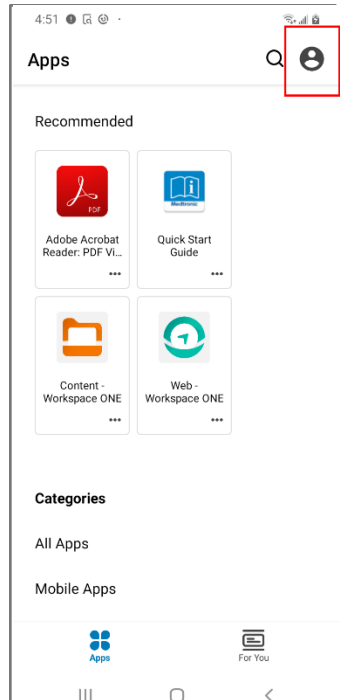

12. Pieskarieties pie **This Device** (Šī ierīce).

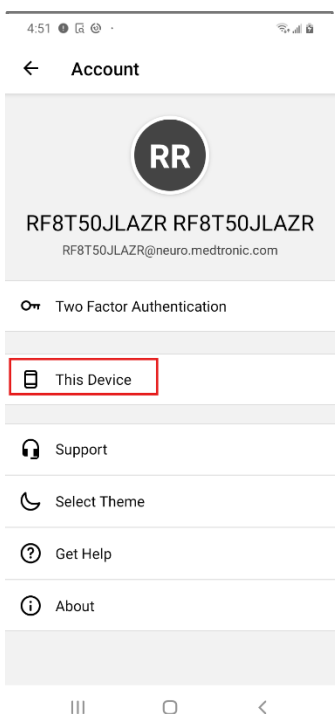


13. Ritiniet lejup līdz ekrāna apakšai un pieskarieties pie **Sync device** (Sinhronizēt ierīci). Ekrāna lejasdaļā tiks parādīts teksts "**Checking for updates**" (Meklē atjauninājumus).

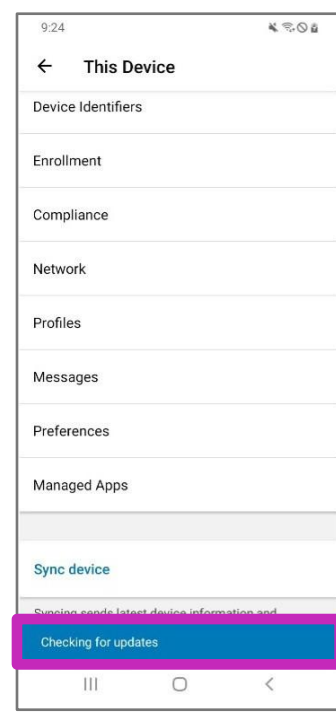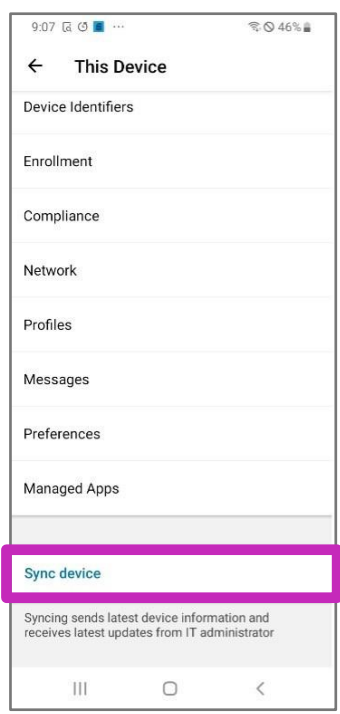

Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung A10e



- 14 Ritiniet atpakaļ uz ekrāna augšdaļu un pārļiecinieties, vai opcijas **Last seen** (Pēdējoreiz redzēts) dienas un laika dati ir atjaunināti uz pašreizējo datumu un laiku. Ja tie nav atjaunināti, atkārtojiet 13. darbību.

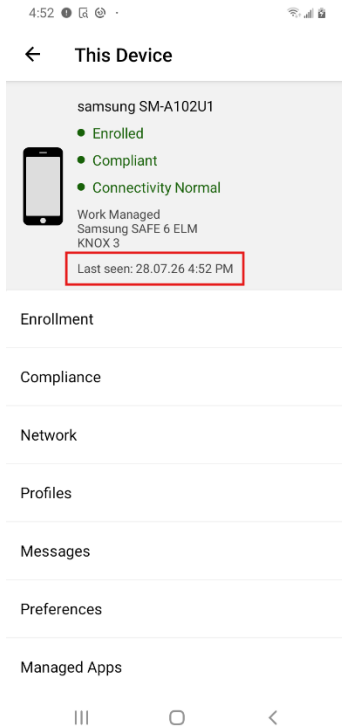


Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung A10e




3. daļa. Lietotņu atjaunināšanas apstiprināšana

1. Atgriezieties sākuma ekrānā

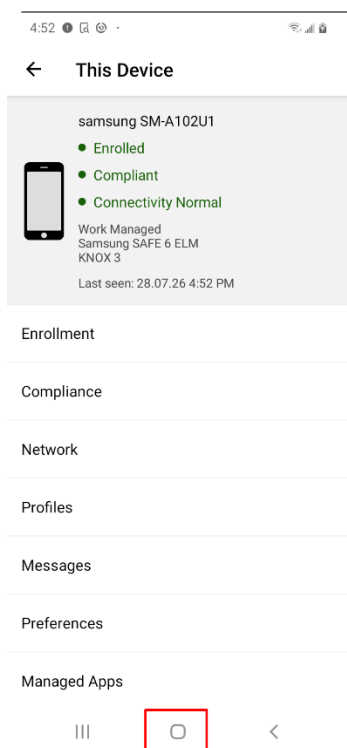

2. Pieskarieties pie lietotnes **myPTM**.

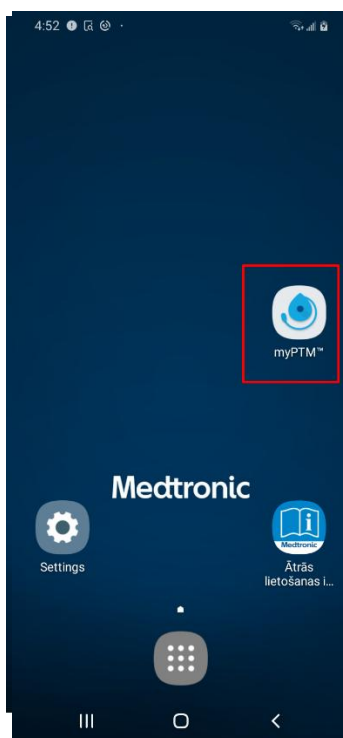


3. Lai izveidotu savienojumu ar sūkni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.

Nodrošiniet, lai sakaru ierīce būtu ieslēgta un novietota tieši virs sūkņa.

4. Pieskarieties izvēlnes ikonai ekrāna augšējā kreisajā stūrī.




5. Pieskarieties pie **About** (Par)

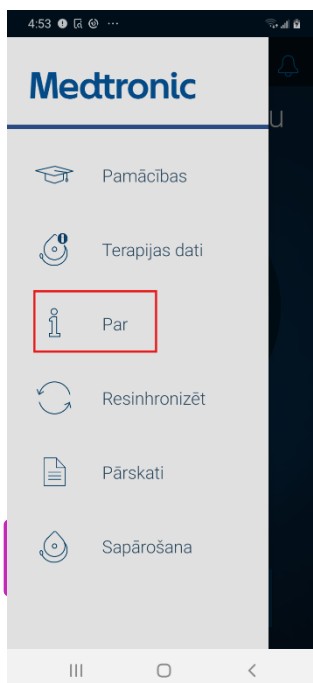

Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung A10e



6. Pārliedzinieties, vai tajā tiek parādīti tālāk minētie dati.
- a. **Versija:** 2.0.3155
 - b. **Communication Manager:** 1.0.1325
 - c. **Patient Data Service:** 1.0.947

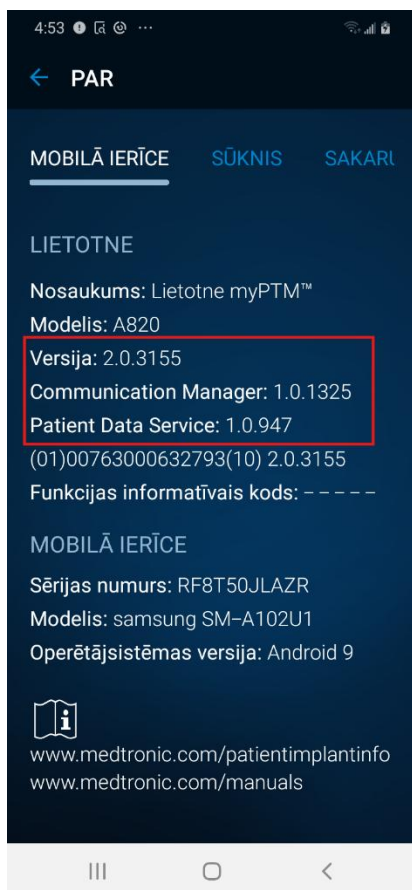

Ja versiju numuri sakrīt, atjaunināšana ir sekmīgi pabeigta, un jūs varat izmantot savu mobilo ierīci kā parasti.

Ja kāds no versijas numuriem nesakrīt, atgriezieties pie **2. daļas „Lietotņu atjaunināšana”** un pēc vajadzības vēlreiz atjauniniet lietotņu versijas.


Atjaunināšana ir pabeigta

Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung




1. daļa. Savienojuma ar Wi-Fi tīklu izveidošana

1. Pieskarieties ikonai **Settings** (Iestatījumi) mobilās ierīces sākuma ekrānā.

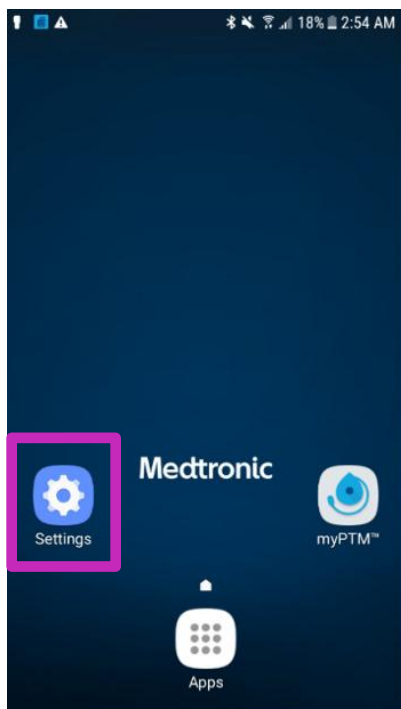

2. Pieskarieties pie **Connections** (Savienojumi).

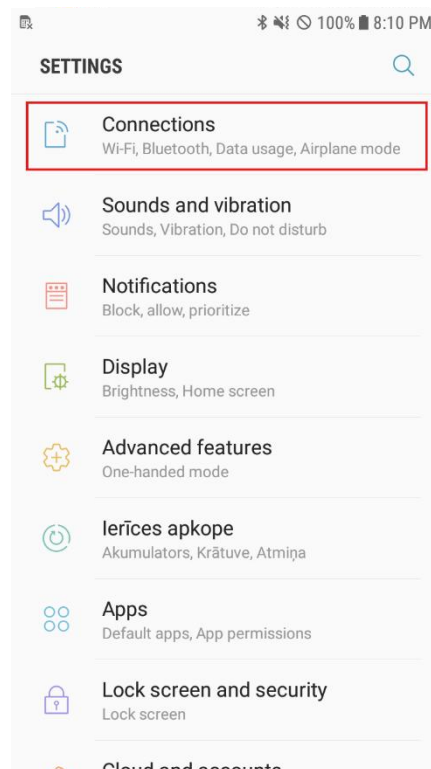


3. Atrodiet **Wi-Fi** un pieskarieties slēdzim, lai to pārslēgtu stāvoklī ON (Iesl.) un tā krāsa būtu zila.



4. Pieskarieties pie bezvadu tīkla, kuru vēlaties izmantot.

5. Pieskarieties pie **Connect** (Izveidot savienojumu).

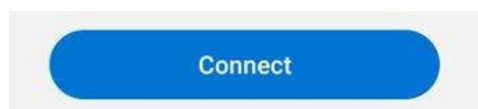


Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung J3




**** Norādījumi JĀIZPILDA šādā secībā ****

2. daļa. Lietotņu atjaunināšana

1. Atgriezieties sākuma ekrānā, nospiežot sākumstāvoņa pogu.
2. Sākuma ekrānā atveriet lietotņu izvēlni.

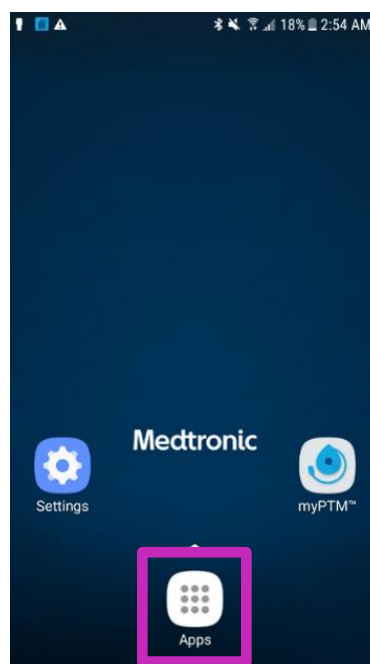


3. Pieskarieties lietotnes **Hub**.

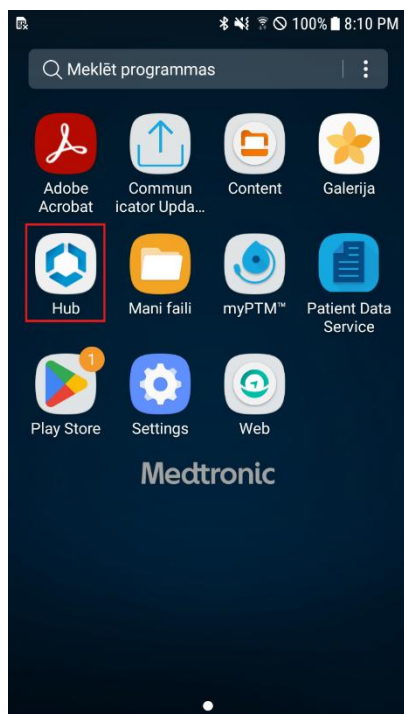


Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung J3



4. Atsvaidziniet lietotnē Hub norādītās lietotnes, pavelkot uz leju ekrānā Apps (Lietotnes).

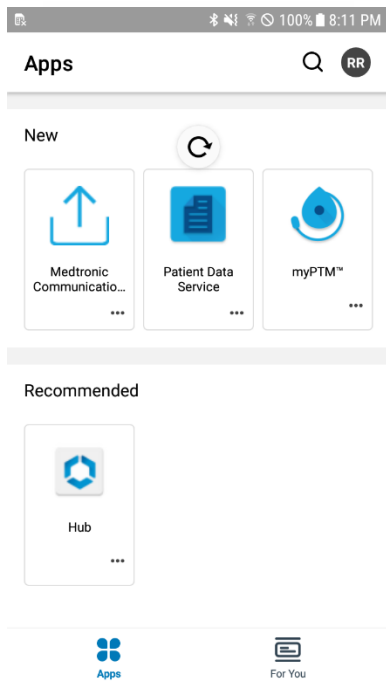

- Sadaļā Categories (Kategorijas) atlasiet **All Apps** (Visas lietotnes). Iespējams, būs jāritina uz leju līdz ekrāna apakšai.

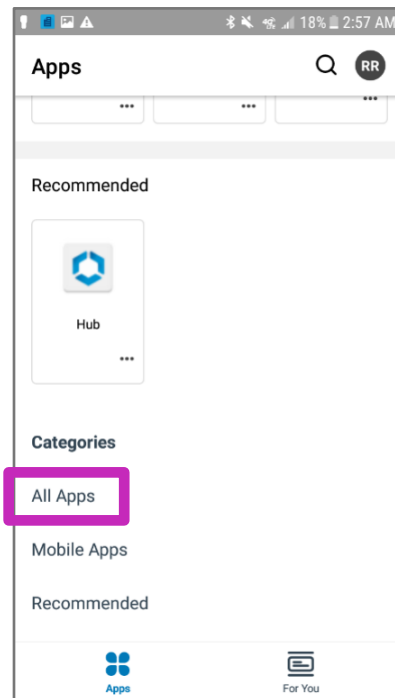

Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung J3




6. Atrodiet lietotni **Intelligent Hub** un pieskarieties pie **UPDATE** (Atjaunināt).
Ja šī lietotne sarakstā nav redzama, atjaunināšana nav nepieciešama. Pārejiet pie 7. darbības.
(Pēc tam nepieskarieties pie **OPEN** (Atvērt), jo pretējā gadījumā tiks atvērta iepriekšējā lietotnes versija.)




7. Atrodiet lietotni **Patient Data Service** un pieskarieties pie **UPDATE** (Atjaunināt).
(Pēc tam nepieskarieties pie **OPEN** (Atvērt), jo pretējā gadījumā tiks atvērta iepriekšējā lietotnes versija.)



8. Atrodiet lietotni **Medtronic Communication Manager** un pieskarieties vienumam **UPDATE** (Atjaunināt).
(Pēc tam nepieskarieties pie **OPEN** (Atvērt), jo pretējā gadījumā tiks atvērta iepriekšējā lietotnes versija.)

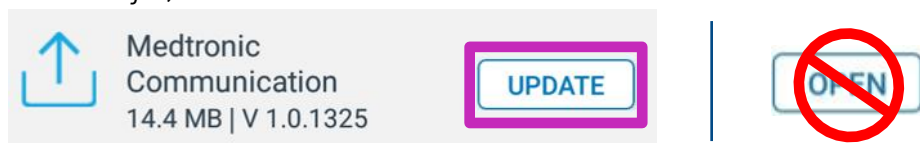

9. Atrodiet lietotni **myPTM** un pieskarieties pie **UPDATE** (Atjaunināt).
(Pēc tam nepieskarieties pie **OPEN** (Atvērt), jo pretējā gadījumā tiks atvērta iepriekšējā lietotnes versija.)

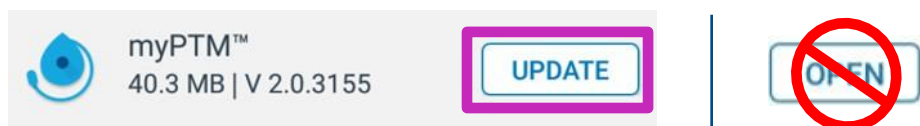


10. **Nogaidiet** 2 minūtes, līdz atjauninājumi ir pabeigti.


Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung J3




11. Pieskarieties pie bultiņas Atpakaļ kreisajā augšējā stūrī.

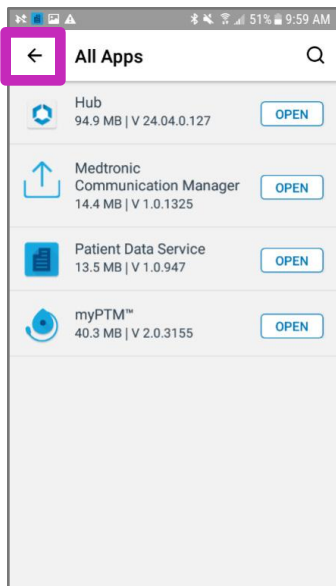



12. Pieskarieties konta ikonai augšējā labajā stūrī. Konta ikonas burti konkrētajai mobilajai ierīcei var atšķirties.

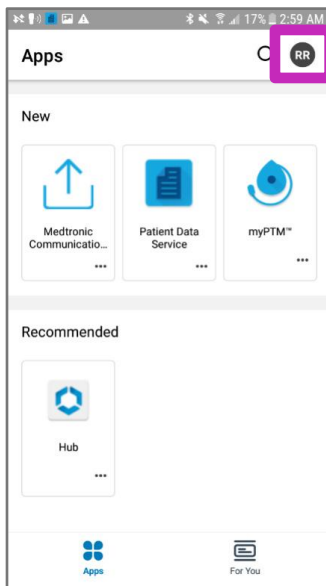

13. Pieskarieties pie **This Device** (Šī ierīce).

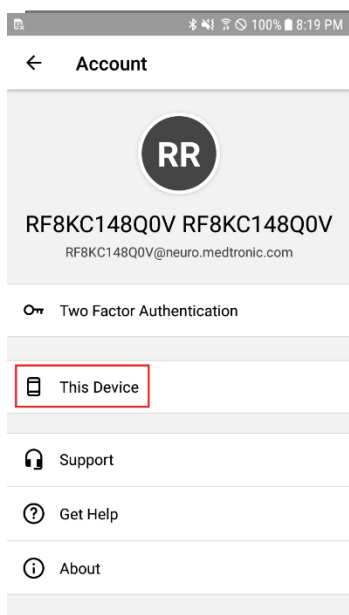


14. Ritiniet lejup līdz ekrāna apakšai un pieskarieties pie **Sync device** (Sinhronizēt ierīci). Ekrāna lejasdaļā tiks parādīts teksts "**Checking for updates**" (Meklē atjauninājumus).

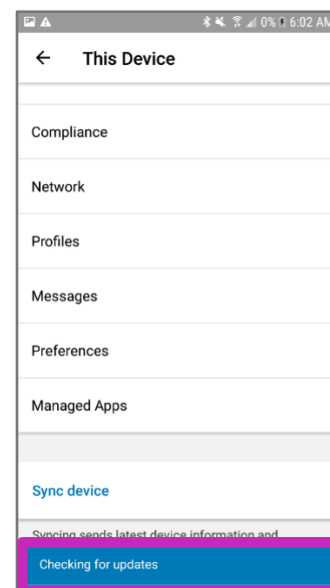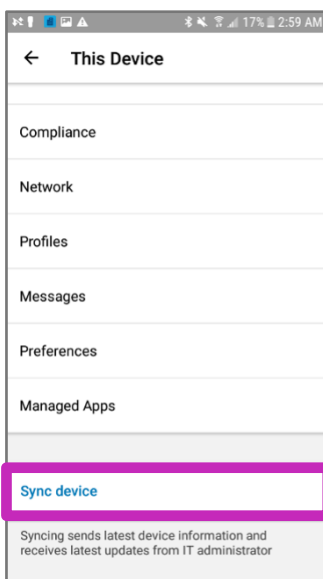

Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung J3



15. Ritiniet atpakaļ uz ekrāna augšdaļu un pārļiecinieties, vai opcijas **Last seen** (Pēdējoreiz redzēts) dienas un laika dati ir atjaunināti uz pašreizējo datumu un laiku. Ja tie nav atjaunināti, atkārtojiet 14. darbību.

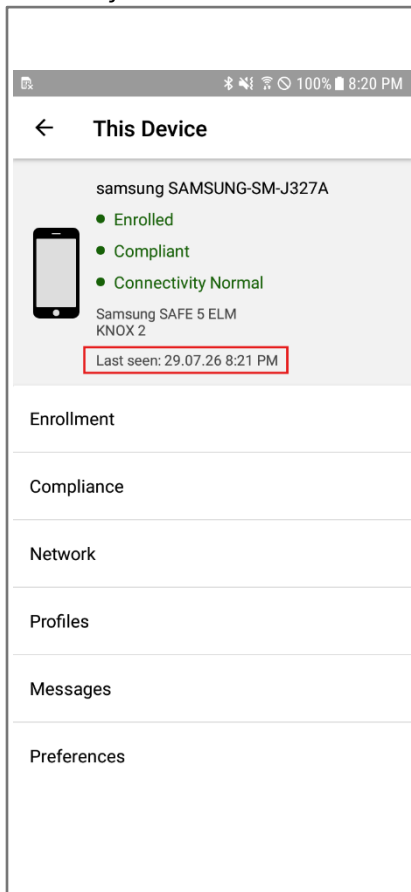

Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung J3



3. daļa. Lietotņu atjaunināšanas apstiprināšana

1. Atgriezieties sākuma ekrānā, nospiežot sākumstāvokļa pogu.



2. Pieskarieties lietotnes **myPTM**.




3. Lai izveidotu savienojumu ar sūkni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.


Nodrošiniet, lai sakaru ierīce būtu ieslēgta un novietota tieši virs sūkņa.

Sakaru ierīce var tikt atjaunināta atkarībā no sakaru ierīces vecuma.

4. Pieskarieties izvēlnes ikonai ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

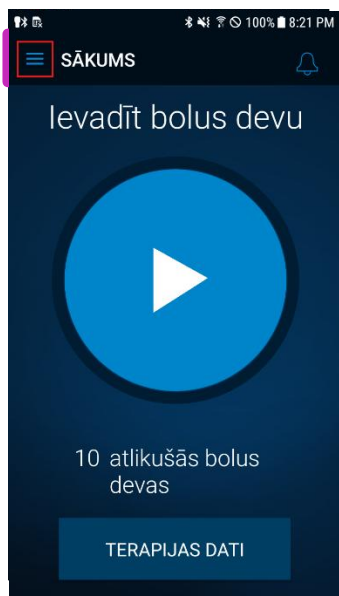


5. Pieskarieties pie **About** (Par)

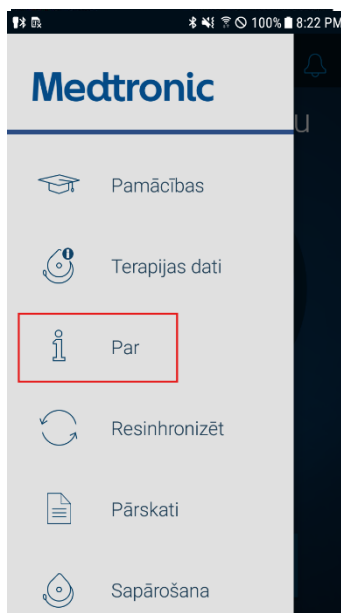

Norādījumi attiecībā uz mobilo ierīci Samsung J3



6. Pārliedzinieties, vai tajā tiek parādīti tālāk minētie dati.
- Versija:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

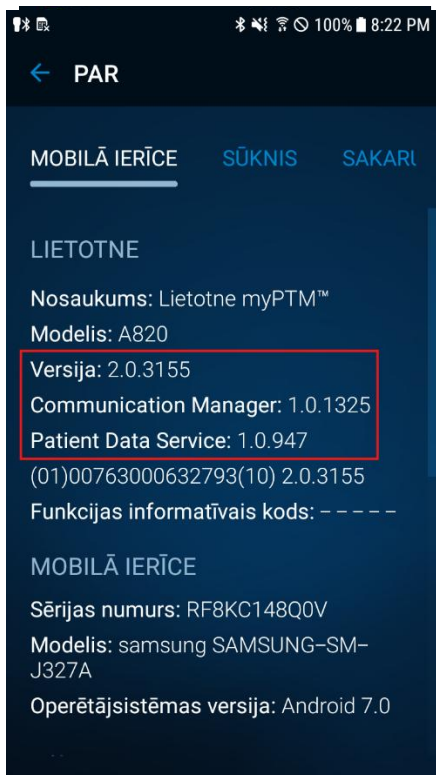

Ja versiju numuri sakrīt, atjaunināšana ir sekmīgi pabeigta, un jūs varat izmantot savu mobilo ierīci kā parasti.

Ja kāds no versijas numuriem nesakrīt, atgriezieties pie **2. daļas „Lietotņu atjaunināšana”** un pēc vajadzības vēlreiz atjauniniet lietotņu versijas.

Atjaunināšana ir pabeigta

Īss paziņojums

Īss paziņojums:

Šis materiāls nav uzskatāms par vienīgo informācijas avotu, tas neaizvieto vai neaizstāj informāciju, kas ietverta konkrētās ierīces rokasgrāmatā.

Nemiet vērā, ka izstrādājuma paredzētais lietojums var atšķirties atkarībā no apstiprinājuma ģeogrāfiskajā lietošanas vietā.

Plašāku informāciju par paredzēto lietošanu, implantēšanas procedūru, indikācijām, kontrindikācijām, brīdinājumiem, piesardzības pasākumiem un iespējamajiem nevēlamajiem notikumiem skatiet konkrētās ierīces rokasgrāmatā.

Attiecībā uz ierīcēm, kas ir saderīgas ar MR attēldiagnostiku: pirms veicat magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas izmeklējumu, skatiet konkrētās ierīces rokasgrāmatā sniegto informāciju par magnētiskās rezonanses attēldiagnostiku

.

Ja ierīcei ir pieejama elektroniskā lietošanas pamācība, šo lietošanas pamācību var atrast Medtronic tīmekļa vietnē manuals.medtronic.com.

Rokasgrāmatas var skatīt, izmantojot izplatītāko interneta pārlūkprogrammu jaunāko versiju. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, kopā ar pārlūkprogrammu izmantojiet programmu Adobe Acrobat® Reader.

Tirdzniecībā laistie Medtronic izstrādājumi atbilst tiesību aktiem (ja attiecināmi) par medicīniskām ierīcēm. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo Medtronic pārstāvi un/vai apmeklējiet Medtronic tīmekļa vietnes.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliu31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004