

Medtronic

Handsetsoftware updaten via wifi



Vorbereiding

Voeding: zorg ervoor dat uw handset is aangesloten op netvoeding of meer dan 35 procent batterijcapaciteit heeft en dat uw communicator beschikbaar en opgeladen is voordat u updates installeert.

Wifi: zorg ervoor dat u een vertrouwd wifi-netwerk gebruikt, zoals uw thuisprovider. Zorg ervoor dat u de naam en het wachtwoord van het wifi-netwerk bij de hand heeft voordat u begint.

Tijd: dit proces kan tot 30 minuten in beslag nemen, afhankelijk van uw netwerkbandbreedte.

Handsetmodel: bepaal aan de hand van de onderstaande afbeeldingen welk model handset u heeft. De Samsung J3-handset heeft een fysieke beginschermknop in het midden onderaan.



Samsung A10e

Als u een Samsung A10e-handset heeft, raadpleegt u de instructies op pagina 3.

[Klik hier voor Samsung A10e](#)



Fysieke
beginscherm-
knop

Samsung J3

Als u een Samsung J3-handset heeft, raadpleegt u de instructies op pagina 10.

[Klik hier voor Samsung J3](#)

Inhoudsopgave


Vorbereiding.....	1
Instructies voor Samsung A10e-handset	3
Deel 1: Verbinden met wifi.....	3
Deel 2: Apps bijwerken	4
Deel 3: Controleren of apps zijn geüpdatet.....	8
Instructies voor Samsung J3-handset	10
Deel 1: Verbinden met wifi	10
Deel 2: Apps bijwerken.....	11
Deel 3: Controleren of apps zijn geüpdatet.....	16
Korte verklaring.....	18

Instructies voor Samsung A10e-handset




Deel 1: Verbinden met wifi

- 1 Tik in het beginscherm van uw handset op het pictogram **Settings** (Instellingen).

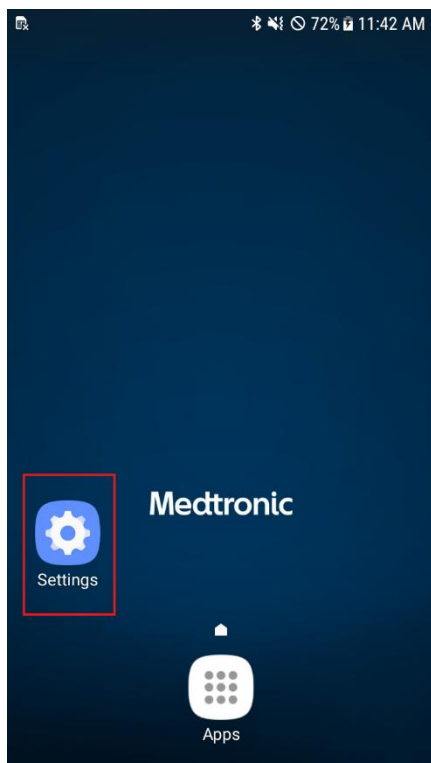

- 2 Tik op **Connections** (Verbindingen)

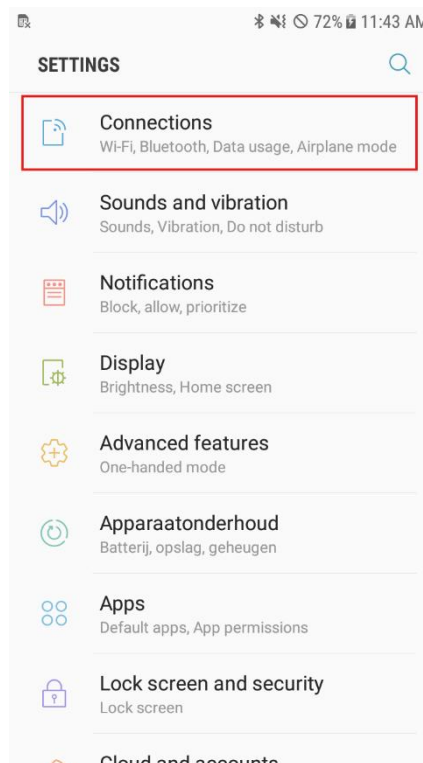


- 3 Zoek **Wi-Fi** (wifi) en tik op het schuifje zodat deze AAN gaat en blauw is



- 4 Tik op het draadloze netwerk dat u wilt gebruiken.

- 5 Tik op **Connect** (Verbinden)

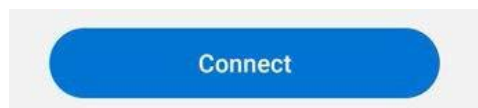


Instructies voor Samsung A10e-handset



** Instructies **MOETEN** in deze volgorde worden opgevolgd **

Deel 2: Apps bijwerken

1 Ga terug naar het beginscherm.

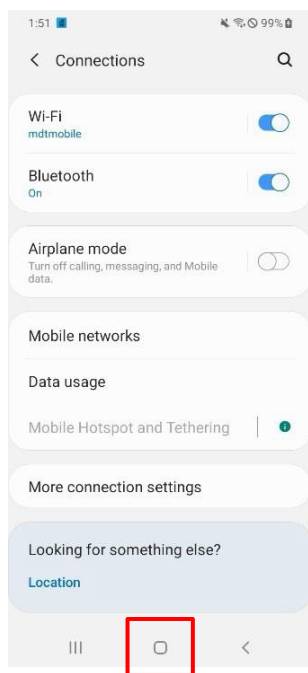


2 Ga naar het applicatie-overzicht zodra de handset opnieuw is opgestart.



3 Tik op de app **Hub**.


(Het pictogram van de Hub-app kan afwijken afhankelijk van wanneer u de handset heeft aangeschaft.)

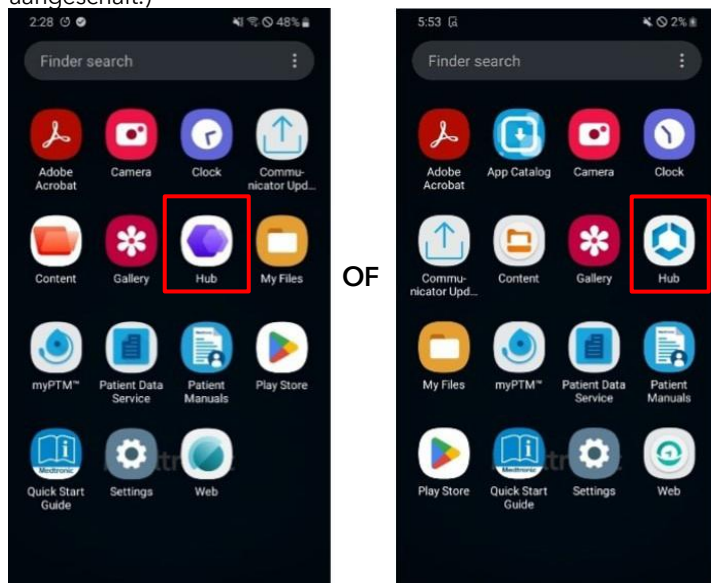


Instructies voor Samsung A10e-handset



- 4 Vernieuw de apps die in Hub worden vermeld door omlaag te vegen op het scherm Apps.

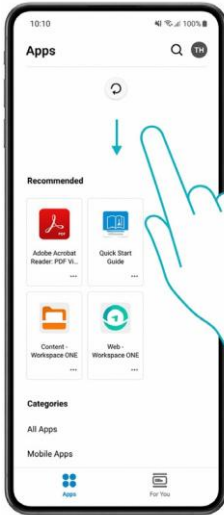

- 5 Selecteer **All Apps** (Alle apps) onder Categories (Categorieën). Mogelijk moet u omlaag scrollen naar de onderkant van het scherm.

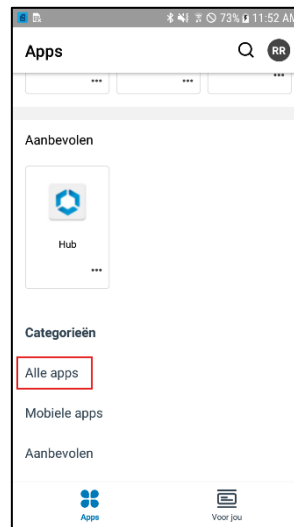

- 6 Ga naar de app **Patient Data Service** en tik op **UPDATE** (BIJWERKEN).
(Tik daarna niet op OPEN (OPENEN), anders wordt de vorige versie van de app geopend.)



- 7 Ga naar de app **Medtronic Communication Manager** en tik op **UPDATE** (BIJWERKEN).
(Tik daarna niet op OPEN (OPENEN), anders wordt de vorige versie van de app geopend.)



- 8 Ga naar de app **myPTM** en tik op **UPDATE** (BIJWERKEN).
(Tik daarna niet op OPEN (OPENEN), anders wordt de vorige versie van de app geopend.)




- 9 Wacht 2 minuten totdat de updates zijn voltooid.


Instructies voor Samsung A10e-handset



- 10 Tik op de pijl naar links in de linkerbovenhoek.

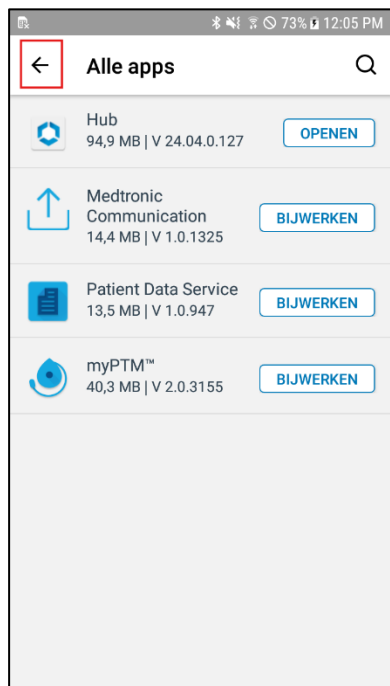



- 11 Tik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek. De letters in het accountpictogram kunnen per handset verschillen.

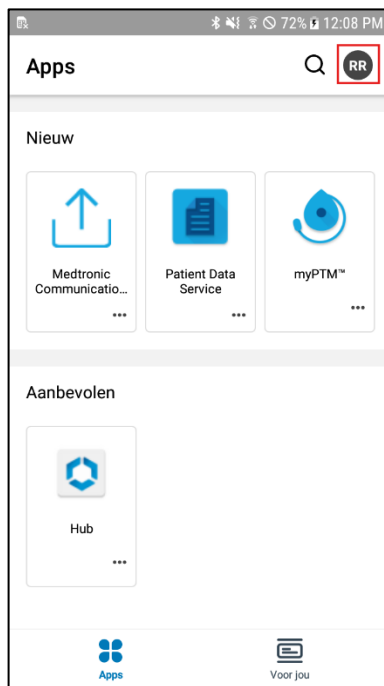

- 12 Tik op **This Device** (Dit apparaat).




- 13 Scroll tot onder in het scherm en tik op **Sync device** (Apparaat synchroniseren). 'Checking for updates' (Bezig met controleren op updates)' wordt onder aan het scherm weergegeven.

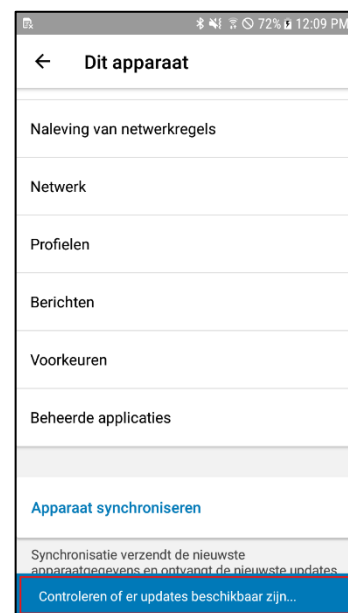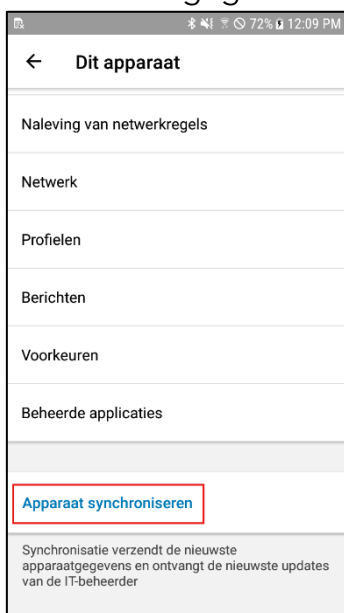

Instructies voor Samsung A10e-handset



- 14 Scrol terug naar de bovenkant van het scherm en controleer of de datum en tijd van **Last seen** (Als laatst gezien) zijn bijgewerkt naar de huidige datum en tijd. Herhaal stap 13 als dat niet het geval is.

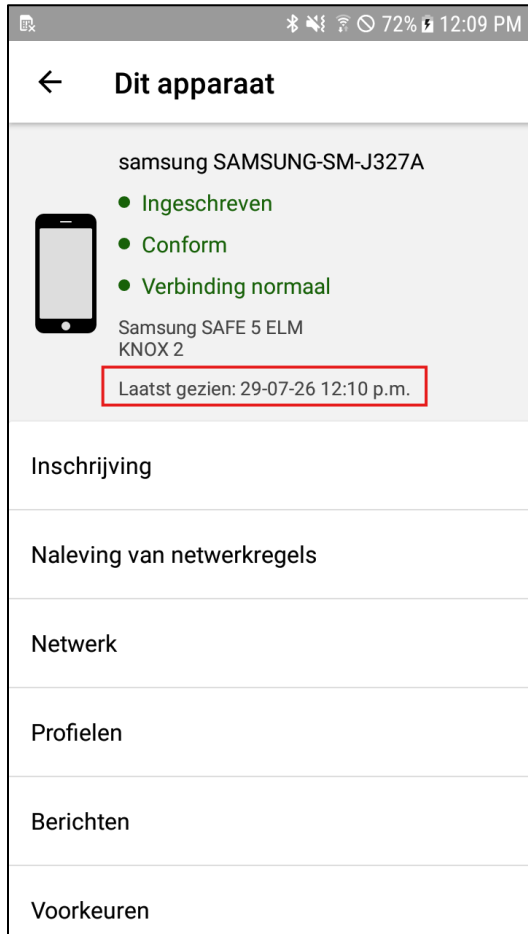


Instructies voor Samsung A10e-handset




Deel 3: Controleren of apps zijn geüpdatet

- 1 Ga terug naar het beginscherm.

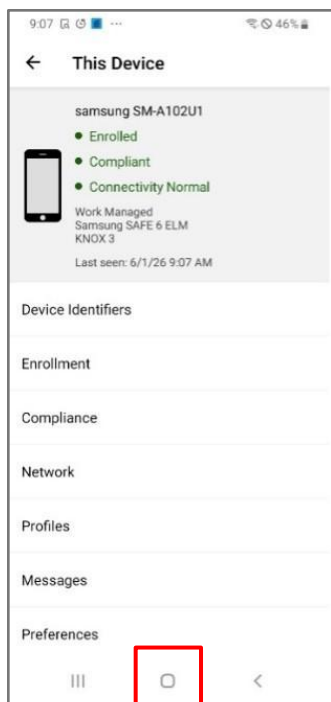

2

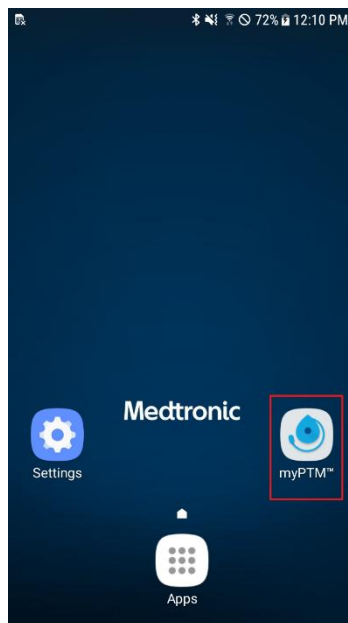


3

Tik op de app **myPTM**. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met de pomp tot u bij het beginscherm aankomt.

Zorg ervoor dat de communicator is ingeschakeld en dat u deze recht boven de pomp houdt.

- 4 Tik op het menupictogram linksboven in het scherm.

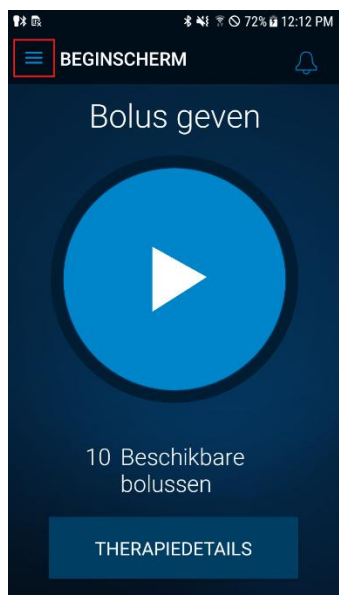

- 5 Tik op **About** (Over)




Instructies voor Samsung A10e-handset



6 Controleer of het volgende wordt weergegeven:

- a. **Versie:** 2.0.3155
- b. **Communication Manager:** 1.0.1325
- c. **Patient Data Service:** 1.0.947

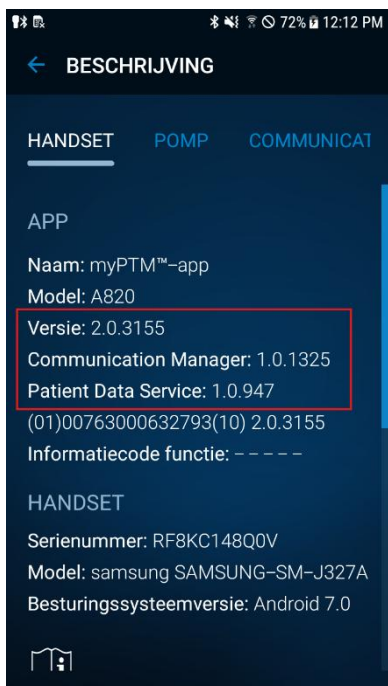

Als de versienummers overeenkomen, is de update voltooid en kunt u uw handset gebruiken zoals u dat gewend bent.

Als een van de versienummers niet overeenkomt, ga dan terug naar **Deel 2: Apps bijwerken** en update de applicatieversies zo nodig opnieuw.


Update voltooid

Instructies voor Samsung J3-handset




Deel 1: Verbinden met wifi

- 1 Tik in het begainscherm van uw handset op het pictogram **Settings** (Instellingen).

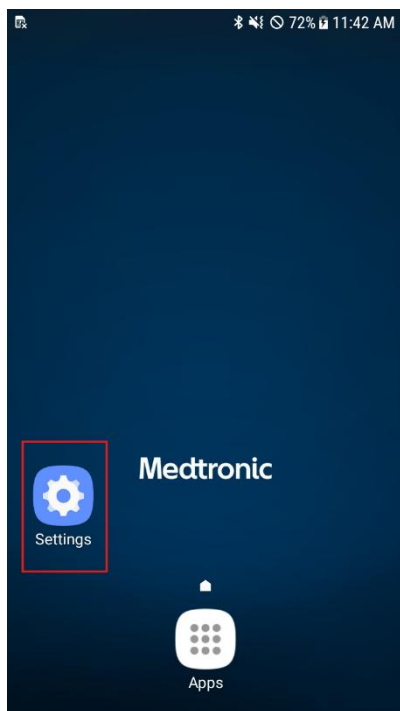

- 2 Tik op **Connections** (Verbindingen)

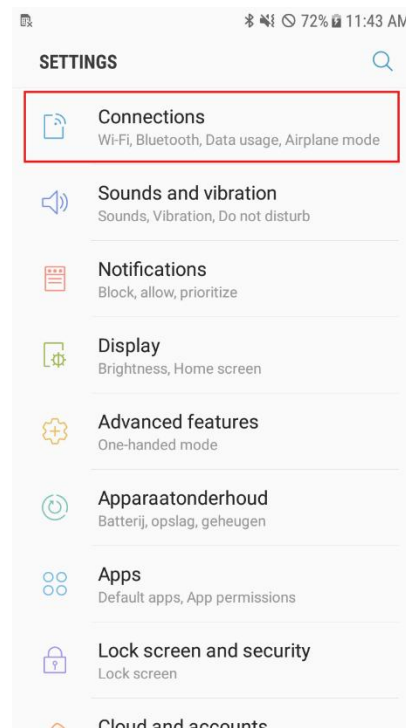


- 3 Zoek **Wi-Fi** (wifi) en tik op het schuifje zodat deze AAN gaat en blauw is



- 4 Tik op het draadloze netwerk dat u wilt gebruiken.

- 5 Tik op **Connect** (Verbinden)

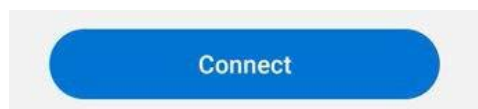


Instructies voor Samsung J3-handset




**** Instructies MOETEN in deze volgorde worden opgevolgd ****

Deel 2: Apps bijwerken


1 Ga terug naar het beginscherm door op de beginschermknop te drukken.

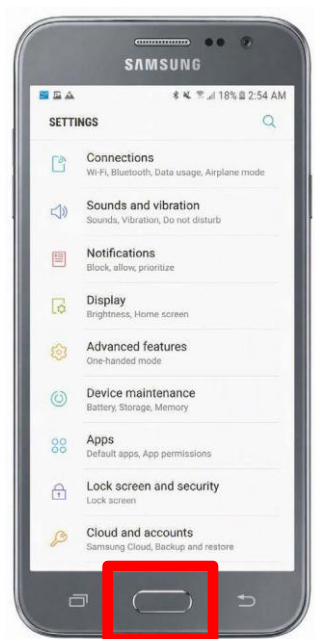

2 Ga naar het applicatie-overzicht zodra de handset opnieuw is opgestart.

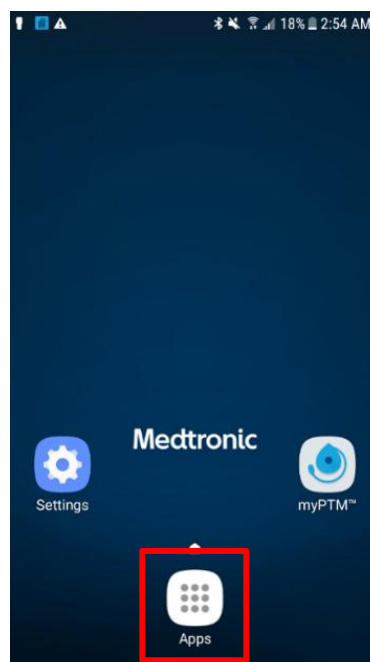


3 Tik op de app **Hub**.

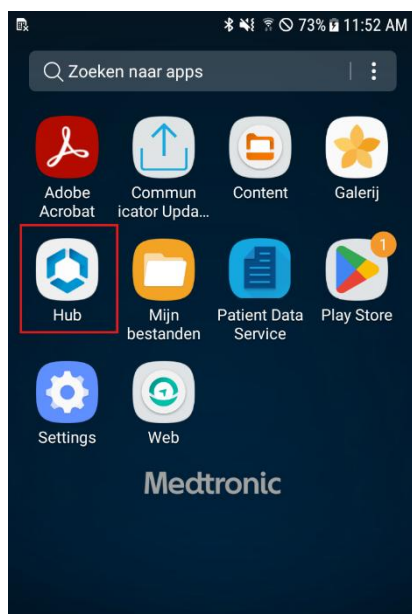


Instructies voor Samsung J3-handset



- 4 Vernieuw de apps die in Hub worden vermeld door omlaag te vegen op het scherm Apps.

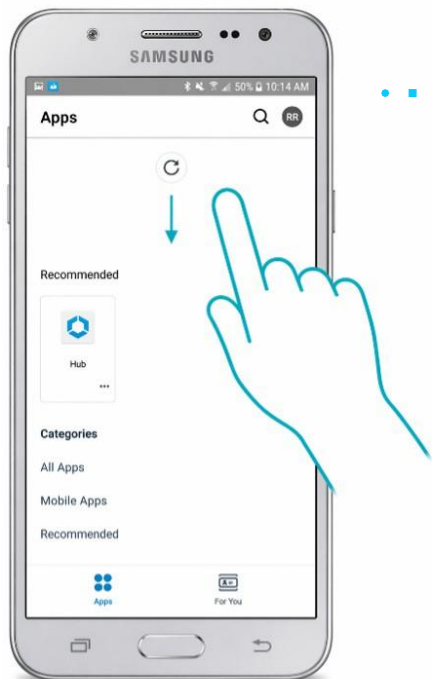


- 5 Selecteer **All Apps** (Alle apps) onder Categories (Categorieën). Mogelijk moet u omlaag scrollen naar de onderkant van het scherm.

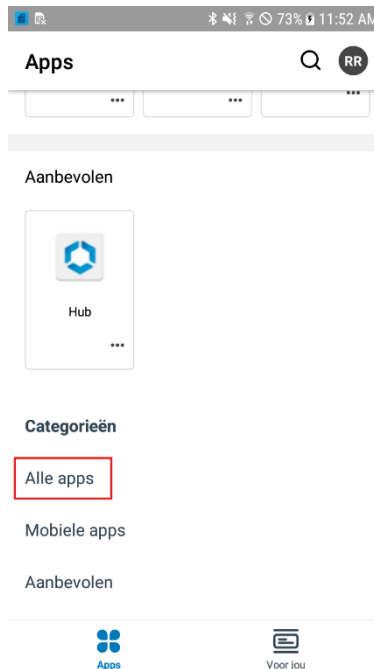


Instructies voor Samsung J3-handset




- 6 Zoek de app **Intelligent Hub** en tik op **UPDATE** (BIJWERKEN).
Als u deze app niet in uw lijst ziet, is er geen update nodig. Ga naar stap 7.
(Tik daarna niet op OPEN (OPENEN), anders wordt de vorige versie van de app geopend.)

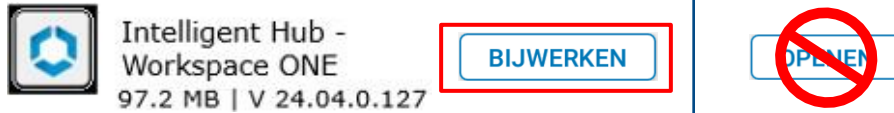


- 7 Ga naar de app **Patient Data Service** en tik op **UPDATE** (BIJWERKEN).
(Tik daarna niet op OPEN (OPENEN), anders wordt de vorige versie van de app geopend.)

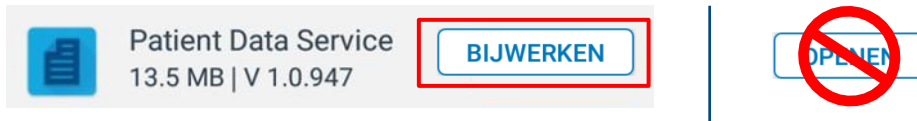

- 8 Ga naar de app **Medtronic Communication Manager** en tik op **UPDATE** (BIJWERKEN).
(Tik daarna niet op OPEN (OPENEN), anders wordt de vorige versie van de app geopend.)

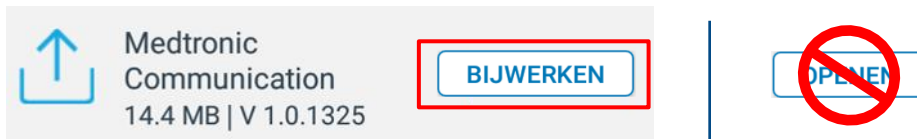

- 9 Ga naar de app **myPTM** en tik op **UPDATE** (BIJWERKEN).
(Tik daarna niet op OPEN (OPENEN), anders wordt de vorige versie van de app geopend.)

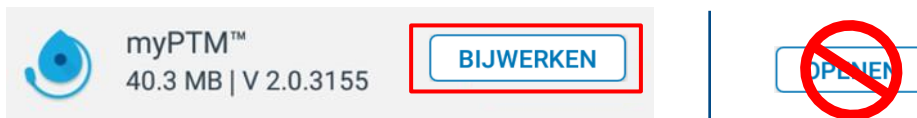


- 10 **Wacht** 2 minuten totdat de updates zijn voltooid.


Instructies voor Samsung J3-handset




- 11 Tik op de pijl naar links in de linkerbovenhoek.

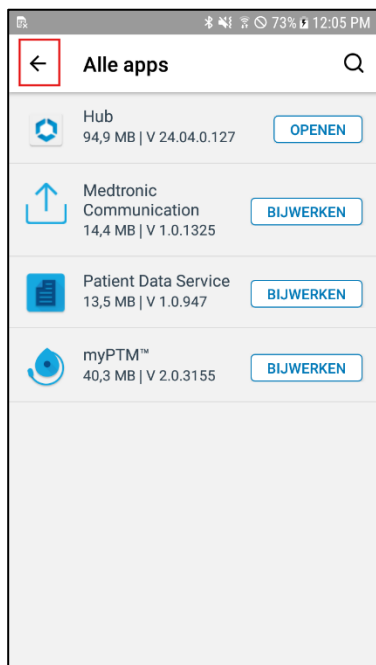



- 12 Tik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek. De letters in het accountpictogram kunnen per handset verschillen.

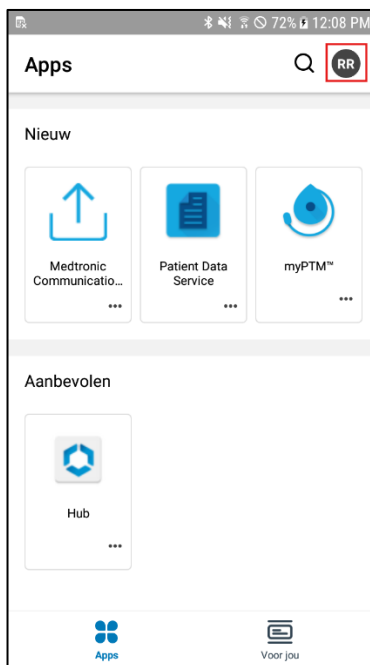

- 13 Tik op **This Device** (Dit apparaat).

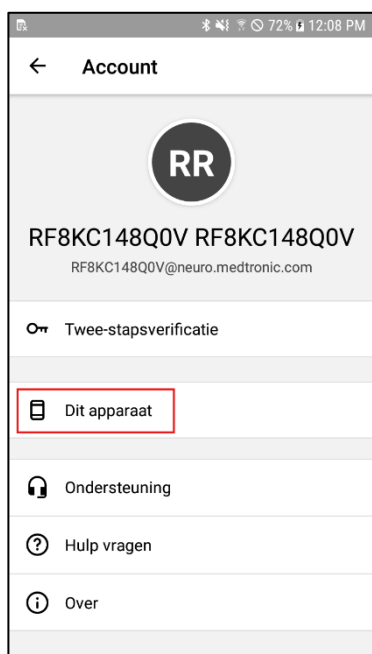


- 14 Scrol tot onder in het scherm en tik op **Sync device** (Apparaat synchroniseren). 'Checking for updates (Bezig met controleren op updates)' wordt onder aan het scherm weergegeven.

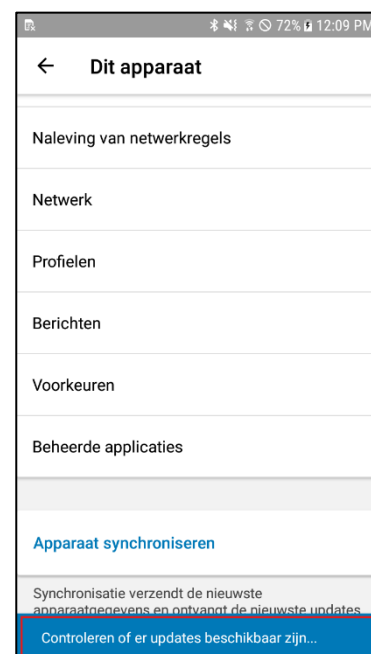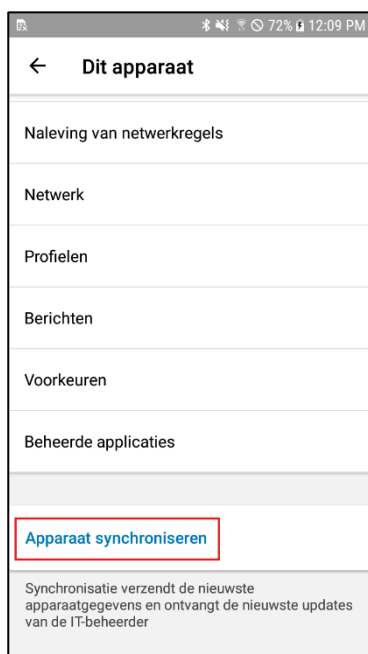

Instructies voor Samsung J3-handset



- 15 Scrol terug naar de bovenkant van het scherm en controleer of de datum en tijd van **Last seen** (Als laatst gezien) zijn bijgewerkt naar de huidige datum en tijd. Herhaal stap 14 als dat niet het geval is.


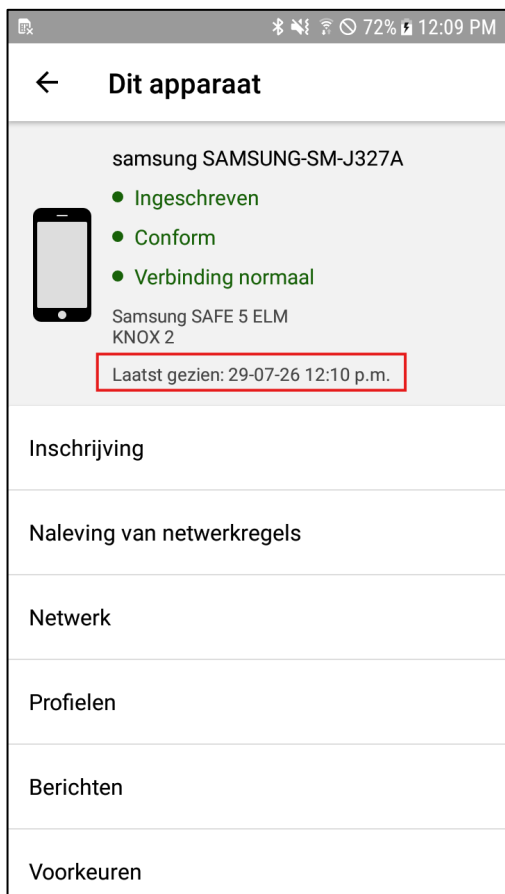


Instructies voor Samsung J3-handset



Deel 3: Controleren of apps zijn geüpdatet

- 1 Ga terug naar het beginscherm door op de beginschermknop te drukken.
- 2 Tik op de app **myPTM**.

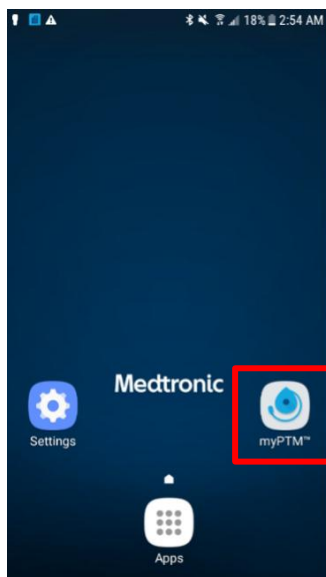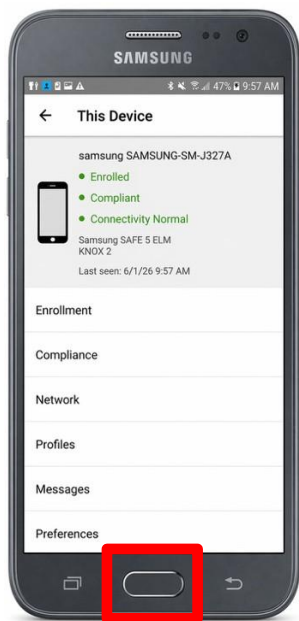


- 3 Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met de pomp tot u bij het beginscherm aankomt.

Zorg ervoor dat de communicator is ingeschakeld en dat u deze recht boven de pomp houdt.

Er kan een update voor uw communicator nodig zijn, afhankelijk van wanneer u uw communicator heeft aangeschaft.

- 4 Tik op het menupictogram linksboven in het scherm.
- 5 Tik op **About** (Over)

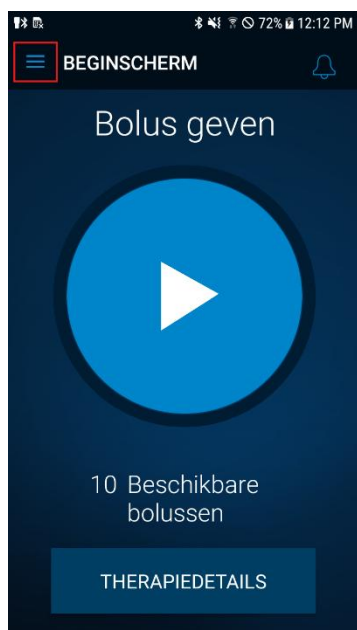


Instructies voor Samsung J3-handset



6 Controleer of het volgende wordt weergegeven:

- Versie:** 2.0.3155
- Communication Manager:** 1.0.1325
- Patient Data Service:** 1.0.947

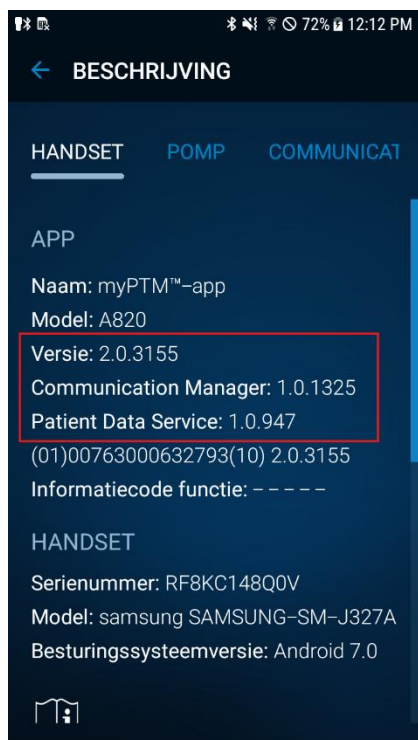

Als de versienummers overeenkomen, is de update voltooid en kunt u uw handset gebruiken zoals u dat gewend bent.

Als een van de versienummers niet overeenkomt, ga dan terug naar **Deel 2: Apps bijwerken** en update de applicatieversies zo nodig opnieuw.

Update voltooid

Korte verklaring

Korte verklaring:

Dit materiaal mag niet gebruikt worden als enige bron van informatie, het vervangt of overstijgt de informatie in de handleiding(en) van het hulpmiddel niet.

Het beoogde gebruik van een product kan verschillen afhankelijk van geografische goedkeuringen.

Zie de handleiding van het medische systeem voor gedetailleerde informatie over het beoogde gebruik, de implantatieprocedure, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen.

Voor MRI-compatibele hulpmiddelen, moet u de MRI-informatie in de handleiding(en) van het betreffend hulpmiddel raadplegen alvorens een MRI-scan uit te voeren.

Als een hulpmiddel in aanmerking komt voor gebruik met eIFU, kan de gebruiksaanwijzing gevonden worden op de website van Medtronic: manuals.medtronic.com.

Handleidingen kunnen worden bekeken met een recente versie van de gangbare internetbrowsers. Voor het beste resultaat gebruikt u Adobe Acrobat® Reader met de browser.

Medtronic producten die op de markt worden gebracht voldoen aan de wetgeving (indien van toepassing) inzake medische hulpmiddelen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Medtronic en/of raadpleeg de websites van Medtronic.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004