

Medtronic

Oppdatere håndsettets programvare ved hjelp av Wi-Fi


Forberedelse

Strøm: Forsikre deg om at håndsettet er koblet til strøm eller har mer enn 35 % batterinivå, og at kommunikatoren er tilgjengelig og ladet før du installerer oppdateringer.

Wi-Fi: Sørg for å bruke et pålitelig Wi-Fi-nettverk, for eksempel Wi-Fi-nettverket hjemme. Ha navnet på Wi-Fi-nettverket og passordet tilgjengelig før du begynner.

Tid: Avhengig av nettverksstyrken kan denne prosessen ta opptil 30 minutter.

Håndsettmodell: Finn ut hvilken håndsettmodell du har ved hjelp av bildene nedenfor. Samsung J3-håndsettet har en fysisk hjem-knapp nederst i midten.

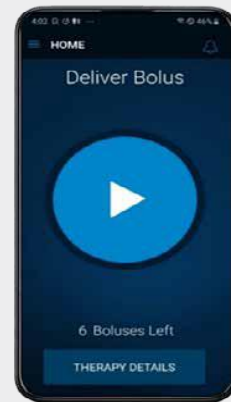

Samsung A10e

Hvis du har et Samsung A10e-håndsett, kan du se instruksjonene på side 3.

[Klikk her for Samsung A10e](#)



Fysisk hjem-knapp

Samsung J3

Hvis du har et Samsung J3-håndsett, kan du se instruksjonene på side 10.

[Klikk her for Samsung J3](#)

Innhold


Forberedelse.....	1
Instruksjoner for Samsung A10e håndsett.....	3
Del 1: Koble til Wi-Fi	3
Del 2: Oppdatere apper.....	4
Del 3: Bekrefte at apper er oppdatert.....	8
Instruksjoner for Samsung J3 håndsett.....	10
Del 1: Koble til Wi-Fi.....	10
Del 2: Oppdatere apper	11
Del 3: Bekrefte at apper er oppdatert.....	16
Kort erklæring	18

Instruksjoner for Samsung A10e håndsett




Del 1: Koble til Wi-Fi

- 1 Trykk på ikonet **Settings** (Innstillinger) på håndsettets hjem-skjerm.

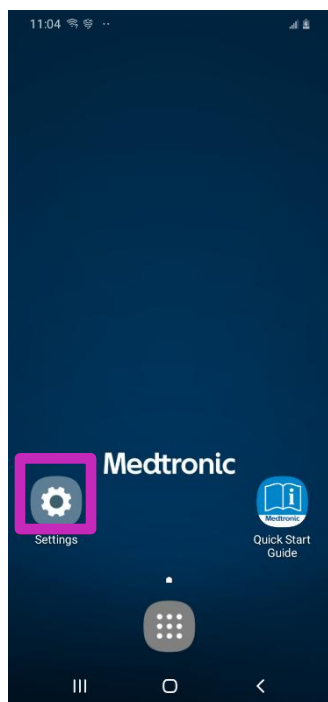

- 2 Trykk på **Connections** (Tilkoblinger).

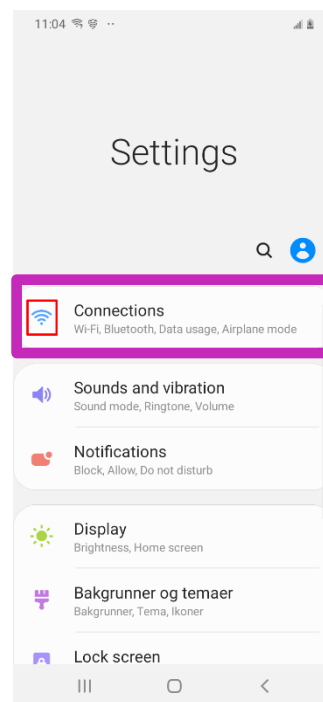


- 3 Finn **Wi-Fi** og trykk på bryteren slik at den slår seg på og er blå.



- 4 Trykk på det trådløse nettverket du vil bruke.

- 5 Trykk på **Connect** (Koble til).

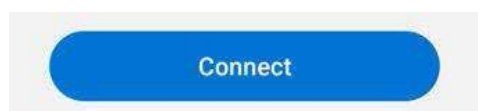



Instruksjoner for Samsung A10e håndsett




**** Instruksjoner MÅ følges i denne rekkefølgen ****

Del 2: Oppdatere apper

- 1 Gå tilbake til hjem-skjermbildet
- 2 Gå til appskuffen fra hjem-skjermbildet.

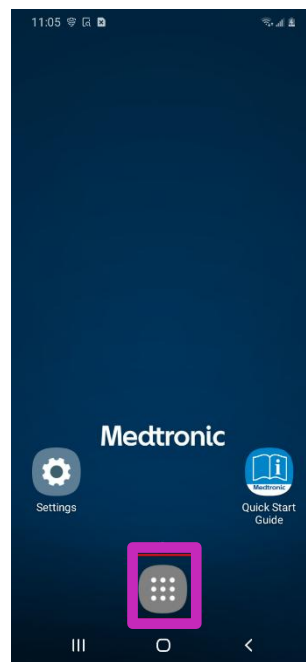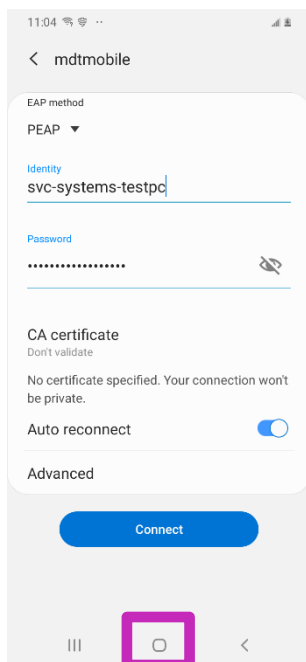

- 3 Trykk på **Hub**-appen.
(ikonet til Hub-appen kan variere avhengig av alderen til håndsettet.)

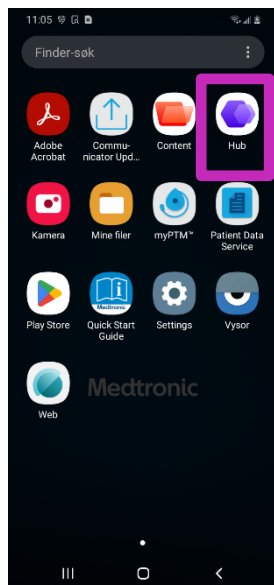


ELLER




Instruksjoner for Samsung A10e håndsett




- 4 Sveip nedover på skjermbildet for å oppdatere appene som vises i Hub.

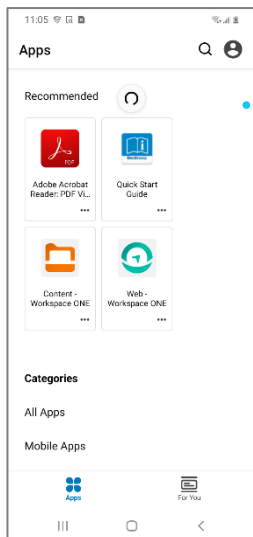


- 5 Velg **All Apps** (Alle apper) under Categories (Kategorier). Du må kanskje rulle ned til bunnen av skjermen.

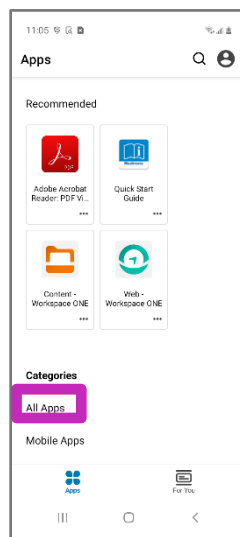


- 6 Finn **Patient Data Service**-appen, og trykk på **UPDATE** (OPPDATER).
(Ikke trykk på **OPEN** (ÅPNE) etterpå, ellers åpnes den forrige versjonen av appen.)

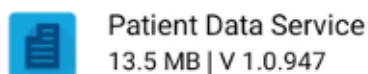

- 7 Finn **Medtronic Communication Manager**-appen, og trykk på **UPDATE** (OPPDATER).
(Ikke trykk på **OPEN** (ÅPNE) etterpå, ellers åpnes den forrige versjonen av appen.)

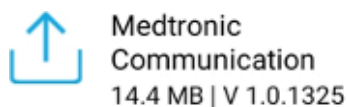

- 8 Finn **myPTM**-appen, og trykk på **UPDATE** (OPPDATER).
(Ikke trykk på **OPEN** (ÅPNE) etterpå, ellers åpnes den forrige versjonen av appen.)

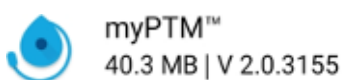


- 9 Vent 2 minutter til oppdateringene er fullført.


Instruksjoner for Samsung A10e håndsett




- 10 Trykk på tilbakepilen øverst i venstre hjørne.

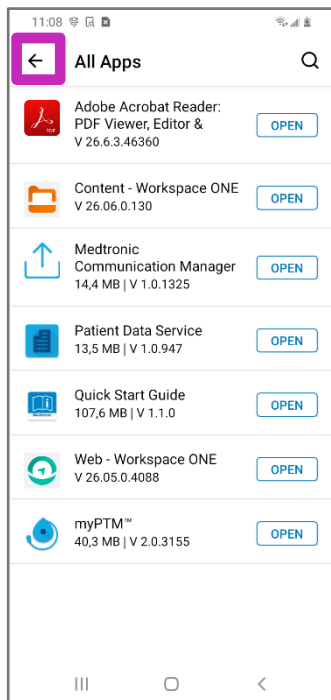



- 11 Trykk på kontoikonet øverst til høyre. Bokstavene i kontosymbolet kan være forskjellig for håndsettet ditt.

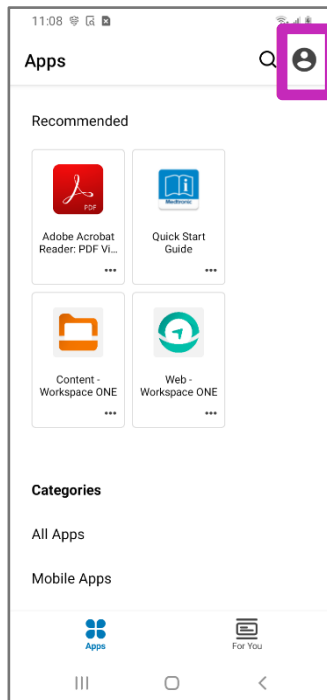

- 12 Trykk på **This Device** (Denne enheten).

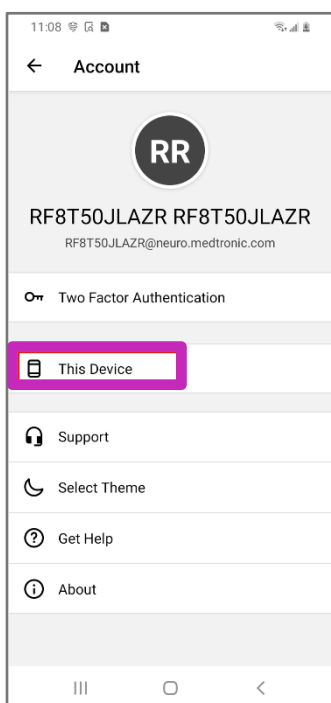


- 13 Rull ned til bunnen av skjermbildet og trykk på **Sync device** (Synkroniser enhet). "**Checking for updates**" (Ser etter oppdateringer) vises nederst på skjermen.

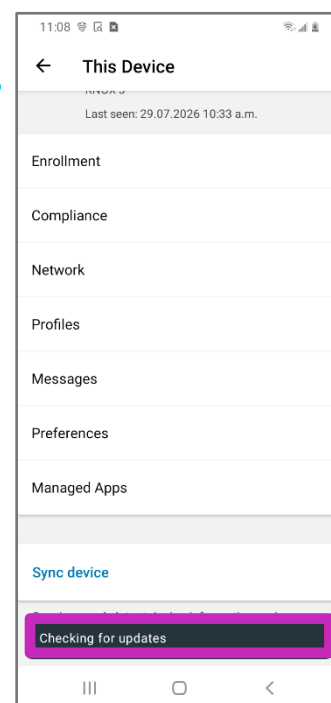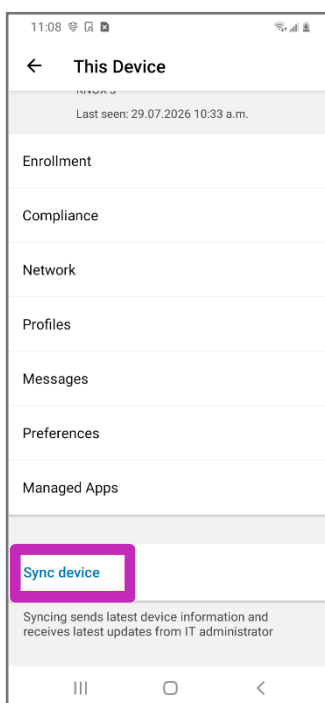

Instruksjoner for Samsung A10e håndsett



- 14 Rull tilbake til toppen av skjermen, og bekreft at datoen og klokkeslettet for **Last seen** (Sist sett) er oppdatert til gjeldende dato og klokkeslett. Hvis dato og klokkeslett ikke er oppdatert, gjentar du trinn 13.


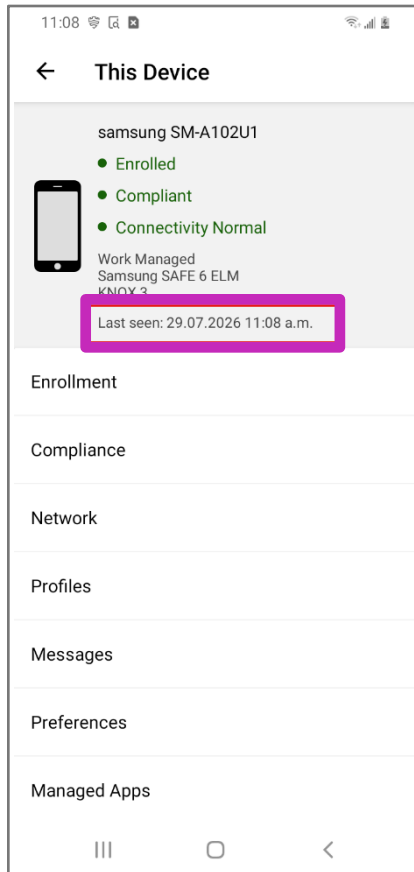


Instruksjoner for Samsung A10e håndsett




Del 3: Bekrefte at apper er oppdatert

- 1 Gå tilbake til hjem-skjermbildet
- 2 Trykk på **myPTM**-appen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å koble til pumpen til du kommer til Hjem-skjermbildet.

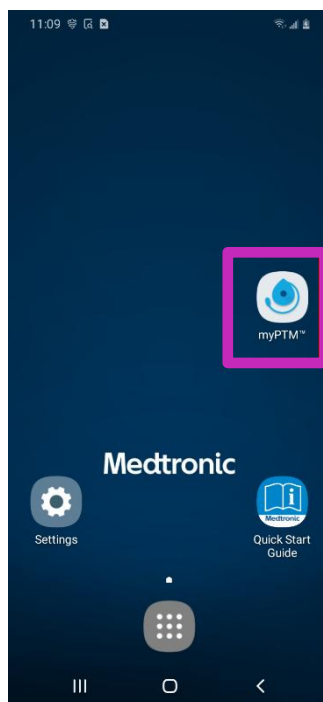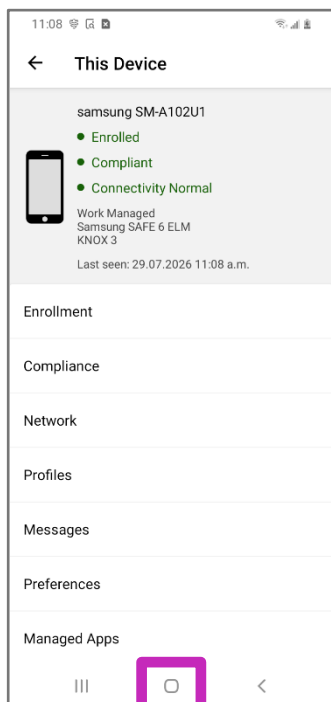

Sørg for at kommunikatoren er slått på og plassert rett over pumpen.


- 4 Trykk på menyikonet øverst i venstre hjørne på skjermbildet.
- 5 Trykk på **About** (Om).

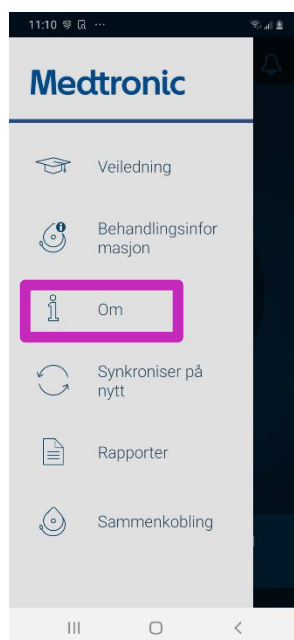

Instruksjoner for Samsung A10e håndsett



- 6 Bekreft at den viser:
- Versjon:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

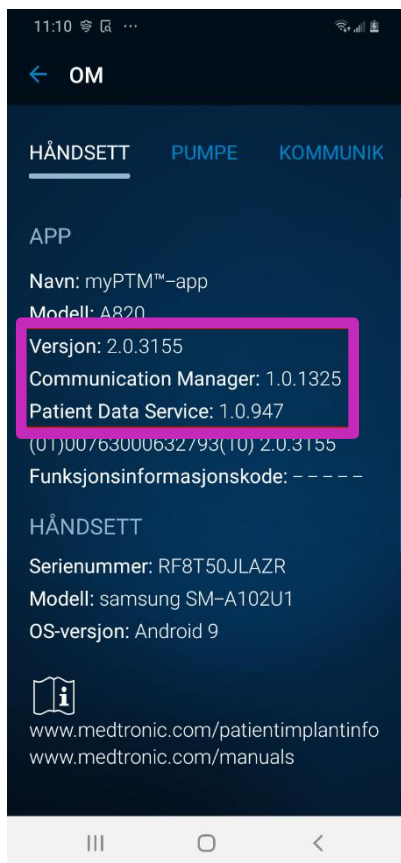

Hvis versjonsnumrene samsvarer, er oppdateringen fullført, og du kan bruke håndsettet som normalt.

Hvis noen av versjonsnumrene ikke samsvarer, går du tilbake til **Del 2: Oppdatere apper** og oppdaterer programversjonene på nytt etter behov.


Oppdatering fullført

Instruksjoner for Samsung J3 håndsett




Del 1: Koble til Wi-Fi

- 1 Trykk på ikonet **Settings** (Innstillinger) på håndsettets hjem-skjerm.

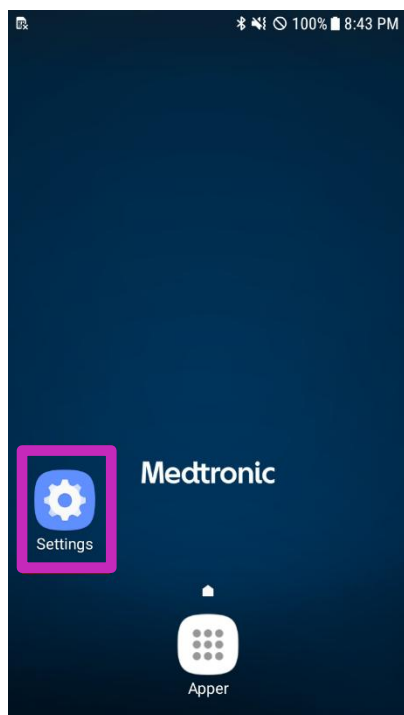

- 2 Trykk på **Connections** (Tilkoblinger).

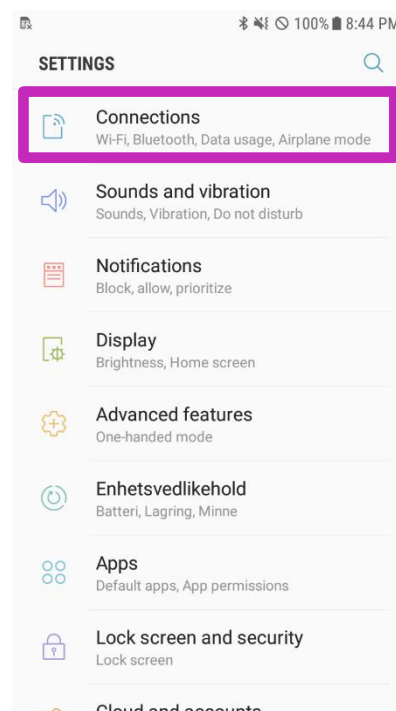


- 3 Finn **Wi-Fi** og trykk på bryteren slik at den slår seg på og er blå.



- 4 Trykk på det trådløse nettverket du vil bruke.

- 5 Trykk på **Connect** (Koble til).

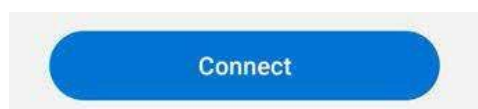


Instruksjoner for Samsung J3 håndsett




**** Instruksjoner MÅ følges i denne rekkefølgen ****

Del 2: Oppdatere apper

- 1 Gå tilbake til hjem-skjermbildet ved å trykke på Hjem-knappen.
- 2 Gå til appskuffen fra hjem-skjermbildet.

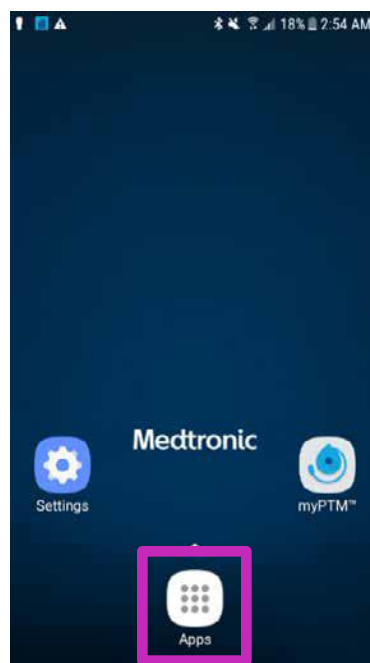


- 3 Trykk på **Hub**-appen.

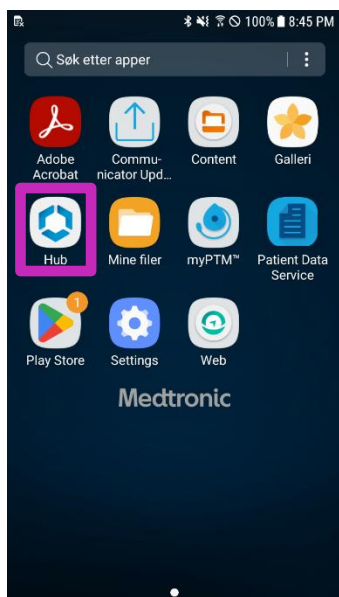


Instruksjoner for Samsung J3 håndsett



- 4 Sveip nedover på skjermbildet for å oppdatere appene som vises i Hub.

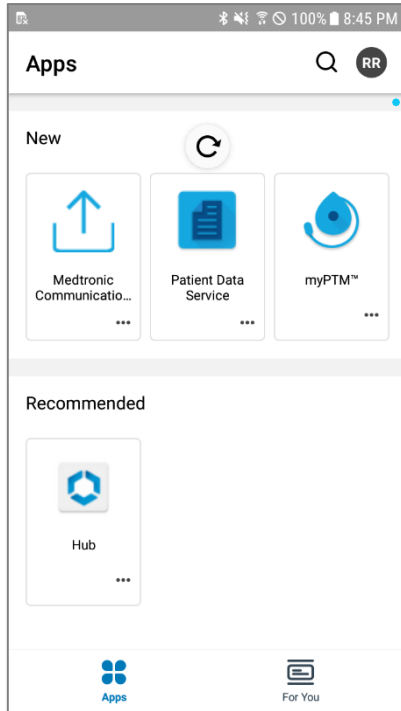

- 5 Velg **All Apps** (Alle apper) under Categories (Kategorier). Du må kanskje rulle ned til bunnen av skjermen.

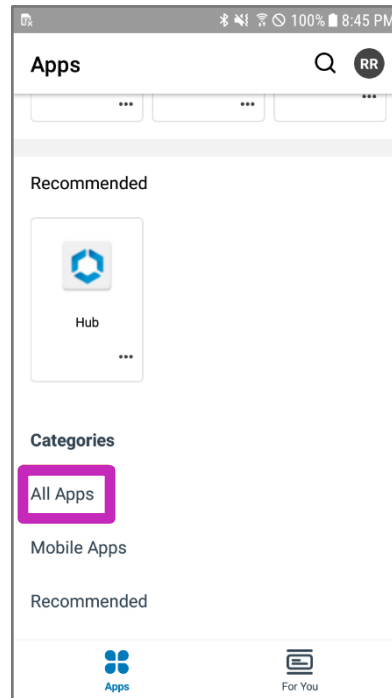

Instruksjoner for Samsung J3 håndsett




- 6 Finn **Intelligent Hub**-appen, og trykk på **UPDATE** (OPPDATER).
Hvis du ikke ser denne appen i listen, er det ikke nødvendig med oppdatering. Gå til trinn 7.
(Ikke trykk på **OPEN** (ÅPNE) etterpå, ellers åpnes den forrige versjonen av appen.)




- 7 Finn **Patient Data Service**-appen, og trykk på **UPDATE** (OPPDATER).
(Ikke trykk på **OPEN** (ÅPNE) etterpå, ellers åpnes den forrige versjonen av appen.)



- 8 Finn **Medtronic Communication Manager**-appen, og trykk på **UPDATE** (OPPDATER).
(Ikke trykk på **OPEN** (ÅPNE) etterpå, ellers åpnes den forrige versjonen av appen.)

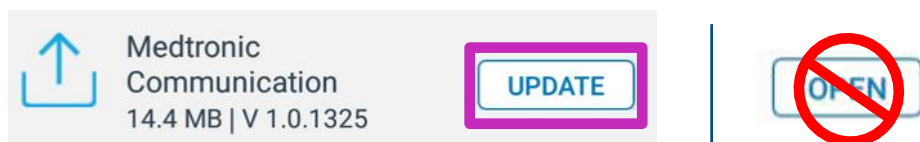

- 9 Finn **myPTM**-appen, og trykk på **UPDATE** (OPPDATER).
(Ikke trykk på **OPEN** (ÅPNE) etterpå, ellers åpnes den forrige versjonen av appen.)

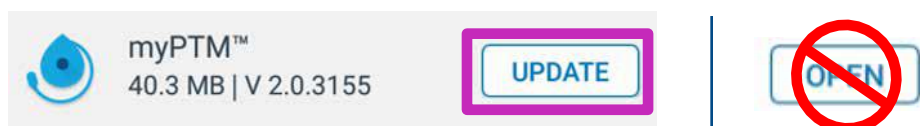


- 10 **Vent** 2 minutter til oppdateringene er fullført.


Instruksjoner for Samsung J3 håndsett




- 11 Trykk på tilbakepilen øverst i venstre hjørne.

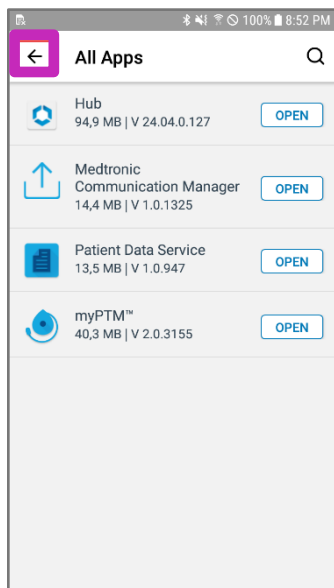



- 12 Trykk på kontoikonet øverst til høyre. Bokstavene i kontosymbolet kan være forskjellig for håndsettet ditt.

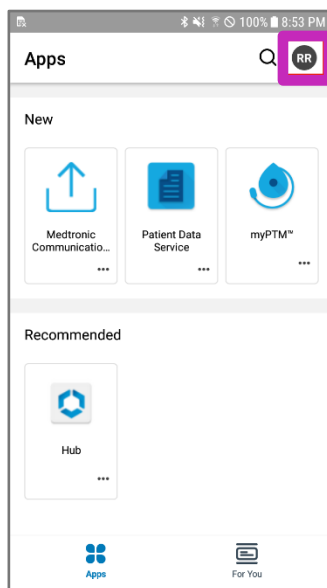

- 13 Trykk på **This Device** (Denne enheten).

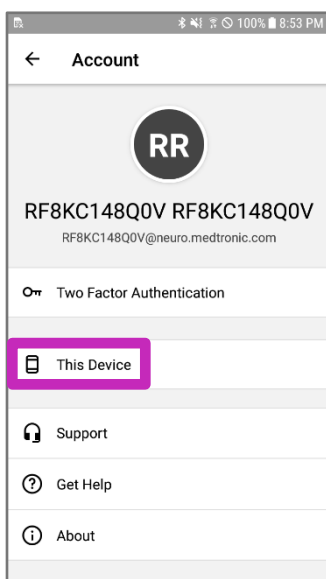


- 14 Rull ned til bunnen av skjermbildet og trykk på **Sync device** (Synkroniser enhet). "Checking for updates" (Ser etter oppdateringer) vises nederst på skjermen.

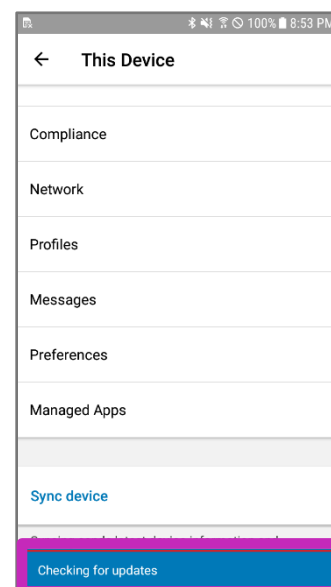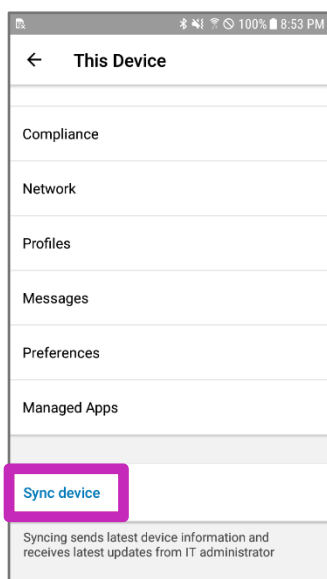

Instruksjoner for Samsung J3 håndsett



- 15 Rull tilbake til toppen av skjermen, og bekreft at datoen og klokkeslettet for **Last seen** (Sist sett) er oppdatert til gjeldende dato og klokkeslett. Hvis de ikke er oppdatert, gjentar du trinn 14.

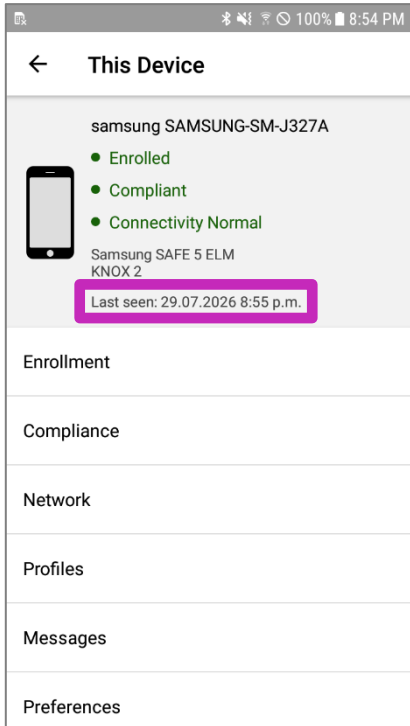

Instruksjoner for Samsung J3 håndsett




Del 3: Bekrefte at apper er oppdatert

- 1 Returner til startskjermen ved å trykke på Hjem-knappen.



- 2 Trykk på **myPTM**-appen.

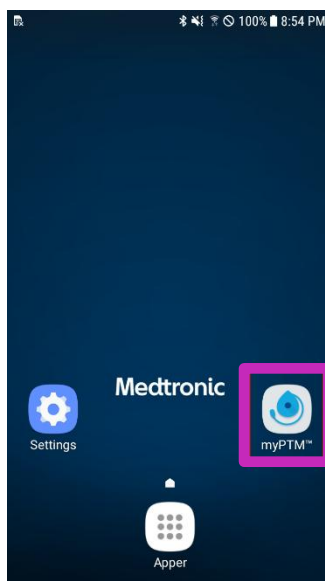

- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å koble til pumpen til du kommer til Hjem-skjermbildet.


Sørg for at kommunikatoren er slått på og plassert rett over pumpen.

Kommunikatoren kan også måtte oppdateres, avhengig av hvilken versjon du har.

- 4 Trykk på menyikonet øverst i venstre hjørne på skjermbildet.




- 5 Trykk på **About** (Om).

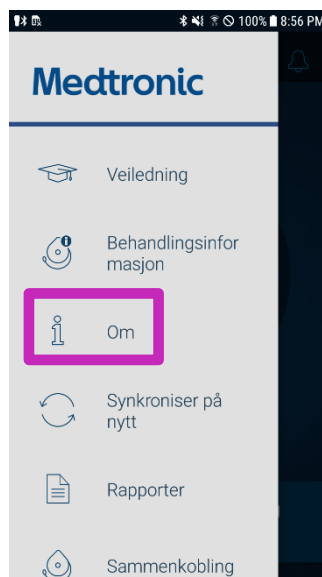

Instruksjoner for Samsung J3 håndsett



- 6 Bekreft at den viser:
- Versjon:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

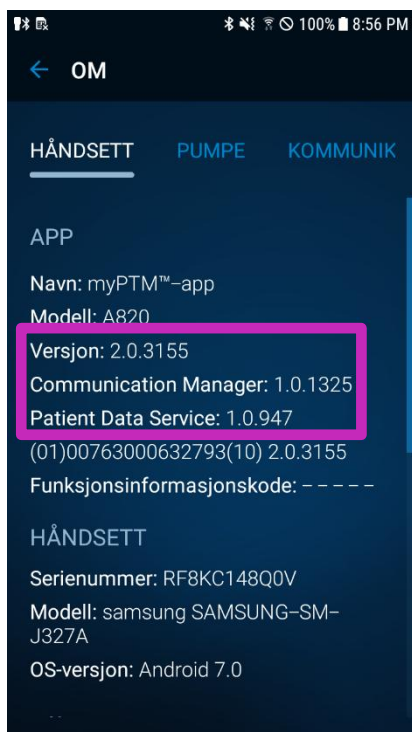

Hvis versjonsnumrene samsvarer, er oppdateringen fullført, og du kan bruke håndsettet som normalt.

Hvis noen av versjonsnumrene ikke samsvarer, går du tilbake til **Del 2: Oppdatere apper** og oppdaterer programversjonene på nytt etter behov.

Oppdatering fullført

Kort erklæring

Kort erklæring:

Dette materialet skal ikke betraktes som den eneste informasjonskilden. Det erstatter ikke informasjonen i enhetens håndbok/håndbøker.

Vær oppmerksom på at den tiltenkte bruken av et produkt kan variere avhengig av geografiske godkjenninger.

Se enhetenes håndbøker for detaljert informasjon om tiltenkt bruk, (implantat)prosedyre, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forsiktighetsregler og mulige bivirkninger.

Når det gjelder en MR-kompatibel enhet, må du lese MR-informasjonen i enhetens håndbok/håndbøker før en MR-undersøkelse.

Hvis en enhet er kvalifisert for elektronisk bruksanvisning, finner du bruksanvisninger på nettstedet til Medtronic: manuals.medtronic.com.

Håndbøkene kan vises ved hjelp av en gjeldende versjon av en vanlig nettleser. Du får best resultat hvis du bruker Adobe Acrobat® Reader sammen med nettleseren.

Medtronic-produkter som markedsføres, overholder lovgivning (hvis aktuelt) om medisinsk utstyr. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte den lokale Medtronic-representanten og/eller besøke Medtronics nettsteder.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

Norge
Medtronic Norge AS
Postboks 458
1327 Lysaker
Norge
www.medtronic.no
Tlf +47 671 03 200