

Medtronic

Uppdatering av programvaran för handhållen kontrollenhet via Wi-Fi

Förberedelse

Ström: Kontrollera att den handhållna kontrollenheten är ansluten till elnätet eller har mer än 35 procent batterikapacitet och att din kommunikator är tillgänglig och laddad innan du installerar några uppdateringar.

Wi-Fi: Se till att använda ett betrott Wi-Fi-nätverk, till exempel din hemleverantör. Ha Wi-Fi-nätverkets namn och lösenord tillgängliga innan du börjar.

Tid: Beroende på hur stark din nätverkssignal är kan den här processen ta upp till 30 minuter.

Modell på handhållen kontrollenhet: Fastställ vilken modell av den handhållen kontrollenhet du har med hjälp av bilderna nedan. Den handhållna kontrollenheten Samsung J3 har en fysisk hemknapp längst ner i mitten.



Samsung A10e

Om du har en Samsung A10e handhållen kontrollenhet, se instruktionerna på sidan 3.

[Klicka här för Samsung A10e](#)



Samsung J3

Om du har en Samsung J3 handhållen kontrollenhet, se instruktionerna på sidan 10.

[Klicka här för Samsung J3](#)

Innehållsförteckning


Förberedelse.....	1
Instruktioner för Samsung A10e handhållen kontrollenhet.....	3
Del 1: Anslut till Wi-Fi.....	3
Del 2: Uppdatera appar.....	4
Del 3: Bekräfta att apparna är uppdaterade.....	8
Instruktioner för Samsung J3 handhållen kontrollenhet.....	10
Del 1: Anslut till Wi-Fi.....	10
Del 2: Uppdatera appar.....	11
Del 3: Bekräfta att apparna är uppdaterade.....	16
Kortfattat meddelande	18

Instruktioner för Samsung A10e handhållen kontrollenhet




Del 1: Anslut till Wi-Fi

- 1 Tryck på ikonen **Settings** (Inställningar) på den handhållna kontrollenhetens startskärm.

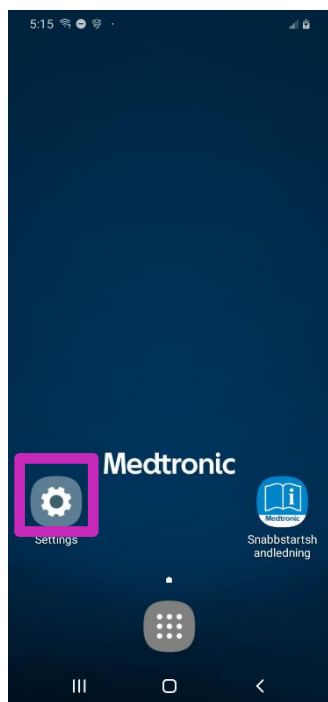

- 2 Tryck på **Connections** (Anslutningar).

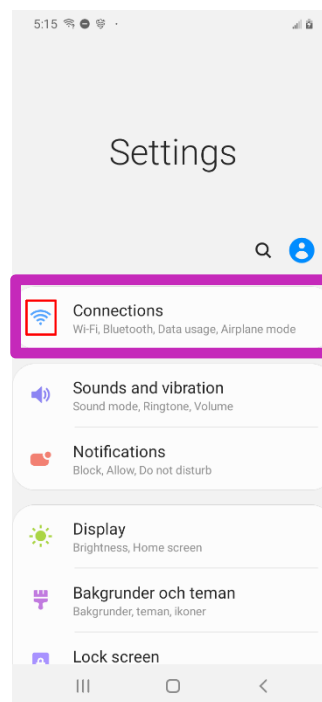


- 3 Hitta **Wi-Fi** och tryck på knappen så att den slås PÅ och blir blå



- 4 Tryck på det trådlösa nätverk som du vill använda.

- 5 Tryck på **Connect** (Anslut).

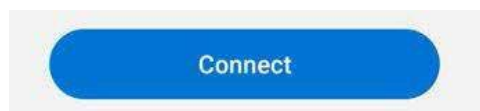


Instruktioner för Samsung A10e handhållen kontrollenhet




**** Instruktionerna **MÅSTE** följas i denna ordning ****

Del 2: Uppdatera appar

1 Gå tillbaka till startskärmen

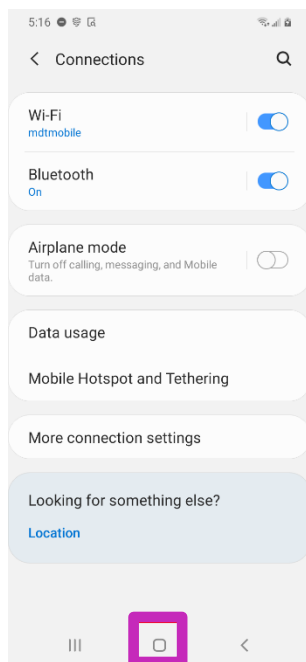


2 Gå till applådan från startskärmen.

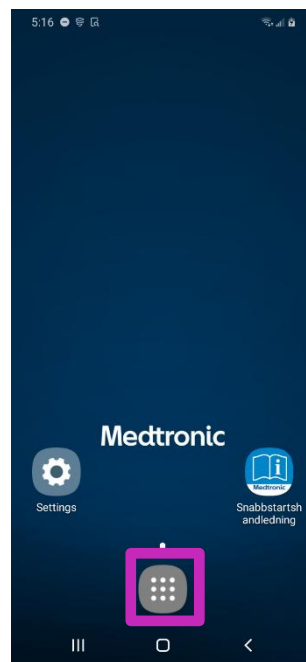

3 Tryck på appen **Hub**.

(Ikonen för Hub-appen kan se annorlunda ut beroende på hur gammal din handhållna kontrollenhet är.)

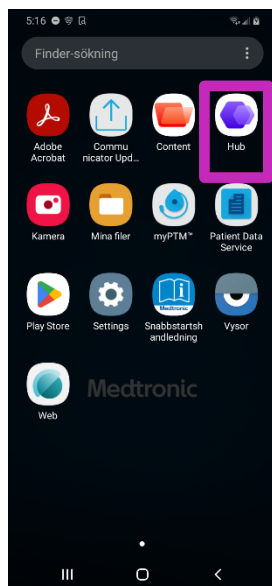


ELLER




Instruktioner för Samsung A10e handhållen kontrollenhet



- 4 Uppdatera apparna som listas i Hub genom att svepa nedåt på skärmen Apps (Appar).

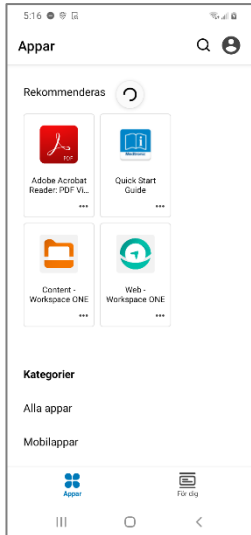

- 5 Välj **All Apps** (Alla appar) under Categories (Kategorier). Du kan behöva scrollera ner till botten av skärmen.

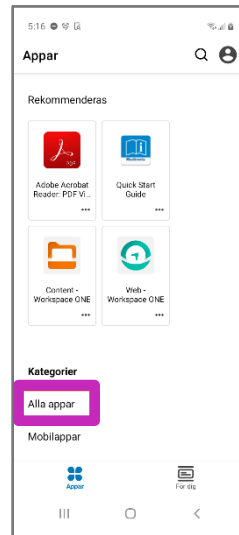

- 6 Leta reda på appen **Patient Data Service** och tryck på **UPDATE** (UPPDATERA).
(Tryck inte på **OPEN** [ÖPPNA] efteråt, för då öppnas den tidigare versionen av appen.)



Patient Data Service
13,5 MB | V 1.0.947

UPPDATERA



- 7 Leta reda på appen **Medtronic Communication Manager** och tryck på **UPDATE** (UPPDATERA).
(Tryck inte på **OPEN** [ÖPPNA] efteråt, för då öppnas den tidigare versionen av appen.)



Medtronic
Communication
14,4 MB | V 1.0.1325

UPPDATERA



- 8 Leta reda på appen **myPTM** och tryck på **UPDATE** (UPPDATERA).
(Tryck inte på **OPEN** [ÖPPNA] efteråt, för då öppnas den tidigare versionen av appen.)



myPTM™
40,3 MB | V 2.0.3155

UPPDATERA




- 9 Vänta i 2 minuter tills uppdateringarna är klara.


Instruktioner för Samsung A10e handhållen kontrollenhet




- 10 Tryck på bakåtpilen längst upp till vänster.

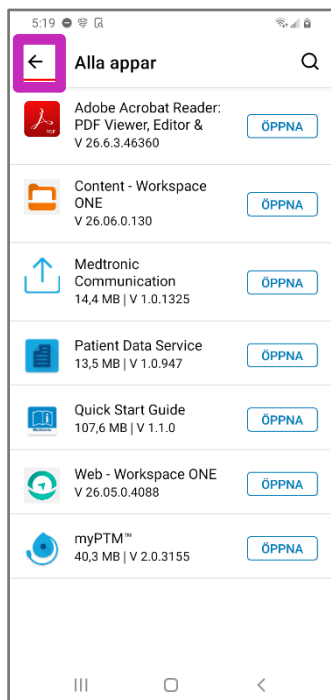



- 11 Tryck på kontoikonen i det övre högra hörnet. Bokstäverna på kontoikonen kan skilja sig åt för din handhållna kontrollenhet.

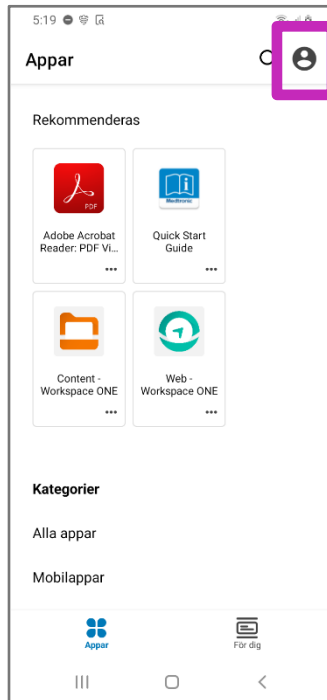

- 12 Tryck på **This Device** (Denna enhet).

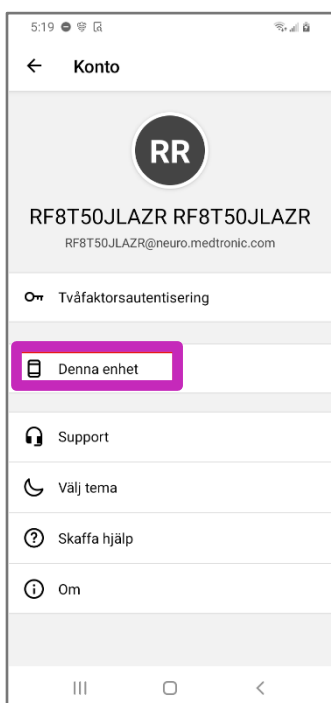


- 13 Scrolla längst ner på skärmen och tryck på **Sync device (Synkronisera enhet)**. "Checking for updates" (Söker efter uppdateringar) visas längst ned på skärmen.

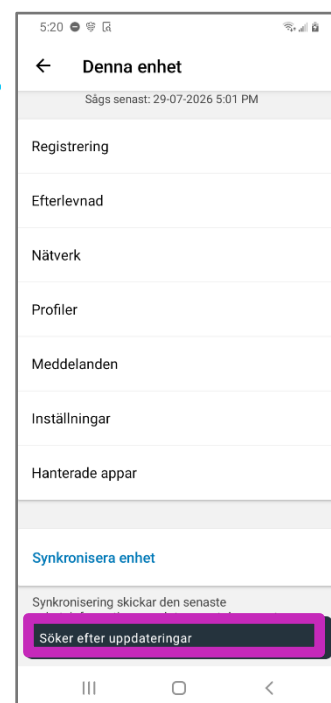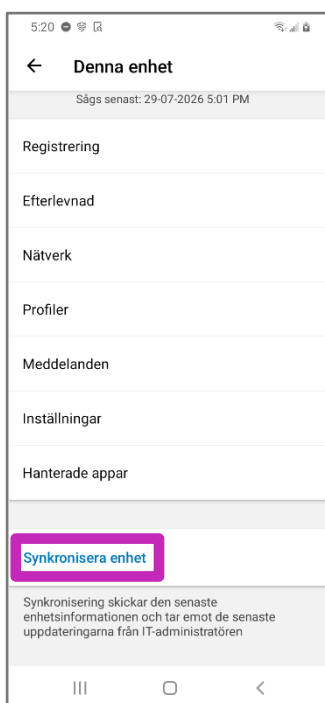

Instruktioner för Samsung A10e handhållen kontrollenhet



- 14 Scrolla tillbaka upp till toppen av skärmen och kontrollera att datum och tid för **Last seen** (Sågs senast) har uppdaterats till aktuellt datum och tid. Upprepa steg 13 om de inte har uppdaterats.

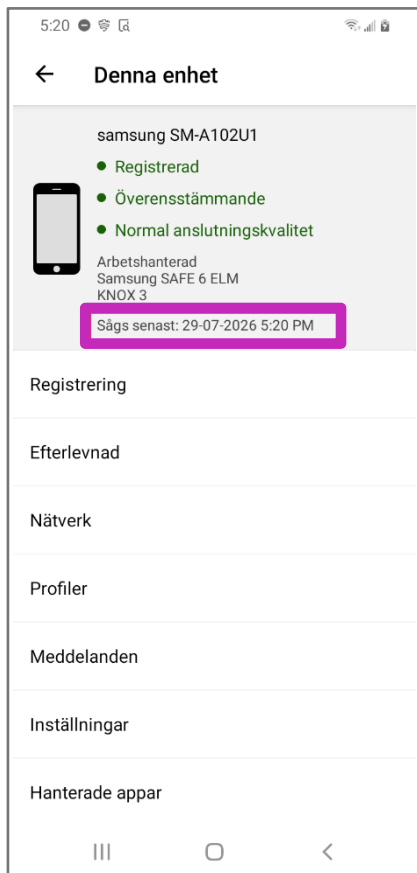


Instruktioner för Samsung A10e handhållen kontrollenhet




Del 3: Bekräfta att apparna är uppdaterade

- 1 Gå tillbaka till startskärmen

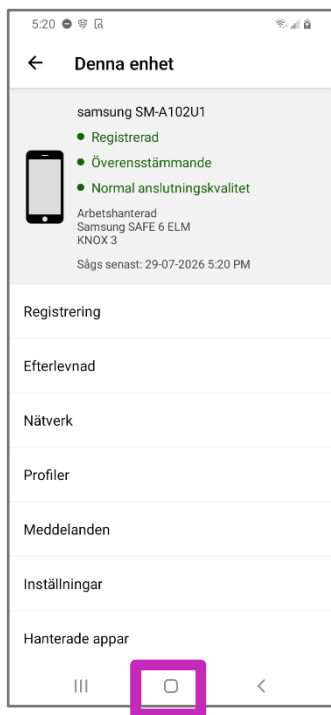

- 2 Tryck på appen **myPTM**.

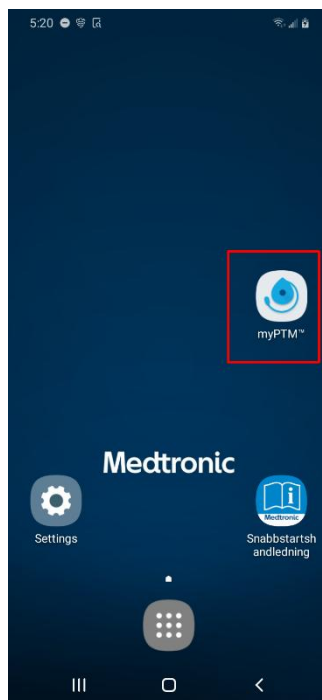


- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta till pumpen tills du kommer till startskärmen.

Se till att kommunikatorn är påslagen och placerad direkt över pumpen.

- 4 Tryck på menyikonen längst upp till vänster på skärmen.




- 5 Tryck på **About** (Om)

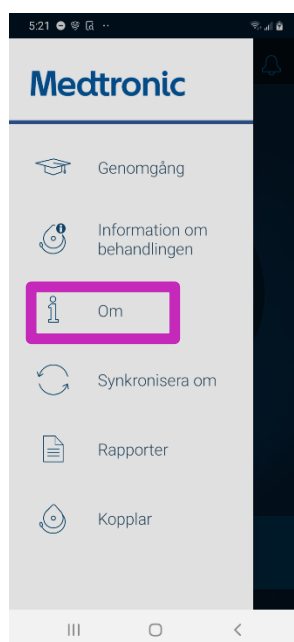

Instruktioner för Samsung A10e handhållen kontrollenhet



- 6 Kontrollera att följande visas:
- Version:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

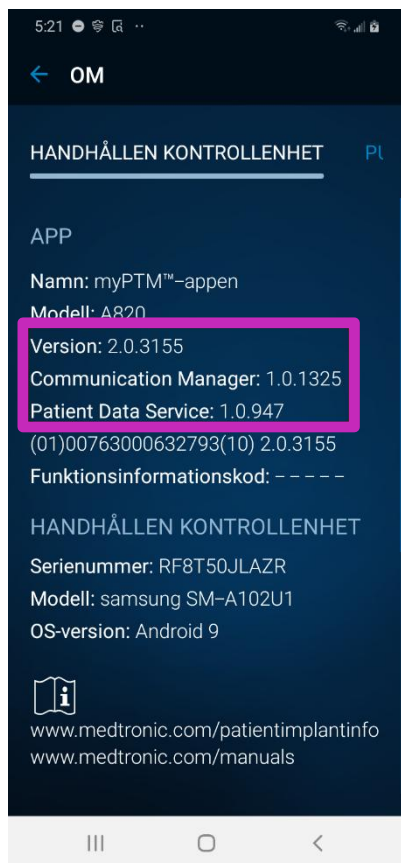

- 7 Om versionsnumren stämmer överens har uppdateringen slutförts och du kan använda den handhållna kontrollenheten som vanligt.

Om något av versionsnumren inte stämmer överens, gå tillbaka till **Del 2: Uppdatera appar** och uppdatera appversionerna igen efter behov.


Uppdateringen är klar

Instruktioner för Samsung J3 handhållen kontrollenhet




Del 1: Anslut till Wi-Fi

- 1 Tryck på ikonen **Settings** (Inställningar) på den handhållna kontrollenhetens startskärm.

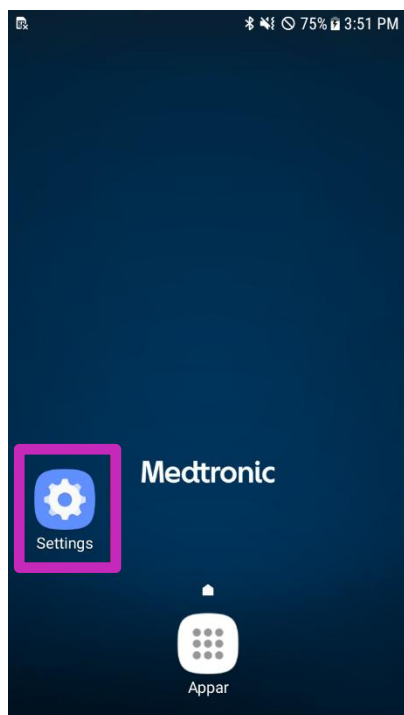

- 2 Tryck på **Connections** (Anslutningar).

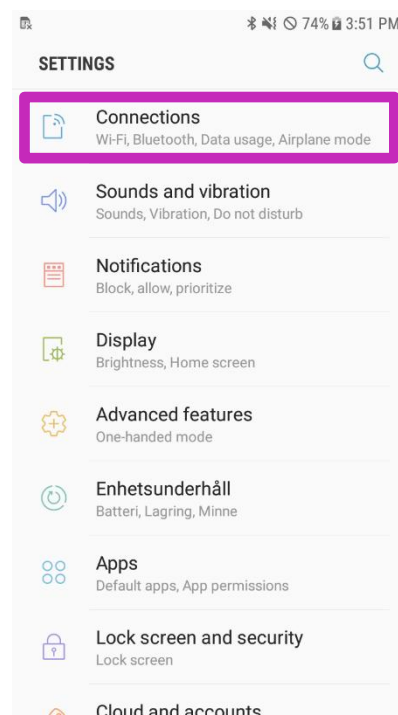


- 3 Hitta **Wi-Fi** och tryck på knappen så att den slås PÅ och blir blå



- 4 Tryck på det trådlösa nätverk som du vill använda.

- 5 Tryck på **Connect** (Anslut).

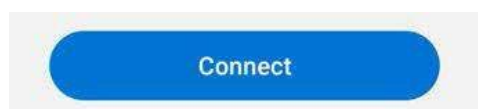


Instruktioner för Samsung J3 handhållen kontrollenhet




**** Instruktionerna **MÅSTE** följas i denna ordning ****

Del 2: Uppdatera appar

- 1 Gå tillbaka till startsidan genom att trycka på hemknappen.
- 2 Gå till applådan från startskärmen.

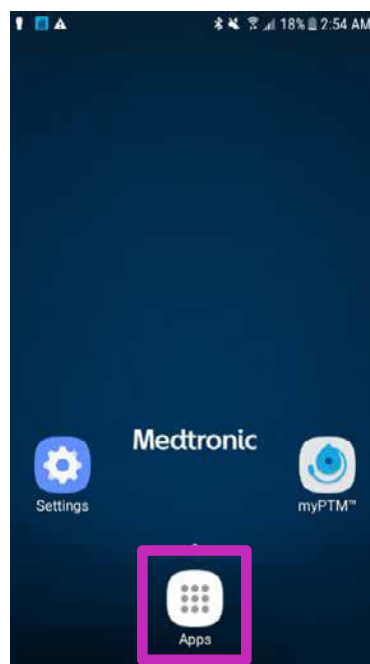


- 3 Tryck på appen **Hub**.

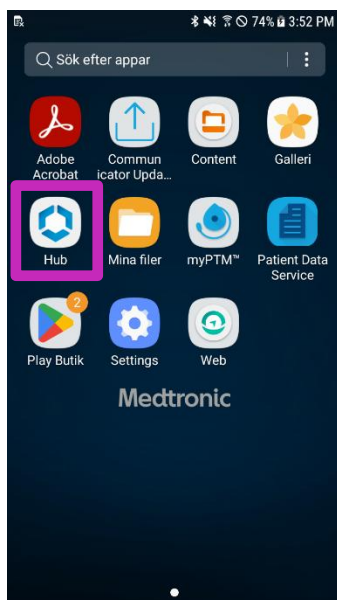


Instruktioner för Samsung J3 handhållen kontrollenhet



- 4 Uppdatera apparna som listas i Hub genom att svepa nedåt på skärmen Apps (Appar).

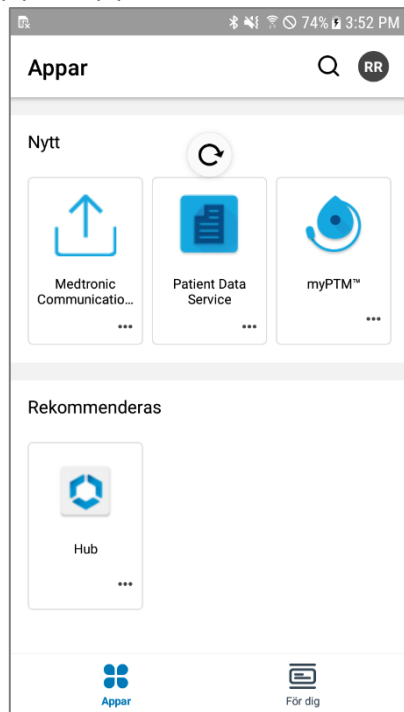

- 5 Välj **All Apps** (Alla appar) under Categories (Kategorier). Du kan behöva scrollera ner till botten av skärmen.

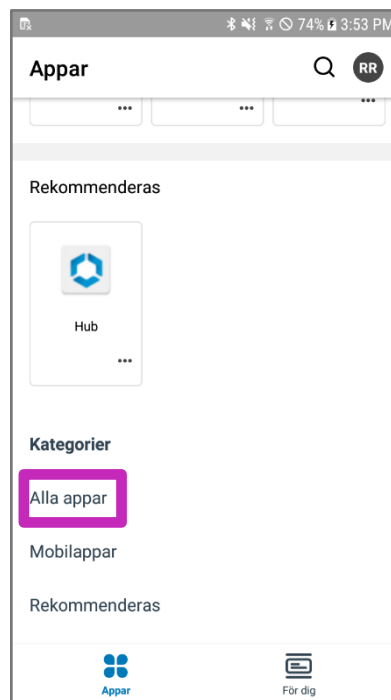

Instruktioner för Samsung J3 handhållen kontrollenhet



- 6 Leta reda på appen **Intelligent Hub** och tryck på **UPDATE** (UPPDATERA).
Om du inte ser den här appen i listan behöver den inte uppdateras. Gå till steg 7.
(Tryck inte på OPEN [ÖPPNA] efteråt, för då öppnas den tidigare versionen av appen.)



- 7 Leta reda på appen **Patient Data Service** (patientdatatjänst) och tryck på **UPDATE** (UPPDATERA).
(Tryck inte på OPEN [ÖPPNA] efteråt, för då öppnas den tidigare versionen av appen.)



- 8 Leta reda på appen **Medtronic Communication Manager** och tryck på **UPDATE** (UPPDATERA).
(Tryck inte på OPEN [ÖPPNA] efteråt, för då öppnas den tidigare versionen av appen.)



- 9 Leta reda på appen **myPTM** och tryck på **UPDATE** (UPPDATERA).
(Tryck inte på OPEN [ÖPPNA] efteråt, för då öppnas den tidigare versionen av appen.)




- 10 **Vänta** i 2 minuter tills uppdateringarna är klara.


Instruktioner för Samsung J3 handhållen kontrollenhet




- 11 Tryck på bakåtpilen längst upp till vänster.

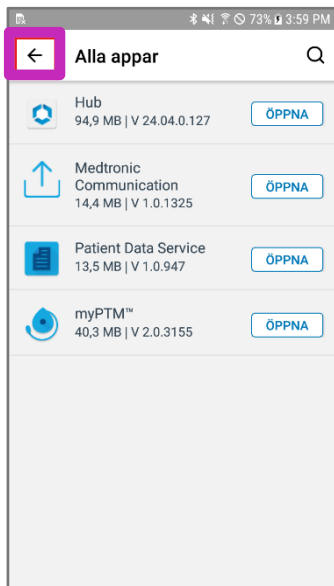



- 12 Tryck på kontoikonen i det övre högra hörnet. Bokstäverna på kontoikonen kan skilja sig åt för din handhållna kontrollenhet.

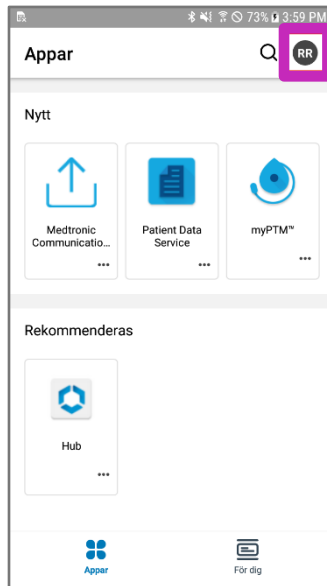

- 13 Tryck på **This Device** (Denna enhet).

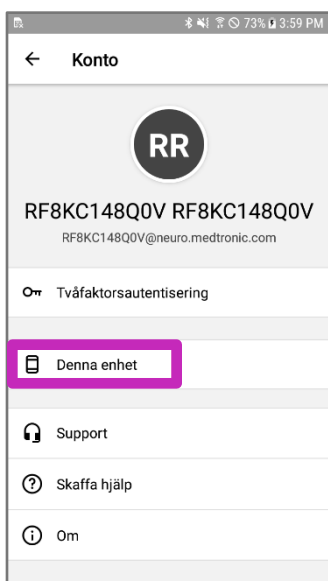


- 14 Scrolla längst ner på skärmen och tryck på **Sync device** (Synkronisera enhet). "Checking for updates" (Söker efter uppdateringar) visas längst ned på skärmen.

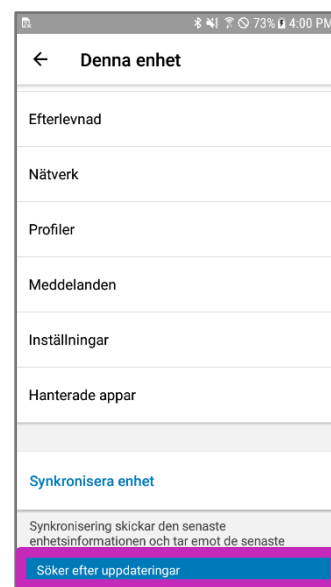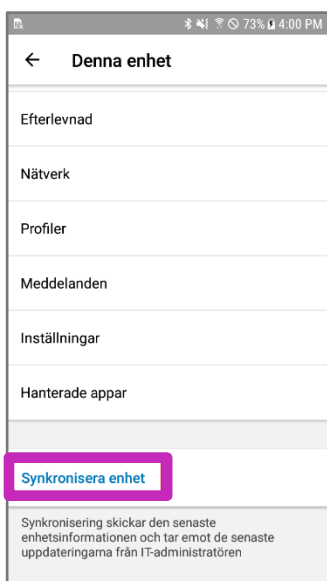

Instruktioner för Samsung J3 handhållen kontrollenhet



- 15 Scrolla tillbaka upp till toppen av skärmen och kontrollera att datum och tid för **Last seen** (Sågs senast) har uppdaterats till aktuellt datum och tid. Upprepa steg 14 om de inte har uppdaterats.

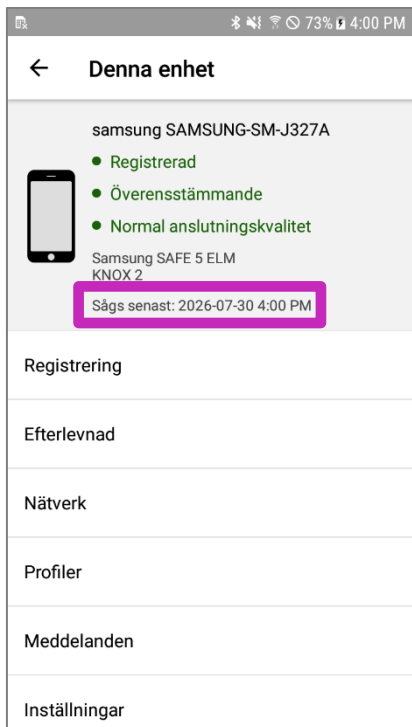

Instruktioner för Samsung J3 handhållen kontrollenhet




Del 3: Bekräfta att apparna är uppdaterade

- 1 Gå tillbaka till startsidan genom att trycka på hemknappen.



- 2 Tryck på appen **myPTM**.

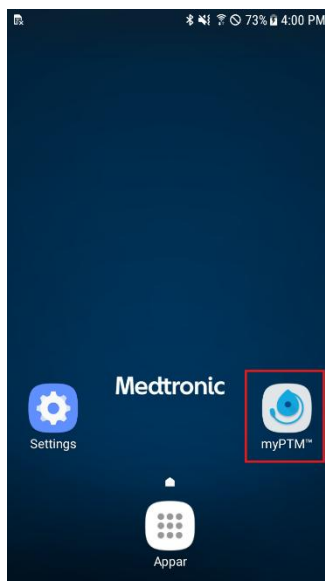


- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta till pumpen tills du kommer till startskärmen.


Se till att kommunikatorn är påslagen och placerad direkt över pumpen.

En uppdatering av kommunikatorn kan starta beroende på hur gammal din kommunikator är.

- 4 Tryck på menyikonen längst upp till vänster på skärmen.

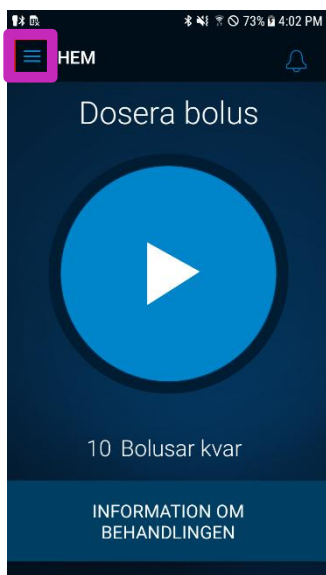


- 5 Tryck på **About** (Om)

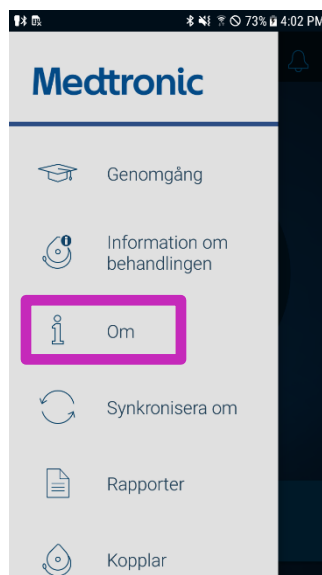

Instruktioner för Samsung J3 handhållen kontrollenhet



- 6 Kontrollera att följande visas:
- a. **Version:** 2.0.3155
 - b. **Communication Manager:** 1.0.1325
 - c. **Patient Data Service:** 1.0.947

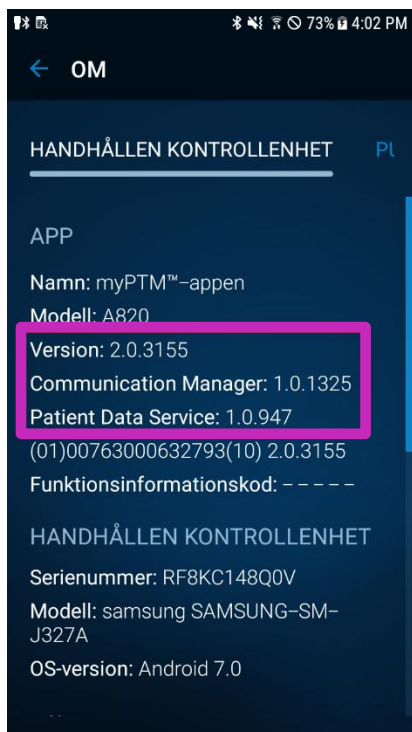

Om versionsnumren stämmer överens har uppdateringen slutförts och du kan använda den handhållna kontrollenheten som vanligt.

Om något av versionsnumren inte stämmer överens, gå tillbaka till **Del 2: Uppdatera appar** och uppdatera appversionerna igen efter behov.

Uppdateringen är klar

Kortfattat meddelande

Kortfattat meddelande:

Detta material bör inte betraktas som den enda informationskällan och ersätter inte heller informationen i enhetens användarmanual(er).

Observera att en produkts avsedda användning kan variera beroende på geografiska godkännanden.

Se produktens bruksanvisning(ar) för detaljerad information om avsedd användning, (implantat) proceduren, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar.

För MR-kompatibla enheter ska MR-informationen i enhetens användarmanual(er) läsas innan en MR-undersökning genomförs.

Om en enhet uppfyller kraven för användning av elektroniska bruksanvisningar finns användarmanualerna på Medtronics webbplats manuals.medtronic.com.

Manualer kan visas med en aktuell version av någon av de vanligaste webbläsarna. Använd Adobe Acrobat® Reader tillsammans med webbläsaren för bästa resultat.

Medtronic-produkter som släpps ut på marknader överensstämmer lagstiftning (om tillämplig) gällande medicintekniska produkter. För mer information, kontakta din lokala Medtronic-representant och/eller besök Medtronics webbplatser.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

Sverige
Medtronic AB
Box 1230
164 28 Kista
Sverige
www.medtronic.se
Tfn: +46 (0) 8 56 85 85 00
Fax: +46 (0) 8 56 85 85 01