

Medtronic

Wi-Fi kullanarak el kontrol cihazı yazılımını güncelleme

Hazırlık

Güç: Herhangi bir güncelleme yüklemeyi önce el kontrol cihazınızın prize takılı veya yüzde 35'ten fazla pil gücüne sahip olduğundan, iletişim cihazınızın kullanılabilir ve şarj edilmiş olduğundan emin olun.

Wi-Fi: Ev sağlayıcınız gibi güvenilir bir Wi-Fi ağı kullandığınızdan emin olun. Başlamadan önce Wi-Fi ağı adını ve parolasını hazır bulundurun.

Zaman: Ağ gücünüze bağlı olarak bu işlem 30 dakikaya kadar sürebilir.

El kontrol cihazı modeli: Aşağıdaki görselleri kullanarak hangi el kontrol cihazı modeline sahip olduğunuzu belirleyin. Samsung J3 el kontrol cihazının alt orta kısmında fiziksel bir ana sayfa düğmesi var.



Samsung A10e

Samsung A10e el kontrol cihazınız varsa Sayfa 3'teki talimatlara bakın.

[Samsung A10e için buraya tıklayın](#)



Fiziksel Ana Sayfa Düğmesi

Samsung J3

Samsung J3 el kontrol cihazınız varsa Sayfa 10'daki talimatlara bakın.

[Samsung J3 için buraya tıklayın](#)



İçindekiler



Hazırlık	1
Samsung A10e el kontrol cihazı talimatları	3
Bölüm 1: Wi-Fi'a bağlanın.....	3
Bölüm 2: Uygulamaları güncelleme.....	4
Bölüm 3: Uygulamaların güncellendiğini onaylama.....	8
Samsung J3 el kontrol cihazı talimatları.....	10
Bölüm 1: Wi-Fi'a bağlanın.....	10
Bölüm 2: Uygulamaları güncelleme.....	11
Bölüm 3: Uygulamaların güncellendiğini onaylama	16
Kısa açıklama	18

Samsung A10e el kontrol cihazı talimatları



Bölüm 1: Wi-Fi'a bağlanın

- 1 El kontrol cihazınızın ana ekranındaki **Settings** (Ayarlar) simgesine dokununuz.
- 2 **Connections** (Bağlantılar) ögesi-ne dokununuz

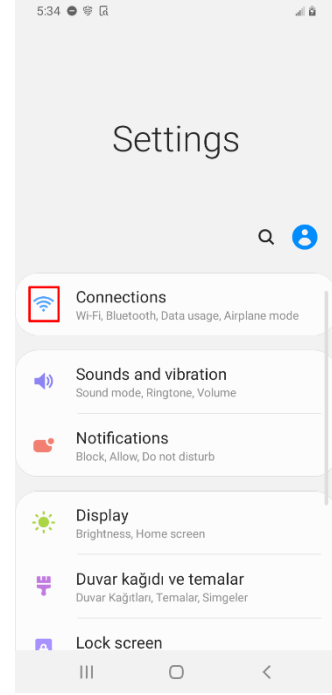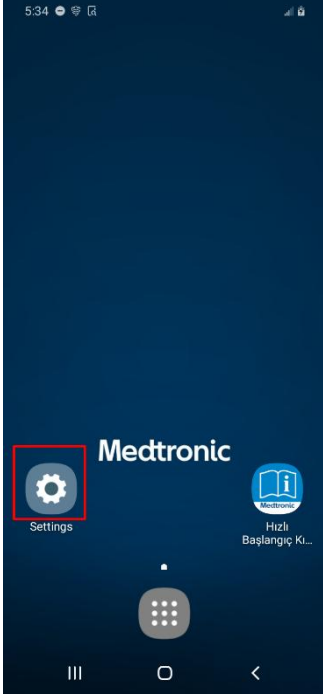


- 3 **Wi-Fi** ögesini bulun, açmak için anahtara dokununuz, rengi maviye döner



- 4 Kullanmak istediğiniz kablosuz ağa dokununuz.

- 5 **Connect** (Bağlan) ögesine dokununuz.

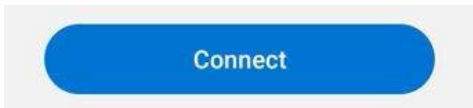


Samsung A10e el kontrol cihazı talimatları




**** Talimatlar bu sırayla TAKİP EDİLMELİDİR ****

Bölüm 2: Uygulamaları güncelleme


- 1 Giriş ekranına dönün
- 2 Giriş ekranından uygulama bölmesine gidin.

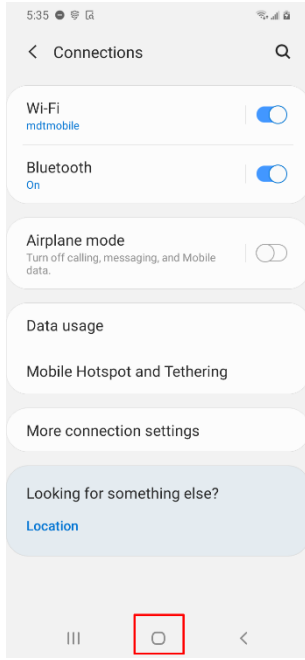

- 3 **Hub** uygulamasına dokunun.
(Hub uygulaması simgesi, el kontrol cihazınızın yaşına bağlı olarak farklı olabilir.)

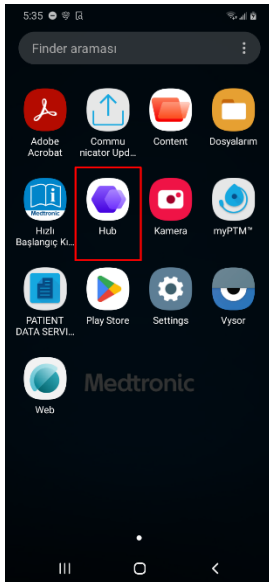


VEYA

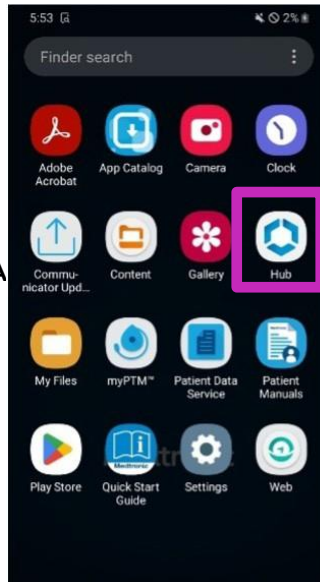


Samsung A10e el kontrol cihazı talimatları




- 4 Uygulamalar ekranını aşağı kaydırarak Hub'da listelenen uygulamaları yenileyin.

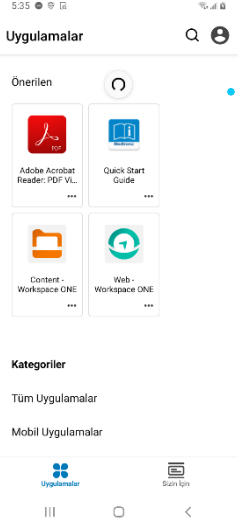


- 5 Kategoriler altında **All Apps**'i (Tüm Uygulamalar) seçin. Ekranı aşağıya doğru kaydırmanız gerekebilir.

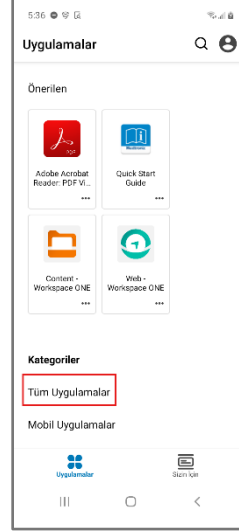


- 6 **Patient Data Service** uygulamasını bulun ve **UPDATE**'e (GÜNCELLE) dokunun.
(Daha sonra OPEN (AÇ) öğesine dokunmayın, aksi takdirde uygulamanın önceki sürümü açılır.)

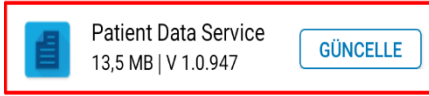

- 7 **Medtronic Communication Manager** uygulamasını bulun ve **UPDATE**'e (GÜNCELLE) dokunun.
(Daha sonra OPEN (AÇ) öğesine dokunmayın, aksi takdirde uygulamanın önceki sürümü açılır.)

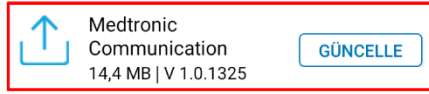

- 8 **myPTM** uygulamasını bulun ve **UPDATE**'e (GÜNCELLE) dokunun.
(Daha sonra OPEN (AÇ) öğesine dokunmayın, aksi takdirde uygulamanın önceki sürümü açılır.)

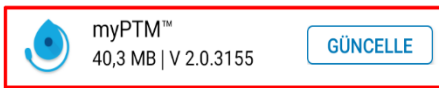


- 9 Güncellemelerin tamamlanması için 2 dakika bekleyin.


Samsung A10e el kontrol cihazı talimatları




- 10 Sol üst köşedeki geri okuna dokununuz.

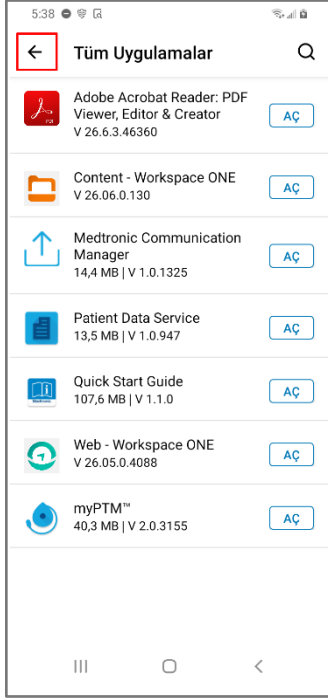



- 11 Sağ üst köşedeki hesap simgesine dokununuz. Hesap simgesindeki harfler el kontrol cihazınız için farklı olabilir.

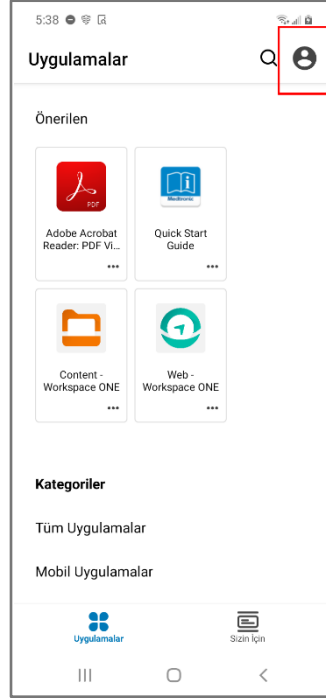

- 12 **This Device**'a (Bu Aygıt) dokununuz.

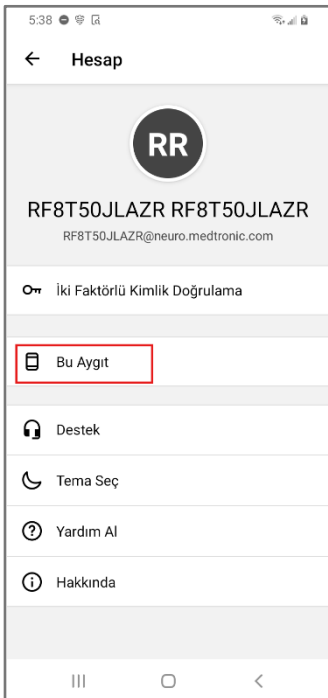


- 13 Ekranın alt kısmına kaydırın ve **Sync device** (Aygıtı eşitle) öğesine dokununuz. Ekranın alt kısmında "**Checking for updates**" (Güncellemeler denetleniyor) mesajı görünür.

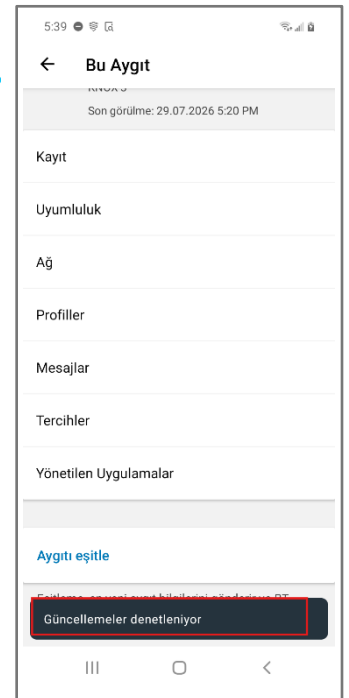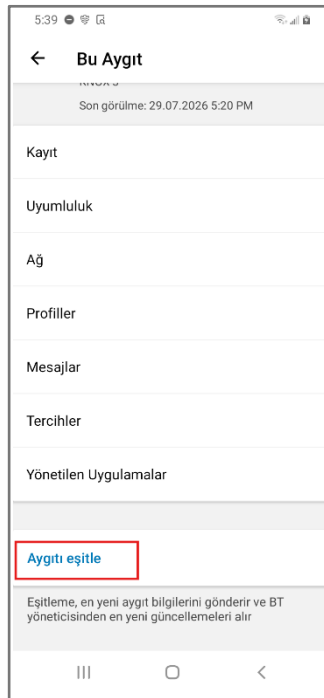

Samsung A10e el kontrol cihazı talimatları



- 14 Ekranı tekrar yukarı kaydırın ve **Last seen** (Son görülme) tarihi ve saatinin geçerli tarih ve saate güncellendiğini onaylayın. Güncelleme yapılmadıysa 13. adımı tekrarlayın.

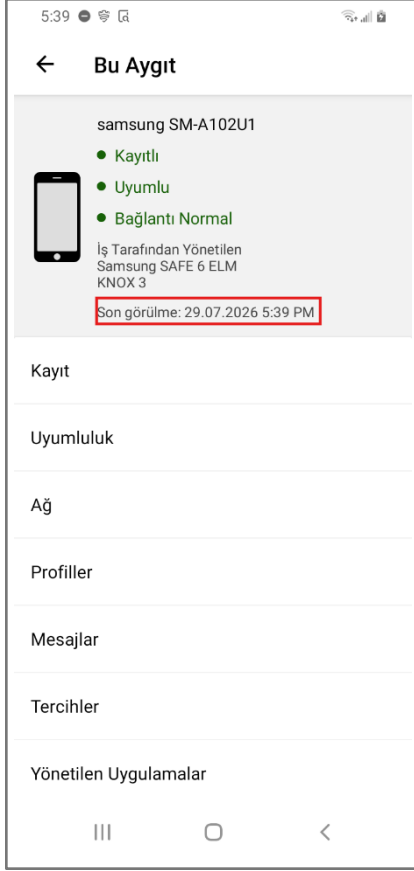


Samsung A10e el kontrol cihazı talimatları




Bölüm 3: Uygulamaların güncellendiğini onaylama

1 Giriş ekranına dönün

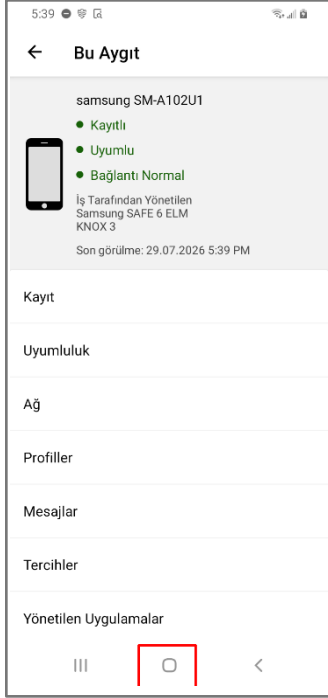

2 myPTM uygulamasına dokunun.

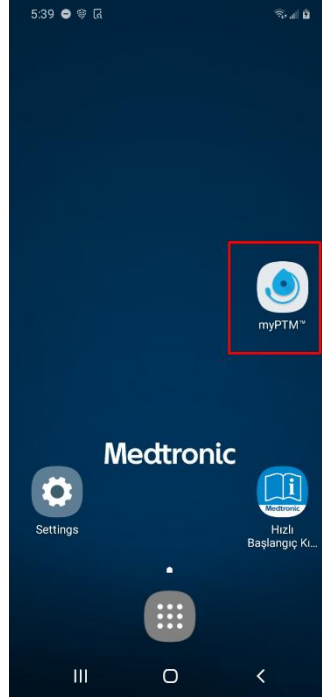


3 Pompaya bağlanmak için Giriş ekranına ulaşmaya kadar ekrandaki talimatları izleyin.

İletişim cihazınızın açık olduğundan ve doğrudan pompanın üzerine yerleştirildiğinden emin olun.

4 Ekranın sol üst köşesindeki menü simgesine dokunun.




5 **About** (Hakkında) ögesine dokunun

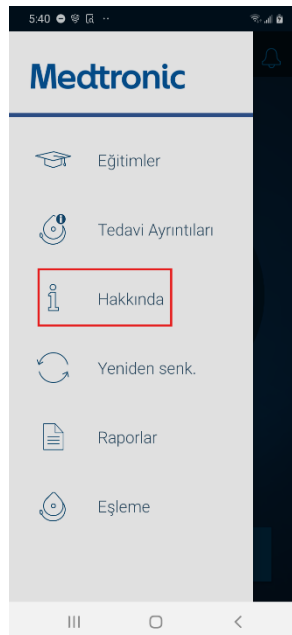

Samsung A10e el kontrol cihazı talimatları



- 6 Şu şekilde görüldüğünü doğrulayın:
- Sürüm:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

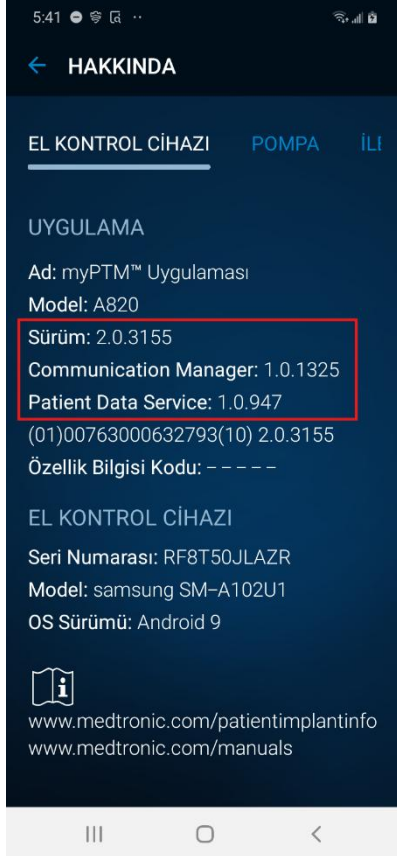

Sürüm numaraları eşleşiyorsa güncelleme başarıyla tamamlanmış demektir ve el kontrol cihazınızı her zamanki gibi kullanabilirsiniz.

Sürüm numaralarından herhangi biri eşleşmiyorsa **Bölüm 2: Uygulamaları Güncelleme** kısmında dönün ve uygulama sürümlerini gerektiği gibi yeniden güncelleyin.


Güncelleme Tamamlandı

Samsung J3 el kontrol cihazı talimatları




Bölüm 1: Wi-Fi'a bağlanın

- 1 El kontrol cihazınızın ana ekranındaki **Settings** (Ayarlar) simgesine dokununuz.

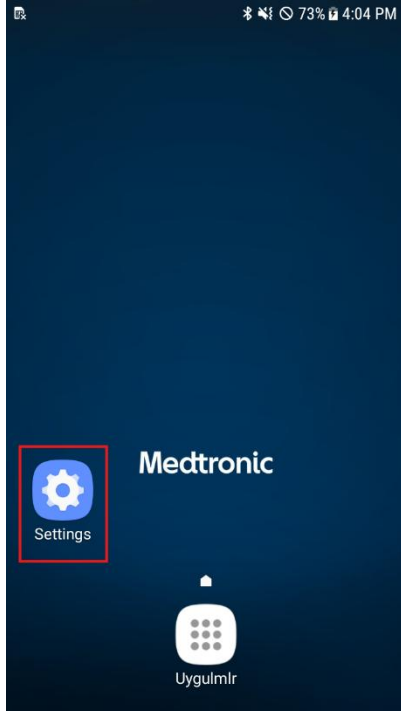

- 2 **Connections** (Bağlantılar) öğesi-ne dokununuz

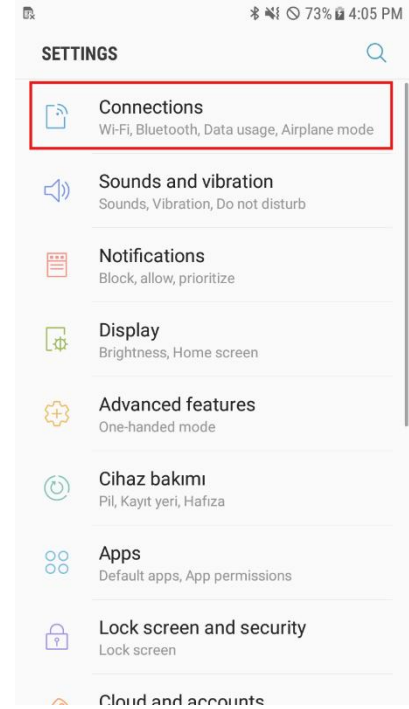


- 3 **Wi-Fi** öğesini bulun, açmak için anahtara dokununuz, rengi maviye döner

Wi-Fi
Connect to Wi-Fi networks.



- 4 Kullanmak istediğiniz kablosuz ağa dokununuz.

- 5 **Connect** (Bağlan) öğesine dokununuz.

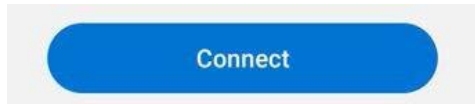


Samsung J3 el kontrol cihazı talimatları




**** Talimatlar bu sırayla TAKİP EDİLMELİDİR ****

Bölüm 2: Uygulamaları güncelleme

- 1 Ana sayfa düğmesine basarak giriş ekranına dönün.
- 2 Giriş ekranından uygulama bölmesine gidin.

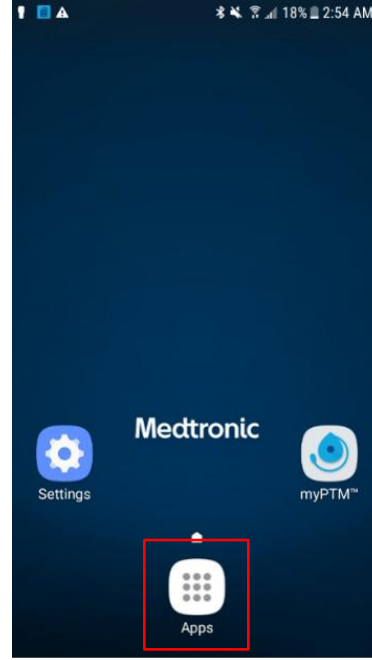


- 3 Hub uygulamasına dokununuz.

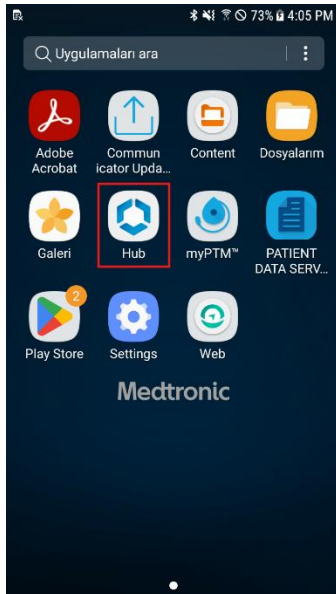


Samsung J3 el kontrol cihazı talimatları



- 4 Uygulamalar ekranını aşağı kaydırarak Hub'da listelenen uygulamaları yenileyin.

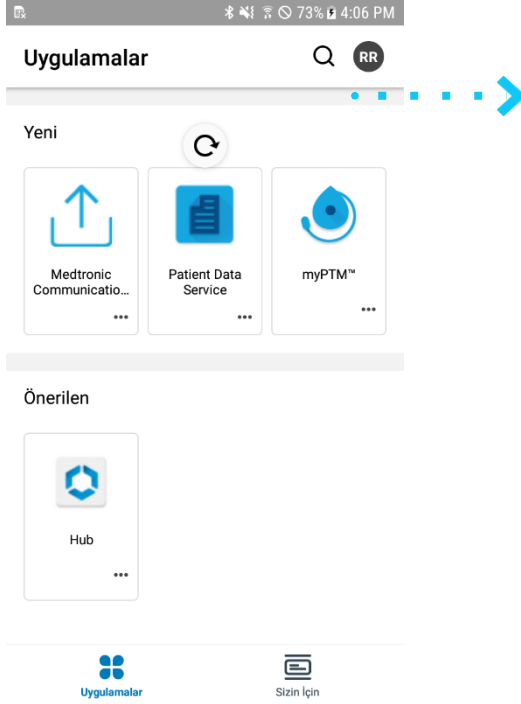

- 5 Kategoriler altında **All Apps**'i (Tüm Uygulamalar) seçin. Ekranı aşağıya doğru kaydırmanız gerekebilir.

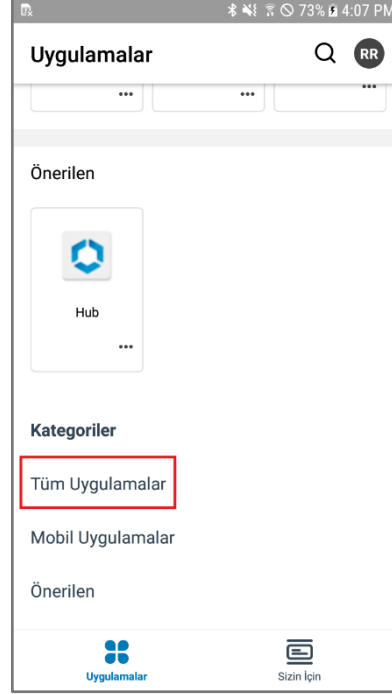

Samsung J3 el kontrol cihazı talimatları



- 6 **Intelligent Hub** uygulamasını bulun ve **UPDATE**'e (GÜNCELLE) dokunun.
Bu uygulamayı listenizde görmüyorsanız güncelleme gerekmez. 7. adıma geçin.
(Daha sonra OPEN (AÇ) öğesine dokunmayın, aksi takdirde uygulamanın önceki sürümü açılır.)




- 7 **Patient Data Service** uygulamasını bulun ve **UPDATE**'e (GÜNCELLE) dokunun.
(Daha sonra OPEN (AÇ) öğesine dokunmayın, aksi takdirde uygulamanın önceki sürümü açılır.)



- 8 **Medtronic Communication Manager** uygulamasını bulun ve **UPDATE**'e (GÜNCELLE) dokunun.
(Daha sonra OPEN (AÇ) öğesine dokunmayın, aksi takdirde uygulamanın önceki sürümü açılır.)



- 9 **myPTM** uygulamasını bulun ve **UPDATE**'e (GÜNCELLE) dokunun.
(Daha sonra OPEN (AÇ) öğesine dokunmayın, aksi takdirde uygulamanın önceki sürümü açılır.)

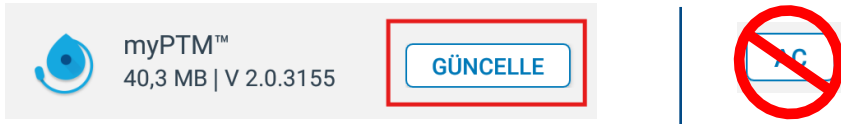


- 10 Güncellemelerin tamamlanması için 2 dakika **bekleyin**.


Samsung J3 el kontrol cihazı talimatları




- 11 Sol üst köşedeki geri okuna dokununuz.

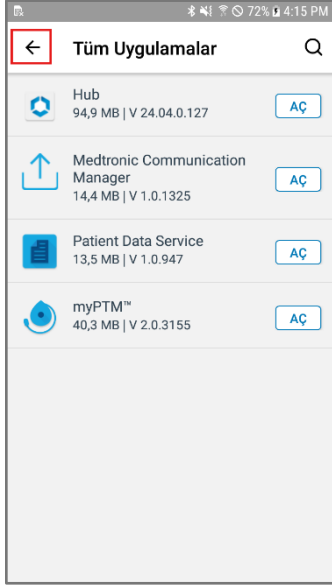



- 12 Sağ üst köşedeki hesap simgesine dokununuz. Hesap simgesindeki harfler el kontrol cihazınız için farklı olabilir.

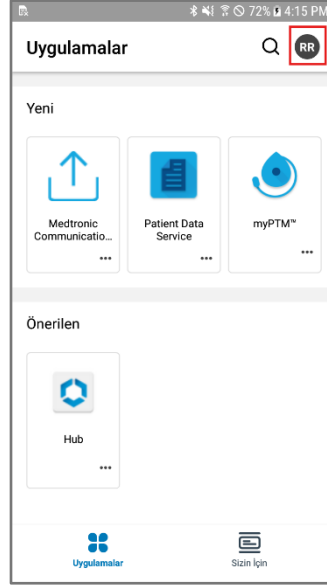

- 13 **This Device**'a (Bu Aygıt) dokununuz.

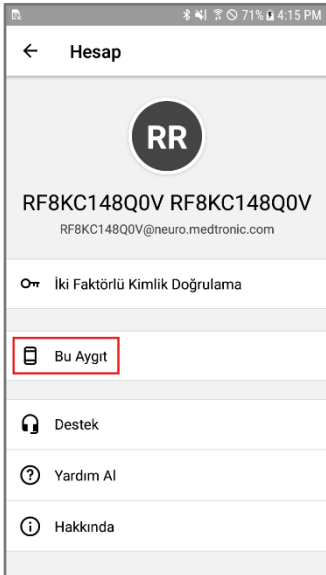


- 14 Ekranın alt kısmına kaydırın ve **Sync device** (Aygıtı eşitle) öğesine dokununuz. Ekranın alt kısmında "**Checking for updates**" (Güncellemeler denetleniyor) mesajı görünür.

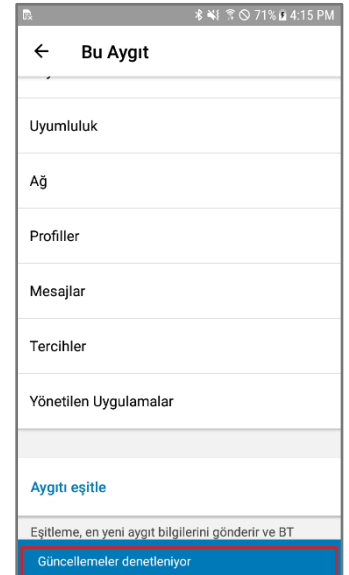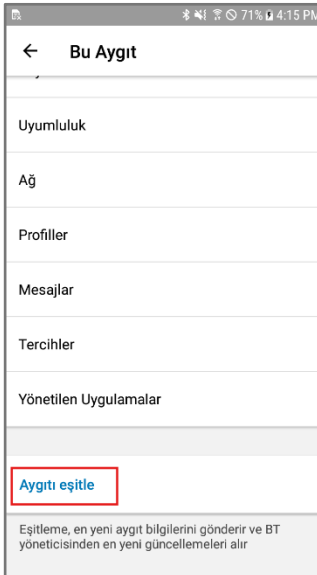

Samsung J3 el kontrol cihazı talimatları



- 15 Ekranı tekrar yukarı kaydırın ve **Last seen** (Son görülme) tarihi ve saatinin geçerli tarih ve saate güncellendiğini onaylayın. Güncelleme yapılmadıysa 14. adımı tekrarlayın.

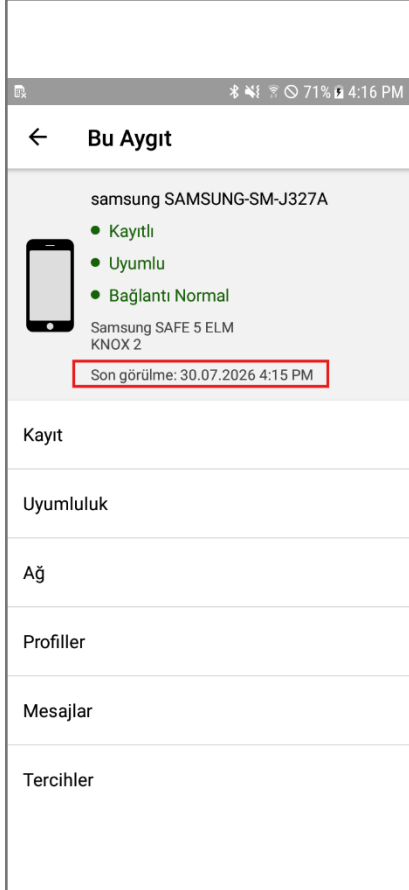


Samsung J3 el kontrol cihazı talimatları



Bölüm 3: Uygulamaların güncellendiğini onaylama


- 1 Ana sayfa düğmesine basarak girişe dönün.
- 2 **myPTM** uygulamasına dokununuz.
- 3 Pompaya bağlanmak için Giriş ekranına ulaşıncaya kadar ekrandaki talimatları izleyin.

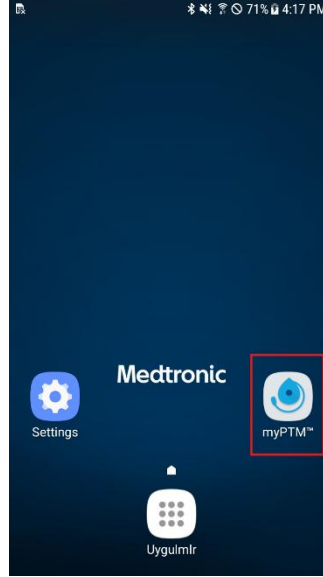

İletişim cihazınızın açık olduğundan ve doğrudan pompanın üzerine yerleştirildiğinden emin olun.

İletişim cihazınızın yaşına bağlı olarak bir iletişim cihazı güncellemesi yapılabilir.


- 4 Ekranın sol üst köşesindeki menü simgesine dokununuz.
- 5 **About** (Hakkında) öğesine dokununuz

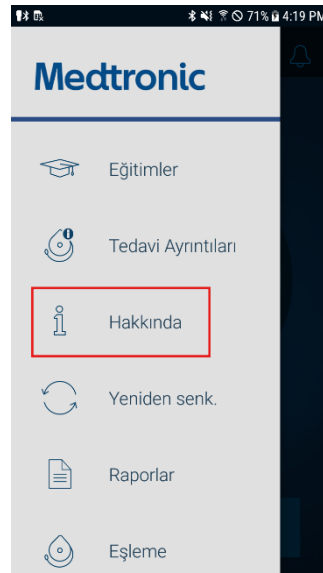

Samsung J3 el kontrol cihazı talimatları



- 6 Şu şekilde görüldüğünü doğrulayın:
- Sürüm:** 2.0.3155
 - Communication Manager:** 1.0.1325
 - Patient Data Service:** 1.0.947

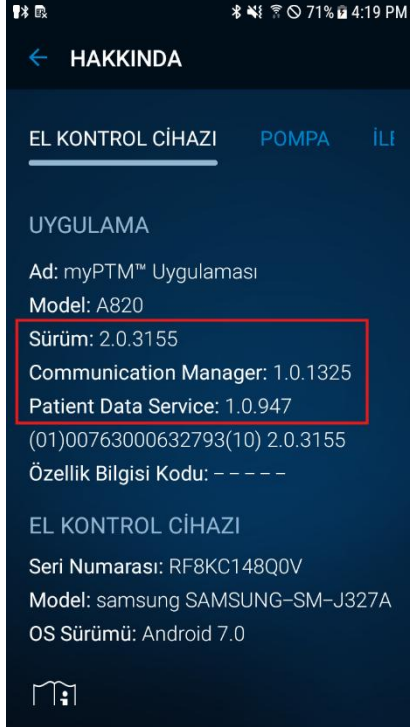

Sürüm numaraları eşleşiyorsa güncelleme başarıyla tamamlanmış demektir ve el kontrol cihazınızı her zamanki gibi kullanabilirsiniz.

Sürüm numaralarından herhangi biri eşleşmiyorsa **Bölüm 2: Uygulamaları Güncelleme** kısmında dönün ve uygulama sürümlerini gerektiği gibi yeniden güncelleyin.

Güncelleme Tamamlandı

Kısa açıklama

Kısa Açıklama:

Bu materyal bilgiler için tek kaynak olarak kabul edilmemelidir; cihaz kılavuzlarında yer alan bilgilerin yerine geçmez veya bunları geçersiz kılmaz.

Bir ürünün kullanım amacının coğrafi onaylara bağlı olarak farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın.

Kullanım amacı, (implant) prosedürü, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve potansiyel advers olaylar hakkında ayrıntılı bilgi almak için cihaz el kitaplarına bakın.

MRI uyumlu cihazlar için, MRI gerçekleştirmeden önce cihaz el kitaplarındaki MRI bilgilerine bakın.

Bir cihaz eKT kullanımı için uygunsa talimatlar Medtronic web sitesinde bulunabilir manuals.medtronic.com.

El kitapları, başlıca İnternet tarayıcılarının herhangi birinin geçerli bir sürümü kullanılarak görüntülenebilir. En iyi sonuçları almak için İnternet tarayıcısı ile birlikte Adobe Acrobat® Reader kullanın.

Piyasalara sunulan Medtronic ürünleri tıbbi cihazlara ilişkin mevzuata (geçerli ise) uygundur. Daha fazla bilgi için yerel Medtronic temsilcinizle iletişime geçin ve/veya Medtronic web sitelerine başvurun.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

United Kingdom/Ireland
Medtronic Limited Building 9
Croxley Park Hatters Lane Watford
Herts WD18 8WW
www.medtronic.co.uk
Tel: +44 (0)1923 212213 Fax: +44
(0)1923 241004