

**WHEN
PROCEDURAL
SUPPORT
REALLY
MATTERS**



Navien™
Distal Support Catheter

Medtronic
Further. Together

DISTAL SUPPORT FOR FLOW DIVERSION

TRACKABLE

病変の近傍に到達し、遠位部におけるデバイスの展開操作に必要なサポートを提供します。


LARGE ID

広いカテーテル内腔を有するサポートカテーテルです。

5Frモデル: 内径0.058 inch
6Frモデル: 内径0.072 inch

DURABLE

扁平ならせん状のナイチノールブレードを施すことで高い内腔保持力に寄与し、高度な屈曲を有する血管においても併用デバイスの円滑なデリバリーが維持されます。

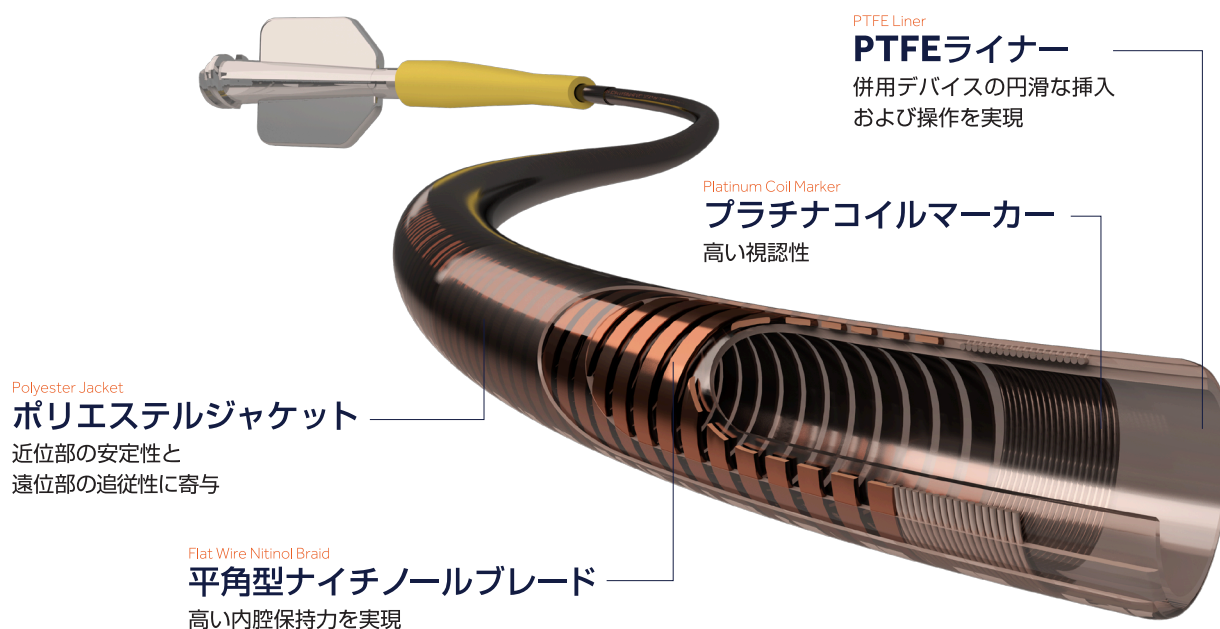

PTFE Liner

PTFEライナー

併用デバイスの円滑な挿入および操作を実現

Platinum Coil Marker

プラチナコイルマーカー

高い視認性

Polyester Jacket

ポリエステルジャケット

近位部の安定性と遠位部の追従性に寄与

Flat Wire Nitinol Braid

平角型ナイチノールブレード

高い内腔保持力を実現

カタログ番号	外径 (Fr / inch)	内腔 (inch)	有効長 (cm)	先端形状	適合ガイドワイヤ (inch)	先端柔軟長 (cm)	
RFX058-115-08	5 / 0.070	0.058	115	ストレート	0.035 / 0.038	8	
RFX058-125-08			125				
RFX072-115-08	6 / 0.084	0.072	115				チップシェイプ25°
RFX072-125-08			125				
RFX072-115-08 MP			115				
RFX072-125-08 MP			125				

販売名: Navien ディスタルサポートカテーテル
医療機器承認番号: 22700BZX00080000

Medtronic

製造販売元: 日本メドトロニック株式会社

ニューロバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel: 03-6774-4617

medtronic.co.jp