



# Medtronic

## SERVIÇO MEDTRONIC CARELINK® Folha de dados Acerca do seu Monitor Medtronic CareLink®

### O que é um Monitor Medtronic CareLink?

O Monitor Medtronic CareLink (mostrado à direita) permite enviar dados desde o seu dispositivo cardíaco através de uma linha de telefone padrão directamente para o seu médico ou clínica para revisão. A unidade é relativamente pequena, portátil e muito fácil de utilizar.

### Como é que o monitor me poderá ajudar?

Os cuidados de acompanhamento permitem ao seu médico aceder à informação mais recente emitida pelo seu dispositivo para assegurar que o mesmo continua a prestar o melhor tratamento para a condição do seu coração. O acompanhamento à distância utilizando o Serviço da Medtronic CareLink podem contribuir para facilitar a obtenção dos cuidados que necessita. Para algumas pessoas, isto significa menos visitas ao consultório médico e menos tempo perdido deslocando-se de casa para a clínica/consultório e vice-versa – tempo esse que pode ser usado para DESFRUTAR DA VIDA! O envio de informações para a sua clínica/consultório é um processo rápido, conveniente e pode ser efectuado utilizando uma linha de telefone padrão de onde quer que se encontre nos Estados Unidos, Alasca ou Havai.



Medtronic CareLink e Antena

### Como é que funciona?

O Monitor Medtronic CareLink foi concebido para enviar informações de uma forma conveniente desde o seu dispositivo cardíaco directamente para o seu médico. O monitor é fácil de usar:

1. Na altura programada pela sua clínica, ligue o Monitor Medtronic CareLink a uma linha de telefone padrão e prima o botão "Power". (O monitor funciona com uma linha de telefone padrão dentro dos Estados Unidos, incluindo Alasca e Havai).
2. Seguidamente, coloque a "antena" do monitor sobre o seu dispositivo implantado. O monitor procederá à leitura e guardará a informação emitida pelo seu dispositivo. O processo de leitura tarda normalmente menos de três minutos mas pode prolongar-se até 12 minutos.
3. Em seguida o monitor marca automaticamente um número de telefone gratuito, pré-programado e transmite os dados para um servidor seguro. Quando o monitor iniciar a marcação do número de telefone, retire a antena que se encontra sobre o seu dispositivo implantado. O processo de envio da informação normalmente tarda menos de três minutos mas pode prolongar-se até 60 minutos, dependendo da quantidade de informação que está a ser transmitida e da linha telefónica.

A sua clínica usará a Internet para visualizar e analisar os dados do seu dispositivo. O pessoal pode entrar em contacto consigo, dependendo dos seus respectivos procedimentos e da sua situação. O seu médico pode igualmente solicitar o envio da transmissão a uma hora não programada caso esteja a sentir sintomas médicos.

Contacte a clínica para obter mais informações. Certifique-se de que lê o Manual do Monitor Medtronic CareLink do doente para se informar sobre os detalhes completos de funcionamento.



Oferecendo-lhe a **DESFRUTAR**  
liberdade para **DA VIDA**



# Oferecendo-lhe a **DESEFRUTAR**

# DA VIDA

## Quando posso contar em receber o monitor?

Deverá receber o seu monitor poucas semanas depois do seu médico o encomendar para si. O monitor será enviado numa caixa castanha normal para manter a sua privacidade. Poderá ser necessário assinar um documento de entrega após a sua recepção. Se não receber o monitor dentro de 30 dias, por favor entre em contacto com a sua clínica.

## Como é que o utilizo?

Encontrará materiais e informações sobre a utilização do monitor na respectiva caixa. Por favor reveja estes materiais antes de usar o monitor.

## Quando é que o utilizo?

A sua clínica prestar-lhe-á os esclarecimentos necessários quanto ao programa de transmissão de informações do seu dispositivo com a ajuda do monitor. Não use o seu monitor excepto quando receber ordens da sua clínica para o fazer.

## O que devo fazer se tiver dúvidas?

Se tiver dúvidas sobre o monitor ou sobre a sua saúde, contacte a sua clínica.

## Posso usar o monitor quando viajo?

Sim. O monitor pesa cerca de 450 gr, pode-se colocar numa mala e deverá passar facilmente através da segurança do aeroporto. O monitor funciona com uma linha de telefone padrão em qualquer parte dos Estados Unidos, incluindo Alasca e Havai. (Certifique-se de que tem em seu poder o seu Cartão de Identificação do Dispositivo Medtronic no caso de ser interrogado pelas autoridades de segurança do aeroporto, pois o seu dispositivo médico pode fazer disparar o alarme detector de metais).


## Posso usar este monitor se receber um novo dispositivo de implante?

Informe-se junto ao seu médico sobre o uso do monitor se o seu dispositivo for substituído por um novo. Não use o monitor com o seu dispositivo de substituição excepto se receber instruções da sua clínica para o fazer.

## Excelentes informações na Web para os doentes com ICD (cardioversor-desfibrilador implantável) da Medtronic

Um ICD (cardioversor-desfibrilador implantável) pode mudar a sua vida, mas o site na Web da Medtronic sobre o CareLink para o doente pode ajudá-lo a DESEFRUTAR DA VIDA.

Visite [www.medtroniccarelink.com](http://www.medtroniccarelink.com) — um site da Web exclusivamente para pessoas com ICDs da Medtronic. Este site da Web oferece informações fáceis de compreender sobre o seu ICD, o estado do seu coração, choques e conselhos práticos para viver com um ICD. . . e muito mais.

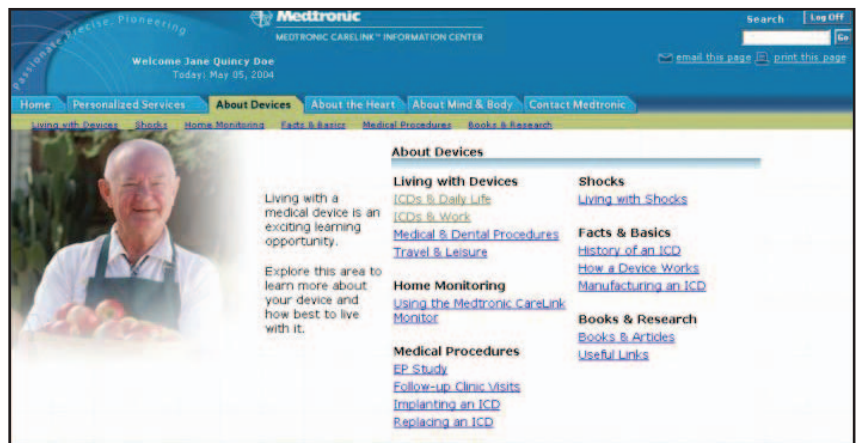

**Medtronic**

*Aliviar a dor · Restabelecer a saúde · Prolongar a vida*

### Sede mundial

Medtronic, Inc. 710 Medtronic  
Parkway Minneapolis, MN 55432-5604  
EUA  
Tel: (763) 514-4000  
Fax: (763) 514-4879  
[www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)

Serviços ao doente da Medtronic  
1 (800) 551-5544  
7 às 18:00 horas (hora padrão central dos EUA)

**Declaração:** O Monitor Medtronic CareLink® é um dispositivo obtido apenas através de receita médica indicado para uso na transferência de dados do doente desde alguns dispositivos cardíacos implantáveis da Medtronic segundo instruções do médico, e conforme descrito no manual do produto. Este produto não é um substituo para a assistência médica apropriada no caso de uma emergência e deve ser usado apenas conforme aconselhado por um médico. O Serviço Medtronic CareLink está presentemente disponível para uso em qualquer parte dos Estados Unidos, incluindo Alasca e Havai. Consulte o seu médico para obter mais informações.