

TRI-AD

ADAMS

TRICUSPID

ANNULOPLASTY

RING



TRI-AD ADAMS TRICUSPID ANNULOPLASTY RING

リモデリングとフレキシブルを両立したデザインの三尖弁用リングです。心周期に3Dモーションを維持しながら、右心室遊離壁に沿った弁輪部の拡張を抑制します。


選択したリモデリング構造



三尖弁の解剖学的構造に適応



中隔尖部分の広い開口領域により、縫合時に刺激伝導組織を損傷する可能性を低減

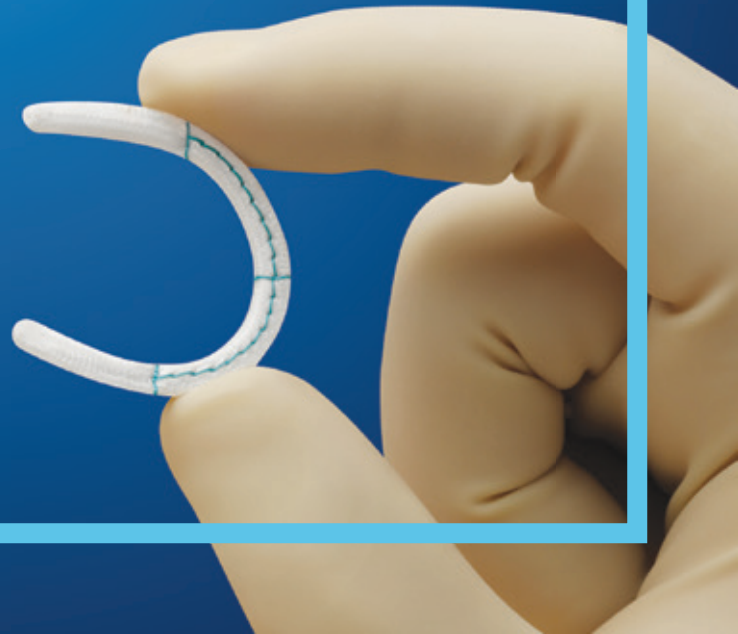

TARGETED REMODELING FOR FUNCTIONAL TRICUSPID DISEASE.

リジットリングとフレキシブルリングの両方の利点を合わせ持った
セミリジットリング


Consider it for functional tricuspid disease.

Tri-Adリングは、心周期中の3D運動を保ちながら、弁輪拡張が修復できるよう設計されたリモデリングリングです。



Consider its unique design for your patients with early/asymptomatic tricuspid regurgitation.

Tri-Adリングが持つ革新的な設計によって、収縮期及び拡張期における立体的な三尖弁の形状にリングが追従することができます。

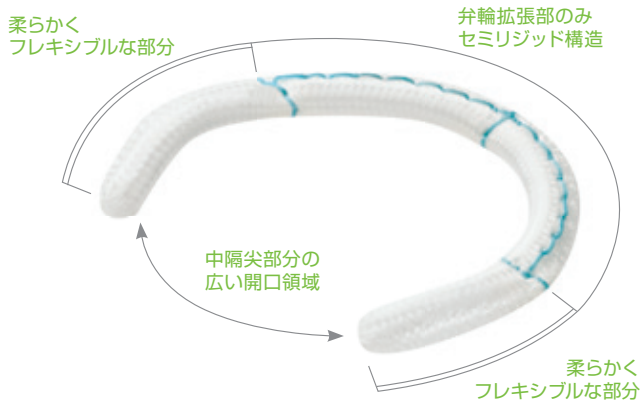

柔軟かつフレキシブルな部分
柔軟かつフレキシブルな部分は、繊細な組織を縫合する際に役立つ、立体的な弁輪の動きに追従します。


広い開口領域
中隔尖部分の広い開口領域により、縫合時に刺激伝導系組織を損傷する可能性を低減します。

弁輪拡張部のみセミリジッド構造
セミリジッド部分が、右心室遊離壁に沿った弁輪部の拡張に対応します。


Consider it for smooth implantation.

Tri-Adリングにはスムーズに針が貫通し、縫合糸のジャミングを予防する構造になっています。

※ホルダーはワンカットリリースとなっています。

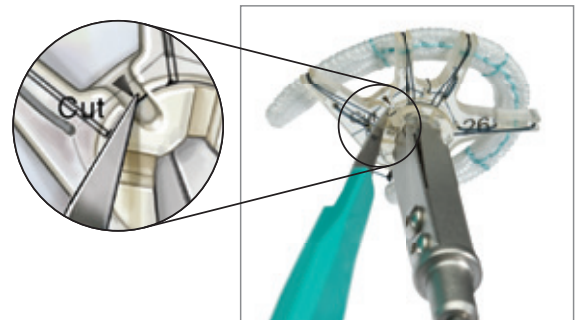


中隔尖部分の広い開口領域により、縫合数が少ない形状になっています。

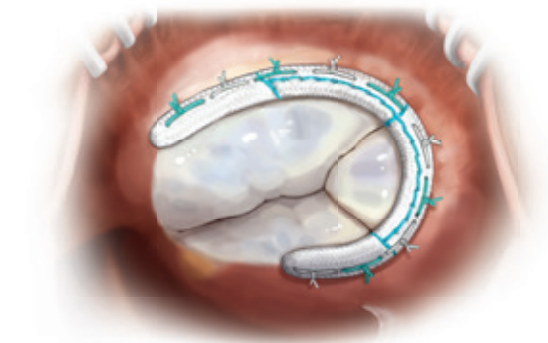

ORDERING INFORMATION

■ Tri-Adリング (医療機器承認番号: 22700BZX00293000)

*受注生産

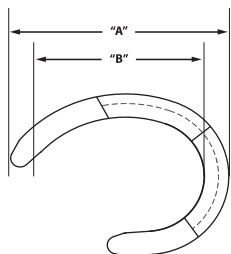

| 型番号 | サイズ (mm) | A (mm) | B (mm) |
|-----------|----------|--------|--------|
| 900SFC26 | 26 | 31 | 24 |
| 900SFC28 | 28 | 33 | 25 |
| 900SFC30 | 30 | 35 | 27 |
| 900SFC32 | 32 | 36 | 28 |
| 900SFC34* | 34 | 39 | 31 |
| 900SFC36* | 36 | 40 | 33 |

■ アクセサリー類 (届出番号: 13B1X00261CS0017)

| 型番号 | 品名 |
|-----|----|
|-----|----|

| | |
|-----|------------------------|
| 950 | Tri-Adリング用サイザー・ハンドルセット |
|-----|------------------------|

(26mm-32mmはポリスルホン製サイザ、26mm-32mmはシリコーンゴム製サイザ、セミマリアブルハンドル2本)

Medtronic

日本メドトロニック株式会社

ストラクチャルハート&エンドバスキュラー事業部

〒105-0021 東京都港区東新橋2-14-1

Tel:03-6430-2015

medtronic.co.jp

禁忌、使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。