

WHICH ONE? VERSAONE FOR EVERYONE



VersaOne™ ブレードトロカー

Medtronic

使いやすくシンプルなデザイン

VersaOne™ ブレードトロカーは全サイズ透明カニューラ

■ スムースな刺入

先端のブレードにより腹膜のテンティングを抑え、スムーズな刺入が期待できます。

■ 選べるカニューラタイプ

腹壁の状態により、安定感のあるリブ付（フィクセーションタイプ）とリブ無（スムーズタイプ）を選択できます。

■ セーフティーシールド機構

腹壁を貫通すると、ブレードはシールド内に引き込まれます。




セーフティロック

ブレードの露出状態が手元でわかる



独特なブレードデザイン

独特なブレードにより穿刺時の抵抗を低減し、正確な刺入をサポートする

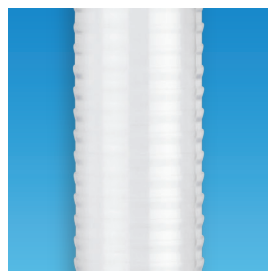

フィクセーションカニューラ

安定感があり、比較的長い手術でもカニューラのずれを抑制



特徴的なシールドシステム

処置具や内視鏡挿入の際の手振れを低減

製品コード	製品名		径	カニューラ長
B5SHF	VersaOne™ ブレードトロカー5mm	ショートフィクセーション	5mm	70mm
B5SHS	VersaOne™ ブレードトロカー5mm	ショートスムーズ	5mm	70mm
B5STF	VersaOne™ ブレードトロカー5mm	スタンダードフィクセーション	5mm	100mm
B5STS	VersaOne™ ブレードトロカー5mm	スタンダードスムーズ	5mm	100mm
B11STF	VersaOne™ ブレードトロカー11mm	スタンダードフィクセーション	11mm	100mm
B11STS	VersaOne™ ブレードトロカー11mm	スタンダードスムーズ	11mm	100mm
B12STF	VersaOne™ ブレードトロカー12mm	スタンダードフィクセーション	12mm	100mm
B12STS	VersaOne™ ブレードトロカー12mm	スタンダードスムーズ	12mm	100mm
B12LGF	VersaOne™ ブレードトロカー12mm	ロングフィクセーション	12mm	150mm

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

販売名: VersaOneシリーズ
医療機器認証番号: 223AABZX00099000
クラス: II

ct-al-tr-vobd(02)
1801.pdf.es.y