

厚い腹壁への  
**1stポート留置をサポート**



ビジポート™ プラス  
ブラントチップトラカール

Medtronic


## ビジポート™ プラス※1




### ■ より安全性を追求したポート

#### 穿刺システム


- トリガーを引いた時のみナイフが露出します。
- トロカー先端の透明ウインドウによりどの組織を穿刺しているのかをモニター上で確認できます。

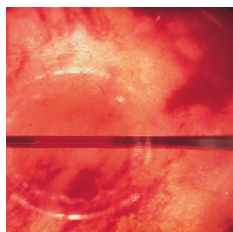


皮下組織

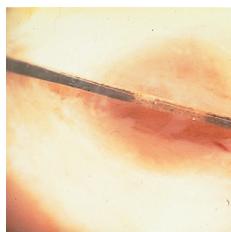

筋膜

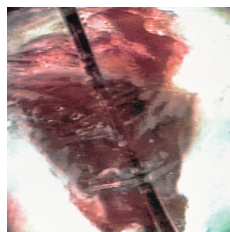

筋肉

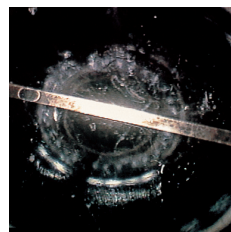

腹腔内 (社内データ)

製品コード	製品名	カラー
176674P	ビジポート™ プラス 5mm-12mm	■

## ブラントチップトラカール※2



- 縫合を必要としない密着固定：バルーンは腹壁内部を、カラー圧縮スポンジは外部を密着しトロカーを固定する為、高い気密性を持ちます。
- バルーンとカラー圧縮スポンジの二重構造が縫合術を必要としないハッサントロカー手技を可能としました。

製品コード	製品名
OMST10BT	ブラントチップトラカール 10mm
OMST12BT	ブラントチップトラカール 12mm

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

※1 販売名:ビジポート  
医療機器承認番号:20800BZY00342000  
クラス:II

※2 販売名:腹腔鏡下手術用器具  
医療機器承認番号:20600BZY00298000  
クラス:II

# Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

[medtronic.co.jp](http://medtronic.co.jp)

©2020 Medtronic.

ct-ai-tr-visi(02)  
2009.pdf.esy