

STAY THERE

SOFTNESS
STABILITY
NAVIGATABILITY
PUSHABILITY



Echelon
Microcatheter

Medtronic
Further, Together

PREDICTABLE EXCEPTIONAL PERFORMANCE

Echelon Microcatheterは、独自のナイチノール技術により、デリバリー時の操作性およびコイル塞栓時の安定性を提供します。

柔軟性

Softness Zone

- 柔軟性の高いペバックス加工
 - 細い先端プロファイル
- 瘤内アプローチ時の血管損傷リスクを低減します。

Softness & Stability ZONE

柔軟性・安定性 ゾーン

安定性

Stability Zone

- 段差の少ない14段階傾斜
 - 屈曲部でも内腔保持するブレードメッシュ構造
- 先端チップを瘤内に留め、円滑なコイル塞栓術をアシストします。

操作性

Navigability Zone

- 段差の少ない3段階傾斜
- 滑らかなテーパ構造

繊細なアプローチが必要な蛇行血管でも高い操作性を提供します。


Navigability & Pushability ZONE

操作性・力伝達性 ゾーン

力伝達性

Pushability Zone

- 弾力性に富んだペバックス加工
 - 遠位デリバリーに適したブレードメッシュ構造
- 複雑な血管走行において、高いプッシュビリティを提供します。

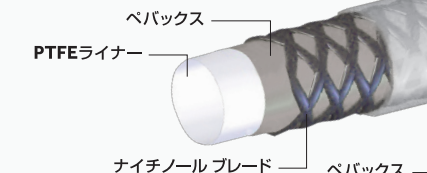

Medtronic

製造販売元：コヴィディエン ジャパン株式会社
販売促進（お問い合わせ先）：日本メドトロニック株式会社

ニューロバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南一丁目2番70号
Tel: 03-6774-4617

medtronic.co.jp

カタログ番号	製品名	全長／有効長 (cm)	外径 近位／遠位 (Fr.)	カテーテル内径 (inch)	先端部形状	プリシェイプ長
105-5091-150	エシュロン 10	155／147	2.1／1.7	0.017	ストレート	NA
145-5091-150					45°	3 mm
190-5091-150					90°	5 mm
105-5092-150	エシュロン 14		2.4／1.9		ストレート	NA
145-5092-150					45°	3 mm
190-5092-150					90°	5 mm

販売名：エシュロン マイクロカテーテル
医療機器承認番号：21600BZY00262000

ct-mc-eche
(c2)1601.800.es