

**GET
THERE**




Marathon
Flow Directed Microcatheter

Medtronic
Further, Together

MORE* FLEXIBLE.

Marathon Flow Directed Microcatheterは末梢血管に対する到達性能と液体塞栓物質注入時の耐圧強度を兼ね揃えたカテーテルです。

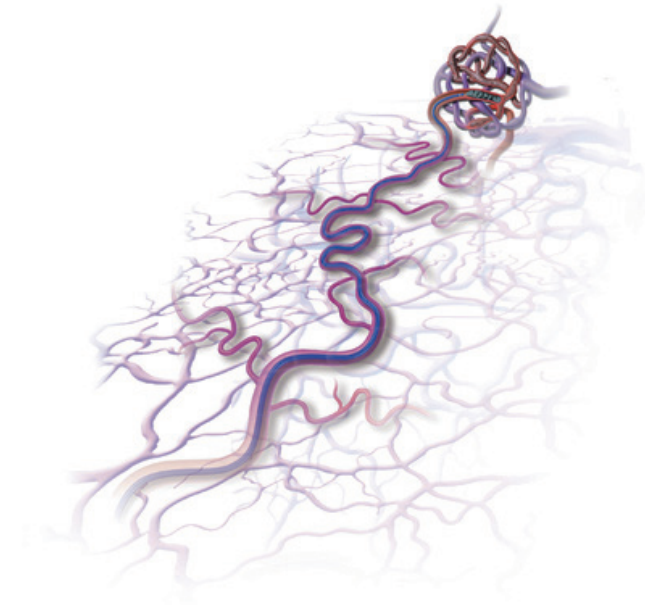

Flow Directability

先端柔軟性

末梢到達性

- しなやかな先端柔軟部
- カテーテルの段差を低減したテーパー構造
- 挿入時の摩擦抵抗を軽減する親水性コーティング

Safety

高耐圧特性

伸張強度

- キンクを生じにくくするナイチノールブレードコイルを内蔵
- DMSO対応ハブ

カタログ番号	製品名	全長/有効長 (cm)	外径 近位/遠位端 (Fr.)	内径 近位 (inch)	遠位端 (標準値) (inch)	遠位端 (最小値) (inch)	先端柔軟長 (cm)	デッドスペース (mL)
105-5056	マラソンN (スタイレットなし)	170/165	2.7/1.5	0.015	0.013	0.012	25	0.23

販 売 名: マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル
医療機器承認番号: 21800BZY10005000

*弊社前モデル品との比較

Medtronic

製造販売元: 日本メドトロニック株式会社

ニューロバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel: 03-6774-4617

medtronic.co.jp

ct-mc-marn
v3.1906.0000.sp