
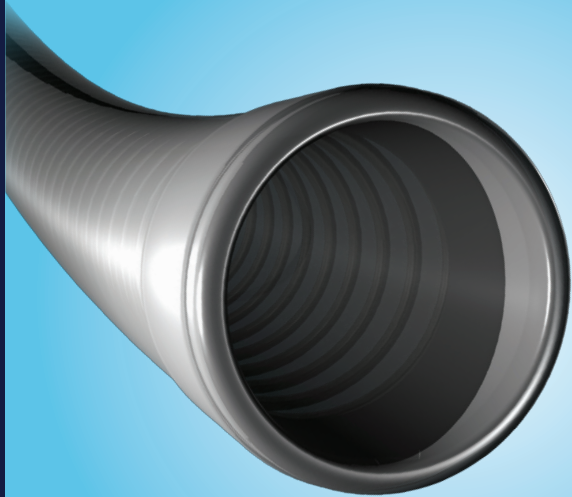


AIM
HIGHER

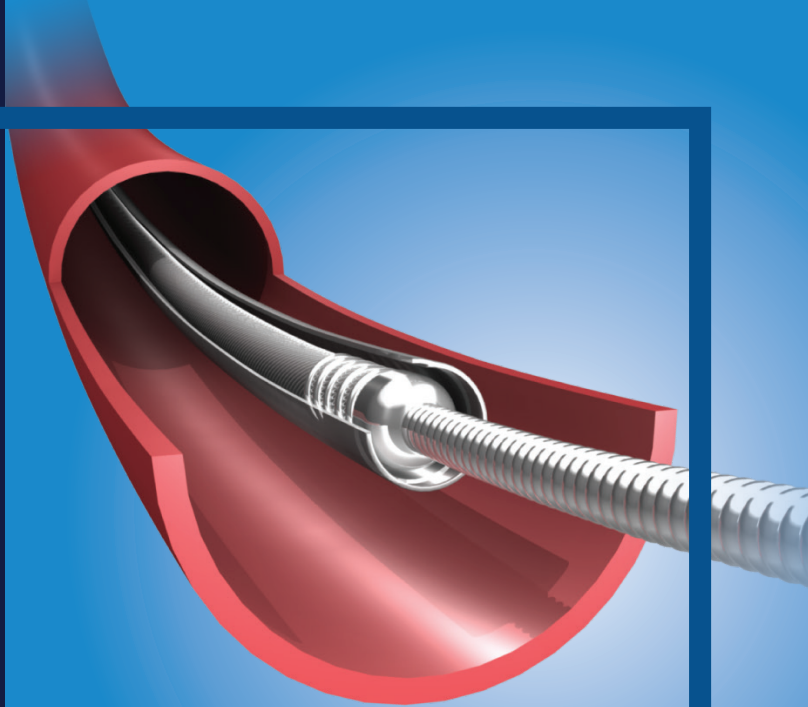

Marksman™
Microcatheters

Medtronic
Further. Together

HIT YOUR TARGET. MAKE THE DELIVERY.

Marksman™ は、
独自の製造技術を用いて
より高いデリバリー性能を追求した
マイクロカテーテルです。



柔軟性 & 安定性


Flexibility & Stability



- 3段階のテーパ構造
- 4段階の異なる材質硬度

内腔保持

Lumen Integrity

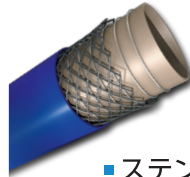

- ステンレススチール
2重構造
- 5段階のコイルピッチ

操作性


Operability



- PTFE ライナー加工
- 先端部ラウンド加工
- 親水性コーティング
- Ergonomic ハブデザイン

カタログ番号	有効長 (cm)	先端柔軟長 (cm)	シングルブレード長 (cm)	コーティング長 (cm)	カテーテル内径 (inch)	手元部外径 (mm/Fr)	先端部外径 (mm/Fr)
FA-55150-1030	150	10	30	100	0.027	1.10 / 3.2	0.95 / 2.8

販売名: マークスマン マイクロカテーテル
医療機器承認番号: 22400BZX00341000

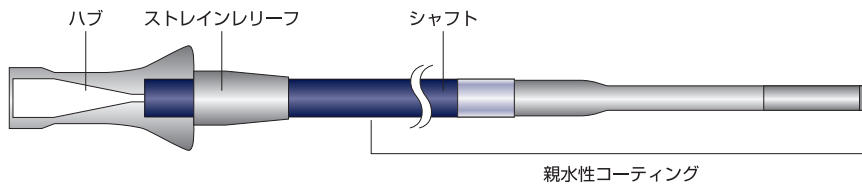

Medtronic

製造販売元: 日本メドトロニック株式会社

ニューロバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel: 03-6774-4617

medtronic.co.jp

©2018 Medtronic Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

ct-mc-mark
v1.1806.2000es