

Medtronic

Calima™
WarmTouch™
Mon-a-Therm™

体温管理製品



Calima^{TM*}

温風式加温システム

頑丈でコンパクトな設計

Blower Calima^{TM* 1)}

現場のニーズにすばやく対応

- 「送風モード」から「ブーストモード」まで4段階の温度設定により患者さんの状態に合わせた加温が可能
- 専用カートや IV ポールへの取り付けにより様々な現場へ簡便に移動

安全性

- 4つの温度センサによる温度制御で過剰加温を防止
低温やけど防止機能／自動過剰温度防止機能
- ホースが脱落しづらいクリップ式コネクタを採用

簡便

- PVCを使用した柔らかなホースでブランケットと接続しやすい設計
- シンプルなユーザーインターフェース




カタログ番号	51007526N (Calima本体+Calimaスタンド)	
温度設定 (4段階)	送風	AMB
	低温	38°C
	高温	43°C
	ブースト	45°C
風量設定 (3段階)	低	9m/s
	中	13m/s
	高	16m/s
低温やけど防止機能	ブースト設定時、使用開始45分で自動的に高温設定に切り替え	
自動過剰温度防止機能	ホース出口部で54°Cを越えると加温停止	
フィルタ	HEPAフィルタ (交換時期:使用開始から1,000時間毎)	
サイズ	Calima 本体: 280 (W) × 290 (D) × 285 (H) mm Calima スタンド: 520 (W) × 520 (D) × 720 (H) mm	
重量	Calima 本体: 約6kg Calima スタンド: 約5.8kg (脚、ポール、バスケット、クランプ総計)	
電源コード	4m	


Calima™* 温風式加温装置に接続可能な
2つのブランケットシリーズ

スタンダード ブランケット WarmTouch™ シリーズ


ウォームタッチ
成人用

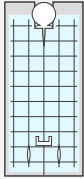

503-0810
ケアキルト (フルボディ) ²⁾
サイズ：102×201cm
販売単位：5枚

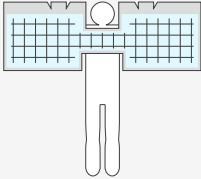


503-0870
ケアドレープ (アッパー) ²⁾
サイズ：208×71cm
販売単位：6枚




503-0880
ケアドレープ (ロー) ²⁾
サイズ：104×142cm
販売単位：6枚

ウォームタッチ
小児・新生児用

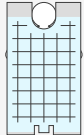

503-0840
ケアキルト 小児用 ²⁾
サイズ：76×145cm
販売単位：6枚




503-0850
ケアドレープ 新生児・小児用 ²⁾
サイズ：63×104cm
販売単位：12枚

種類豊富な Calima™* シリーズ


カリマ
スペシャル




51009830
アンダーボディ (N) 成人用 ¹⁾
サイズ：110×245cm
販売単位：10枚

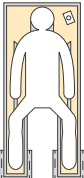

51009902
アンダーボディ (N) 砕石位用 ¹⁾
サイズ：103×175cm
販売単位：10枚

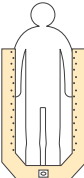


51007643
Cath Lab ¹⁾
サイズ：87×180cm
販売単位：10枚

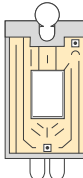


51007649
サージカルアクセス ¹⁾
サイズ：110×213cm
販売単位：10枚


カリマ
成人用

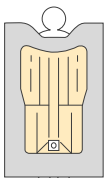


51007644
フルボディ ¹⁾
サイズ：110×213cm
販売単位：10枚




51007645
ローボディ ¹⁾
サイズ：108×150cm
販売単位：10枚

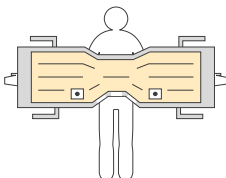

51007651
アッパーボディ ¹⁾
サイズ：203×68cm
販売単位：10枚




51007646
マルチアクセス ¹⁾
サイズ：110×213cm
販売単位：10枚

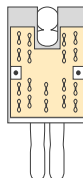


51007650
デュアルポートトルソー ¹⁾
サイズ：110×110cm
販売単位：10枚


カリマ
小児・新生児用

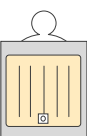


51007647
フルボディ 小児用 ¹⁾
サイズ：108×150cm
販売単位：10枚



51007654
アンダーボディ 新生児用 ¹⁾
サイズ：107×110cm
販売単位：10枚




51007655
アンダーボディ 小児用 ¹⁾
サイズ：82×162cm
販売単位：10枚

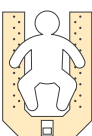

51007648
小児用チューブタイプ ¹⁾
サイズ：87×125cm
販売単位：10枚


Calima™ ブランケット

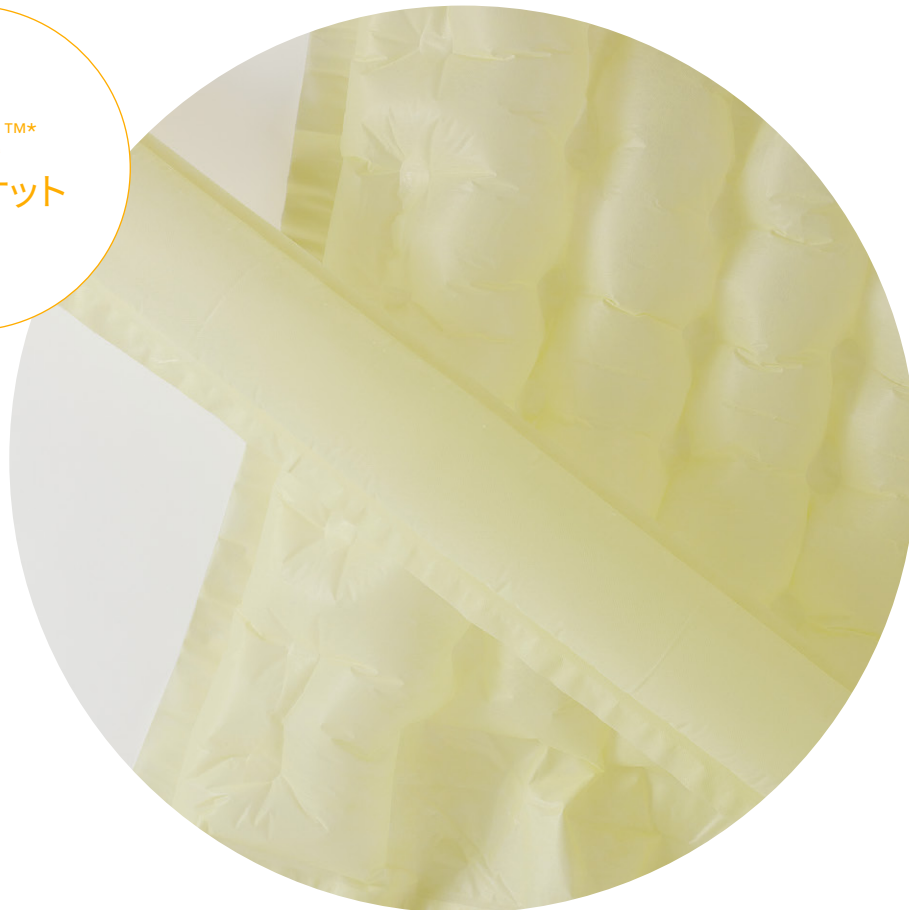

- スペシャルブランケットを特徴とし、術式に合わせて13種類から選べるブランケット
- ブランケットの微細穿孔により、気流と熱の分布を均一にしやすい設計
- 術前・術中・術後まで同一の製品が使用可能

アンダーボディ (N) 成人用


仰臥位、側臥位、腹臥位：胸腹部、脊椎部手術など

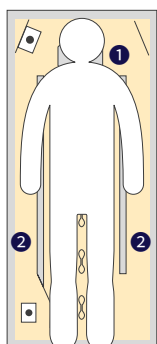

- ① 顔面部開口
円形に切り抜くことで、腹臥位で使用可能です
- ② サイドスリット
- ③ ヘッドドレープ

アンダーボディ (N) 砕石位用


砕石位：泌尿器科、産婦人科手術など

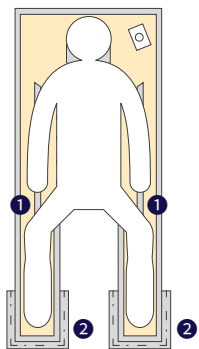

- ① サイドスリット
- ② 脚固定バンド
- ヘッドドレープ

Cath Lab (チューブタイプ)

側臥位：頭頸部手術、TEVR/EVAR、ロボット手術など


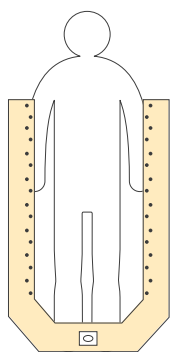


- ① ヘッドドレープ



サージカルアクセス

一般下腹部外科手術、上腹部～胸部外科手術など

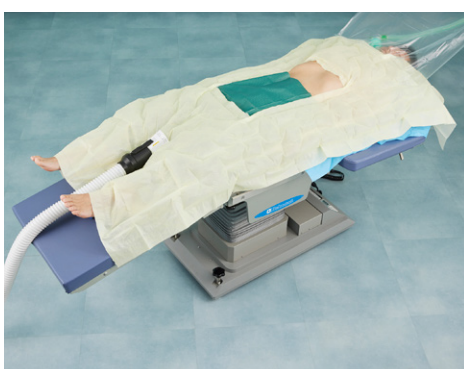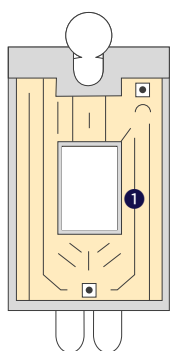

- ① ブランケット固定テープ
ブランケットを固定して温風の流出を防ぎます


WarmTouch™ ブランケット



- 上層と下層がボタン状に接合されたキルティングパターンにより空気がブランケット全体にいきわたり均等にあげられた穴により効率的に加温します。
- ブランケット表面はポリエチレンラミネート加工されており撥水性能を有します。
- ブランケット裏面の穴は丁寧に加工されており塵埃の発生を抑えます。
- ブランケット表面は熱くなりすぎず患者さんの肌に触れる面はソフトな肌触りです。


撥水性をもつ
ポリエチレンラミネート

均等で丁寧に
あげられた穴

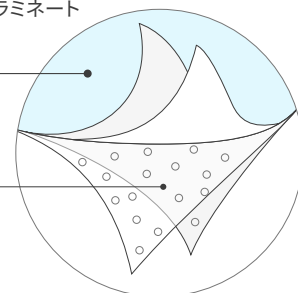

ケアキルト™ (フルボディ)

術前・術後用

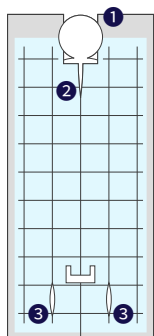

- ① スcoop ネックカット&ショルダーフラップ
肩をすっぽりと包み込みます
- ② チェスト アクセス スリット
ドレーンチューブへのアクセスを容易にします
- ③ フット アクセス スリット
下腿・足先の動脈および血圧のチェックに便利です


ケアキルト™ 小児用

術前・術後用



ケアドレープ™ (アッパー)


術中用

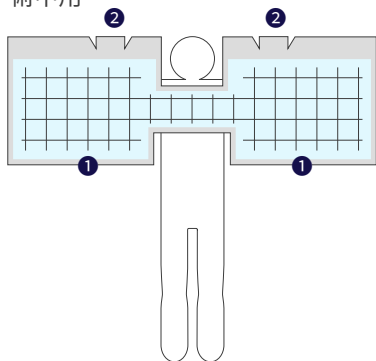

- ① ブランケット固定用テープ
- ② ブロワーの位置に応じて差込口の選択ができます
- ③ クリアカバー
頭・首部分の熱放散を防ぎます

ケアドレープ™ (ローワー)


術中用

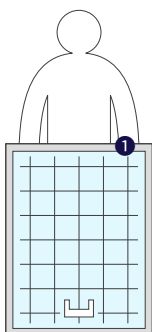

- ① ブランケット固定テープ

ケアドレープ™ 小児用

術中用 (新生児・小児用)

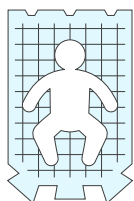

	ブランケットを 下に敷く場合	ブランケットを 上からかける場合
新生児		
小児		

Mon-a-Therm™
モナサーム™
温度センサー

核体温・表面温の継続的測定に

目的にあったセンサーをお選びいただけます

- 各種患者監視モニタへの接続が可能です
- 滅菌済みシングルユース製品なので感染のリスクが軽減されます



ジェネラルセンサー TM400 ³⁾

90050 (9Fr) / 90044 (12Fr)



- 食道温・直腸温・鼻咽頭温測定に使用いただけます。
- 位置決めが容易な目盛り付きです。
- サテンスリップ™加工済の滑らかな表面で挿入が容易です。

販売単位:50本

ESTセンサー TM400 (食道聴診兼用) ⁴⁾

90049 (9Fr) / 90041 (12Fr)
90042 (18Fr) / 90043 (24Fr)



- 核体温の測定と同時に、鮮明な心音・呼吸音の聴診が行えます。
- サテンスリップ™加工済の滑らかな表面で挿入が容易です。

販売単位:25本

皮膚センサー TM400 ⁵⁾


90045



- 幅広くお使いいただける、非侵襲性のセンサーです。
- 発泡パッドが環境温の影響を少なくし、表面温度の変化にすばやく反応します。

販売単位:50本

サーミスタYSI400用センサー

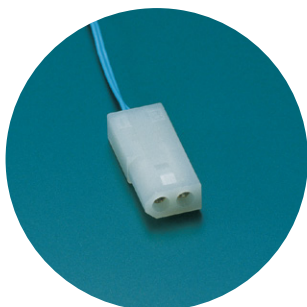

ケーブルを使用して各種患者監視モニタの体温モジュールに接続できます。
患者監視モニタの体温モジュールへの接続の詳細につきましては弊社までお問い合わせください。

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 1) 販売名 | カリマ温風式加温システム |
| 医療機器認証番号 | 301AIBZX00015000 |
| 製造販売元 | 株式会社 Inspired Medical Japan |
| 2) 販売名 | ウォームタッチ ブランケット |
| 医療機器認証番号 | 307ACBZX00007000 |
| 製造販売元 | コヴィディエンジャパン株式会社 |
| 3) 販売名 | モナサームセンサ TM400 |
| 医療機器認証番号 | 307ACBZX00006000 |
| 製造販売元 | コヴィディエンジャパン株式会社 |
| 4) 販売名 | モナサーム 4070 TM 温度計 |
| 医療機器承認番号 | 20500BZY00284000 |
| 製造販売元 | コヴィディエンジャパン株式会社 |
| 5) 販売名 | 皮膚センサーTM400 |
| 医療機器届出番号 | 13B1X00069BL003A |
| 製造販売元 | コヴィディエンジャパン株式会社 |

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

©2023, 2025 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。TM*を付記した商標は、各社の商標です。

Medtronic

お問い合わせ先
コヴィディエンジャパン株式会社
Tel : 0120-998-971

medtronic.co.jp

ct-tp-allx(m4)2508
RMS_2025_1719-A