


**Medtronic**

# Systeme d'exclusion de l'AAG Penditure<sup>MC</sup>



## Clip Penditure de Medtronic pour l'appendice auriculaire gauche (AAG)

- Conception sans tissu pour réduire le risque d'inflammation<sup>1</sup>
- Véritable fermeture de la pointe en premier conçue pour empêcher le tissu de dépasser la pointe distale du clip<sup>2</sup>
- Recapturable, redéployable et repositionnable après le déploiement pour assurer un placement précis<sup>2</sup>
- La large ouverture à la base offre une bonne visibilité, ce qui peut aider à placer correctement le clip

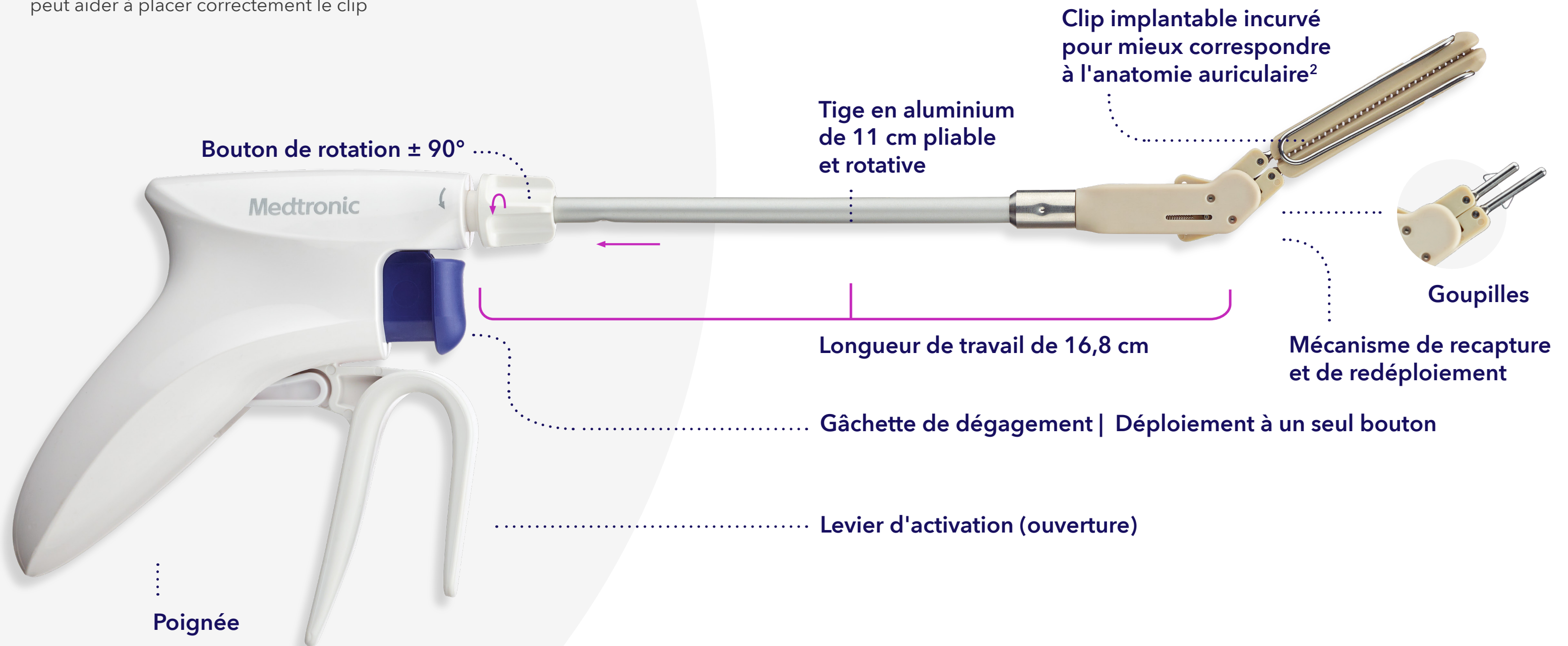


# Information pour commander | Système d'exclusion de l'AAG Penditure

Code CFN	Longueur (A)	Hauteur (B)	Largeur (C)	Ouverture (D) <sup>†</sup>
LAAC35 35 mm	39,6 mm	7,1 mm	11 mm	19,0 mm
LAAC40 40 mm	44,6 mm	7,3 mm	11 mm	19,9 mm
LAAC45 45 mm	50,0 mm	7,9 mm	11 mm	23,2 mm
LAAC50 50 mm	55,0 mm	8,6 mm	11 mm	20,0 mm
LAACSIZER	Emballé séparément (3/pqt)			

† L'ouverture de la pointe de l'implant dépend du bras de levier et de la force du ressort. L'endroit où la force du ressort est appliquée est plus éloigné du système de pose avec des clips plus longs. Par conséquent, l'ouverture des pointes varie et peut ne pas être uniformément proportionnelle à la taille de l'agrafe.



Les clips Penditure sont texturés  
Matériau PEEK légèrement courbé  
(rayon). Les ressorts en nitinol assurent  
une force de fermeture constante.

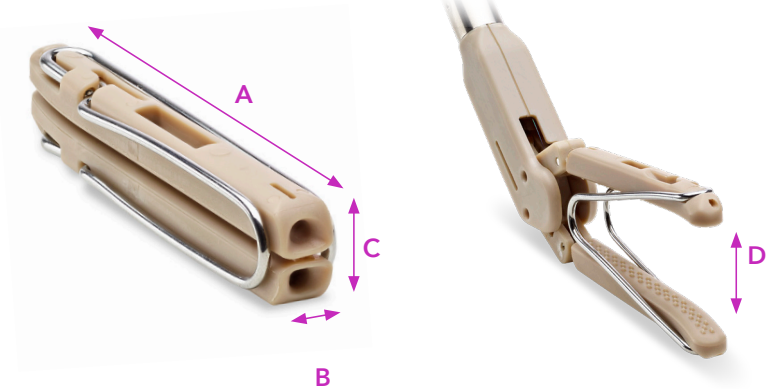

## Medtronic

99 Hereford Street  
Brampton, Ontario, L6Y 0R3  
Sans frais : 800 268-5346  
Tél. : 905 460-3800

[medtronic.ca](http://medtronic.ca)

1. Les essais sur les animaux effectués par Medtronic ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance clinique.
2. Données de Medtronic en dossier.

Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

©2025 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. <sup>MC</sup>\*Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic. UC202306155bFC CA-CTL-0519-F Rév. 04/2025

