

Medtronic

Engineering the extraordinary

Tubes de trachéotomie flexibles Shiley^{MC} pour adultes[†]

Améliorer le confort des patients – simplifier les soins



[†]Homologué sous les noms de Shiley Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless Reusable Inner Cannula, Shiley Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard Cuff Reusable Inner Cannula, Shiley Adult Flexible EVAC Tracheostomy Tube with TaperGuard Cuff, Shiley Adult Flexible Tracheostomy Tube XLT.

Utilisés avec confiance depuis plus de 50 ans

Plus de 760 millions de tubes de trachéotomie Shiley^{MC} sont utilisés partout dans le monde.

Tube de trachéotomie Shiley^{MC} pour adultes



Un meilleur ajustement, un confort accru, une utilisation plus simple


Plus fidèle à l'anatomie

Le tube de trachéotomie flexible Shiley^{MC} pour adultes est plus facile à mettre en place et plus confortable pour votre patient¹.

Technologie de ballonnet TaperGuard^{MC}

Les améliorations inspirées par les cliniciens comprennent le ballonnet TaperGuard^{MC} de forme conique. La toute dernière innovation en matière de ballonnet à faible volume et à faible pression, vous aidant à sécuriser les voies respiratoires de votre patient.

Tube de trachéotomie
flexible Shiley^{MC} pour
adultes

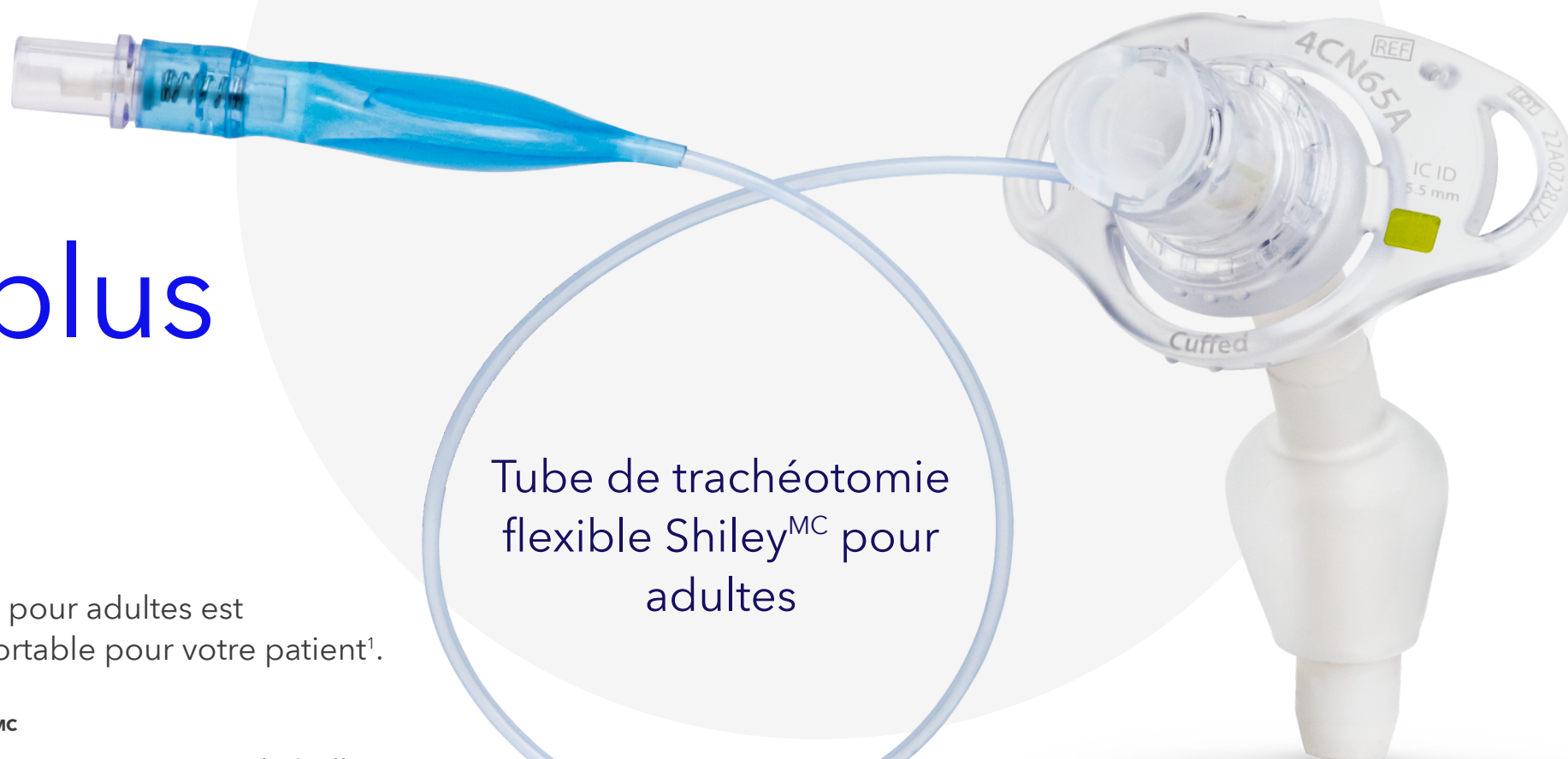

2015 et au-delà

Tubes flexibles Shiley^{MC} – conception de pointe



Mise en place initiale

Nouvelle conception de l'embout biseauté


- Réduit de 39 % la force nécessaire à l'insertion¹ grâce à un ballonnet plus mince et moins volumineux
- Facilite l'insertion percutanée



Protection de la trachée et des poumons

Ballonnet TaperGuard^{MC}


- Réduit les fuites de liquide de 99 %²
- Exerce 18,6 %³ moins de pression sur la paroi latérale de la trachée

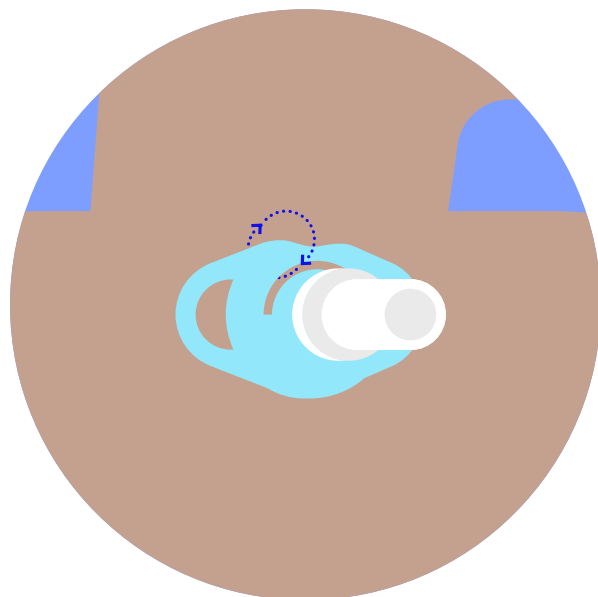

Soins de la peau

Collerette transparente, souple et flexible

- Épouse l'anatomie du patient
- Favorise la circulation de l'air autour de la stomie
- Réduit le contact avec la peau grâce à une collerette en retrait

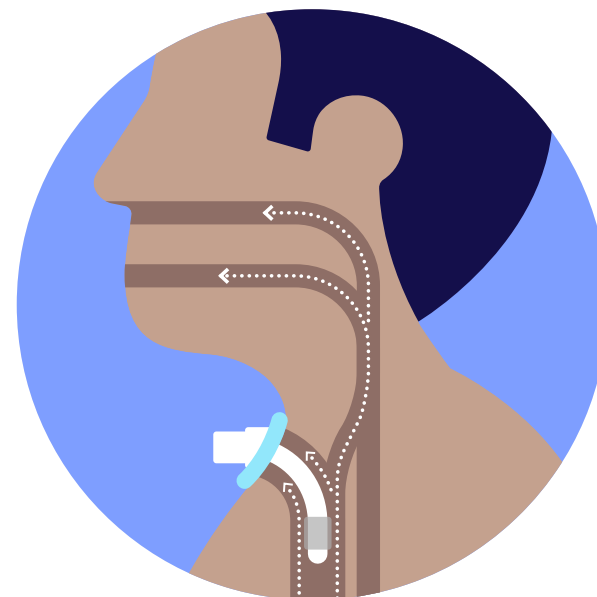

Ventilation mécanique et sevrage

Sevrage plus rapide

- Augmente la circulation de l'air autour de la canule externe de 242 %¹ en moyenne lorsque le ballonnet est dégonflé
- Réduit les fuites d'air du ventilateur avec une efficacité accrue de 65 % grâce à la technologie de ballonnet TaperGuard^{MC 4}

Aperçu des spécifications

Les nouveaux tubes flexibles Shiley^{MC} par rapport aux anciens

Tubes de trachéotomie flexibles Shiley^{MC} pour adultes avec canule interne jetable

Taille		UGS			Spécifications				
Jackson	ISO	À ballonnet	Sans ballonnet	Canule interne [†]	Diamètre intérieur de la canule externe (D.I. mm)	Diamètre intérieur de la canule interne (D.I. mm)	Diamètre extérieur de la canule (D.E. mm)	Longueur (mm)	Diamètre de gonflement optimal (mm)
4	6,5	4CN65A	4UN65A	4IC65 [†]	6,5	5,5	9,4	62	20,6
5	7,0	5CN70A	5UN70A	5IC70 [†]	7,0	6,0	10,1	68	23,0
6	7,5	6CN75A	6UN75A	6IC75 [†]	7,5	6,5	10,8	74	25,4
7	8,0	7CN80A	7UN80A	7IC80 [†]	8,0	7,0	11,4	77	25,4
8	8,5	8CN85A	8UN85A	8IC85 [†]	8,5	7,5	12,2	79	26,6
9	9,0	9CN90A	9UN90A	9IC90 [†]	9,0	8,0	12,7	79	27,6
10	10,0	10CN10A	10UN10A	10IC10 [†]	10,0	9,0	13,8	79	28,6

Tubes de trachéotomie flexibles Shiley^{MC} pour adultes avec canule interne réutilisable

4	6,5	4CN65R [‡]	4UN65R [§]	6,5	5,5	9,4	62	20,6
5	7,0	5CN70R [‡]	5UN70R [§]	7,0	6,0	10,1	68	23,0
6	7,5	6CN75R [‡]	6UN75R [§]	7,5	6,5	10,8	74	25,4
7	8,0	7CN80R [‡]	7UN80R [§]	8,0	7,0	11,4	77	25,4
8	8,5	8CN85R [‡]	8UN85R [§]	8,5	7,5	12,2	79	26,6
9	9,0	9CN90R [‡]	9UN90R [§]	9,0	8,0	12,7	79	27,6
10	10,0	10CN10R [‡]	10UN10R [§]	10,0	9,0	13,8	79	28,6

[†]Homologué sous le nom de Shiley Inner Cannula Disposable.
[‡]Homologué sous le nom de Shiley Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard Cuff Reusable Inner Cannula.
[§]Homologué sous le nom de Shiley Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless Reusable Inner Cannula.

Codes de référence des produits mis à jour
Les tubes de trachéotomie flexibles Shiley^{MC} pour adultes, avec canule interne jetable, se terminaient auparavant par la lettre H (par exemple, 4CN65H). Ils se terminent désormais par la lettre A (par exemple, 4CN65A). Cette mise à jour s'aligne sur les codes de référence des produits mondiaux, contribuant à simplifier la fabrication et à favoriser la bonne gestion des stocks. Le code de référence de produit reste inchangé pour la version des produits réutilisables, qui se termine par la lettre R (par exemple, 4CN65R).

Anciens tubes de trachéotomie flexibles Shiley^{MC} pour adultes avec canule interne jetable


Taille		UGS		Spécifications			
Jackson	ISO	À ballonnet†	Sans ballonnet‡	Diamètre intérieur de la canule interne (D.I. mm)	Diamètre extérieur de la canule externe (D.E. mm)	Longueur (mm)	Diamètre de gonflement optimal (mm)
4	6,5	4DCT†	4DCFS‡	5,0	9,4	62	20,0
5	7,0						
6	7,5	6DCT†	6DCFS‡	6,4	10,8	74	24,0
7	8,0						
8	8,5	8DCT†	8DCFS‡	7,6	12,2	79	27,0
9	9,0						
10	10,0	10DCT†	10DCFS‡	8,9	13,8	79	29,0

Anciens tubes de trachéotomie flexibles Shiley^{MC} pour adultes avec canule interne réutilisable

4	6,5	4LPC§	4CFS◊	5,0	9,4	65	20
5	7,0						
6	7,5	6LPC§	6CFS◊	6,4	10,8	76	24
7	8,0						
8	8,5	8LPC§	8CFS◊	7,6	12,2	81	27
9	9,0						
10	10,0	10LPC§	10CFS◊	8,9	13,8	81	29

†Homologué sous le nom de Shiley Disposable Cannula Tracheostomy Tube.
‡Homologué sous le nom de Shiley Tracheostomy Tube Cuffless with Disposable Inner Cannula.
§Homologué sous le nom de Shiley Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula.
◊Homologué sous le nom de Shiley Laryngectomy Tube.

Logique de référence des produits et choix de la taille pour les tubes de trachéotomie flexibles Shiley^{MC}

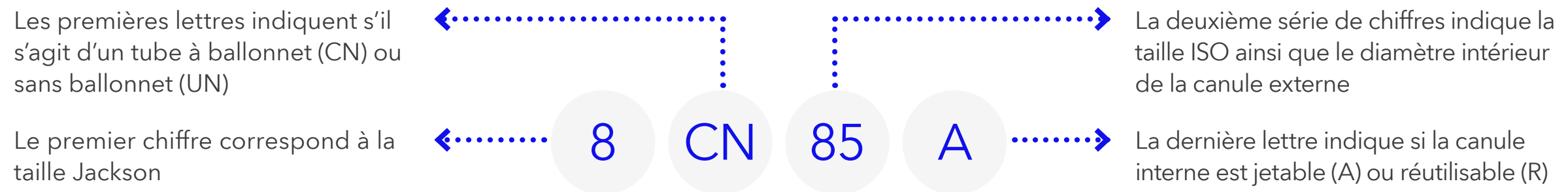

Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

Références

1. Basé sur des tests internes qui comparent le tube de trachéotomie flexible Shiley^{MC} à ballonnet TaperGuard^{MC} pour adultes au tube de trachéotomie à ballonnet Shiley^{MC} DCT.
2. Résultats de tests internes en laboratoire. Les résultats reflètent les tests de comparaison entre le tube de trachéotomie flexible Shiley^{MC} à ballonnet TaperGuard^{MC} pour adultes avec canule interne jetable et le tube de trachéotomie Shiley^{MC} DCT avec canule interne jetable d'une même pression de ballonnet de 25 cm H₂O.
3. Résultats des essais internes. Les résultats reflètent les mesures effectuées sur un tube de trachéotomie flexible Shiley^{MC} pour adultes de taille 7,5, comparativement au tube de trachéotomie Shiley^{MC} 6DCT d'une même pression de ballonnet de 20 cm H₂O.
4. Résultats de tests internes en laboratoire. Les résultats reflètent la capacité du tube de trachéotomie flexible Shiley^{MC} à ballonnet TaperGuard^{MC} pour adultes avec canule interne jetable d'ajuster/contrôler les fuites d'air du ventilateur comparativement au tube de trachéotomie Shiley^{MC} à ballonnet avec canule interne jetable (DCT).