

# UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE. **FUSION TISSULAIRE SEMI-RÉUTILISABLE**



Première génération  
d'instruments Ligasure™  
semi-réutilisable avec  
coupe intégrée

## Instrument Ligasure™ Curved Jaw

### BOUTON D'ACTIVATION AUTOMATIQUE

- Le premier clic indique la fin de la zone de préhension le second clic indique l'activation de l'énergie
- L'activation de l'énergie se fait d'une seule main et dans toutes les positions

### LAME DE COUPE INTEGRÉE

- Activation à la demande de l'opérateur
- Couteau à usage unique

### INSTRUMENT SEMI-RÉUTILISABLE EN DEUX PARTIES


- Clamp réutilisable et électrode à usage unique
- La lame du dispositif de coupe est également à usage unique

### CLAMP DE TYPE HÉMOSTATIQUE RÉUTILISABLE

- Prise en main identique à celle d'un clamp hémostatique standard
- Réutilisable et autoclavable

### ÉLECTRODE À USAGE UNIQUE

- Fonction Fusion et coupe totalement indépendantes dispositif de sécurité: la lame ne s'active que mors fermés mécanisme de blocage de l'électrode sur le clamp

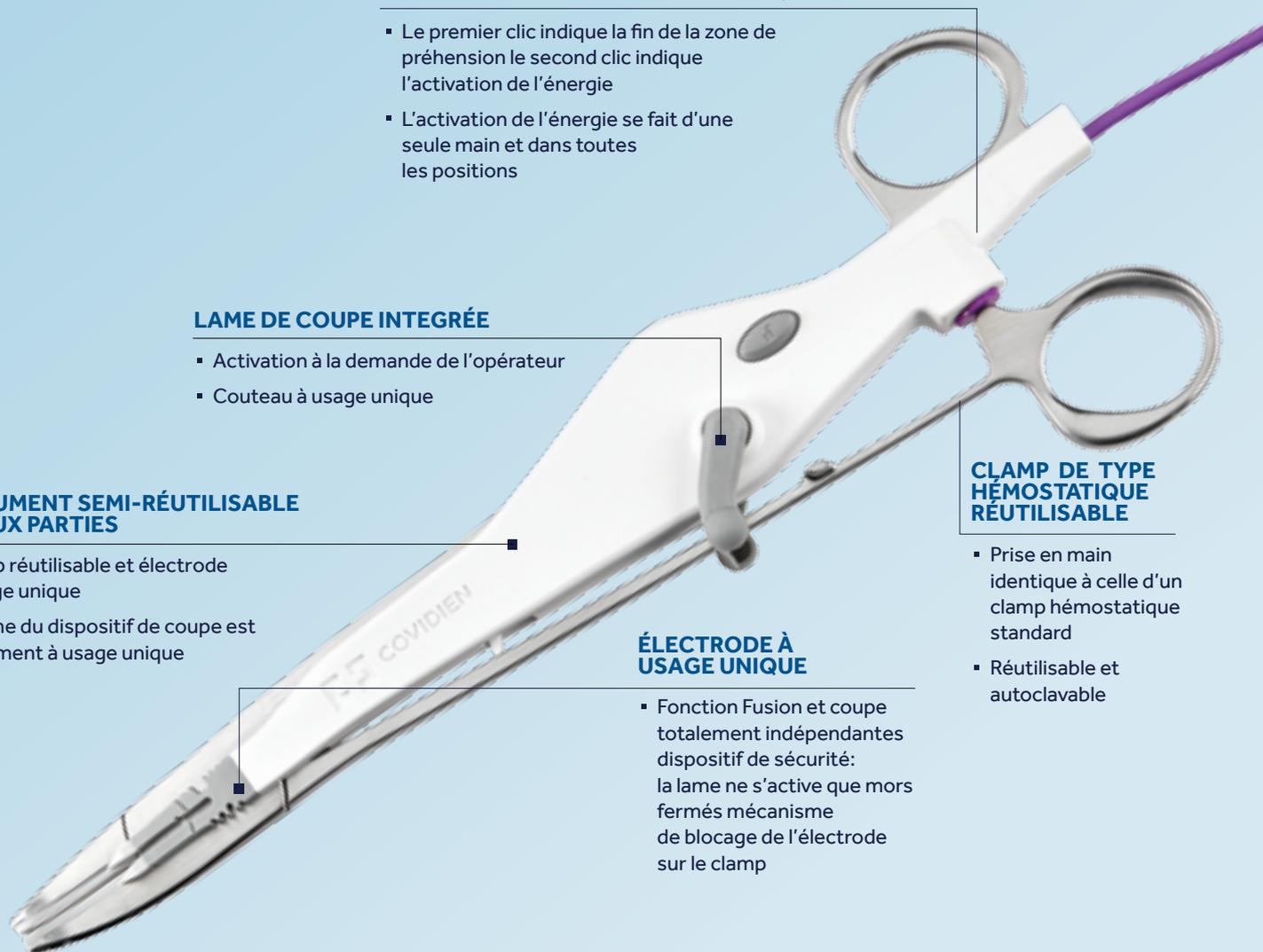


# FUSION TISSULAIRE SEMI-RÉUTILISABLE

## Chirurgie ouverte

L'instrument LigaSure™ Curved Jaw est un dispositif de fusion tissulaire avec coupe intégrée destiné à la chirurgie ouverte.

Il est composé de 2 éléments: un clamp réutilisable et une électrode à usage unique.

L'évolution par rapport aux générations précédentes d'instruments semi-réutilisables LigaSure™ (Max & Xtd) est qu'un dispositif de coupe est intégré et que l'activation de l'énergie se fait automatiquement à la fermeture du clamp.

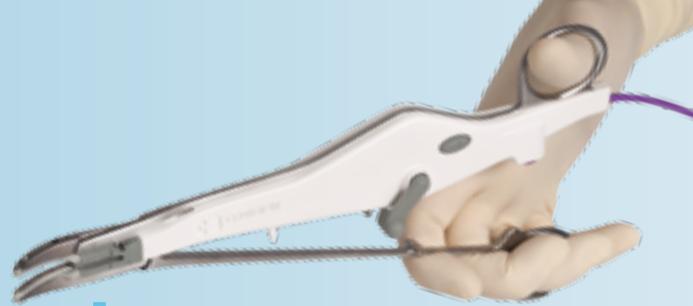

## RÉFÉRENCE & DÉSIGNATION

Références	Description	Quantité/ boîte
LF3225	Électrode LigaSure™ Curved Jaw pour chirurgie ouverte / avec coupe intégrée	3 unités
LF3225	Clamp réutilisable pour électrode LigaSure™ Curved Jaw	1 unité

Compatible avec Y [ UbUfUHyí f'XY Zí g]c;b hggj UlfY J U'YmUW<sup>HA</sup> LS10Zla plate-forme d'énergie ForceTriad™ et Valleylab™ FT10.



À destination des professionnels de santé

L'instrument LigaSure™ Curved Jaw LF3225 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Covidien LLC, CE 0086. Le clamp réutilisable LigaSure™ Curved Jaw LF3225 est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Covidien LLC, CE 0086.

L'instrument LigaSure™ Curved Jaw LF3225 et le clamp réutilisable LigaSure™ Curved Jaw LF3225C sont des instruments électrochirurgicaux bipolaires conçus pour les interventions de chirurgie ouverte qui requièrent la ligature et la division de vaisseaux, de faisceaux de tissus et de tissus lymphatiques. L'instrument de fusion/division LigaSure™ peut être utilisé sur les vaisseaux (artères et veines) allant jusqu'à 7 mm. Il est indiqué en chirurgie générale.

Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.

## Medtronic

Medtronic France S.A.S.  
27 Quai Alphonse Le Gallo - CS30001  
92513 Boulogne-Billancourt Cedex  
Tél.: +33 (0)1 55 38 17 00  
Fax: +33 (0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

UC201810826FF

© Medtronic 2018. Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.

Imprimé en France par RR Donnelley. [www.rrdonnelley.com](http://www.rrdonnelley.com). Création Février 2018.