


UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE. COMBINAISON DE 5 INSTRUMENTS

Instrument LigaSure™ Hook avec crochet
monopolaire en L rétractable

Avec la performance reproductible de la
technologie LigaSure™ et l'énergie monopolaire
du courant Valleylab™.

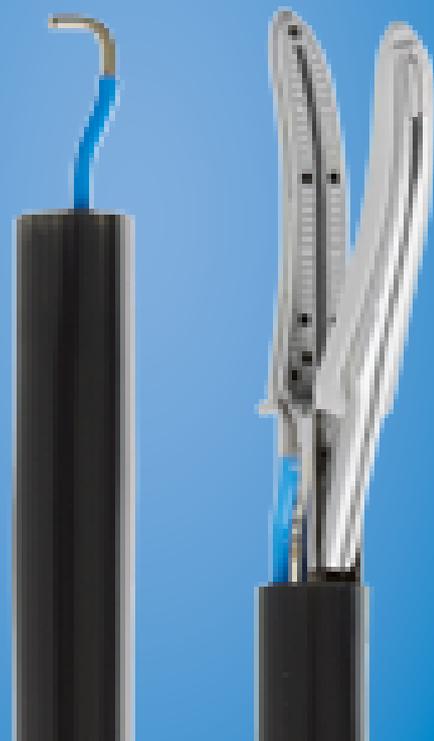


FUSION TISSULAIRE SECTION À FROID PRÉHENSION ET DISSECTION **AVEC UN SEUL INSTRUMENT**

Notre instrument multifonctions offre la maîtrise et la régularité de la technologie de fusion tissulaire LigaSure™ avec l'énergie monopolaire Valleylab™.

Entre vos mains, il vous permet de saisir, de disséquer, de couper et de fusionner.

L'instrument LigaSure™ Hook à crochet en L présente les caractéristiques suivantes :

- Mode Valleylab™ : combinaison de dissection et d'hémostase monopolaire
- Technologie de fusion tissulaire en une étape LigaSure™
- Préhension atraumatique
- Section à froid des tissus
- Dissection atraumatique de type Maryland

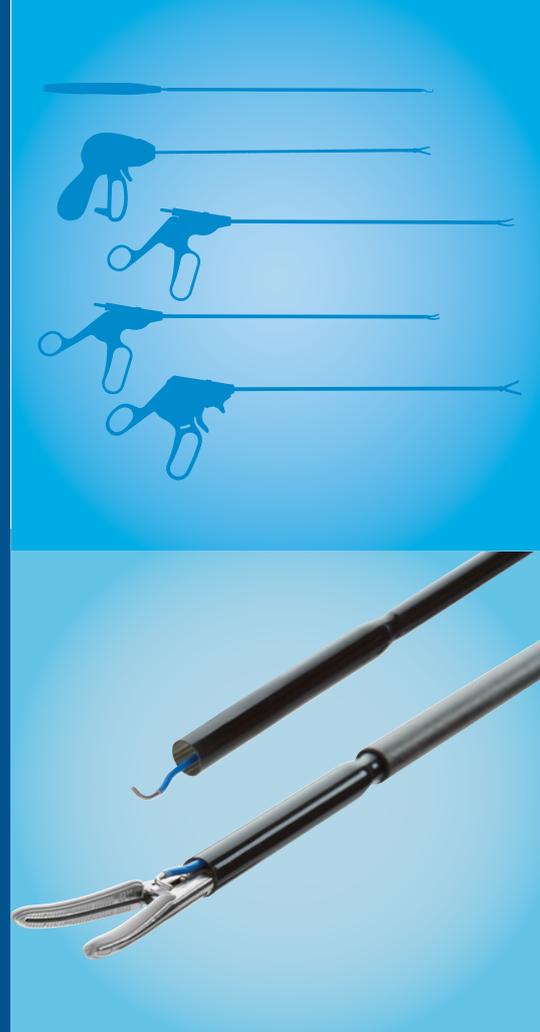

RÉFÉRENCE & DÉSIGNATION

Référence	Description du produit	Quantité par boîte
LF5637	Instrument laparoscopique LigaSure™ à crochet en L rétractable, 37 cm	6 unités
LF5644	Instrument laparoscopique LigaSure™ à crochet en L rétractable, 44 cm	6 unités

Compatible avec la plate-forme d'énergie ForceTriad™ (version 3.8 minimum) et avec la plateforme d'énergie Valleylab™ FT10.

À destination des professionnels de santé

L'instrument LigaSure™ Hook à crochet monopolaire en L rétractable est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Covidien LLC, CE n° 0086.

L'instrument LigaSure™ Hook à crochet monopolaire en L rétractable est un instrument électrochirurgical bipolaire/monopolaire conçu pour les interventions de chirurgie mini-invasive qui requièrent la fusion et la division de vaisseaux sanguins, de faisceaux de tissus et de vaisseaux lymphatiques.

Le crochet en L monopolaire peut être utilisé pour diviser des plans tissulaires et pour créer entérotomies ou des gastrotomies.

L'instrument de fusion/division LigaSure™ peut être utilisé sur les vaisseaux (artères et veines) allant jusqu'à 7 mm. Il est indiqué en chirurgie générale et dans les spécialités chirurgicales telles que la chirurgie urologique, vasculaire, thoracique, thoracoscopique, colorectale, bariatrique ou gynécologique.

Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.

Medtronic

Medtronic France S.A.S.
27 Quai Alphonse Le Gallo - CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 38 17 00
Fax : +33 (0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

www.medtronic.fr

UC201810858FF

© Medtronic 2018. Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.

Imprimé en France par RR Donnelley. www.rrdonnelley.com. Création Février 2018.